

Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666/09.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и укладки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада \_\_\_\_\_




М. П.



**ARTINOX**

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ

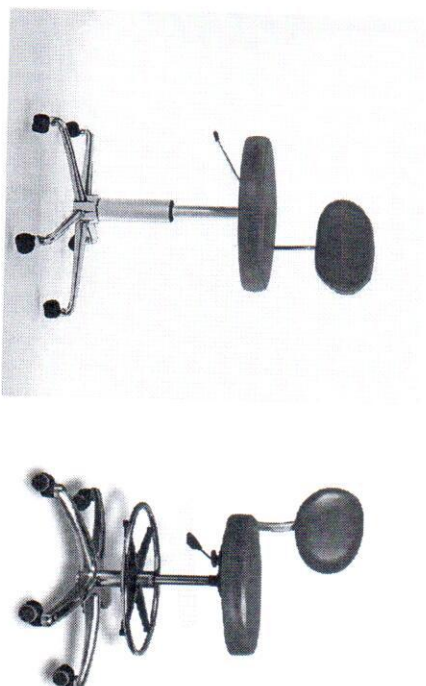

Стул медицинский серии АР  
ГОСТ 19917-2014



Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

Стул медицинский  
AR-Z64, AR-Z64B, AR-Z64BF, AR-Z64F, AR-Z64L, AR-Z64M, AR-Z64MF

## 1. Предназначение

Стулья предназначены для использования в медицинских лабораториях и медицинских учреждениях.

## 2. Общая характеристика

Стул конструкционно выполнен из следующих элементов:

- спинка полумягкая, регулируемая по высоте;
- сиденье полумягкое либо жесткое с (без) механизмом управления пневмоэлементом;
- пневмоэлемент/винтовая регулировка;
- пятилучевое основание с колесами.

## 3. Описание

Основы: металлическая либо пластиковая 700 мм, на поворотных колесах Ø50 мм.

Спинка: обтянута медицинским кожаным элементом, устойчивым к деформации и УФ излучению. Спинка закрепляется к сиденью при помощи пружинно-винтового механизма, регулирующего угол отклонения спинки в зависимости от силы приложения (или веса).

Сиденье: обтянуто медицинским кожаным элементом, устойчивым к деформации и УФ излучению. Снизу установлена ручка управления пневмоэлементом. Крепежные изделия, используемые для соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Стул обернут бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотключаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затгивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая сталь, алюминий, пластик) рекомендуется использовать специальные средства для восстановления поверхности (например, полировка).

Для очистки изделия можно использовать порошковые краски, не требующие ухода и практичные в эксплуатации. Исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для очистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеткой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ).
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул  | Габариты                                                                                     | Примечание                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-Z64   | - высота сиденья - 450-570 мм<br>- диаметр сиденья - 410 мм<br>- высота стула - 750-880 мм   | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – металл, колеса Ø50 мм. |
| AR-Z64B  | - высота сиденья - 450-570 мм<br>- диаметр сиденья - 410 мм<br>- высота стула - 750-880 мм   | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – пластик, колеса Ø50 мм |
| AR-Z64BF | - высота сиденья - 450-570 мм<br>- диаметр сиденья - 410 мм<br>- высота стула - 750-880 мм   | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – металл, колеса Ø50 мм  |
| AR-Z64F  | - высота сиденья - 450-570 мм<br>- диаметр сиденья - 410 мм<br>- высота стула - 1360-1490 мм | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – металл, колеса Ø50 мм  |
| AR-Z64L  | - высота сиденья - 430-560 мм<br>- диаметр сиденья - 410 мм<br>- высота стула - 1360-1490 мм | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – металл, колеса Ø50 мм  |
| AR-Z64M  | - высота сиденья - 450-570 мм<br>- диаметр сиденья - 410 мм<br>- высота стула - 750-880 мм   | Сиденье и спинка жесткие из нержавеющей стали, основа – металл, колеса Ø50 мм                                        |
| AR-Z64MF | - высота сиденья - 450-570 мм<br>- диаметр сиденья - 410 мм<br>- высота стула - 750-880 мм   | Сиденье и спинка жесткие из нержавеющей стали, основа – металл, колеса Ø50 мм, опора для ног                         |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_

Бригада  
ЧУП «Артинокс»  
**ОТК №1**


М. П.



**ARTINOX**

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ

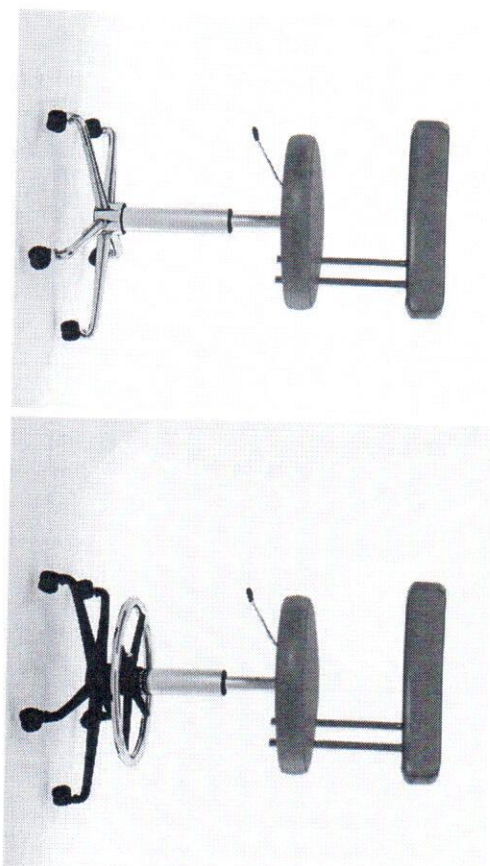

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



Стул врача серии АР  
ГОСТ 19917-2014

## 1. Предназначение

Стулья для использования в медицинских лабораториях и медицинских учреждениях.

## 2. Общая характеристика

Стул конструкционно выполнен из следующих элементов:

- спинка полумягкая с упором, регулируемая по высоте;
- сиденье полумягкое с механизмом управления пневмоэлементом;
- пневмоэлемент;
- пятилучевое основание с колесами

## 3. Описание

Основы: металлическая либо пластиковая на поворотных колесах Ø50 мм.  
Спинка: обтнута медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Спинка закрепляется к сиденью при помощи механизма из двух металлических трубок, регулирующих высоту подвеса спинки с фиксацией винтовым зажимом.  
Сиденье: обтнута медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Снизу сиденья закреплен механизм установки пневмоэлемента. В механизме установлена ручка управления пневмоэлементом. Крепежные изделия, используемые соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Стул обернут бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации. Для чистки изделия можно использовать любые чистящие средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеткой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ).
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001:2015

| Артикул  | Габариты                                                                                 | Примечание                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-Z69   | - высота сиденья - 450-570мм<br>- диаметр сиденья - 410мм<br>- высота стула - 850-970мм  | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – металл, колеса Ø50 мм.                |
| AR-Z69B  | - высота сиденья - 450-570мм<br>- диаметр сиденья - 410мм<br>- высота стула - 850-970мм  | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – пластик, колеса Ø50 мм                |
| AR-Z69BF | - высота сиденья - 450-570мм<br>- диаметр сиденья - 410мм<br>- высота стула - 850-970мм  | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, опора для ног, основа – пластик, колеса Ø50 мм |
| AR-Z69F  | - высота сиденья - 450-570мм<br>- диаметр сиденья - 410мм<br>- высота стула - 850-970мм  | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, опора для ног, основа – металл, колеса Ø50 мм  |
| AR-Z69L  | - высота сиденья - 530-700мм<br>- диаметр сиденья - 410мм<br>- высота стула - 930-1100мм | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, опора для ног, основа – металл, колеса Ø50 мм  |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада \_\_\_\_\_

ОТК №7  
ЧУП «Артинох»



Изготовитель: АРТИНОХ ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



ARTINOX

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ



Стул врача AR-Z33  
ГОСТ 19917-2014

1. Предназначение

Стулья для использования в медицинских лабораториях и медицинских учреждениях.

2. Общая характеристика

Стул конструкционно выполнен из следующих элементов:

- спинка регулируемая
- сиденье регулируемое с механизмом управления (гидравлический домкрат);
- гидравлический домкрат;
- пятилучевое основание с опорой для ног и колесами.

3. Описание

Спинка: обтянута медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Спинка закрепляется к сиденью при помощи сиденья при помощи пружинно-винтового механизма, регулирующего угол отклонения спинки в зависимости от силы прилегания (или веса).

Сиденье: обтянуто медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Снизу сиденья закреплён механизм установки пневмоэлемента. В механизме установлена ручка управления пневмоэлементом. Крепежные изделия, используемые соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Стул обернут бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затгивать ослабленные винтовые соединения. При появлении царапин на рабочей поверхности (шероховатости), зашпатель царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев) По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габариты                                                                                                  | Примечание                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-Z33  | - диаметр сиденья – 410 мм ;<br>- высота стула – 750 – 880 мм,<br>- колеса Ø50 мм ;<br>- основа – металл. | Сиденье и спинка с порумяжками наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. - регулировка высоты сиденья ножным способом в диапазоне 450–570 мм (гидравлический подъемник). Ход штока 150 мм. Усилие 200кг |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 1906667/09.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада \_\_\_\_\_

**ОТК №1**

ЧУП «АРТИНОКС»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**АРТИНОХ**

Медицинская металлическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ**

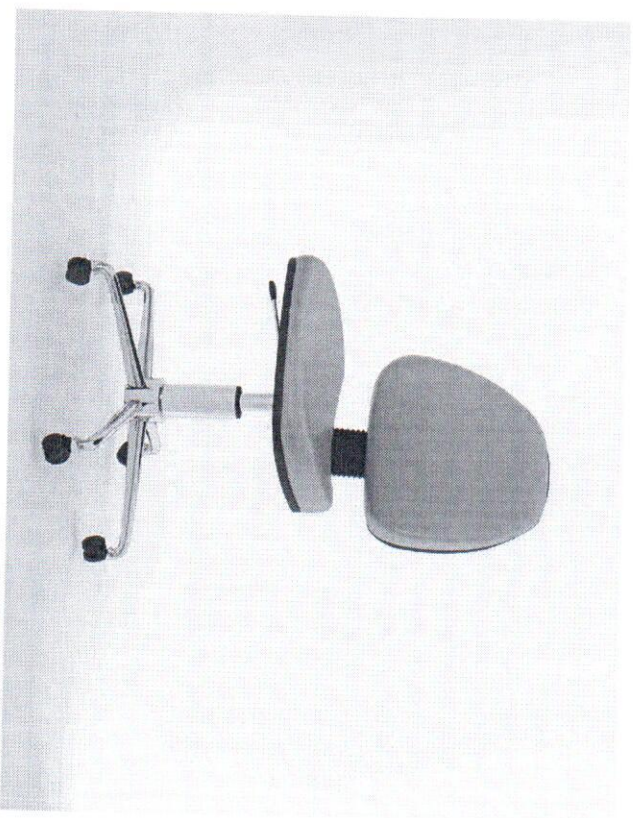

**Стул врача АР-Z51**  
**ГОСТ 19917-2014**

Стул врача АР-Z51  
ГОСТ 19917-2014

1. Предназначение

Стулья предназначены для использования в медицинских лабораториях и медицинских учреждениях.

2. Общая характеристика

Стул конструкционно выполнен из следующих элементов:

- спинка полумягкая;
- сиденье полумягкое с механизмом управления пневмоэлементом;
- пневмоэлемент;
- литидущее основание с колесами.

3. Описание

Спинка, обтянута медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Спинка закрепляется к сиденью при помощи «перманент-контактом», механизмом со свободным ходом отклонения спинки кресла, с регулируемой жесткости, но без какой-либо фиксации. Сиденье: обтянуто медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Снизу сиденья закреплен механизм установки пневмоэлемента. В механизме установлена ручка управления пневмоэлементом. Крепежные изделия, используемые соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Стул обернут бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) закручивать ослабленные винтовые соединения. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габариты                                                                                | Примечание                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-Z51  | - высота сиденья - 400-530мм<br>- ширина сиденья - 480мм<br>- высота стула - 950-1070мм | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа - металл, колеса Ø50 мм |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 1906667/09.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада  
**ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»



Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232


М. П.



# АРТИНОХ

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ

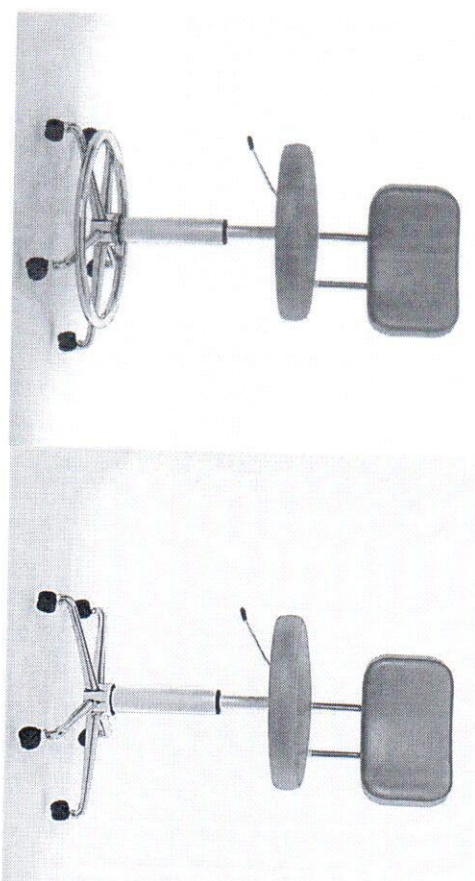

Стул врача серии АТ  
ГОСТ 19917-2014

## Стул врача АТ-А7, АТ-А8 ГОСТ 19917-2014

### 1. Предназначение

Стулья предназначены для использования в медицинских учреждениях.

### 2. Общая характеристика

- Стул конструктивно выполнен из следующих элементов:
- спинка полумягкая, регулируемая по высоте;
- сиденье полумягкое с механизмом управления пневмоэлементом;
- пневмоэлемент;
- пятилучевое основание с колесами

### 3. Описание

Основы: металлическая на поворотных колесах Ø50 мм.  
Спинка: обшита медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Спинка закрепляется к сиденью при помощи механизма из двух металлических трубок, регулирующих высоту поддона спинки с фиксацией винтовым зажимом. Сиденье обшито медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Снизу сиденья закреплен механизм установки пневмоэлемента. В механизме установлена ручка управления пневмоэлементом. Крепежные изделия, используемые соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

### 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Стул обернут бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 151510

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

### 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

### 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габариты                                                                                | Примечание                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АТ-А7   | - высота сиденья - 450-570мм<br>- диаметр сиденья - 410мм<br>- высота стула - 840-960мм | Сиденье с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – металл, колеса Ø50мм                |
| АТ-А8   | - высота сиденья - 450-570мм<br>- диаметр сиденья - 410мм<br>- высота стула - 840-960мм | Сиденье с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, опора для ног, основа – металл, колеса Ø50мм |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_

Бригада **ОТК №1**

ЧУП «Артинокс»



# ART INOX

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ



Стул для зуботехнической лаборатории

серии AR

ГОСТ 19917-2014

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

Стул для зуботехнической лаборатории  
AR-Z71, AR-Z71XF, AR-Z71F, AR-Z71X, AR-Z76X, AR-Z76, AR-Z76F

## 1. Предназначение

Стулья предназначены для использования в медицинских лабораториях и медицинских учреждениях.

## 2. Общая характеристика

Стул конструкционно выполнен из следующих элементов:

- спинка твердая, материал древесно-слоистой плита;
- сиденье твердое, материал древесно-слоистой с механизмом управления пневмоэлементом;
- пневмоэлемент;
- мобильное / немобильное пятилучевое основание. Возможна комплектация опорой для ног.

## 3. Описание

Спинка: изготовлена из древесно-слоистой плиты с защитным покрытием, устойчивым к деформации и УФ излучению. Спинка крепится к сиденью при помощи пружинно-винтового механизма, регулирующего угол отклонения спинки в зависимости от силы прилегания (или веса).

Сиденье: изготовлено из древесно-слоистой плиты с защитным покрытием, устойчивым к деформации и УФ излучению. Снизу сиденья закреплен механизм установки пневмоэлемента. В механизме установлена ручка управления пневмоэлементом. Крепежные изделия, используемые соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Стул обернут бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия. Следует периодически (при необходимости) заглаживать ослабленные винтовые соединения. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применима на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул  | Габариты                                                                               | Примечание                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-Z71   | - высота сиденья - 390-530мм -<br>ширина сиденья - 400мм                               | Сиденье и спинка изготовлены из древесно-слоистой плиты и защитным покрытием , основа – пластик, колеса Ø50 мм                                     |
| AR-Z71X  | - высота сиденья - 390-530мм -<br>ширина сиденья - 400мм<br>- высота стула – 730-870мм | Сиденье и спинка изготовлена из древесно-слоистой плиты и защитным покрытием из медицинской серии, основа – металл, колеса Ø50 мм                  |
| AR-Z71F  | - высота сиденья - 390-530мм -<br>ширина сиденья - 400мм<br>- высота стула – 730-870мм | Сиденье и спинка изготовлены из древесно-слоистой плиты и защитным покрытием, основа – пластик, опора для ног, колеса Ø50 мм                       |
| AR-Z71FX | - высота сиденья - 390-530мм -<br>ширина сиденья - 400мм<br>- высота стула – 730-870мм | Сиденье и спинка изготовлена из древесно-слоистой плиты и защитным покрытием из медицинской серии, основа – металл, опора для ног, колеса Ø50 мм   |
| AR-Z76   | - высота сиденья - 390-530мм -<br>ширина сиденья - 400мм<br>- высота стула – 730-870мм | Сиденье и спинка изготовлена из древесно-слоистой плиты защитным покрытием, основа – пластик, пластиковые ножки. Не мобильный.                     |
| AR-Z76X  | - высота сиденья - 390-530мм -<br>ширина сиденья - 400мм<br>- высота стула – 730-870мм | Сиденье и спинка изготовлена из древесно-слоистой плиты защитным покрытием из медицинской серии, основа – металл, пластиковые ножки. Не мобильный. |
| AR-Z76F  | - высота сиденья - 390-530мм -<br>ширина сиденья - 400мм<br>- высота стула – 730-870мм | Сиденье и спинка изготовлена из древесно-слоистой плиты защитным покрытием , основа – пластик, пластиковые ножки, опора для ног. Не мобильный.     |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и укладки \_\_\_\_\_ 2019 г.


Бригада  
ЧУП «Артинокс»  
**ОТК №1**



# АРТИННОХ

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ

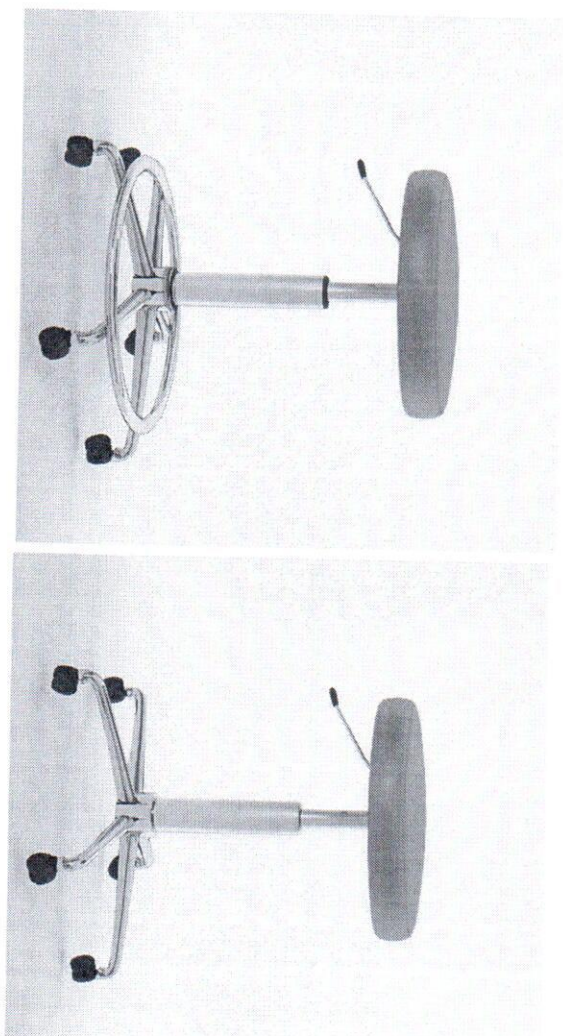

Табурет серии АТ  
ГОСТ 19917-2014

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

ГОСТ 19917-2014

1. Предназначение

Табурет предназначен для использования в медицинских лабораториях и медицинских учреждениях.

2. Общая характеристика

- Табурет конструкционно выполнен из следующих элементов:
- сиденье полужесткое с механизмом управления пневмоэлементом;
  - пневмоэлемент/винтовое устройство регулировки высоты;
  - пятилучевое основание с опорой для ног (или без опоры для ног) и колесами.

3. Описание

Сиденье: обтянуто медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению или из нержавеющей стали. Снизу сиденья закреплен механизм установки пневмоэлемента либо винтового крепления. В механизме установлена ручка управления пневмоэлементом (при наличии). Крепежные изделия, используемые соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Табурет обернут бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 11515-10

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затгивать ослабленные винтовые соединения. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габариты                                                | Примечание                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АТ-А3   | - высота сиденья 450-570мм<br>- диаметр сиденья - 410мм | Сиденье с полужестким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – металл, колеса Ø50мм                |
| АТ-А4   | - высота сиденья 450-570мм<br>- диаметр сиденья - 410мм | Сиденье с полужестким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, опора для ног, основа – металл, колеса Ø50мм |
| АТ-А5   | - высота сиденья 450-570мм<br>- диаметр сиденья - 410мм | Сиденье – нержавеющая сталь, основа – металл, колеса Ø50мм                                                                |
| АТ-А6   | - высота сиденья 450-570мм<br>- диаметр сиденья - 410мм | Сиденье – нержавеющая сталь, опора для ног, основа – металл, колеса Ø50мм                                                 |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.


Бригада **ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»



# АРТИНОХ

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ

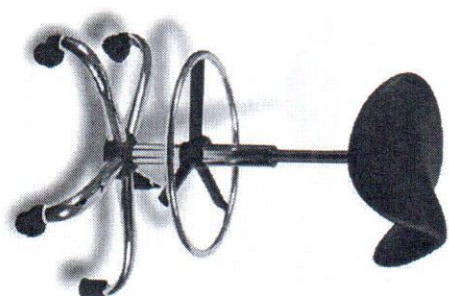

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

Табурет АР-Z75  
ГОСТ 19917-2014

## 1. Предназначение

Табурет предназначен для использования в медицинских лабораториях и медицинских учреждениях.

## 2. Общая характеристика

Табурет конструкционно выполнен из следующих элементов:

- сиденье полумягкое с механизмом управления пневмоэлементом;
- пневмоэлемент регулировки высоты;
- пятилучевое основание с опорой для ног и колесами.

## 3. Описание

Сиденье седлообразное цельное, устойчиво к деформации и УФ излучению. Снизу сиденья закреплен механизм установки пневмоэлемента либо винтового крепления. В механизме установлена ручка управления пневмоэлементом (при наличии). Крепежные изделия, используемые соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Табурет обернут бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением

средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеткой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габариты                                                | Примечание                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-275  | - высота сиденья 560-760мм<br>- диаметр сиденья - 400мм | Сиденье с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожи медицинского серии, основа – металл, колеса Ø50мм |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТОВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада

**ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»



**А Р Т И Н О X**

*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

**ПАСПОРТ**



**Стул для рентгенкабинета**

**AR-Z76XF**

**ГОСТ 19917-2014**

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

Стулья предназначены для использования в медицинских лабораториях и медицинских учреждениях.

# 1. Предназначение

## 2. Общая характеристика

Стул конструкционно выполнен из следующих элементов:

- спинка с регулировкой по высоте
- подголовник с регулировкой по высоте и углом наклона (ш\*в, 20\*25 см), вес- 12кг, немобильный. Сиденье, подголовник и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Спинка, сиденье и подголовник – цельные, односторонние, бесшумные, переменного сечения.

## 3. Описание

Основы: металлический каркас

Спинка с регулировкой по высоте, подголовник с регулировкой по высоте и углом наклона (ш\*в, 20\*25 см), вес- 12 кг, немобильный. Сиденье, подголовник и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Спинка, сиденье и подголовник – односторонние, бесшумные, переменного сечения. Крепежные изделия, используемые соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Стул обернут бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев) по дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015
5. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул  | Габариты                                                                                                                                                     | Примечание                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-Z76XF | спинка с регулировкой по высоте — 127...147см<br>высота сиденья — 53-67см<br>размер сиденья — 43*49см<br>подголовник с регулировкой(ш*в,20*25)<br>вес- 12кг. | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – Металл |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТУ ВУ 1906667/09.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада

**ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



# АРТИНОХ

*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

## ПАСПОРТ

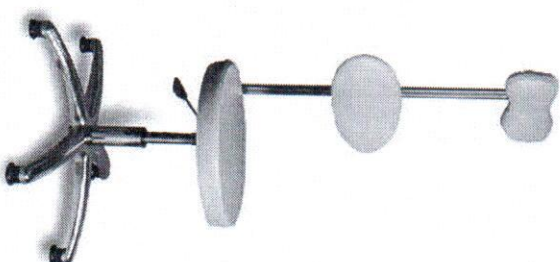

**Стул для рентгенкабинета**  
**серии AR**  
**ГОСТ 19917-2014**

## Стул для рентгенабнета AR-Z67X, AR-Z67B ГОСТ 19917-2014

### 1. Предназначение

Стулья предназначены для использования в медицинских учреждениях, в рентгенабнетах.

### 2. Общая характеристика

Стул конструкционно выполнен из следующих элементов:

- спинка полумягкая, регулируемая по высоте;
- подголовник полумягкий, регулируемый по высоте
- сиденье полумягкое с механизмом управления пневмоэлементом;
- пневмоэлемент;
- пятилучевое основание с колесами.

### 3. Описание

Основы металлическое либо пластиковое на поворотных колесах Ø50 мм.

Спинка: обтянута медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Спинка закрепляется к сиденью при помощи телескопического механизма, регулирующему высоту подъема спинки с фиксацией винтовым зажимом. Подголовник крепится к спинке при помощи телескопического механизма, регулирующему высоту подъема подголовника с фиксацией винтовым зажимом.

Сиденье: обтянуто медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Снизу сиденья закреплен механизм установки пневмоэлемента. В механизме установлена ручка управления пневмоэлементом. Крепежные изделия, используемые соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

### 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Стул обернут бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 151510

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

### 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

### 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев) по дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габариты                                                                                   | Примечание                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-Z67B | - высота сиденья - 430-560мм<br>- диаметр сиденья - 410мм<br>- высота стула – 1360-1490 мм | Сиденье, подголовник и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – металл, колеса Ø50 мм. |
| AR-Z67X | - высота сиденья - 430-560мм<br>- диаметр сиденья - 410мм<br>- высота стула – 1360-1490 мм | Сиденье, подголовник и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, основа – пластик, колеса Ø50 мм |





# ARTINOX

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ

## Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада \_\_\_\_\_

**ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»



Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



Стул лабораторный серии АР  
ГОСТ 19917-2014



## Стул лабораторный AR-Z31BF, AR-Z2BF

### 1. Предназначение

Стул предназначен для использования в медицинских лабораториях и медицинских учреждениях.

### 2. Общая характеристика

Стул конструктивно выполнен из следующих элементов:

- спинка полумягкая;
- сиденье полумягкое с механизмом регулировки по высоте управления (пневмоэлемент), подлокотники;
- пневмоэлемент;
- пятилучевое основание с опорой для ног и колесами.

### 3. Описание

Спинка обшита медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Спинка закрепляется к сиденью при помощи нерегулируемых по высоте металлических дуг. Сиденье обшито медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Снизу сиденья закреплён механизм установки пневмоэлемента. В механизме установлена ручка управления пневмоэлементом. Крепежные изделия, используемые соединении и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

### 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Стул обернут бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме негабаритных отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выложенными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства якими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

### 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) загибать ослабленные винтовые соединения. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

### 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев) По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Применение: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ).
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул  | Габариты                                                                               | Примечание                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-Z31BF | - высота сиденья - 560-690мм<br>- ширина сиденья - 460мм<br>- высота стула - 800-930мм | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, подлокотники, опора для ног, основа – пластик, колеса Ø50 мм |
| AR-Z32BF | - высота сиденья - 420-550мм<br>- ширина сиденья - 460мм<br>- высота стула - 830-960мм | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из медицинской серии, подлокотники, опора для ног, основа – металл, колеса Ø50 мм  |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО РБ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_

Бригада \_\_\_\_\_



Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14,  
район д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



# АРТИНОХ

Медицинская металлическая мебель собственного производства

## ПАСПОРТ



Стул для пациента АР-Z30  
ГОСТ 19917-2014

Стул для пациента AR-Z30  
ГОСТ 19917-2014

1. Предназначение

Стулья для использования в медицинских лабораториях и медицинских учреждениях.

2. Общая характеристика

Стул конструкционно выполнен из следующих элементов:

- основа стула;
- спинка полумягкая;
- сиденье полумягкое.

3. Описание

Основа стула: профилиная труба, покрытая эпокси-полиэфирная порошковая краска, нанесенная методом электростатического напыления ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации УХЛ4. Спинка обтянута медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Спинка закрепляется к сиденью при помощи нерегулируемых по высоте металлических дуг. Сиденье обтянуто медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Крепежные изделия, используемые соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Стул обернут бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затгивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавежка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции

1. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ).
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габариты                                                                  | Примечание                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-Z30  | - высота сиденья - 500<br>- ширина сиденья - 460мм<br>- высота стула -820 | Сиденье и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзама медицинской серии. |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада

**ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**АРТИННОХ**

*Медицинская металллическая мебель собственного производства*

**ПАСПОРТ**

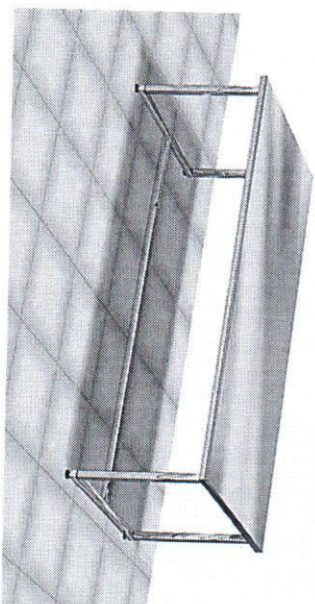

**Скамейка для переходной зоны АТ-А21**  
**ГОСТ 19917-2014**

Скамейка для переходной зоны АТ-А21  
ГОСТ 19917-2014

1. Предназначение

Скамейка предназначена для эксплуатации в лечебных учреждениях, лабораториях, чистых помещениях, переходных зонах.

2. Общая характеристика

Банкетка конструкционно выполнена из следующих элементов:  
- каркас с регулируемыми опорами, сидение.

3. Описание

Скамейка имеет устойчивое четырех-опорное металлическое основание, на котором размещается сидение. Для устойчивого размещения скамейки имеет регулируемые опоры.

Основание скамейки цельносварное, выполненным из качественной нержавеющей стали в виде жесткого коробчатого каркаса из трубы 25х25 мм. Сидение выполнено в виде герметичной сэндвич панели из нержавеющей стали с противовушной подложкой. Опоры кушеты должны обеспечивать возможность регулировки высоты в пределах 0-20 мм и иметь элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применимым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Скамейка обернута бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотопляемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, порушке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затгивать ослабленные винтовые соединения. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и пражичны в эксплуатации. Для чисти изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чисти сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеткой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ,
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Характеристики                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| АТ-А21  | Полностью из нержавеющей стали AISI 304.<br>Размеры Ш x Г x В, мм – 1100 x 350 x 500 |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 1906667/09.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада  
ЧУП «Артинокс»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**АРТИННОХ**

*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

**ПАСПОРТ**

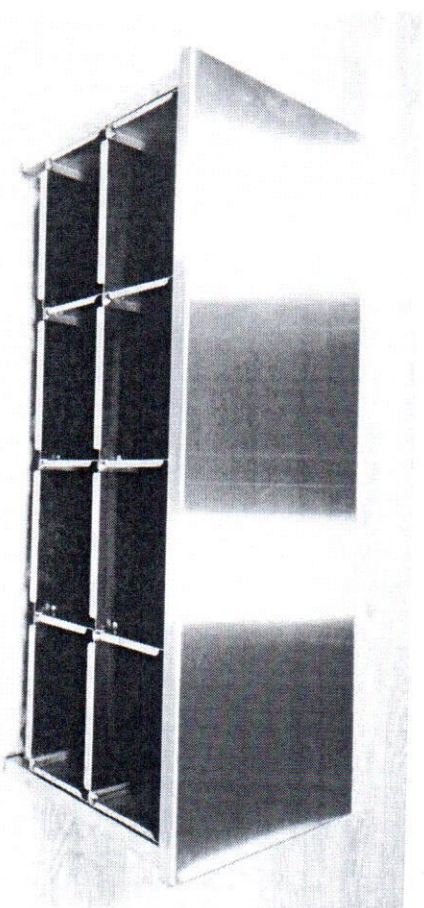

**Скамейка для переходной зоны АГ-А22  
ГОСТ 19917-2014**

Скамейка для переходной зоны АТ-А22  
ГОСТ 19917-2014

1. Предназначение

Скамейка предназначена для эксплуатации в лечебных учреждениях, лабораториях, чистых помещениях, переходных зонах.

2. Общая характеристика

Банкетка конструкционно выполнена из следующих элементов:  
- каркас с регулируемыми опорами, сидение.

3. Описание

Скамейка имеет устойчивое четырех-опорное металлическое основание, на котором размещается сидение. Для устойчивого размещения скамейка имеет регулируемые опоры.

Основание скамейки цельносварное, выполненным из качественной нержавеющей стали в виде жесткого коробчатого каркаса из трубы 25х25 мм. Сидение выполнено в виде герметичной сэндвич панели из нержавеющей стали с противоскользящей подложкой. Опоры кушеты должны обеспечивать возможность регулировки высоты в пределах 0+20 мм и иметь элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применимым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Скамейка обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) загибать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Характеристики                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АТ-А22  | Полностью из нержавеющей стали AISI 304. Размеры Ш x Г x В, мм – 1200-1800 x 600 x 500, кол-во ячеек- 5-20 |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТУ ВУ190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_


Бригада **ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»



**ARTINOX**

Медицинская металлическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ**

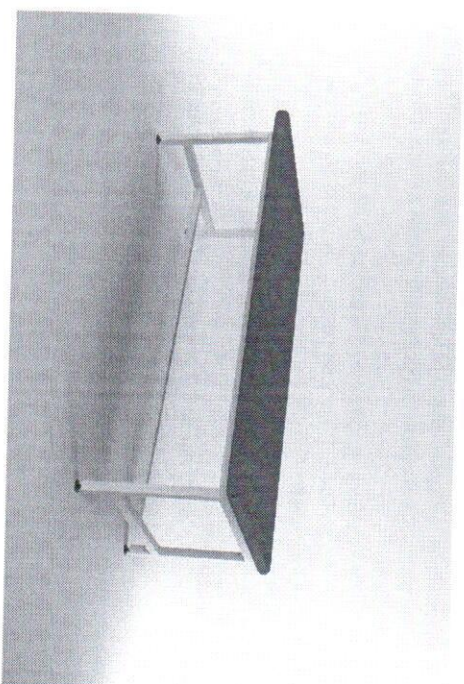

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

**Банкетка АР-А04  
ГОСТ 19917-2014**

1. Предназначение

Банкетка предназначена для эксплуатации в лечебных учреждениях.

2. Общая характеристика

Банкетка конструкционно выполнена из следующих элементов:  
- каркас с регулируемыми опорами, сидение.

3. Описание

Банкетка имеет устойчивое четырех-опорное металлическое основание, на котором размещается сидение. Сидение имеет защитно-декоративное покрытие из кожзаменителя медицинской серии. Для устойчивого размещения банкетки имеет регулируемые опоры.

Основание банкетки цельносварное, выполнено из качественной конструкционной стали в виде жесткого коробчатого каркаса из труб 25х25 мм. Сидение имеет мягкий элемент из поролона толщиной не менее 30 мм. Наружные поверхности сидения имеют облицовку из кожзаменителя медицинской серии. Металлические элементы кушетки должны иметь защитно-декоративное покрытие из эпоксид-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Опоры кушетки должны обеспечивать возможность регулировки высоты в пределах 0+20 мм и иметь элементы предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Банкетка обернута бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытой помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) закручивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

- 1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
- 2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
- 3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
- 4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Характеристика                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-A04  | Металл в полимере, сидение с поролоновой наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Размеры Ш x Г x В, мм – 1500 x 600 x 450 |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.


Бригада \_\_\_\_\_



**А Р Т И Н О X**

Медицинская металллическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ**

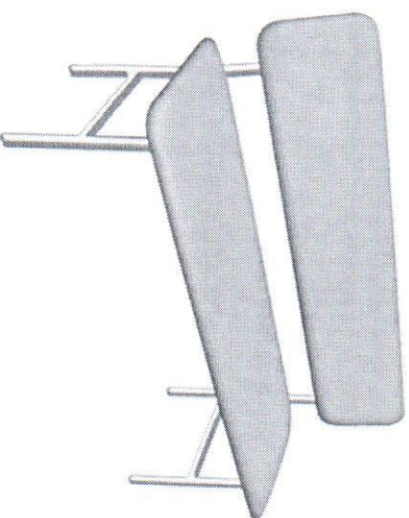

**Банкетка АР-А08  
ГОСТ 19917-2014**

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14,  
район д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

Банкетка АR-A08  
ГОСТ 19917-2014

1. **Предназначение**  
Банкетка предназначена для эксплуатации в лечебных учреждениях.

2. **Общая характеристика**

- Банкетка конструкционно выполнена из следующих элементов:
- каркас с регулируемыми опорами
  - сидение
  - спинка

3. **Описание**

Банкетка имеет устойчивое четырехопорное металлическое основание, на котором размещается сидение. Сидение и спинка имеют защитно-декоративное покрытие из кожзаменителя медицинской серии. Для устойчивого размещения банкетки имеет регулируемые опоры.

Основание банкетки цельносварное, выполненным из качественной конструкционной стали в виде жесткого коробчатого каркаса из труб 25x25 мм. Сидение и спинка имеет мягкие элементы из поролона толщиной не менее 30 мм. Наружные поверхности имеют облицовку из кожзаменителя медицинской серии. Металлические элементы имеют защитно-декоративное покрытие из эпоксиполэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Опоры банкетки обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0+20 мм и имеют элементы предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

4. **Упаковка, транспортировка и хранение**

Банкетка обернута бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выложенными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. **Правила ухода**

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. **Порядок предъявления претензий**

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Характеристики                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-A08  | Металл в полимере, сидение и спинка с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Размеры Ш x Г x В, мм — 1500 x 600 x 500 |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТОВУ190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_

Бригада \_\_\_\_\_




Изготовитель: АРТИННОХ ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**АРТИННОХ**

Медицинская металлическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ**

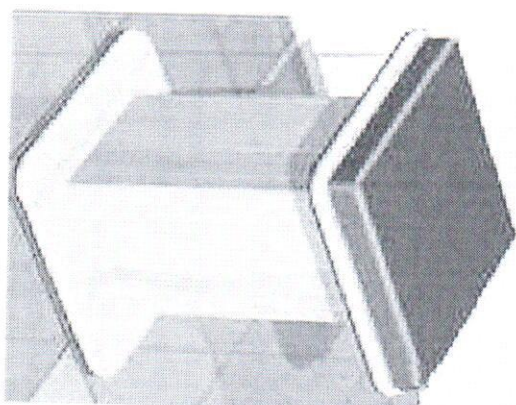

**Банкетка АР-ДВ1  
ГОСТ 19917-2014**

Банкетка АР-ДВ1  
ГОСТ 19917-2014

1. Предназначение

Банкетка предназначена для эксплуатации в лечебных и санаторно-профилактических учреждениях.

2. Общая характеристика

Банкетка конструкционно выполнена из следующих элементов:  
- каркас с регулируемыми опорами, сидение.

3. Описание

Банкетка имеет устойчивое основание из ДСП, на котором размещается полумягкое сидение. Сидение имеет защитно-декоративное покрытие из кожзаменителя медицинской серии. Для устойчивого размещения банкетка имеет регулируемые опоры.

Сидение имеет мягкий элемент из поролона толщиной не менее 30 мм. Опоры банкетки обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0-20 мм и имеют элементы предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Банкетка обернута бумажой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖД) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев).

По дефектам, появившимся из за необходимости правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ).
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Характеристика                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-ДВ1  | ДСП, полумягкое сидение, обтянутое кожзамом медицинской серии<br>Размеры (ш * г * в): 340 * 340 * 450 |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014)  
и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада \_\_\_\_\_


**ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»



**ARTINOX**

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ

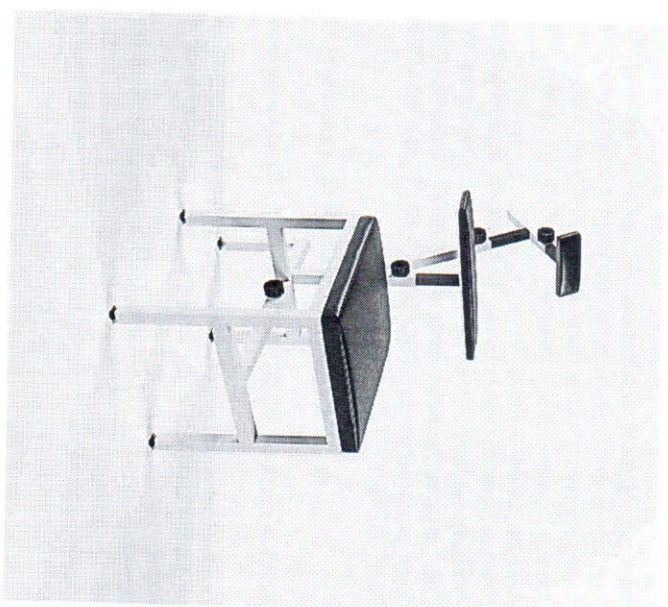

Стул для массажа воротниковой зоны АР-А62  
ГОСТ 19917-2014

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

Стул для массажа воротниковой зоны АР-А62  
ГОСТ 19917-2014

1. Предназначение

Стул предназначен для выполнения массажа воротниковой зоны пациента. Используется в медицинских и санаторно-курортных учреждениях.

2. Общая характеристика

Стул конструктивно выполнен из следующих элементов:

- сиденье полумягкое;
- подставка для рук полумягкая
- лобный упор полумягкий

3. Описание

Стул имеет металлический сварной каркас из углеродистой стали с полимерным покрытием, с полумягким сиденьем, регулируемым по высоте и положению лобным упором и подставкой для рук. Упор для рук и лобный упор обтнуты медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Имеется регулировка высоты подставки для рук и положения лобного упора с фиксацией винтовыми зажимами. Сиденье обтнуто медицинским кожзаменителем, устойчивым к деформации и УФ излучению. Крепежные изделия, используемые соединения и крепления всей конструкции сиденья должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7738-70, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 11738-84.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Стул обернут бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотпливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выпоненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чисти изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чисти сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-А62  | Металл в полимере, сиденье, подставка для рук и лобный упор выполнены с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. Регулировка высоты подставки для рук и положения лобного упора с фиксацией винтовыми зажимами. Размеры сиденья, мм – 410 x 480. Размеры ШхГхВ, мм – 600x410x900 |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014)  
и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада \_\_\_\_\_



Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



# АРТИННОХ

*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

## Паспорт



**Кровать неонатальная АТ-К1, АТ-К1v  
ГОСТ 19917-2014**

Кровать неонатальная АТ-К1, АТ-К1v  
ГОСТ 19917-2014

1. Предназначение

Кровать неонатальная предназначена для эксплуатации в лечебных учреждениях.

2. Общая характеристика

Кровать конструкционно выполнена из следующих элементов:

- каркас;
- ковез;
- матрац

3. Описание

3.1. Каркас: Жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из стальной нержавеющей трубы или из металла с полимерным покрытием диаметром 20 мм состоит из двух основных элементов: несущей рамы и каркаса ковеза. Каркас ковеза обеспечивает бесступенчатое выполнение регулировки «Тренделенбург/Антитренделенбург». Наружные поверхности каркаса устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

На несущей раме установлены четыре колесные опоры медицинской серии из серой резины диаметром 75 мм, два с тормозом. Колеса вращаются относительно вертикальной оси свободно без заеданий. Усилия вращения по горизонтальной оси не превышает 0,35Н.

Крепежные изделия, используемые при установке колесных опор, имеют гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы соответствуют ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 17475-80 и ГОСТ 11738-84.

3.2. Ковез: изготовлен из прозрачного акрила толщиной 6 мм. 740x470x240, методом горячей вытяжки. Имеет скругленные углы и эстетическую форму. В торцевой части имеется кармашек. Устойчив к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

3.3. Матрац: изготовлен из медицинского кожанителя, устойчивого к дезобработке и УФ излучению, с наполнителем из ППУ, толщиной 30 мм. Форма матраца копирует скругленные поверхности ковеза.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кровать обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно использовать любые чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габаритные размеры | Ковез | Матрац | Материал каркаса             |
|---------|--------------------|-------|--------|------------------------------|
| АТ-К1   | 820*540*850        | 1     | 1      | Нерж. сталь                  |
| АТ-К1v  | 820*540*850        | 1     | 1      | Металл в полимерном покрытии |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада

**ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**АРТИННОХ**

*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

**Паспорт**

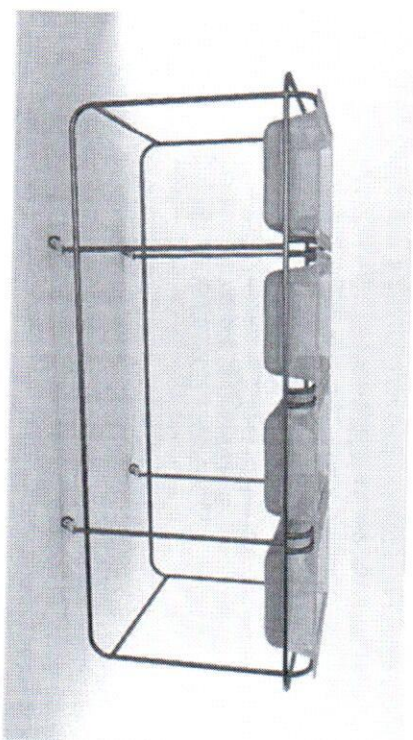

**Кровать неонатальная АТ-К2, АТ-К2v  
ГОСТ 19917-2014**

Кровать неонатальная АТ-К2, АТ-К2v  
ГОСТ 19917-2014

1.Предназначение

Кровать предназначена для эксплуатации в лечебных учреждениях.

2.Общая характеристика

Кровать конструкционно выполнена из следующих элементов:

- каркас;
- ковез;
- матрац.

3.Описание

3.1. Каркас: Жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из стальной нержавеющей трубы или из металла с полимерным покрытием диаметром 20 мм состоит из двух основных элементов: несущей рамы и каркаса ковеза. Каркас ковеза обеспечивает бесступенчатое выполнение регулировки «Трендленбург/Антирендленбург». Наружные поверхности каркаса устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4683387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

На несущей раме установлены четыре колесные опоры медицинской серии из серой резины диаметром 75 мм, два с тормозом. Колеса вращаются относительно вертикальной оси свободно без заеданий. Усилие вращения по горизонтальной оси не превышает 0,35Н.

Крепежные изделия, используемые при установке колесных опор, имеют гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы соответствуют ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 17475-80 и ГОСТ 11738-84.

3.2. Ковез: изготовлен из прозрачного акрила толщиной 6 мм, 740х470х240, методом горячей вытяжки. Имеет скругленные углы и эстетическую форму. В торцевой части имеется кармашек. Устойчив к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4683387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

3.3. Матрац: изготовлен из медицинского кожанителя SCADEN, устойчивого к дезобработке и УФ излучению, с наполнителем из ППУ, толщиной 30 мм. Форма матраца копирует скругленные поверхности ковеза.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кровать обернута бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку. Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габаритные размеры | Ковез | Матрац | Материал каркаса |
|---------|--------------------|-------|--------|------------------|
| АТ-К2   | 2080*800*850       | 4     | 4      | Нерж. сталь      |
| АТ-К2v  | 2080*800*850       | 4     | 4      | Полимер          |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТОВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.



**ARTINOX**


*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада



**Паспорт**

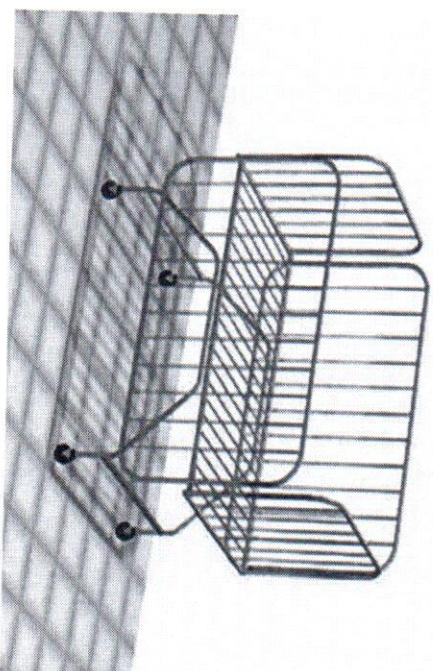

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

М.П.

**Кровать медицинская больничная детская  
АТ-КЗ, АТ-КЗv**

**ГОСТ 19917-2014**

## Кровать медицинская больничная детская

АТ-КЗ, АТ-КЗу

ГОСТ 19917-2014

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия. Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 1. Предназначение

Кровать предназначена для использования в медицинских учреждениях

## 2. Общая характеристика

Кровать для детей до трех лет конструкционно выполнена из следующих элементов:

- несущая рама;
- корпус;
- передняя стенка.

## 3. Описание

Жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из стальной трубы диаметром 20 мм состоит из трех основных элементов: несущей рамы, корпуса и передней стенки. Заполнение корпуса и передней стенки выполнено из прутка диаметром 5мм.

На несущей раме установлены четыре колесные опоры медицинской серии из серой резины диаметром 75 мм, два с тормозом. Колеса вращаются относительно вертикальной оси свободно без заеданий. Усилие вращения по горизонтальной оси не превышает 0,35Н.

Передняя стенка имеет возможность опускания вниз до уровня колес.

Металлические элементы кровати имеют защитно-декоративное покрытие из эпоксид-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления.

Наружные поверхности кровати устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

Крепежные изделия, используемые при установке колесных опор, имеют гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации.

Крепежные элементы соответствуют ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 17475-80 и ГОСТ 11738-84.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кровать обернута бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку. Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме негабаритных отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции*

1. Регистрационные удостоверения Министерства Здравоохранения РБ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габаритные размеры | Материал каркаса |
|---------|--------------------|------------------|
| АТ-КЗ   | 1360x775x1200      | Нерж. сталь      |
| АТ-КЗу  | 1360x775x1200      | Полимер          |



Свидетельство о приеме

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 1906667.09.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада  
ЧУП «Артинокс»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14,  
район Д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**АРТИННОХ**

Медицинская металлическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ**

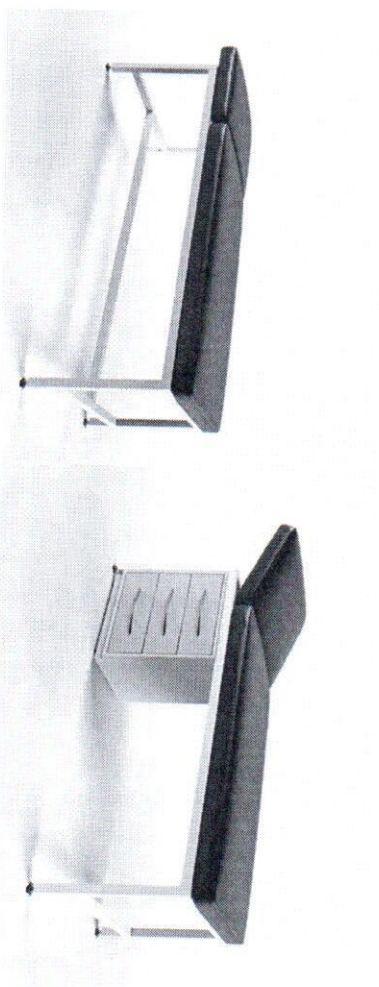

**Кушетки смотровые серии АР**  
**ГОСТ 19917-2014**

## Кушетки смотровые АR-A05, АR-A07

### 1. Предназначение

Кушетка предназначена для размещения пациента при проведении осмотров и лечебных манипуляций в лечебно-профилактических учреждениях.

### 2. Общая характеристика

- Кушетка конструкционно выполнена из следующих элементов:
- каркас с регулируемыми опорами
  - полумягкий лежак с поднимающейся подголовной частью
  - тумба металлическая с 3-мя выдвижными ящиками (в модели АR-A07)

### 3. Описание

Кушетка имеет устойчивое четырех-опорное металлическое основание, на котором размещается лежак. Подголовная часть имеет возможность ступенчатого изменения угла наклона. Лежак имеет защитно-декоративное покрытие из кожзаменителя медицинской серии. Для устойчивого размещения кушетка имеет регулируемые опоры.

Основание кушетки цельносварное, выполненным из качественной конструкционной стали в виде жесткого коробчатого каркаса из труб 25х25 мм. Лежак имеет мягкие элементы из поролона толщиной не менее 30 мм. Наружные поверхности лежака имеют облицовку из кожзаменителя медицинской серии. Наклон подголовной части лежака регулируется в пределах не менее 0+30°. Порошковые элементы кушетки должны иметь защитно-декоративное покрытие из эпоксиполи-эфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Опоры кушетки обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0-20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

### 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Банкета и кушетка обернута бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотпливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

### 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая, зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000).

до полного выведения с помощью полировки).

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств,

имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

### 6. Порядок предъявления претензии

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001:2015

| Артикул | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-A05  | Металл в полимере, ложе с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии, регулировка угла наклона изголовья в диапазоне 0-30° (ступенчатая, с механической фиксацией положения)<br>Размеры Д x Ш x В, мм – 1860 x 600 x 530                                       |
| AR-A07  | Металл в полимере, ложе с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии, регулировка угла наклона изголовья в диапазоне 0-30° (ступенчатая, с механической фиксацией положения), встроенная тумба (3 выдвижных ящика)<br>Размеры Д x Ш x В, мм – 1860 x 600 x 560 |



**Свидетельство о приемке**

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада \_\_\_\_\_

**ОТК №1**




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**ART INOX**

Медицинская металлическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ**

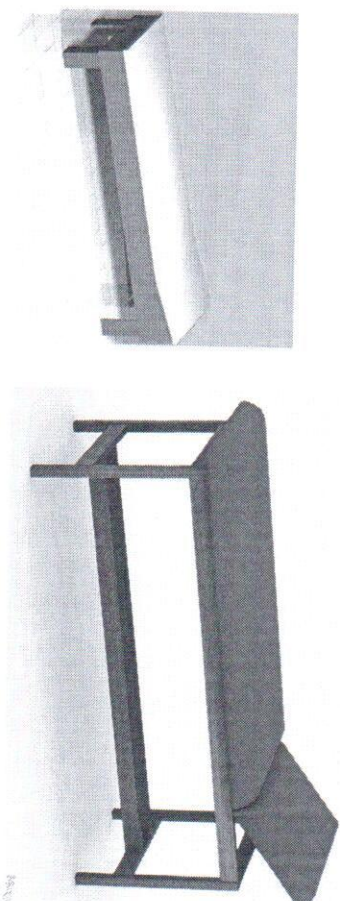

**Кушетки физиотерапевтические серии АР**  
**ГОСТ 19917-2014**

## 1. Предназначение

Кухетки предназначены для размещения пациента при проведении физиотерапевтических процедур и лечебных манипуляций в лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях.

## 2. Общая характеристика

Кухетка конструкционно выполнена из следующих элементов:  
- каркас с регулируемыми опорами  
- мягкий лежак

## 3. Описание

Кухетка выполнена из ламинированной древесностружечной плиты с пластиковой крошкой. Сиденье мягкое. Кухетка имеет устойчивое четырех-опорное основание, на котором размещается лежак. Подголовная часть имеет возможность ступенчатого изменения угла наклона (в модели АР-ДК2). Лежак имеет защитно-декоративное покрытие из кожзаменителя медицинской серии. Для устойчивого размещения кухетки имеет регулируемые опоры.

Основание кухетки выполнено из ламинированной древесностружечной плиты с пластиковой крошкой. Лежак имеет мягкие элементы из поролона толщиной не менее 30 мм. Наружные поверхности лежака имеют облицовку из кожзаменителя медицинской серии. Наклон подголовной части лежака регулируется в пределах не менее 0-30°. Опоры кухетки обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0-20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кухетка обернута бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должна осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Характеристика                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-ДК1  | ЛДСП, Размеры (ш. * г. * в.): 2100 * 600 * 450                                                                          |
| АР-ДК2  | ЛДСП, Размеры (ш. * г. * в.): 1800 * 600 * 530, наклон подголовной части лежака регулируется в пределах не менее 0-30°. |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТУ ВУ 1906667/09.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада  
**ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**АРТИНОХ**

Медицинская металлическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ**

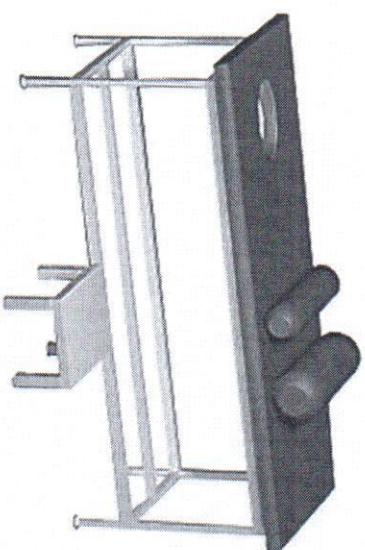

**Кушетка массажная АР-А61**  
**ГОСТ 19917-93**

# Кушетка массажная АР-А61

## ГОСТ 19917-93

### 1. Предназначение

Кушетка предназначена для размещения пациента при проведении спортивного, лечебного, косметического и рефлекторного массажа в лечебно-профилактических, спортивных, санаторно-курортных учреждениях.

### 2. Общая характеристика

Кушетка конструкционно выполнена из следующих элементов:

- каркас с регулируемыми опорами,
- лежак
- откидная ступенька
- валики

### 3. Описание

Кушетка имеет устойчивое четырех-опорное металлическое основание, на котором размещается лежак. В головной части лежака имеется отверстие для лица. Лежак имеет защитно-декоративное покрытие из кожзаменителя медицинской серии. Для устойчивого размещения кушетка имеет регулируемые опоры.

Основание кушетки цельносварное, выполненным из качественной конструкционной стали в виде жесткого коробчатого каркаса из труб 25х25 мм. Лежак имеет мягкие элементы из поролона толщиной 30 мм. Наружные поверхности лежака имеют облицовку из кожзаменителя медицинской серии. Металлические элементы кушетки имеют защитно-декоративное покрытие из эпоксид-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Опоры кушетки обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0-20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 2564-4, применяемым при дезинфекции.

### 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кушетка обернута бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ЮЖ4) ГОСТ15150

Изделия должно храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

### 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затгивать ослабленные винтовые соединения.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и пражтичны в эксплуатации.

Для чисти изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чисти сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

### 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001:2015

| Артикул | Характеристика                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-А61  | Нагрузка на кушетку не более 150 кг<br>Отверстие для лица<br>2-4 валика разных диаметров.<br>Лежак с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.<br>Размеры Д x Ш x В, мм — 2000 x 650 x 800. |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

ОТК №1  
Бригада ЧУП «Артинокс»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14,  
район Д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



АРТИНОХ

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ

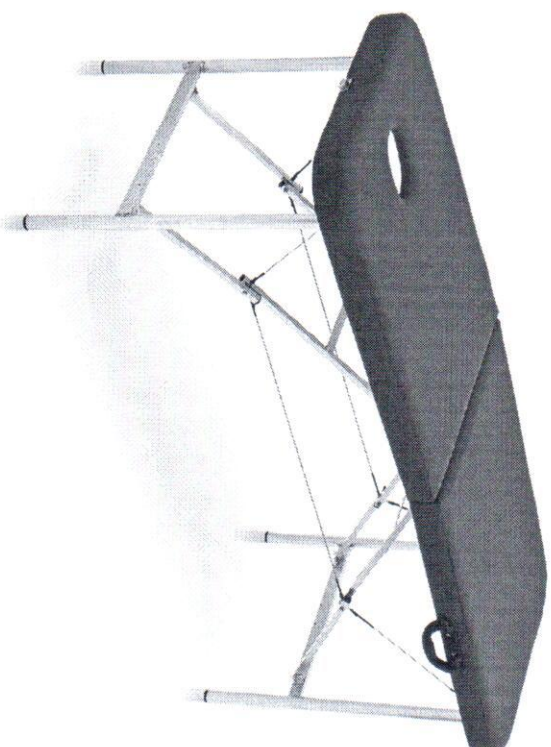

Кушетка массажная складная АР-А63  
ГОСТ 19917-93

# Кушетка массажная складная АР-А63 ГОСТ 19917-93

## 1. Предназначение

Кушетка предназначена для размещения пациента при проведении спортивного, лечебного, косметического и рефлекторного массажа в лечебно-профилактических, спортивных, санаторно-курортных учреждениях, а так же на дому.

## 2. Общая характеристика

Кушетка конструкционно выполнена из следующих элементов:  
- складной каркас с регулируемыми опорами,  
- 2 секции лежака.

## 3. Описание

Кушетка имеет устойчивое четырех-опорное металлическое основание, на котором размещается лежак с отверстием для лица. Лежак имеет защитно-декоративное покрытие из кожзаменителя медицинской серии. Для устойчивого размещения кушетки имеет регулируемые опоры. Основание кушетки выполнено из качественного конструкционной стали в виде жесткого коробчатого каркаса из труб 25х25 мм. Лежак имеет мягкие элементы из поролона толщиной 30 мм. Наружные поверхности лежака имеют облицовку из кожзаменителя медицинской серии. Металлические элементы кушетки имеют защитно-декоративное покрытие из эпоксид-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Опоры кушетки обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0-20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кушетка обернута бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме негабаритных отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия. Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения. Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев) По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ).
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Характеристика                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-А63  | Нагрузка на кушетку не более 120 кг<br>Складной лежак с 2-мя секциями. Отверстие для лица.<br>Лежак наполнен мягким наполнителем и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.<br>Размеры Д x Ш x В, мм – 2000 x 600 x 800. |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.


Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.



# АРТИНІОХ

Медицинская металлическая мебель собственного производства

## ПАСПОРТ

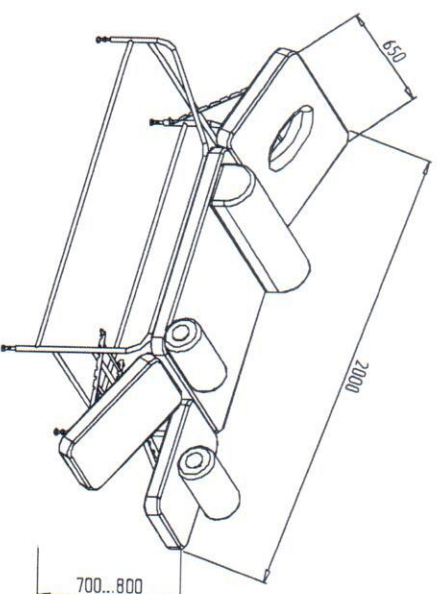

**Кушетка массажная АР-А64**

**ГОСТ 19917-93**

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

# Кушетка массажная АР-А64 ГОСТ 19917-93

## 1. Предназначение

Кушетка предназначена для размещения пациента при проведении спортивного, лечебного, косметического и рефлекторного массажа в лечебно-профилактических, спортивных, санаторно-курортных учреждениях.

## 2. Общая характеристика

Кушетка конструктивно выполнена из следующих элементов:  
- каркас с регулируемыми опорами,  
- 4 секции.

## 3. Описание

Кушетка имеет устойчивое складное четырех-опорное металлическое основание, на котором ножные секции имеют возможность ступенчатого изменения угла наклона в диапазоне от -30° до +30°. Лежак имеет защитно-декоративное покрытие из кожзаменителя медицинской серии. Для устойчивого размещения кушетки имеет регулируемые опоры.

Основание кушетки выполнено из качественной конструкционной стали в виде жесткого корыччатого каркаса из труб 25x25 мм. Лежак имеет мягкие элементы из поролона толщиной 30 мм, элементы кушетки имеют защитно-декоративное покрытие из эпоксид-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Опоры кушетки обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0-20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кушетка обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия. Следует периодически (при необходимости) затирать ослепленные винтовые соединения. Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев) по дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ).
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001:2015

| Артикул | Характеристика                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-А63  | Нагрузка на кушетку не более 120 кг<br>Лежак с 4-мя секциями. Отверстие для лица.<br>Лежак полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии. 3 валика<br>Размер Д x Ш x В, мм – 2000 x 600 x 800. |



Свидетельство о приеме

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666/09.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14,  
район Д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



# АРТИНОХ

Медицинская металлическая мебель собственного производства

## ПАСПОРТ

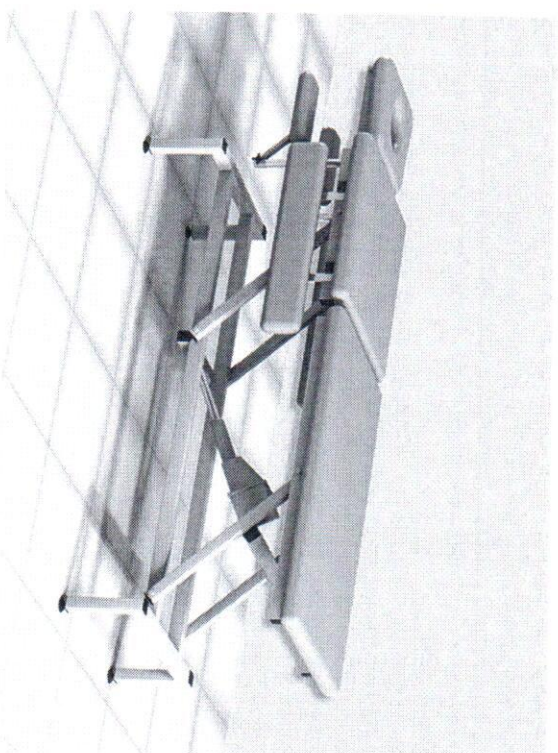

**Кушетка массажная АР-А06**  
**ГОСТ 19917-93**

# Кушетка массажная АР-А06 ГОСТ 19917-93

## 1. Предназначение

Кушетка предназначена для размещения пациента при проведении спортивного, лечебного, косметического и рефлекторного массажа в лечебно-профилактических, спортивных, санаторно-курортных учреждениях.

## 2. Общая характеристика

Кушетка конструкционно выполнена из следующих элементов:

- каркас с регулируемыми опорами,
- гидравлический подъемник
- 3 секции лежака.

## 3. Описание

Кушетка имеет устойчивое четырех-опорное металлическое основание, на котором размещается лежак. Головная часть имеет возможность ступенчатого изменения угла наклона. Лежак имеет защитно-декоративное покрытие из кожзаменителя медицинской серии. Для устойчивого размещения кушетки имеет регулируемые опоры.

Основание кушетки цельносварное, выполненным из качественной конструкционной стали в виде жесткого коробчатого каркаса из труб 25х25 мм. Лежак имеет мягкие элементы из поролона толщиной 30 мм. Наружные поверхности лежака имеют облицовку из кожзаменителя медицинской серии. Наклон подголовной части лежака регулируется от 30 до 30°. Металлические элементы кушетки имеют защитно-декоративное покрытие из эпоксид-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Опоры кушетки обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0-20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кушетка обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неопаливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Реместрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Реместрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001:2015

| Артикул | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-А06  | <p>Нарузка на кушетку не более 150 кг</p> <p>3 секции: для головы, для ног, для рук. Изменение положения секций для головы, рук и ног.</p> <p>Наличие выреза для лица в лицевой секции.</p> <p>Наличие двух валиков разных диаметров.</p> <p>Опорные поверхности с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.</p> <p>Механизм подъема лежа с гидравлическим приводом, управляемым ножной педалью (диапазон высот от 550 до 900мм).</p> <p>Размеры Д x Ш x В, мм – 2100 x 550/800 x550-900.</p> |



Свидетельство о приеме

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада

**ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**АРТИНОВ**

*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

**ПАСПОРТ**

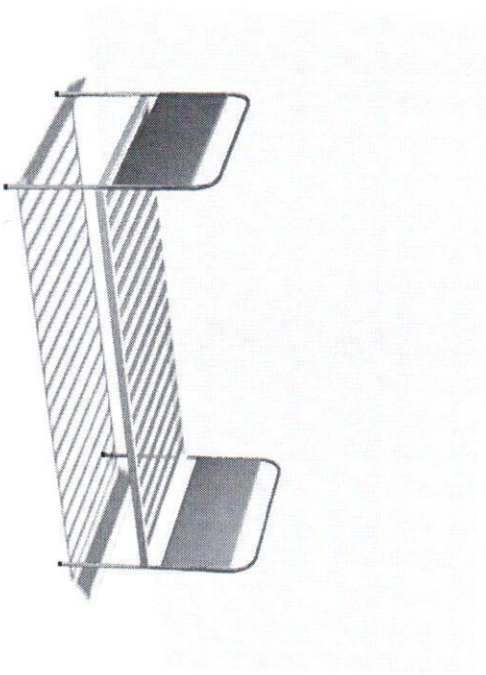

**Кровати медицинские больничные**  
**АТ-К4, АТ-К4.2, АТ-К4.3**

**ГОСТ 19917-2014**

# Кровать медицинская больничная АТ-К4, АТ-К4.2, АТ-К4.3

## 1.Предназначение

Кровать предназначена для эксплуатации в медицинских учреждениях.

## 2.Общая характеристика

Кровать конструкционно выполнена из следующих элементов:

- каркас;
- матрац;
- торцевые ограждения (филёнки) 2 шт.

## 3.Описание

1. Каркас изготовлен на основе металлических труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов, ложе кровати – сварная конструкция реечного типа и стальной П-образный профиль, цвет по согласованию с заказчиком в комплекте с матрацем из влаготталкивающей ткани, острые углы отсутствуют. Для модели Допустимая нагрузка на кровать не менее 140 кг.

Крепежные изделия, используемые при сборке кровати, имеют гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы соответствуют ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 17475-80 и ГОСТ 11738-84.

2. Матрац: изготовлен из медицинского кожанменителя, устойчивого к дезобработке и УФ излучению, с наполнителем из ППУ, толщиной 100 мм.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кровать обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакован в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 5.Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель осуществляет за собой право вносить изменение в конструкцию, без уведомления заказчика, и не ухудшающие работоспособность изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Российской Федерации
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габаритные размеры | Спинки, филёнки                   | Матрац |
|---------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| АТ-К4   | 1964х 806 х 820    | 2, нерж. Сталь, полумягкие, кожан | 1      |
| АТ-К4.2 | 1964х 806 х 820    | 2, полумягкие,кожан               | 1      |
| АТ-К4.3 | 1964х 806 х 820    | 2, ДСП                            | 1      |



### Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТОВ ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада

**ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



# АРТИНОХ

Медицинская металлическая мебель собственного производства

## ПАСПОРТ

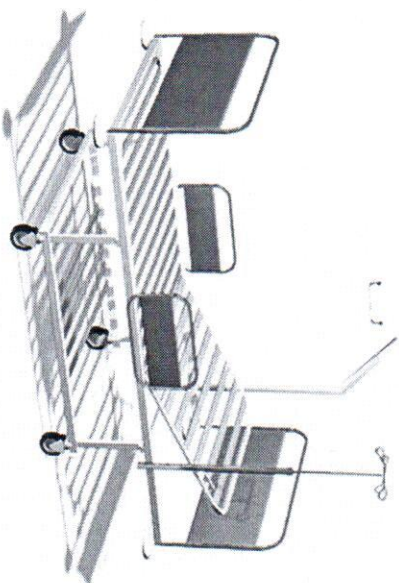

**Кровать медицинская больничная  
односекционная АТ-К7  
ГОСТ 19917-2014**

# Кровать медицинская больничная односекционная АТ-К7 ГОСТ 19917-2014

## 1.Предназначение

Кровать предназначена для размещения пациентов в стационарных отделениях лечебных учреждений.

## 2.Общая характеристика

Кровать конструкционно выполнена из следующих элементов:

- каркас и несущая рама;
- спинки 2 шт.
- отграждения боковые 2 шт.
- полка для больничных принадлежностей

## 3.Описание

1. Каркас изготовлен на основе тонкостенных металлических труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов, ложе кровати – сварная сетка и стальной П-образный профиль, острые углы отсутствуют. По углам установлены бампера для предотвращения повреждения стен.

Каркас и несущая рама – на 4 колесных опорах Ø125 мм (с тормозом), ложе с одной подъемной секцией с заполнением из профилированных реек из металла (дхшхв, мм – 2010х900х545); регулировка подвеса секции – вручную, ступенчато, в диапазоне 0-50°, спинки из нержавеющей стали с полумягкими филёнками, покрытыми кожзаменителем, боковые барьеры из нержавеющей стали с полумягкими филёнками, покрытыми кожзаменителем. Возможно комплектация кронштейном для капельницы из нержавеющей стали, с 4-х позиционным держателем и 2 подвесками для флаконов (переставной, с регулировкой высоты в диапазоне 1200-1800 мм), кронштейном переставным с ручкой для подвеса пациента. Нижняя полка для больничных принадлежностей, дхшхв, мм – 2185х1025х1030, допустимая нагрузка – 150 кг. Может быть в комплектации с матрацем. Матрац, изготовлен из медицинского кожзаменителя, устойчивого к деформации и УФ излучению, с наполнителем из ППУ, толщиной 100 мм. Предусмотрено место изгиба матраца для секции.

Крепежные изделия, используемые при установке колесных опор, имеют гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы соответствуют ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 17475-80 и ГОСТ 11738-84.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кровать обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения. Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150 Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

## 5.Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габаритные размеры | Кол-во секций |
|---------|--------------------|---------------|
| АТ-К7   | 2185*1025*1030     | 1             |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТОВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада \_\_\_\_\_




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**ARTINOX**

*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

**ПАСПОРТ**

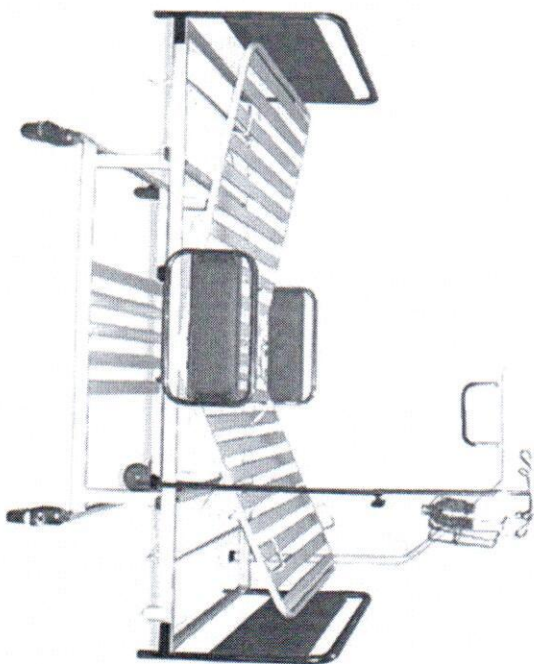

**Кровать медицинская больничная  
двухсекционная АТ-К5  
ГОСТ 19917-2014**

## Кровать медицинская больничная двухсекционная АТ-К5 ГОСТ 19917-2014

### 1. Предназначение

Кровать предназначена для размещения пациентов в стационарных отделениях лечебных учреждений.

### 2. Общая характеристика

Кровать конструктивно выполнена из следующих элементов:

- каркас и несущая рама;
- спинки 2 шт.
- ограждения боковые 2 шт.
- полка для боличных принадлежностей

### 3. Описание

1. Каркас изготовлен на основе тонкостенных металлических труб с полимерным порошковым покрытием, устойчивым к обработке всеми видами медицинскими дезинфицирующими и моющими растворами, ложе кровати – сварная сетка и стальной П-образный профиль, острые углы отсутствуют. По углам установлены багеты для предотвращения повреждения стен.

каркас и несущая рама – на 4 колесных опорах Ø125 мм (с тормозом), ложе с двумя подъемными секциями с наполнением из профилированных реек из металла (ДхШхВ, мм – 2010х900х545), регулировка подъема секции – вручную, ступенчато, в диапазоне 0-50°, спинки из нержавеющей стали с полумягкими филёнками, покрытыми кожзаменителем. Боковые барьеры из нержавеющей стали с полумягкими филёнками, покрытыми кожзаменителем. Возможна комплектация кронштейном для капельницы из нержавеющей стали, с 4-х позиционным держателем и 2 подвесками для флаконов (переставной, с регулировкой высоты в диапазоне 1200-1800 мм), кронштейном переставным с ручкой для подъема пациента. Нижняя полка для боличных принадлежностей, ДхШхВ, мм – 2185х1025х1030, допустимая нагрузка – 150 кг. Может быть в комплектации с матрасом. Матрас: изготовлен из медицинского кожзаменителя, устойчивого к деформации и УФ излучению, с наполнителем из ППУ, толщиной 100 мм. Предусмотрены места изгиба матраца для секций.

Крепежные изделия, используемые при установке колесных опор, имеют гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы соответствуют ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 17475-80 и ГОСТ 11738-84.

### 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кровать обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения. Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 151510

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

### 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеткой.

### 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Габаритные размеры | Кол-во секций |
|---------|--------------------|---------------|
| АТ-К5   | 2185*1025*1030     | 2             |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада

**ОТК №1**  
ЧУП «Артинокс»




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**ARTINOX**

*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

**ПАСПОРТ**

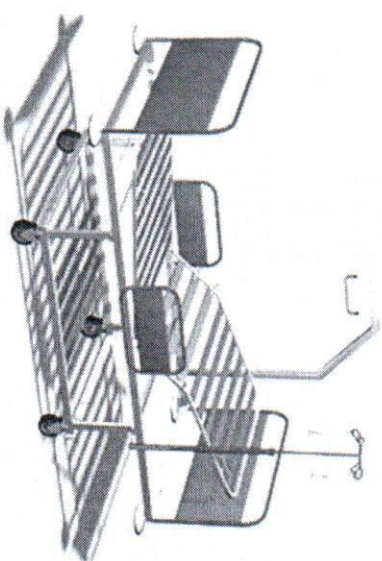

**Кровать медицинская больничная  
трехсекционная АТ-К6  
ГОСТ 19917-2014**

## Кровать медицинская больничная трехсекционная АТ-К6 ГОСТ 19917-2014

### 1. Предназначение

Кровать предназначена для размещения пациентов в стационарных отделениях лечебных учреждений.

### 2. Общая характеристика

- кровать конструктивно выполнена из следующих элементов:
- каркас и несущая рама;
- спинки 2 шт.
- ограждения боковые 2 шт.
- полка для боковых принадлежностей

### 3. Описание

Каркас и несущая рама на 4 колесных опорах  $\varnothing 125$  мм (с тормозом), ложе с тремя подъемными секциями с заполнением из профилированных реек из металла (ДхШхВ, мм – 2010х900х545), регулировка подвеса спинной секции – вручную, ступенчато, в диапазоне 0-50°, регулировка подвеса тазобедренной секции – вручную, ступенчато, в диапазоне 0-55°, регулировка положения ножной секции относительно поверхности полумягкими филеями, покрытыми кожаным покрытием. Боковые барьеры из нержавеющей стали с полумягкими филеями, покрытыми кожаным покрытием. Возможна комплектация кронштейном для калельницы из нержавеющей стали, с 4-х позиционным держателем и 2 подвесками для флажков (переставной, с регулировкой высоты в диапазоне 1200-1800 мм), кронштейном переставным с ручкой для подвеса пациента, ДхШхВ, мм – 2185х1025х1030, допустимая нагрузка – 150 кг. Может быть в комплектации с матрасом. Матрас: изготовлен из медицинского кожаного покрытия, устойчивого к деформации и УФ излучению, с наполнителем из ППУ, толщиной 100 мм. Предусмотрены места изгиба матраса для секций.

Крепежные изделия, используемые при установке колесных опор, имеют гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы соответствуют ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 17475-80 и ГОСТ 11738-84.

### 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кровать обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения. Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

### 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практики в эксплуатации.

Для чистки изделия можно использовать любые чистящие средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеткой.

### 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001:2015

| Артикул | Габаритные размеры | Кол-во секций |
|---------|--------------------|---------------|
| АТ-К6   | 2185*1025*1030     | 3             |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.



**ARTINOX**


Медицинская металлическая мебель собственного производства

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада \_\_\_\_\_



ПАСПОРТ

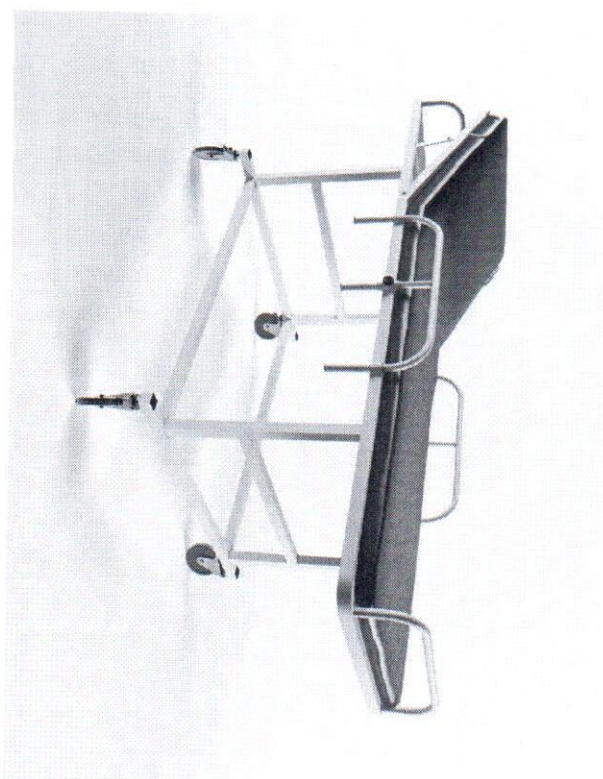

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

Каталог больницы  
серии АР  
ГОСТ 19917-2014



# Каталка больничная AR-A82, AR-A82.1

## 1. Предназначение

Каталка предназначена для транспортировки пациентов. Без матраца возможно использование в моргах и отделениях судебно-медицинской экспертизы.

## 2. Общая характеристика

Каталка состоит из следующих частей:

- несущий каркас;
- ложе с регулируемой спинкой и откидными боковыми ограждениями, матрацем.

## 3. Описание

3.1. Несущий каркас. Жесткая, цельносварная конструкция, выполненный из стального профиля 25х25 мм. ГОСТ 1050. Покрытие эпокси-полиэфирная порошковая краска для группы условий эксплуатации УХЛ4. Караме фиксируются 4 самоориентирующихся колеса Д. 125 мм. из серой резины с индивидуальным тормозом. Регулировка спинной секции - Вручную, ступенчато, 0-50°.

3.2. Колесные опоры обеспечивают легкость передвижения и управления каталкой, крепежные изделия, используемые при сборке кровати имеют гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации.

3.3. Ложе с регулируемой спинкой и откидными боковыми ограждениями: жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из стальной трубы прямоугольного сечения. Каркас спинки- стальная труба 20х20 мм. Боковые и торцевые ограждения изготовлены из трубы Ø20 мм ГОСТ 1050. Ложемент жестко фиксируется к несущей раме с помощью винтового соединения, имеет откидные, легко фиксируемые ограждения, надежную тормозную систему, мягкий матрац, регулируемый по углу наклона спинку.

3.4. Матрац изготовлен из медицинского кожаного материала, устойчивого к деформации и УФ излучению. Матрац заполнен мягким наполнителем. Подъем и опускание спинки каталки осуществляется механически, с помощью саморегулирующегося механизма и ручек, закрепленных на каркасе спинки.

3.5. Крепежные изделия, используемые при сборке кровати должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 17475-80 и ГОСТ 11738-84.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Каталка обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотопляемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выложенными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150  
Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеющая), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул  | Габаритные размеры                                                                                                                              | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR-A82   | ДхШхВ<br>1950х650х950                                                                                                                           | Металл в полимере, регулировка угла наклона спинной секции в диапазоне 0-50° с механической фиксацией;<br>- регулировка высоты боковых барьеров в диапазоне 0-200 мм (автофиксация);<br>- матрац съемный, с полумягким наполнением и чехлом из кожаного материала медицинской серии (1900х600х30, мм)<br>- 4 самоцентрирующихся колеса Ø125 мм (2 – с тормозом)  |
| AR-A82.1 | ДхШхВ, мм – 1950х650х950, с механическим подъемом лажа с гидравлическим приводом, управляемым ножной педалью (диапазон высот от 540 до 930, мм) | Металл в полимере, регулировка угла наклона спинной секции в диапазоне 0-50° с механической фиксацией;<br>- регулировка высоты боковых барьеров в диапазоне 0-200 мм (автофиксация);<br>- матрац съемный, с полумягким наполнением и чехлом из кожаного материала медицинской серии (1900х600х30, мм)<br>- 4 самоцентрирующихся колеса Ø125 мм (2 – с тормозом); |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада **ОТК №1**

ЧУП «Артинокс»



# АРТИНОХ

Медицинская металлическая мебель собственного производства

ПАСПОРТ



Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

Каталка больничная АР-А82.2  
ГОСТ 19917-2014

## 1. Предназначение

Каталка предназначена для транспортировки пациентов. Без матраца возможно использование в моргах и отделениях судебно-медицинской экспертизы.

## 2. Общая характеристика

- несущий каркас;
- несущий каркас;
- съемные носилки с регулируемой спинкой, матрацем.

## 3. Описание

- 3.1. Несущий каркас. Жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из стального профиля 25х25 мм, ГОСТ 1050. Покрытие эпоксид-полиэфирная порошковая краска для группы условий эксплуатации УХЛ4. К раме фиксируются 4 самоориентирующихся колеса Д. 125 мм. из серой резины с индивидуальными тормозом. Регулировка спинной секции - Вручную, ступенчато, 0-50°.
- 3.2. Колесные опоры обеспечивают легкость передвижения и управления каталкой, крепежные изделия, используемые при сборке кровати имеют гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации.
- 3.3. Поле с регулируемой по углу спинкой: жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из стальной трубы прямоугольного сечения. Каркас спинки- стальная труба 20х20 мм. мягкий матрац.
- 3.4. Матрац изготовлен из медицинского кожаного материала устойчивого к деформации и УФ излучению. Матрац заполнен мягким наполнителем. Подъем и опускание спинки каталки осуществляется механически, с помощью самофиксирующегося механизма и ручек, закрепленных на каркасе спинки.
- 3.5. Крепежные изделия, используемые при сборке кровати должны иметь гальваническое покрытие, предотвращающее износ и появление коррозии в процессе эксплуатации. Крепежные элементы должны соответствовать ГОСТ 5916-70, ГОСТ 15522-70, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 17475-80 и ГОСТ 11738-84.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Каталка обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения. При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течение 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул  | Габаритные размеры                                    | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-А82.2 | ДхШхВ, мм<br>1950х650х950, с со<br>съемными носилками | Металл в полимере, регулировка угла наклона спинной секции в диапазоне 0-50° с механической фиксацией.<br>- регулировка высоты боковых барьеров в диапазоне 0-200 мм (автофиксация)<br>- матрац съемный, с полумягким наполнением и чехлом из кожаного материала медицинской серии (1900х600х30, мм)<br>- 4 самоцентрирующихся колеса Ø125 мм (2 – с тормозом); |



Свидетельство о приеме

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 1906667/09.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.


Бригада \_\_\_\_\_ ОТК №1  
ЧУП «Артинокс»



**АРТИНОХ**

Медицинская металлическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ**

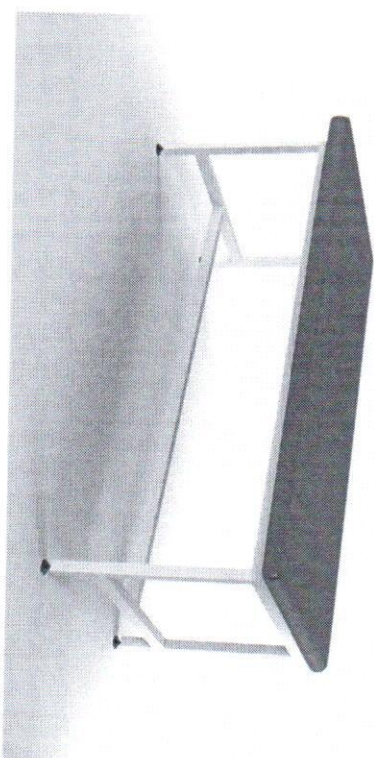

**Кушетка перевязочная АР-А09**

**ГОСТ 19917-93**

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14,  
район д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

# Кушетка перевязочная АР-А09

ГОСТ 19917-93

## 1. Предназначение

Кушетка предназначена для размещения пациента при проведении медицинских манипуляций в лечебно-профилактических, спортивных, санаторно-курортных учреждениях.

## 2. Общая характеристика

Кушетка конструктивно выполнена из следующих элементов:

- каркас с регулируемыми опорами,
- полумягкий лежак

## 3. Описание

Кушетка имеет устойчивое четырех-опорное металлическое основание, на котором размещается лежак. Лежак имеет защитно-декоративное покрытие из кожзаменителя медицинской серии. Для устойчивого размещения кушетки имеет регулируемые опоры.

Основание кушетки цельносварное, выполненным из качественной конструкционной стали в виде жесткого коробчатого каркаса из труб 25х25 мм. Лежак имеет мягкие элементы из поролона толщиной 30 мм. Наружные поверхности лежака имеют облицовку из кожзаменителя медицинской серии, порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Опоры кушетки обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0÷20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

## 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Кушетка обернута бумажной оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затирать обезжиренные винтовые соединения. Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеткой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев) По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001:2015

| Артикул | Характеристика                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-А09  | Металл в полимере, сидение с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии<br>Размеры (ш. * г. * в.): 2100 * 600 * 850 |



Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям ТО ВУ 190666709.001-2019 (ГОСТ 19917-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_ 2019 г.

Бригада \_\_\_\_\_




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14,  
район д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



**АРТИНОХ**

Медицинская металлическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ**

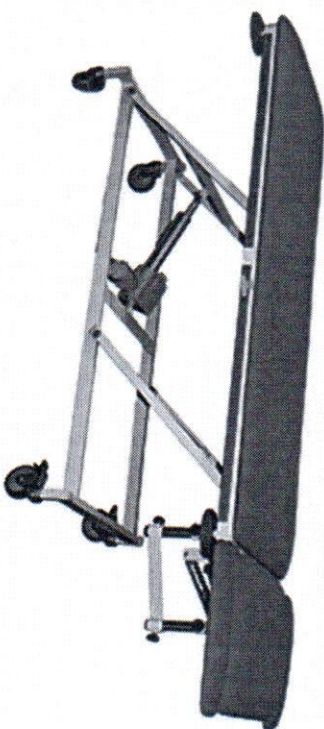

**Кушетка перевязочная АР-А10**  
**ГОСТ 19917-93**

# Кушетка перевязочная АР-А10 ГОСТ 19917-93

## 1. Предназначение

Кушетка предназначена для размещения пациента при проведении хирургических и др. манипуляций в лечебно-профилактических учреждениях.

## 1. Общая характеристика

Кушетка конструктивно выполнена из следующих элементов:

- каркас с колесными опорами,
- гидравлический подъемник
- 3 секции лежака.

## 2. Описание

Кушетка имеет устойчивое четырех-опорное металлическое основание, на котором размещается лежаك. Главная часть имеет возможность изменения угла наклона. Лежак имеет защитно-декоративное покрытие из кожзаменителя медицинской серии. Для устойчивого размещения кушетки имеет колесные опоры. Кушетка имеет поворотные секции для рук

Основание кушетки цельносварное, выполненным из качественной конструкционной стали в виде жесткого коробчатого каркаса из труб 25х25 мм. Лежак имеет мягкие элементы из поролона толщиной 30 мм. Наружные поверхности лежака имеют обшивку из кожзаменителя медицинской серии. Наклон подголовной части лежака регулируется от -30 до +30°. Металлические элементы кушетки имеют защитно-декоративное покрытие из эпоксид-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Опоры кушетки обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах 0÷20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором мощного средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

## 3. Упаковка, транспортировка и хранение

Кушетка обернута бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затирать ослабленные винтовые соединения.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6.Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (12 месяцев)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в размеры, по согласованию с заказчиком, если эти изменения не ухудшают качественные характеристики изделия.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
2. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ.
3. Сертификат соответствия или Декларация соответствия (применимы на территории РФ)
4. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015

| Артикул | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| АР-А10  | <p>Нагрузка на кушетку не более 130 кг.</p> <p>3 секции : для головы, для ног, для рук. Изменение положения секций для головы, рук и ног. Наличие выреза для лица в лицевой секции.</p> <p>Опорные поверхности с полумягким наполнением и защитным покрытием из кожзаменителя медицинской серии.</p> <p>Механизм подъема ложа с гидравлическим приводом, управляемым ножной педалью (диапазон высот от 540 до 850мм). Допустимая нагрузка – 130кг.</p> <p>Размеры Д х Ш х В, мм – 2100 х 600 х540-850.</p> |