

Регистрационные удостоверения
на медицинское изделие:
№ ФСР 2009/04806 от 02.11.2017 г.
№ ФСР 2009/04807 от 02.11.2017 г.

Фитосвечи/фитоворонки - эффективное и доступное средство для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний в домашних условиях. Фитосвечи/фитоворонки оказывают комплексное воздействие на ЛОР-органы и организм в целом: местное прогревание, обезболивание, противовоспалительное и успокаивающее действия.

Патенты РФ: "Устройство и способ лечения заболеваний уха": № 2110241 от 10 мая 1998 года, № 2157160 от 10 октября 2000 года, № 76221 от 20 сентября 2008 года

Описание и механизм действия:

Фитосвеча/фитоворонка ушная.
- имеет форму полый трубочки/конуса, диаметр которой соответствует диаметру наружного слухового прохода,
- длина изделия обеспечивает время горения, необходимое для достижения лечебного эффекта.
Фитосвечи/фитоворонки ушные изготавливаются вручную из натуральных продуктов – пчелиного воска и эфирных масел, которые усиливают лечебные свойства воска.
Фитосвечи/фитоворонки ушные при горении обеспечивают мягкое сухое прогревание, что способствует:
- регуляции давления в барабанной полости,
- снятию боли и воспаления,
- размягчению ушных серных пробок для дальнейшего естественного очищения наружного слухового прохода.
Вещества, образующиеся при сгорании фитосвечи/фитоворонки обладают антисептическим действием.

После процедуры уменьшается отек слизистой носа, облегчается носовое дыхание.
Фитоворонки имеют защитную втулку «NO DROPS», которая обеспечивает безопасность процедуры, оказывают интенсивное кратковременное прогревание.

Показания к применению:

- Фитоворонка ушная:**
- острые воспалительные заболевания уха, горла, носа: риниты, отиты, тонзиллиты, фарингиты, гаймориты, фронтиты
 - ушные серные пробки
 - нарушения сна
- Фитосвеча ушная:**
- хронические заболевания уха, горла, носа: отиты, риниты, гаймориты, тонзиллиты, фарингиты, фронтиты
 - шум в ушах различной этиологии
 - тугоухость
 - головные боли, мигрени
 - нервозность, состояние стресса
 - ушные серные пробки
 - нарушения сна

Противопоказания:

- гнойные выделения из уха;
- повреждения барабанной перепонки и наружного слухового прохода;
- опухолевые процессы в области головы;
- аллергические реакции на продукты пчеловодства и эфирные масла.



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению, мы же гарантируем неизменно высокое качество нашего продукта. Видеоинструкцию по применению фитосвечей / фитоворонки можно найти на нашем сайте www.reamedsamara.ru

Там же Вы найдете много полезной информации о лечении фитосвечами / фитоворонками, истории продукта, отзывы пользователей и комментарии врачей.


Внимание! Процедуру нужно проводить с помощником.

1. Приготовьте две фитосвечи/фитоворонки, х/б салфетку на голову, защитный круг (рис. 1), спички, ватные палочки, стакан с водой, вату.
2. Сделайте легкий массаж ушной раковины, активизируя биоактивные точки.
3. Ложитесь на бок, голову покройте хлопчатобумажной салфеткой с прорезью для уха.
4. Зажгите верхний конец фитосвечи/фитоворонки. Нижний конец (с надписью REAMED), используя защитный круг, установите в наружный слуховой проход. Во время процедуры фитосвеча/фитоворонка должна находиться в вертикальном положении (рис. 2). Во время горения фитосвечи/фитоворонки Вы услышите характерное "потрескивание", почувствуете тепло. Фитосвеча/фитоворонка должна догореть не далее надписи REAMED, после чего затушите ее в стакане с водой (рис. 3).
5. Образовавшийся в ухе желтоватый налет аккуратно уберите ватной палочкой, не проникая глубоко внутрь слухового прохода. Ухо заложите ватой на 10-15 минут.
6. Повторите процедуру для другого уха.


После процедуры не следует мочить голову, переохлаждаться.

Рекомендации по применению:

При острых заболеваниях - 1 раз в день в течение 2-3 дней.
При хронических заболеваниях - 1-2 раза в неделю в течение месяца.
В целях профилактики - 1-2 раза в месяц.

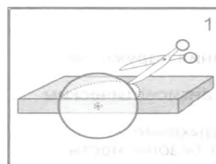

Защитный круг вырезается из упаковочной коробки

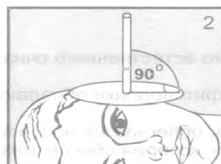

Условия хранения: хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия отпуска: без рецепта.

Изготовитель/организация, принимающая претензии: ООО «РЕАМЕД»
Россия, 443100, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 203/12, комн. 5
тел. (846) 337 55 34
e-mail: reamed@yandex.ru

Сертификаты соответствия:

№ РОСС RU. АД83.Н01339 от 30.11.2017
№ РОСС RU. АД83.Н01340 от 30.11.2017

Технические условия:

ТУ 9398-005-40979717-2004
ТУ 9398-006-40979717-2004

