

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ

Этикетка

ТАИС.942819.001 ЭТ

КОПИЯ ВЕРНА



*Зам. ген. директора
по развитию Ермоленко А.А.*

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.001

заводской номер

Дата выпуска

1.2 Шкаф медицинский ШМ (далее по тексту – шкаф) двухстворчатый с двумя изолированными отделениями, закрываемыми застекленными или металлическими дверцами (с учетом договора на поставку). Шкаф имеет блок-сейф. Предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и лекарств в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых опорах и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.

В Шкаф устанавливаются семь металлических или стеклянных полок (с учетом договора на поставку).

1.4 Шкаф имеет регистрационное удостоверение № ИМ-7.509/1503 Министерства здравоохранения Республики Беларусь в том, что шкаф зарегистрирован и разрешен к применению в медицинской практике на территории Республики Беларусь.

Номер государственной регистрации Мн-7.114550/7.003-1408.

Дата регистрации 27.02.2015 г.

Действительно до 27.02.2020 г.

1.5 Шкаф имеет сертификат соответствия Республики Беларусь, зарегистрированный в реестре национальной системы

подтверждения соответствия Республики Беларусь под № ВУ/112 03.11.048 00070 от 09.11.2015 г., выданный органом по сертификации продукции «Медика», УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».

Республика Беларусь,
220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2А, тел. 299-55-12.
Срок действия сертификата до 08.11.2020 г.



Знак соответствия

1.6 Габаритные размеры шкафа, мм 900 x 450 x 1650

1.7 Масса шкафа, кг 91 ± 2

1.8 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно распределенную нагрузку, кг 15 ± 1

1.9 Средний срок службы шкафа до списания, лет не менее 10

1.10 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты порошковым полимерным покрытием и соответствуют ГОСТ 9.032.

Дезинфекция наружных и внутренних поверхностей производится трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

2.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.001 изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14563250.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.001 в том числе съемные детали: 1Ф8.623.543 1Ф8.675.020 1Ф9.276.024* ТАИС.745511.015* E16.126.094	Шкаф медицинский ШМ	1
	Швеллер	14
	Ключ	3
	Полка	
	Полка	
	Опора	4
	Ключ от замка с секретом	5
ТАИС.320123.585	Упаковка шкафа медицинского (двухстворчатого)	1
ТАИС.942819.001 ЭТ	Этикетка	1

*Тип и количество заполняется в соответствии с договором на поставку

4 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.

4

4.2 ВНИМАНИЕ! ПРИ СБОРКЕ ШКАФА, ДО УСТАНОВКИ ПОЛОК, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

4.3 Установить швеллеры, опоры и полки как указано на рисунке 1.

4.4 Ввинчиванием (вывинчиванием) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок относительно верхней горизонтальной кромки шкафа.

4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

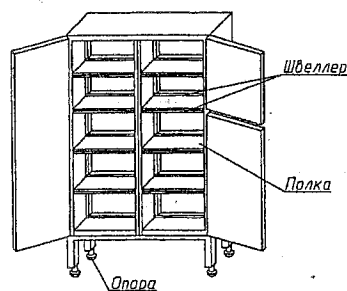
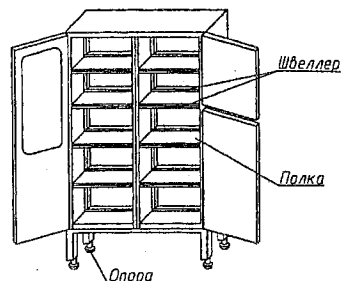


Рисунок 1

5

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ 14563250.026-99 при соблюдении пользователем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 месяцев с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготовитель за свой счет.

5.3 Изготовитель не принимает претензии на неправомерности, возникшие по вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 – 6.4). Стоимость ремонта в этом случае оплачивает организация – владелец шкафа.

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МПОВТ»

Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62

тел. (017) 363-62-30

факс (017) 201-41-39

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50° С до плюс 50° С;

- повышенная влажность до 100% при температуре 35° С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5° С до плюс 40° С и относительной влажности до 80% при 25° С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится шкаф, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

еще-
С до
нтся
дру-
выз-

ОКП РБ 32.50.30.500

Шкаф медицинский ШМ

Этикетка
1Ф4.100.100 ЭТ

КОПИЯ ВЕРНА



*Зам. ген. директора по развитию
Ермоленко А.А.*

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Шкаф медицинский ШМ _____ 1Ф4.100.100 _____

заводской номер

Дата выпуска _____

1.2 Шкаф медицинский ШМ (далее по тексту – шкаф) одностворчатый с двумя изолированными отделениями, закрывающимися застекленной и металлической дверцами с замками, либо двумя металлическими дверцами с замками (с учетом договора на поставку).

ШМ предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и лекарств в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых опорах и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.

В шкаф устанавливаются четыре металлические или стеклянные полки (с учетом договора на поставку).

1.4 Шкаф имеет регистрационное удостоверение № ИМ-7.509/1503 Министерства здравоохранения Республики Беларусь в том, что шкаф зарегистрирован и разрешен к применению в медицинской практике на территории Республики Беларусь.

Номер государственной регистрации Мн-7.112713/7.005-1408.

Дата регистрации 27.02.2015 г.

Действительно до 27.02.2020 г.

1.5 Шкаф имеет сертификат соответствия Республики Беларусь, зарегистрированный в реестре национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь под

№ ВУ/112 03.11.048 00070 от 09.11.2015 г., выданный органом по сертификации продукции «Медика» УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».

Республика Беларусь, 220037, г. Минск,

пер. Товарищеский, 2А, тел. (017) 299-55-12.

Срок действия сертификата до 08.11.2020 г.



Знак соответствия

1.6 Габаритные размеры шкафа, мм 450 x 450 x 1650

1.7 Масса шкафа, кг 45 ± 1

1.8 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно распределенную нагрузку, кг 15 ± 1

1.9 Средний срок службы шкафа до списания, лет не менее 10

1.10 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты порошковым полимерным покрытием и соответствуют ГОСТ 9.032.

Дезинфекция поверхностей шкафа производится трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-16-89.

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

2.1 Шкаф медицинский ШМ ____ 1Ф4.100.100 ____ изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14563250.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение	
		ШМ	ШМ:01
1Ф4.100.100 ____, в том числе съемные детали:	Шкаф медицинский ШМ ____	1	1
1Ф8.623.543	Швеллер	8	8
1Ф8.675.020	Ключ	3	3
1Ф9.276.024*	Полка		
ТАИС.745511.015*	Полка		
E16.126.094	Опора	4	4
	Ключ от замка с секретом	-	5
1Ф4.176.401	Упаковка	1	1
1Ф4.100.100 ЭТ	шкафа медицинского ШМ		
	Этикетка	1	1

*Тип и количество заполняется в соответствии с договором на поставку

4 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.

4.2 Отвернуть на два-три оборота винт, под который установлен угольник крепления стеклянных полок при транспор-

4

тировании. Снять угольник и распаковать полки.

4.3 Довернуть до упора винт, под которым был установлен угольник крепления полок.

4.4 ВНИМАНИЕ! ПРИ СБОРКЕ ШКАФА, ДО УСТАНОВКИ ПОЛОК, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

Установить швеллеры, опоры и полки как указано на рисунке 1.

4.6 Ввинчиванием (вывинчиванием) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок относительно верхней горизонтальной кромки шкафа.

4.7 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

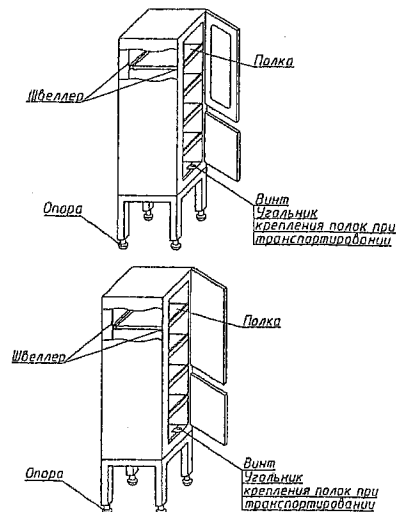


Рисунок 1

5

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ14563250.026-99 при соблюдении пользователем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 месяцев с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготовитель за свой счет.

5.3 Изготовитель не принимает претензии на исправности, возникшие по вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 – 6.4). Стоимость ремонта в этом случае оплачивает организация – владелец шкафа.

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МПОВТ»

Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62

тел. (017) 363-62-30

факс (017) 201-41-39

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С;

- повышенная влажность до 100% при температуре 35°С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности до 80% при 25°С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится шкаф, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ 14563250.026-99 при соблюдении пользователем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 месяцев с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготовитель за свой счет.

5.3 Изготовитель не принимает претензии на неисправности, возникшие по вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 - 6.4). Стоимость ремонта в этом случае оплачивает организация - владелец шкафа.

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МПОВТ»
Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Пригудского, д. 62
тел. (017) 363-62-30

6 Транспортирование и хранение

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- повышенная влажность до 100 % при температуре 35 °С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится шкаф, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.


ОКП РБ 32.50.30.500

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ПМ

ЭТИКЕТКА

ТАИС.942819.001-01 ЭТ

КОПИЯ ВЕРНА

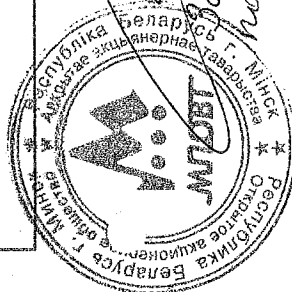

Зам. генерального директора
по развитию Ерма

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС 942819.001-01

Дата выпуска _____ заводской номер _____

1.2 Шкаф медицинский ШМ (далее по тексту - шкаф) двухстворчатый, состоит из трех изолированных отсеков, закрывающихся металлическими дверцами с замками. Шкаф имеет блок-сейф. Предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и лекарств в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых опорах и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердыми покрытиями.

В Шкаф устанавливаются семь металлических полок.

1.6 Габаритные размеры шкафа, мм

900 x 450 x 1650

1.7 Масса шкафа, кг

82 ± 2

1.8 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно

15 ± 1

распределенную нагрузку, кг

1.9 Средний срок службы шкафа до списания, лет

не менее 10

1.10 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты порошковыми полимерными покрытиями и соответствуют ГОСТ 9.032-74.

Дезинфекция наружных и внутренних поверхностей производится трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Лютос" по ГОСТ 25644-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ 6-01-468937-16-89.

2 Свидетельство о приемке

2.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС 942819.001-01 изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14563250.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____

МП _____

личная подпись _____

расшифровка подписи _____

год, месяц, число _____

3 Комплектность

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.001-01	Шкаф медицинский ШМ	1
в том числе съемные детали:		
108.623.543*	Швешпер	3
108.675.020	Ключ	1
ТАИС.74511.015*	Полка	4
В16.126.094	Опора	5
ТАИС.320123.585	Упаковка шкафа медицинского (двухстворчатого)	1
ТАИС.942819.001-01 ЭТ	Этикетка	1

* Количество указывается в соответствии с договором на поставку

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.

4.2 ВНИМАНИЕ! ПРИ СБОРКЕ ШКАФА ДО УСТАНОВКИ ПОЛОК НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

4.3 Установить швешперы, опоры и полки как указано на рисунке 1.

4.4 Вытягиванием (вынуждением) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок относительно верхней горизонтальной кромок шкафа.

4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

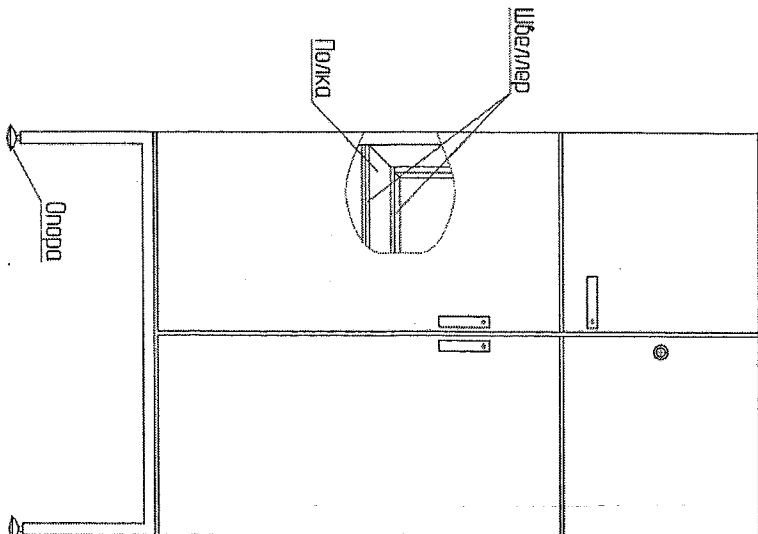


Рисунок 1

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ

ЭТИКЕТКА

ТАИС.942819.001- 02 ЭТ



1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.001- 02

заводской номер

Дата выпуска

1.2 Шкаф медицинский ШМ (далее по тексту - шкаф) двухстворчатый, состоит из трех изолированных отделений, закрывающихся металлическими дверцами с замками. Шкаф имеет блок-сейф. Предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и лекарств в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых опорах и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.

В Шкаф устанавливаются семь стеклянных полок.

1.6 Габаритные размеры шкафа, мм 900 x 450 x 1650

1.7 Масса шкафа, кг 80 ± 2

1.8 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно распределенную нагрузку, кг 15 ± 1

1.9 Средний срок службы шкафа до списания, лет не менее 10

1.10 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты порошковым полимерным покрытием и соответствуют ГОСТ 9.032-74.

Дезинфекция наружных и внутренних поверхностей производится трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-16-89.

2 Свидетельство о приемке

2.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.001-02 изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14563250.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Комплектность

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.001-02	Шкаф медицинский ШМ	1
в том числе съемные детали:		
1Ф8.623.543*	Швеллер	
1Ф8.675.020	Ключ	3
1Ф9.276.024 *	Полка	7
В16.126.094	Опора	4
	Ключ от замка с секретом	5
ТАИС.320123.585	Упаковка шкафа медицинского (двухстворчатого)	1
ТАИС.942819.001-02 ЭТ	Этикетка	1

* Количество заполняется в соответствии с договором на поставку

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.

4.2 ВНИМАНИЕ! ПРИ СБОРКЕ ШКАФА, ДО УСТАНОВКИ ПОЛОК, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

4.3 Установить швеллеры, опоры и полки как указано на рисунке 1.

4.4 Винчиванием (вывинчиванием) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок относительно верхней горизонтальной кромки шкафа.


4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ

ЭТИКЕТКА

ТАИС.942819.001- 02 ЭТ

КОПИЯ ВЕРНА

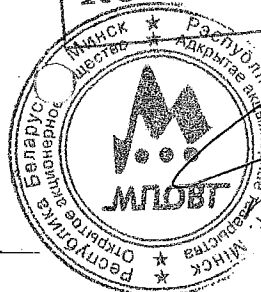

*Вал. Ген. директор
развитию Ермоленко
А.А.*

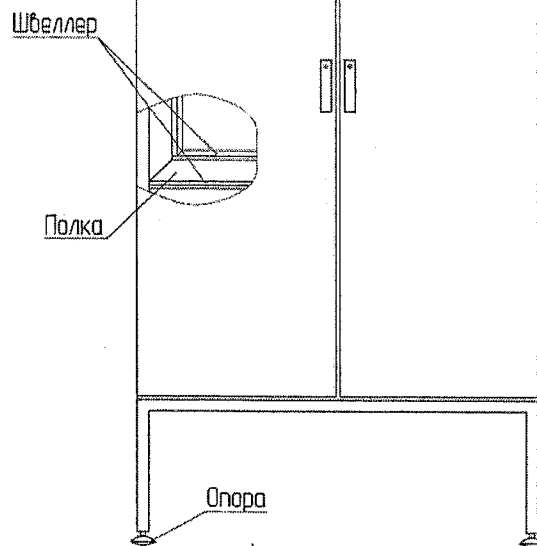


Рисунок 1

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ 14563250.026-99 при соблюдении пользователем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 месяцев с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготовитель за свой счет.

5.3 Изготовитель не принимает претензии на неисправности, возникшие по вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 - 6.4). Стоимость ремонта в этом случае оплачивает организация - владелец шкафа.

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МПОВТ»
Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62
тел. (017) 363-62-30

6 Транспортирование и хранение

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- повышенная влажность до 100 % при температуре 35 °С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится шкаф, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ 14563250.026-99 при соблюдении пользователем условий правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 месяцев с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготовитель за свой счет.

5.3 Изготовитель не принимает претензии на неисправности, возникшие в вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 - 6.4).

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МІОВТ»

Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62
тел. (017) 363-62-30

6 Транспортирование и хранение

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- повышенная влажность до 100 % при температуре 35 °С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранятся и перевозятся шкафы, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

ОКП РБ 32.50.30.500

КОПИЯ ВЕРНА

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ

ЭТИКЕТКА

ТАИС.942819.001-03 ЭТ



Э.А. СТАШКОНОК

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Шкаф медицинский ПМ ТАИС.942819.001-03

заводской номер

Дата выпуска

1.2 Шкаф медицинский ПМ (далее по тексту - шкаф) двухстворчатый, состоит из четырех изолированных отделений, закрывающихся металлическими дверцами с замками. Предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и лекарств в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых опорах и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.

В Шкаф устанавливаются семь металлических полок.

1.6 Габаритные размеры шкафа, мм

900 x 450 x 1650

1.7 Масса шкафа, кг

80 ± 2

1.8 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно

15 ± 1

распределенную нагрузку, кг

1.9 Средний срок службы шкафа до списания, лет не менее 10

1.10 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты порошковыми полимерным покрытием и соответствуют ГОСТ 9.032-74.

Дезинфекция наружных и внутренних поверхностей производится трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

2 Свидетельство о приеме

2.1 Шкаф медицинский ПМ ТАИС.942819.001-03 изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14563250.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Комплектность

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.001-03	Шкаф медицинский ПМ	1
в том числе съемные детали:		
1Ф8.623.543*	Швеллер	3
1Ф8.675.020	Ключ	3
ТАИС.74511.015 *	Полка	4
Е16.126.094	Опора	4
ТАИС.320123.585	Упаковка шкафа медицинского (двухстворчатого)	1
ТАИС.942819.001-03 ЭТ	Этикетка	1

* Количество заполняется в соответствии с договором на поставку

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.

4.2 ВНИМАНИЕ! При сборке шкафа, до установки ПОЛОК, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

4.3 Установить швеллер, опоры и полки как указано на рисунке 1.

4.4 Выравниванием (выравниванием) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок относительно верхней торизонтальной хроми шкафа.

4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

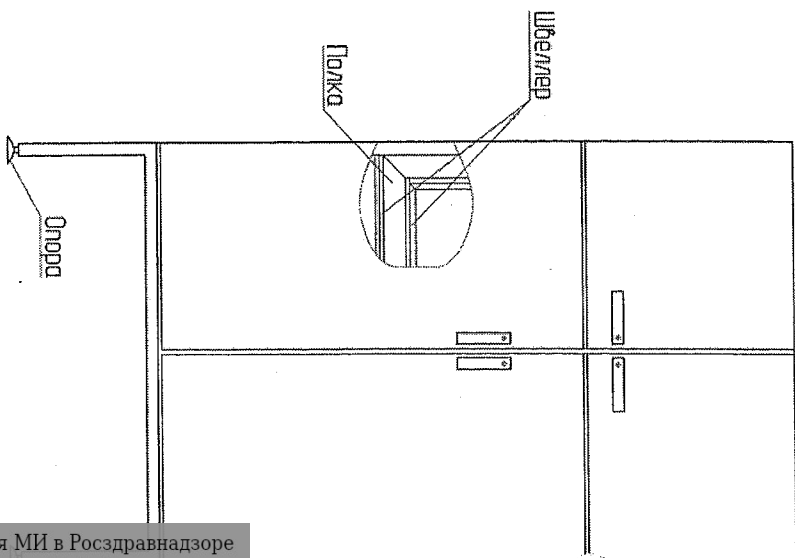


Рисунок 1

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ 14563250.026-99 при соблюдении пользователем условий эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 месяцев с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготовитель за свой счет.

5.3 Изготовитель не принимает претензии на неисправности, возникшие по вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 - 6.4).

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МПОБТ»

Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Пригитского, д. 62
тел. (017) 363-62-30

6 Транспортирование и хранение

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- повышенная влажность до 100 % при температуре 35 °С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится шкаф, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.


ОКП РБ 32.50.30.500

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ

ЭТИКЕТКА

ТАИС.942819.001-04 ЭТ

КОПИЯ ВЕРНА

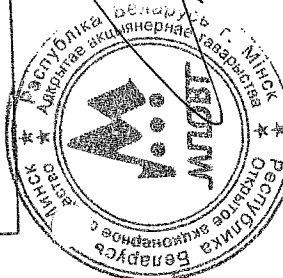

*Зам. Ген. директора
по развитию Ериш*

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Шкаф медицинский ЦМ ТАИС.942819.001-04

заводской номер

Дата выпуска

1.2 Шкаф медицинский ЦМ (далее по тексту - шкаф) двухстворчатый, состоит из четырех изолированных отделений, закрывающихся металлическими дверцами с замками. Предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и лекарств в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых опорах и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.

В Шкаф устанавливаются семь стеклянных полок.

1.6 Габаритные размеры шкафа, мм

900 x 450 x 1650

1.7 Масса шкафа, кг

78 ± 2

1.8 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно

15 ± 1

распределенную нагрузку, кг

1.9 Средний срок службы шкафа до списания, лет

не менее 10

1.10 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты порошковым полимерным покрытием и соответствуют ГОСТ 9.032-74.

Дезинфекция наружных и внутренних поверхностей производится трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ-6-01-4689387-16-89.

2 Свидетельство о приеме

2.1 Шкаф медицинский ЦМ ТАИС.942819.001-04 изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14363250.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Комплектность

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.001-04	Шкаф медицинский ЦМ	1
в том числе съемные детали:		
1Ф8.623.543*	Швеллер	
1Ф8.675.020	Колоч	3
1Ф9.276.024*	Полка	
Е16.126.094	Опора	4
ТАИС.320123.585	Упаковка шкафа медицинского (двухстворчатого)	1
ТАИС.942819.001-04 ЭТ	Этикетка	1
* Количество заполняется в соответствии с договором на поставку шкафа		

4 Подготовка изделия к использованию


4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.

4.2 ВНИМАНИЕ! ПРИ СБОРКЕ ШКАФА, ДО УСТАНОВКИ ПОЛОК, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

4.3 Установить швеллеры, опоры и полки как указано на рисунке 1.

4.4 Выявиванием (выявляванием) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок относительно верхней торизонтальной кромок шкафа.

4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

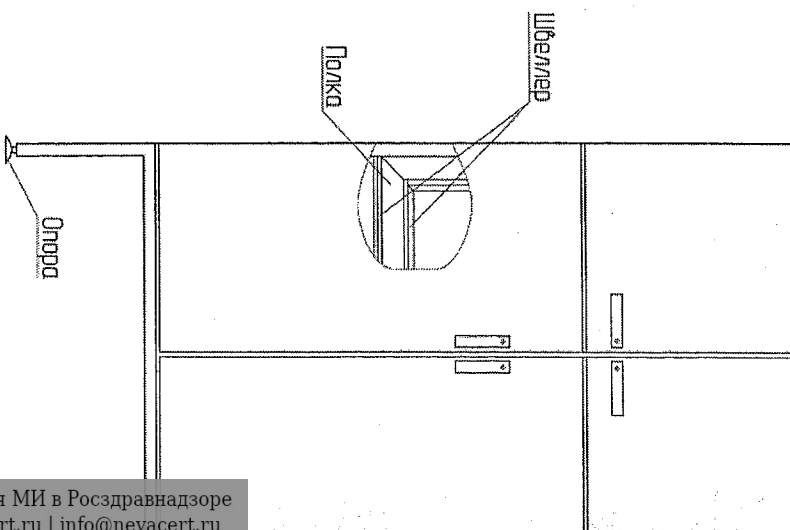

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ 14563250.026-99 при соблюдении пользователем правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 мес с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготовитель за свой

5.3 Изготовитель не принимает претензии на неисправности, возникшие по вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 - Стоимость ремонта в этом случае оплачивает организация - владелец).

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МПОБТ»
Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62
тел. (017) 363-62-30

6 Транспортирование и хранение

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на улаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия

климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;

- повышенная влажность до 100 % при температуре 35 °С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится шкаф, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

ОКП РБ 32.50.30.500

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ

ЭТИКЕТКА

ТАИС.942819.001-05 ЭТ

КОПИЯ ВЕРНА



1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Шкаф медицинский ПМ ТАИС.942819.001-05

заводской номер

Дата выпуска

1.2 Шкаф медицинский ПМ (далее по тексту - шкаф) двухдверчатый, состоит из трех изолированных отделений, запирающихся засекленными дверцами с замками. Шкаф имеет блок-сейф. Предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и лекарств в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых от и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.

В шкаф устанавливаются семь металлических полок.

1.6 Габаритные размеры шкафа, мм

900 x 450 x 1650

1.7 Масса шкафа, кг

82 ± 2

1.8 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно

15 ± 1

распределенную нагрузку, кг

1.9 Средний срок службы шкафа до списания, лет не менее 10

1.10 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты порошковыми полимерными покрытиями и соответствуют ГОСТ 9.032-74.

Дезинфекция наружных и внутренних поверхностей производится трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Лигос" по ГОСТ 25644-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ-6-01-4689387-16-89.

2 Свидетельство о приемке

2.1 Шкаф медицинский ПМ ТАИС.942819.001-05 изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 1456320.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Комплектность

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.001-05	Шкаф медицинский ПМ	1
в том числе съемные детали:		
1Ф8.623.543*	Швепер	14
1Ф8.675.020	Ключ	3
ТАИС.74511.015 *	Полка	4
Е16.126.094	Опора	4
	Ключ от замка с секретом	5
ТАИС.320123.585	Упаковка шкафа медицинского (двуухстворчатого)	1
ТАИС.942819.001-05 ЭТ	Этикетка	1

* Количество записывается в соответствии с договором на поставку

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.

4.2 ВНИМАНИЕ! ПРИ СБОРКЕ ШКАФА, ДО УСТАНОВКИ ПОЛОК, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

4.3 Установить швеперы, опоры и полки как указано на рисунке 1.

4.4 Выравнивается (выравнивается) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок относительно верхней торсионной крошки шкафа.

4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

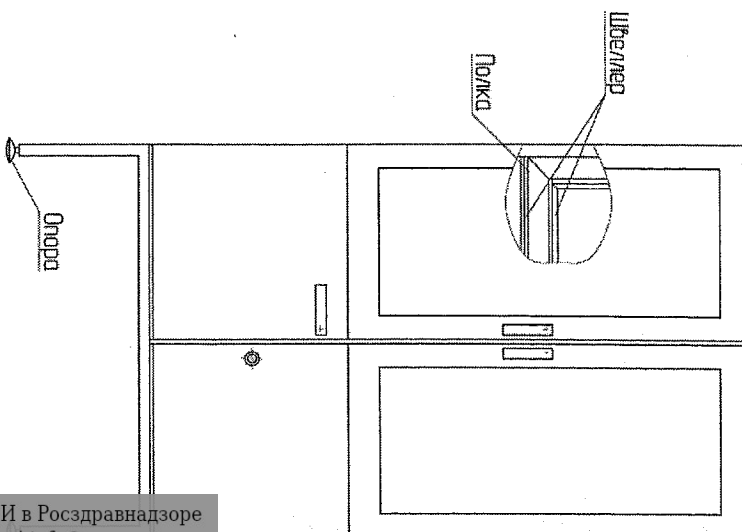


Рисунок 1

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ 14563250.026-99 при соблюдении пользователем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 месяцев с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготовитель за свой счет.

5.3 Изготовитель не принимает претензии на неисправности, возникшие по вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 - 6.4, отсутствие ремонта в этом случае оплачивает организация - владелец).

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МПОБТ»
Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Припыцкого, д. 62
тел. (017) 363-62-30

6 Транспортирование и хранение

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия

климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- повышенная влажность до 100 % при температуре 35 °С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится шкаф, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызывать коррозию.


ОКП РБ 32.50.30.500

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ

ЭТИКЕТКА

ТАИС.942819.001-06 ЭТ

КОПИЯ ВЕРНА

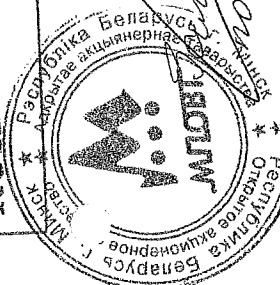

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Шкаф медицинский ЦМ ТАИС.942819.001-06

заводской номер

Дата выпуска

1.2 Шкаф медицинский ЦМ (далее по тексту - шкаф) двухстворчатый, состоит из трех кооперированных отделений, закрывающихся застегиваемыми дверцами с замками. Шкаф имеет блок-сейф. Предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и лекарств в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых опорах и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.

В Шкаф устанавливаются семь стеклянных полок.

1.6 Габаритные размеры шкафа, мм

900 x 450 x 1650

1.7 Масса шкафа, кг

80 ± 2

1.8 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно распределенную нагрузку, кг

15 ± 1

1.9 Средний срок службы шкафа до списания, лет не менее 10

1.10 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты порошковым полимерным покрытием и соответствуют ГОСТ 9.032-74.

Дезинфекция наружных и внутренних поверхностей производится препаратом раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Долос" по ГОСТ 2564-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ-6-01-4689387-16-89.

2 Свидетельство о приеме

2.1 Шкаф медицинский ЦМ ТАИС.942819.001-06 изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14563250.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Комплектность

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.001-06	Шкаф медицинский ЦМ	1
в том числе съемные детали:		
1Ф8.623.543*	Швешпер	14
1Ф8.675.020	Ключ	3
1Ф9.276.024*	Полка	3
Е16.126.094	Опора	4
	Ключ от замка с секретом	5
ТАИС.320123.585	Упаковка шкафа медицинского (двухстворчатого)	1
ТАИС.942819.001-06 ЭТ	Этикетка	1

* Количество заносится в соответствии с договором на поставку

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.

4.2 ВНИМАНИЕ! При сборке шкафа, до установки ПОЛОК, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

4.3 Установить швешперы, опоры и полки как указано на рисунке 1.

4.4 Вытягиваясь (вынимаясь) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранив перекосы створок относительно верхней горизонтальной кромок шкафа.

4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

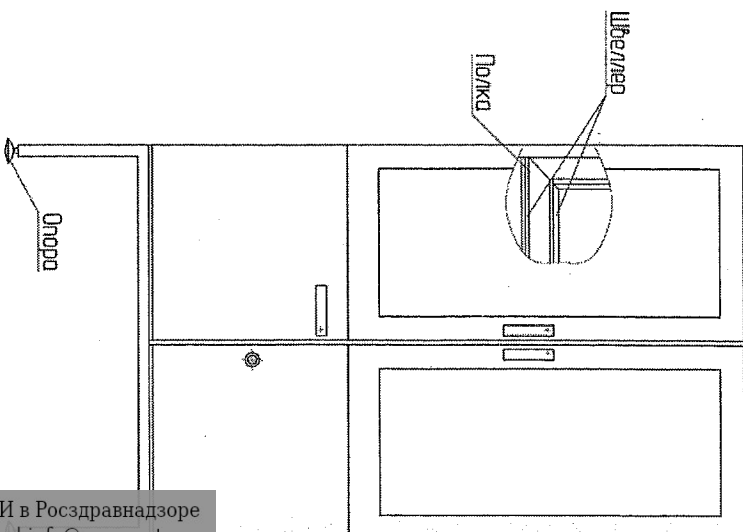


Рисунок 1

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ 14563250.026-99 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 месяцев с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготовитель за свой счет.

5.3 Изготовитель не принимает претензии на неисправность, возникшие по вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 - 6.4). Стоимость ремонта в этом случае оплачивает организация - владелец шкафа.

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МІОВІТ»
Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Припылкого, д. 62
тел. (017) 363-62-30

6 Транспортирование и хранение

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия

климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;

- повышенная влажность до 100 % при температуре 35 °С.

6.2 При перевозке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранятся и перевозятся шкафы, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, паров и газов, которые могут вызвать коррозию.

ОКП РБ 32.50.30.500

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ

ЭТИКЕТКА

ТАИС.942819.001-07 ЭТ

КОПИЯ ВЕРНА



*Ген. директор
разработано*

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.001-07 _____
заводской номер

Дата выпуска _____

1.2 Шкаф медицинский ШМ (далее по тексту - шкаф) двухстворчатый, состоит из четырех изолированных отделений, закрытых застекленными дверцами с замками. Предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и лекарств в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых опорах устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.

В Шкаф устанавливаются семь металлических полок.

1.6 Габаритные размеры шкафа, мм 900 x 450 x 1650

1.7 Масса шкафа, кг 80 ± 2

1.8 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно

распределенную нагрузку, кг 15 ± 1

1.9 Средний срок службы шкафа по списанию, лет не менее 10

1.10 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты

порошковым полимерным покрытием и соответствуют ГОСТ 9.032-74.

Дезинфекция наружных и внутренних поверхностей производится трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Дотос" по ГОСТ 25644-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4680387-16-89.

2 Свидетельство о приеме

2.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.001-07 изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14563250.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Комплектность

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.001-07	Шкаф медицинский ШМ	1
в том числе съемные детали:		
1Ф8.623.543*	Швеллер	14
1Ф8.675.020	Ключ	3
ТАИС.745511.015 *	Полка	4
Е16.126.094	Опора	4
ТАИС.320123.585	Упаковка шкафа медицинского (двухстворчатого)	1
ТАИС.942819.001-04 ЭТ	Этикетка	1
* Количество заполняется в соответствии с договором на поставку		

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.

4.2 ВНИМАНИЕ! ПРИ СБОРКЕ ШКАФА, ДО УСТАНОВКИ ПОЛОК, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

4.3 Установить швеллеры, опоры и полки как указано на рисунке 1.

4.4 Винчиванием (вывинчиванием) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок относительно верхней горизонтальной хромки шкафа.

4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

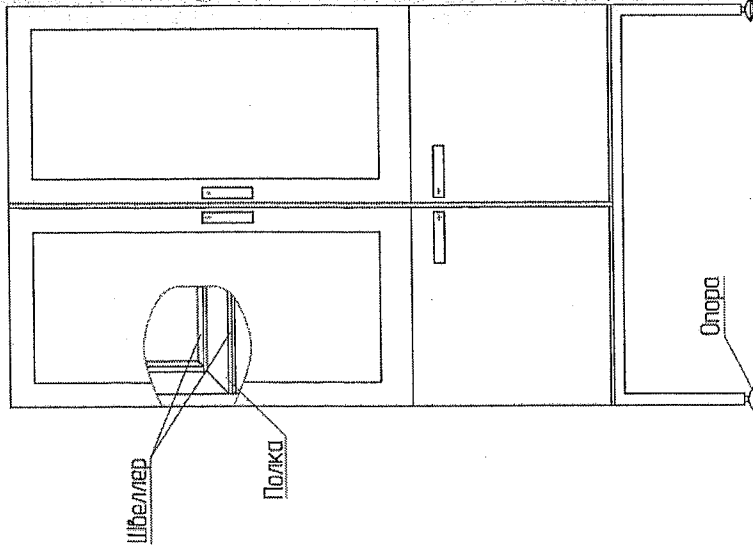


Рисунок 1

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ 14563250.026-99 при соблюдении пользователем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 мес с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготовитель за свой счет.

5.3 Изготовитель не принимает претензии на неисправности, возникшие по вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 - 6.4). Стоимость ремонта в этом случае оплачивает организация - владелец шкафа.

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МПОБТ»
Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62
тел. (017) 363-62-30

6 Транспортирование и хранение

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия

климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;

- повышенная влажность до 100 % при температуре 35 °С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранятся и перевозятся шкафы, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

ОКП РБ 32.50.30.500

ИШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ИШМ

ЭТИКЕТКА

ТАИС.942819.001-08 ЭТ

КОПИЯ ВЕРНА



Ген. директор
по развитию
Ершенин

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.001-08

заводской номер

Дата выпуска

1.2 Шкаф медицинский ШМ (далее по тексту - шкаф) двухстворчатый, состоит из четырех изолированных отселений, закрывающихся застегивающимися дверцами с замками. Предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и лекарств в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых опорах и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.

В Шкафу устанавливаются семь стеклянных полок.

1.6 Габаритные размеры шкафа, мм

900 x 450 x 1650

1.7 Масса шкафа, кг

78 ± 2

1.8 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно распределенную нагрузку, кг

15 ± 1

1.9 Средний срок службы шкафа до списания, лет

не менее 10

1.10 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты порошковым полимерным покрытием и соответствуют ГОСТ 9.032-74.

Дезинфекция наружных и внутренних поверхностей производится трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ-6-01-4689387-16-89.

2 Свидетельство о приемке

2.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.001-08 изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14563220.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Комплектность

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.001-08	Шкаф медицинский ШМ	1
в том числе съемные детали:		
1Ф8.623.543*	Швеллер	14
1Ф8.675.020	Ключ	3
1Ф9.276.024*	Полка	4
Е16.126.094	Опора	4
ТАИС.320123.585	Упаковка шкафа медицинского (двухстворчатого)	1
ТАИС.942819.001-08 ЭТ	Этикетка	1

* Количество заполняется в соответствии с договором на поставку

4 Подготовка изделия к использованию

4.1.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.

4.2 ВНИМАНИЕ! При сборке шкафа, до установки ПОЛОК, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

4.3 Установить швеллера, опоры и полки как указано на рисунке 1.

4.4 Выпитыванием (вывинчиванием) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок относительно верхней горизонтальной крошки шкафа.

4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

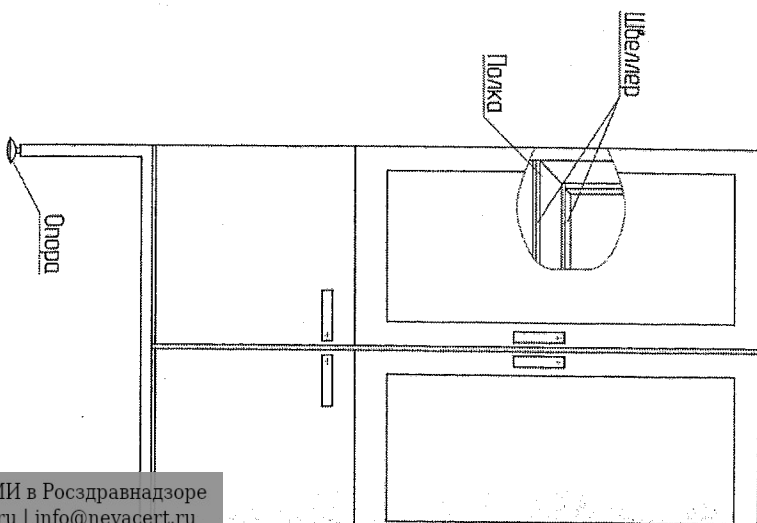


Рисунок 1

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ШМ

Этикетка
ТАИС.942819.002 ЭТ

КОПИЯ ВЕРНА



*Зам. ген. директора по развитию
Ср. Иосифов А.А.*

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.002 _____

заводской номер _____

Дата выпуска _____

1.2 Шкаф медицинский ШМ (далее по тексту — шкаф) двухстворчатый с двумя изолированными отделениями, закрывающимися застекленными (ШМ ТАИС.942819.002) или металлическими (ШМ ТАИС.942819.002-01) дверцами с замками. Предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и лекарств в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых опорах и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.

В Шкаф устанавливаются семь металлических или стеклянных полок (с учетом договора на поставку).

1.4 Шкаф имеет регистрационное удостоверение № ИМ-7.509/1503 Министерства здравоохранения Республики Беларусь в том, что шкаф зарегистрирован и разрешен к применению в медицинской практике на территории Республики Беларусь.

Номер государственной регистрации Мн-7.114550/7.003-1408.

Дата регистрации 27.02.2015 г.

Действительно до 27.02.2020 г.

1.5 Шкаф имеет сертификат соответствия Республики Беларусь, зарегистрированный в реестре национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь под № ВУ/112 03.11.048 00070 от 09.11.2015 г., выданный органом по сертификации продукции «Медика» УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Республика Беларусь,
220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2А, тел. 299-55-12.
Срок действия сертификата до 08.11.2020 г.



Знак соответствия

- | | |
|--|------------------|
| 1.6 Габаритные размеры шкафа, мм | 900 x 450 x 1650 |
| 1.7 Масса шкафа, кг | 91 ± 2 |
| 1.8 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно распределенную нагрузку, кг | 15 ± 1 |
| 1.9 Средний срок службы шкафа до списания, лет | не менее 10 |
| 1.10 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты порошковым полимерным покрытием и соответствуют ГОСТ 9.032. | |

Дезинфекция наружных и внутренних поверхностей производится трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

2.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.002 _____ изго-
овлен в соответствии с техническими условиями
УРБ 14563250.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.
Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.002 _____ в том числе	Шкаф медицинский ШМ	1
съемные детали:		14
1Ф8.623.543	Швеллер	3
1Ф8.675.020	Ключ	
1Ф9.276.024 *	Полка	
ТАИС.745511.015*	Полка	
E16.126.094	Опора	4
ТАИС.320123.585	Упаковка шкафа медицинского (двухстворчатого)	1
ТАИС.942819.002 ЭТ	Этикетка	1

*Тип и количество заполняется в соответствии с договором на поставку

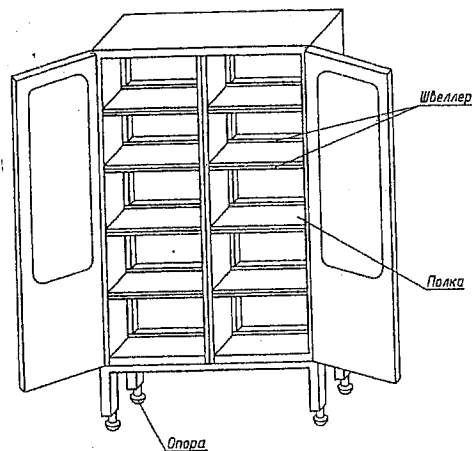


Рисунок 1

4 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного ма-
териала.

4.2 ВНИМАНИЕ! ПРИ СБОРКЕ ШКАФА, ДО УСТАНОВКИ
ПОЛОК, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

4.3 Установить швеллеры, опоры и полки как указано на
рисунке 1.

4.4 Винчиванием (вывинчиванием) опор достигнуть ус-
тойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок
относительно верхней горизонтальной кромки шкафа.

4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверх-
ностей шкафа в соответствии с 1.10.

4

5

Ермоленко А.А.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шка-
фа требованиям ГУРБ 14563250.026-99 при соблюдении пользо-
вателем условий и правил эксплуатации, хранения и транс-
портирования в течение 24 месяцев с даты продажи.

5.2. Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготови-
тель за свой счет.

5.3 Изготовитель не принимает претензии на неисполне-
ние, возникшие по вине пользователя (небрежное обращение,
несоблюдение 6.1 – 6.4). Стоимость ремонта в этом случае оп-
лачивает организация – владелец шкафа.

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МПОВТ»

Республика Беларусь, 220140, г. Минск,

ул. Притыцкого, д. 62

тел. (017) 363-40-01

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку,
может транспортироваться всеми видами транспорта на лю-
бое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных
осадков в соответствии с правилами перевозок, действующи-
ми на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия
климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50°С до плюс
50°С;

- повышенная влажность до 100% при температуре 35°С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке долж-
ны строго выполняться требования манипуляционных знаков
и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помеще-
ниях при температуре окружающего воздуха от плюс 5°С до
плюс 40°С и относительной влажности до 80% при 25°С.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ 145632-026-99 при соблюдении пользователем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 часов с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляется изготовитель за свой

г. 5.3 Изготовитель не принимает претензии на неисправности, возникшие

вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 - 6.4). Инициатором ремонта в этом случае назначается организация - производитель шкафа.

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МПОВТ»

Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62

тел. (017)363-62-30

6 Транспортирование и хранение

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами вовоз, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С, относительная влажность до 100 % при температуре 35 °С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранятся и возмещаются шкафы, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных веществ, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

ОЖП РБ 32.50.30.500

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ САНИТАРНЫЙ
ШМ-С

ЭТИКЕТКА

ТАИС.942819.002-02 ЭТ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Данная этикетка
по результатам экспертизы

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.002- 02 заводской номер

Дата выпуска

1.2 Шкаф медицинский санитарный ШМ-С (далее по тексту - шкаф) ворчатый с металлической дверью с замком (от ционированного открывания двери). Имеет полки и отде" че, зное вертикальной перегородкой, со плангой-вешалкой и кр. и жды.
Предназначен для хранения предметов медицинского назначения, льной одежды, инвентаря и моющих средств в санитарно-бытовых сниях.
Надёжность эксплуатации Шкафа обеспечивается цельносварной ической конструкцией, которая придает жесткость изделию и дается отсутствием острых углов и кромок.
Удобный доступ к внутреннему объёму Шкафа обеспечивается применением петель, позволяющих открыть дверь шкафа на 120 градусов.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых по высоте ножных опорах для выставления горизонтального положения и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.
В Шкаф устанавливаются пять металлических полок.

- 1.4 Габаритные размеры шкафа, мм 600 x 560 x 1880
- 1.5 Масса шкафа, кг 50 ± 2
- 1.6 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно распределенную нагрузку, кг 15 ± 1
- 1.7 Средний срок службы шкафа до списания, лет не менее 10
- 1.8 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты порошковым полимерным покрытием и соответствуют ГОСТ 9.032.

Абсолютно гладкая поверхность покрытия легко очищается и обеспечивает возможность быстро проводить антисептическую обработку внутренних и наружных поверхностей.

Дезинфекция внутренних и наружных поверхностей производится трехпроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % моющего средства типа "Лотос " по ГОСТ 25644-96 или однопроцентным раствором хлорамина по ТУ6-01-4689387-16-8

2 Свидетельство о приемке

2.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.002- 02 изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14563250.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

расшифровка подписи

личная подпись

год, месяц, число

3 Комплектность

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.002- 02 в том числе съемные детали.	Шкаф медицинский ШМ-С	1
Е16.126.094	Опора	4
	Комплект ключей	1
ТАИС.942819.002- 02 ЭТ	Этикетка	1
ТАИС.321371.013	Упаковка ШМ-С ТАИС.942819.002-02, ТАИС.942819.002-03 (Шкаф медицинский санитарный)	1

4 Подготовка изделия к использованию

- 4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.
- 4.2 ВНИМАНИЕ ! ПРИ СБОРКЕ ШКАФА, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОРА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.
- 4.3 Установить опоры как указано на рисунке 1.
- 4.4 Ввинчиванием (ввинчиванием) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок относительно верхней горизонтальной кромки шкафа.

4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

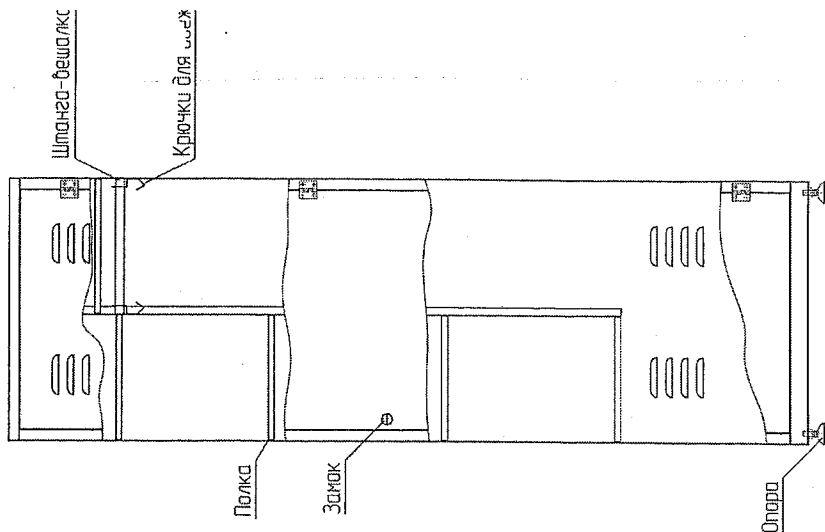


Рисунок 1

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафа требованиям ТУ РБ 14563250.026- 99 при соблюдении пользователем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение 24 месяцев с даты продажи.

5.2 Гарантийный ремонт шкафа осуществляет изготовитель за свой счет.

5.3 Изготовитель не принимает претензии на неисправности, возникшие по вине пользователя (небрежное обращение, несоблюдение 6.1 - 6.4). Стоимость ремонта в этом случае оплачивает организация - владелец шкафа.

5.4 Адрес изготовителя:

ОАО «МНОВТ»
Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62
тел. (017)363-62-30

6 Транспортирование и хранение

6.1 Шкаф, упакованный в соответствии с КД на упаковку, может транспортироваться всеми видами транспорта на любое расстояние при условии защиты от грязи и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;

- влажность до 100 % при температуре 35 °С.

6.2 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей.

6.3 Шкаф в упакованном виде должен храниться в помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при 25 °С.

6.4 В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится шкаф, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

ОКП РБ 32.50.30.500

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ САНИТАРНЫЙ
ШМ-С

ЭТИКЕТКА

ТАИС.942819.002-03 ЭТ



ПИЯ ВЕРНА

С.А. Дани. Ген. директор
по результатам Ершовых

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.002-03

заводской номер

Дата выпуска

1.2 Шкаф медицинский санитарный ШМ-С (далее по тексту - шкаф) односторонний с металлической дверью с замком (от несанкционированного открывания двери). Имеет полки и отсек для одежды, разделенное вертикальной перегородкой, со штатной-вешалкой и крюк для одежды.

Предназначен для хранения предметов медицинского назначения, специальной одежды, инвентаря и моющих средств в санитарно-бытовых помещениях.

Надежность эксплуатации Шкафа обеспечивается цельносварной металлической конструкцией, которая придает жесткость изделию и обеспечивает отсутствие острот углов и кромок.

Удобный доступ к внутреннему объему Шкафа обеспечивается применением петель, позволяющих открыть дверь шкафа на 120 градусов.

1.3 Шкаф стоит на четырех высоких регулируемых по высоте ножках опорах для выставления горизонтального положения и устанавливается на месте эксплуатации на ровной площадке с твердым покрытием.

В Шкафе устанавливаются две металлические полки.

1.4 Габаритные размеры шкафа, мм

1.5 Масса шкафа, кг

600 x 560 x 1880

48 ± 2

1.6 Каждая полка шкафа выдерживает равномерно

распределенную нагрузку, кг

15 ± 1

1.7 Средний срок службы шкафа до списания, лет

не менее 10

1.8 Наружные и внутренние поверхности шкафа покрыты

поролонным полимерным покрытием и соответствуют ГОСТ 9.032.

Абсолютно гладкая поверхность покрытия легко очищается и обеспечивает возможность быстро проводить антисептическую обработку

внутренних и наружных поверхностей.

Дезинфекция внутренних и наружных поверхностей производится

трепроцентным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с

добавлением 0,5 % моющего средства типа "Лотос" по ГОСТ 25644-96

или однопроцентным раствором хлорамина по ГВ-01-4689387-16-8*

2 Свидетельство о приеме

2.1 Шкаф медицинский ШМ ТАИС.942819.002-03 изготовлен в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 14563250.026-99 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Комплектность

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество
ТАИС.942819.002-03	Шкаф медицинский ШМ-С	1
в том числе съемные детали:		
Е16.126.094	Опора	4
	Комплект ключей	1
	Этикетка	1
ТАИС.942819.002-03-ЭТ	Упаковка ШМ-С	1
ТАИС.321371.013-01	ТАИС.942819.002-02, ТАИС.942819.002-03 (Шкаф медицинский санитарный)	1

4 Подготовка изделия к использованию

4.1 Распаковать шкаф и очистить его от упаковочного материала.

4.2 ВНИМАНИЕ! ПРИ СБОРКЕ ШКАФА, НЕОБХОДИМО

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ОПОР ДЛЯ

ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗАМКОВ.

4.3 Установить опоры как указано на рисунке 1.

4.4 Выравниванием (выравниванием) опор достигнуть устойчивого положения шкафа и устранить перекосы створок относительно верхней горизонтальной кромки шкафа.

4.5 Провести дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей шкафа в соответствии с 1.10.

