

ИНСТРУКЦИЯ
(информация по применению)

УТВЕРЖДЕНА
Министерством Здравоохранения Республики Беларусь
Регистрационное удостоверение

Общие положения

Бумага упаковочная «Термокрафтмед «ВОНРИМС», классифицируемая как бумага упаковочная высокопрочная, изготавливается в соответствии с ТУ ВУ100378219.001-2008 (100% натуральное небеленое целлюлозное волокно). Бумага упаковочная «Термокрафтмед «ВОНРИМС» предназначена для упаковывания изделий медицинского назначения, подлежащих стерилизации воздушным методом, в целях сохранения стерильности этих изделий после стерилизации, в процессе их транспортировки и хранения до момента использования по назначению.

Бумага упаковочная «Термокрафтмед «ВОНРИМС» изготавливается в листах, (в рулонах – по дополнительному согласованию с потребителем, шириной от 350 до 1250 мм) и имеет плотность (80+5) г/м.кв. Информация для потребителя размещена на каждой упаковке и включает в себя: наименование продукции, обозначение продукции, наименование страны изготовителя, наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя, размер, количество, масса (только для рулонов), основные потребительские свойства или характеристики, марка бумаги, дату изготовления, срок годности.

Применение бумаги

Бумагу перед применением необходимо освободить от упаковки, осмотреть на предмет механических и иных повреждений.

Медицинское изделие, предназначенное для стерилизации, упаковывается в один или два слоя бумаги. Колющие и режущие медицинские инструменты рекомендуется упаковывать не менее чем в два слоя бумаги. Стандартная схема упаковки выглядит следующим образом (приложение 1).

Медицинские изделия, упакованные в бумагу, укладывают в стерилизованные корзины, коробки и т.п. Стерилизацию медицинских изделий, упакованных в бумагу «Термокрафтмед «ВОНРИМС» осуществляют в стерилизаторах, разрешенных к применению на территории страны потребителя, соблюдая требования инструкции по эксплуатации стерилизаторов и правила загрузки стерилизационной камеры. Режимы стерилизации и контроль качества стерилизации осуществляется в соответствии с принятыми в стране потребителя правилами, методическими указаниями и др. обязательной нормативной документацией.








Срок хранения простерилизованных медицинских изделий, упакованных в бумагу «Термокрафтмед «ВОНРИМС»» - 3 суток. Кратность использования бумаги «Термокрафтмед «ВОНРИМС»» - однократное.

Срок годности бумаги и условия хранения

Срок годности бумаги «Термокрафтмед «ВОНРИМС»» составляет не более 5 лет с даты выпуска.

Хранение бумаги осуществляется в удаленном не менее чем на 1м от обогревателей темном месте, при температуре от +1 до +45°C с относительной влажностью воздуха не более 80%.

Изготовитель: УП ЭСМИКО ул.Есенина 6-1-770 г.Минск 220025 Республика Беларусь
т.(017)3773372, (029)8722799

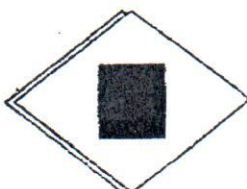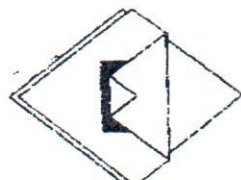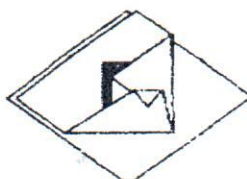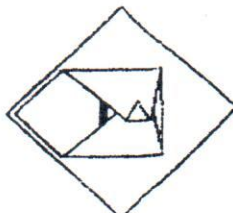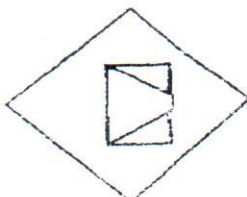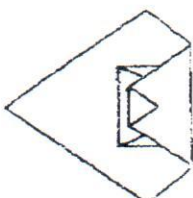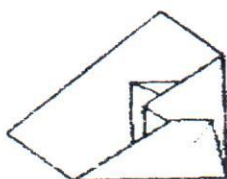

Приложение 1