
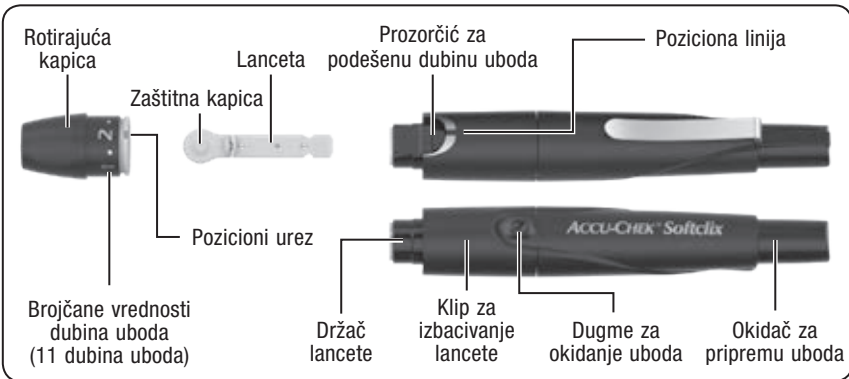
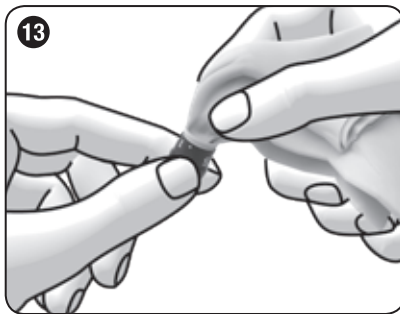
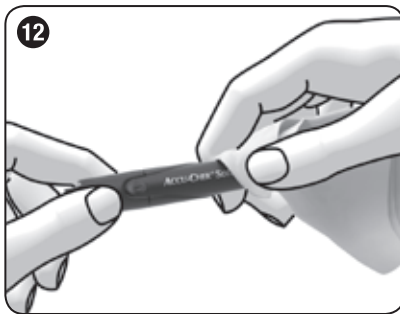
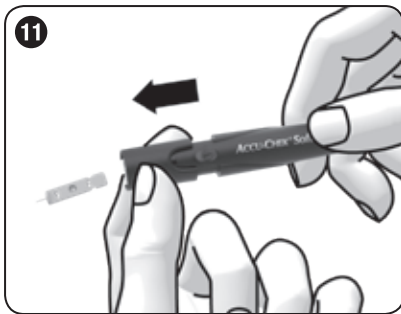
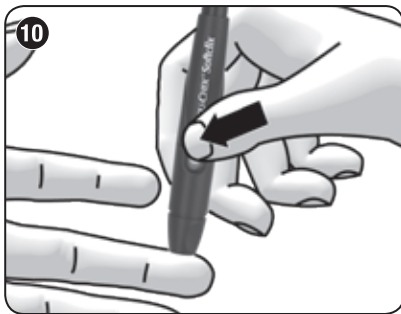
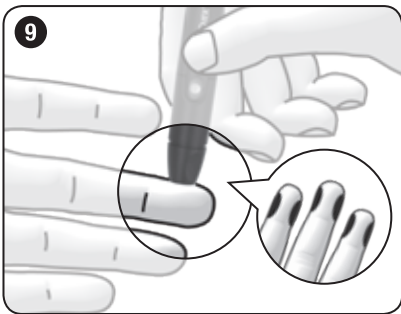
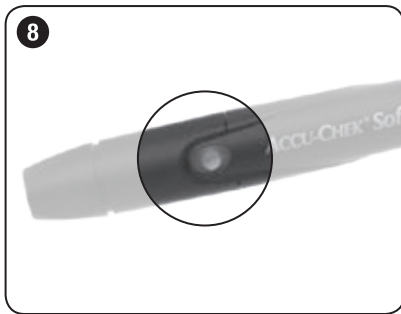
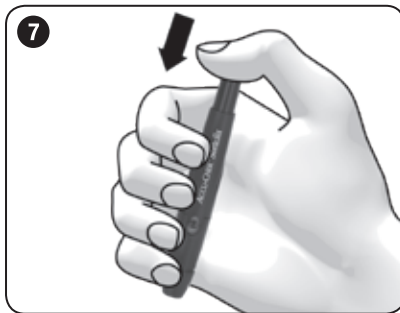
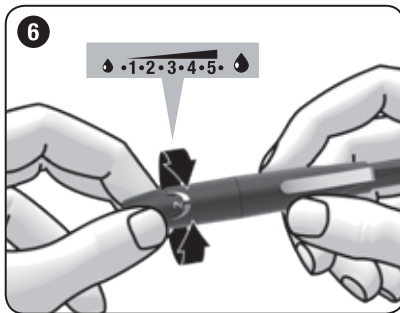
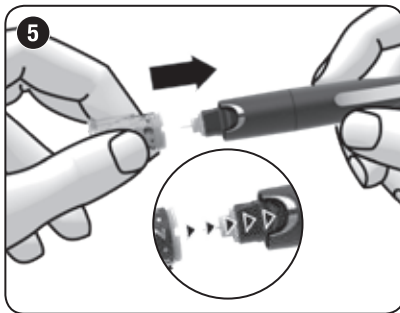
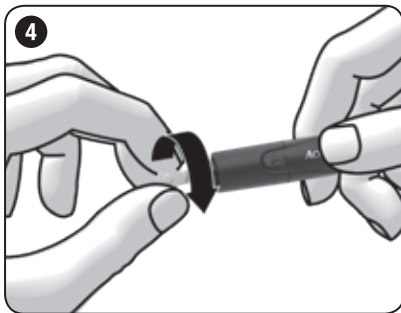
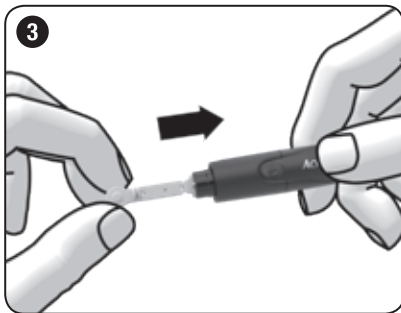
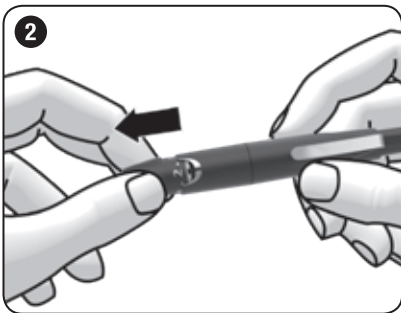


ACCU-CHEK® Softclix

Ланцетар

Устройство для прокалывания кожи

Пристрій для проколювання

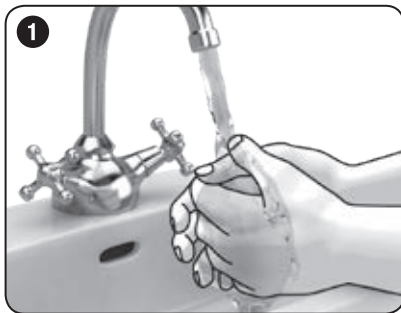

Uputstvo za upotrebu

Accu-Chek Softclix ланцетар је уређај за једноставно, скоро безболно узимање узорка капиларне крви из јagodice прста. Ланцетар има 11 различитих дубина убода, тако да дубину убода можете прилагодити структури ваше коже.


У овом упутству за употребу можете пронаћи следећа 2 симбола:

Овај симбол означава да можете бити изложени ризику од повреде или угрозити своје здравље.

Овај симбол Вам скреће пажњу на поступке који могу довести до оштећења ланцетара.

• **Accu-Chek Softclix ланцетар је наменjen само за личну употребу!** Сме се користити само за узимање узорка крви од **једне исте** особе. Постоји опасност од преношења инфекција ако ланцетар користе и друге особе, укључујући чланове породице, или ако стручно медицинско особље користи овај ланцетар за узимање узорака крви од различитих особа. Овај ланцетар због тога није прикладан за професионалну употребу у здравственим установама.

- Ланцетар и све делове чувajte даље од дохвати деце младе од 3 године. Постоји опасност од гушења ако се прогутaju мали делови (нпр. капике или слично).
- Ако вам ланцетар са уметнутом ланцетом испадне, ланцета се може олабавити у држачу ланцета. У том случају не можете користити ланцетар за узимање узорка крви. У одређеним случајевима може се догодити да ланцета вири из излазног отвора капике, тако да се можете повредити. Зато водите рачуна

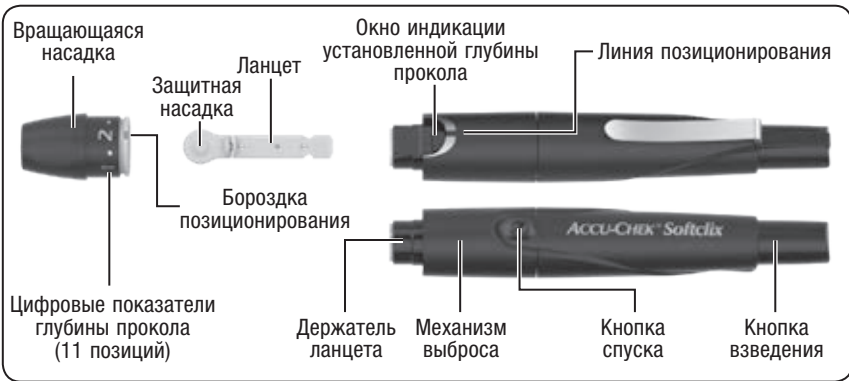

Инструкция по использованию

Устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс представляет собой простой в использовании прибор для практически безболезненного получения капиллярной крови из кончика пальца. Устройство для прокалывания кожи имеет 11 позиций регулировки глубины прокола, таким образом, вы можете выбрать глубину прокола в зависимости от типа кожи.

Данная инструкция по использованию содержит 2 следующих символа:

Данный символ указывает на **возможность получения травмы или причинения вреда вашему здоровью.**

Этот символ указывает на действия, которые могут повлечь за собой **повреждение устройства для прокалывания кожи.**

• **Устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс предназначено только для индивидуального использования!** Его можно использовать для получения капли крови только у **одного и того же** лица. При использовании устройства для прокалывания кожи разными людьми, в том числе членами семьи, или медицинскими специалистами для получения капли крови у разных пациентов существует риск распространения инфекций. Поэтому данное устройство для прокалывания кожи не предназначено для профессионального использования в медицинских учреждениях.

- Храните устройство для прокалывания кожи и все принадлежности к нему вне досягаемости детей до 3 лет. При проглатывании мелких деталей (насадок или т. п.) существует опасность удушья.
- При падении устройства для прокалывания кожи с установленным ланцетом возможно ослабление фиксации ланцета в держателе ланцета. В этом случае использовать устройство для прокалывания кожи для получения капли крови нельзя. В отдельных случаях ланцет может выступить из выходного отверстия насадки, в этом случае вы можете пораниться об него. Поэтому не прикасайтесь к передней части насадки. Если устройство

да не дотириваете переднюю сторону капике. Ако је ланцетар пао на под, пажиљиво га подignite. Скините капичу са ланцетара. Pazите да се не повредите на ланцету. У сваком случају избаците ланцету и уклоните је.

У Accu-Chek Softclix ланцетар стављајте само Accu-Chek Softclix ланцете. Друге ланцете могу утицати на функционисање ланцетара или трајно оштетити ланцетар.

Припрема

Оперите руке топлом водом и сапуном пре узимања узорка крви (види ❶). Руке добро осушите. Time се спречава прјанје места убода и стимулише прокрвљеност.

Уметање ланцете

Да бисте ланцетар могли користити за узимање узорка крви, морате уметнути ланцету.

- ▶ Уклоните капичу са ланцетара (види ❷).
- ▶ Уметните нову ланцету до краја у држач ланцета (види ❸). Ланцета се мора ђујно укlopити.
- ▶ Скините заштитну капичу са ланцете (види ❹).
- ▶ Поново ставите капичу. При томе позициони урез у капичи мора бити у линији са позиционом линијом на ланцетару (види ❺). Капича се мора ђујно укlopити.

Пodeшавање дубине убода

Можете подесити 11 дубина убода (од 0,5 до 5,5). Подешена дубина убода се приказује у прозорчићу. Што је број већи, то је убод дубљи. Уколико још немате искуства са овим ланцетаром, препоручујемо вам да подесите мању дубину убода, нпр. дубину убода 2.

прокалыванияе кожи упало, острожно будимитте его. Снимите насадку с устройства для прокалывания кожи. Будьте острожны с ланцетом, чтобы не пораниться об него. Обязательно удалите ланцет и утилизируйте его.

Вставляйте в устройство для прокалывания кожи Акку-Чек Софткликс только ланцеты Акку-Чек Софткликс. Другие ланцеты могут помешать бесперебойной работе устройства для прокалывания кожи или повредить устройство для прокалывания кожи.

Подготовка

▶ Перед получением капли крови вымойте руки теплой водой с мылом (см. ❶). Хорошо высушите руки. Это позволяет сократить загрязнение в месте прокола и стимулирует кровоток.

Установка ланцета

Перед получением капли крови с помощью устройства для прокалывания кожи необходимо установить ланцет.

- ▶ Снимите насадку с устройства для прокалывания кожи (см. ❷).
- ▶ Вставьте до упора в держатель ланцета новый ланцет (см. ❸).
- ▶ Снимите защитную насадку с ланцета (см. ❹).
- ▶ Снова установите насадку. При этом бороздка позиционирования на насадке и линия позиционирования на устройстве для прокалывания кожи должны составлять одну линию (см. ❺). Насадка должна зафиксироваться с щелчком.

Настройка глубины прокола

Вы можете выбрать 1 из 11 возможных установок глубины прокола (от 0,5 до 5,5). Установленная глубина прокола будет показана в окне индикации. Чем больше цифра, тем больше глубина прокола. Если у вас еще нет опыта использования этого устройства для прокалывания кожи, мы рекомендуем установить не очень большую глубину прокола, например, 2.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Окрећите капичу све док не наместите ђелјену дубину убода (види ❻).

Припрема ланцетара

Ланцетар мора бити припремљен, како бисте могли узимати узорак крви.

- ▶ Пritisните до краја окidaч за припрему убода (види ❷). При томе немојте истовремено прitisнути дугме за окidanje убода.

Ланцетар је спреман за коришћење када је средина дугме за окidanje убода ђуте боје (види ❸).

Ланцетар припремите непосредно пре узимања узорка крви.

Узимање кapi крви

У принципу се узорак крви може узети из сваког прста. Не треба узимати узорак из прста на коме, нпр. постоји инфекција коже или нокта. Препоручујемо да узимате узорак капиларне крви из бојне стране jagodice прста, где је бол најманиј.

- Сваки пут када узимате узорак крви користите нову ланцету. Time се смањиваје ризик од инфекције, а узимање узорка крви је скоро безболно.
- Ланцетар користите **само** са причвршћеном капичом. Без капике, ланцетару продире предубоко и убод може бити болан.

- ▶ Пritisните чврсто ланцетар на ђелјено место убода (види ❹).
- ▶ Пritisните дугме за окidanje убода (види ❺).

Ланцета се активира и продире у кожу.

- ▶ Поспешите стварање кapi крви тако што ћете прст масирати у смеру jagodice.

Кoliчина крви која ће се појавити на месту убода зависи од задате дубине убода, као и од притиска којим је ланцетар прitisнут уз кожу.

Уколико је добијена кoliчина крви недоволјна, приликом наредног узимања узорка крви јаће прислоните ланцетар. Уколико је кoliчина крви и даље недоволјна, поновите поступак, али овај пут подесите да дубина убода буде већа.

Уколико се добије превелика кoliчина крви, смањите дубину убода.

- ▶ Након што сте узели узорак крви одмах измерите глукозу у крви на начин описан у упутству за употребу вашег апарата за мерење глукозе у крви.

Препоручујемо Вам да након тога заштитите место убода да би остало чисто.

Иzbаcивање искоришћене ланцете

- ▶ Скините капичу са ланцетара (види ❷).
- ▶ Гурните клип за избацивање ланцете напред (види ❸).

Искоришћена ланцета се избације.

- ▶ Поново ставите капичу.

- ▶ Уклоните искоришћене ланцете у складу са важећим прописима у вашој земљи.

Уклоните искоришћене ланцете тако да не постоји могућност повреде иглама.

Чување ланцетара

Никада не остављајте ланцетар у стану у којем је спреман за употребу и немојте га излагати екстремним температурама, нпр. у pregрежаном аутомобилу. То може утицати на функционалност ланцетара.

Ланцетар увек одложите без уметнуте ланцете.

Чишћење и дезинфиковање ланцетара и капике

Како би се спречило преношење инфекција, ланцетар и капичу морате редовно чистић и дезинфиковати:

- најмање једном недељно,
- уколико на њима приметите трагове крви,
- сваки пут пре него што друга особа узме ланцетар у руку, нпр. да вам помогне.

Потребне су вам крпиче без кончића, у које можете у потпуности умотати ланцетар, вода и 70 %-тни изопропанол.

Пре дезинфиковања ланцетара и капике морате их најпре очистић, како бисте уклонили крв и осталу прљавштину.

Да бисте избегли оштећивање ланцетара и капике:

- Не потапајте ланцетар и капичу у течности.
- За чишћење користите само воду, а за дезинфекцију само 70 %-тни изопропанол.

- ▶ Скините капичу са ланцетара (види ❷).
- ▶ Избаците искоришћену ланцету (види ❸).

Чишћење

- ▶ Навлажите крпичу са мало воде.
- ▶ Темелјно обришите ланцетар и капичу, ланцетар само са спољашње стране (види ❹), а капичу са спољашње и унутрашње стране (види ❺).
- ▶ Ланцетар и капичу осушите сувом крпичом.

Дезинфиковање

- ▶ Добро навлажите крпичу 70 %-тним изопропанолом.
- ▶ Ланцетар и капичу темелјно бришите по 2 минута, ланцетар само са спољашње стране, а капичу са спољашње и унутрашње стране.

- ▶ Поново ставите капичу.
- ▶ Ланцетар у потпуности умотајте у крпичу.
- ▶ Умотани ланцетар оставите да лежи 8 минута.
- ▶ Након тога одмотајте ланцетар и пустите да се осуши на ваздуху.

Друга места за узимање узорака крви

Узорке капиларне крви, које користите за мерење нивоа глукозе у крви, можете узети не само из jagodica прстију, него и из других места на телу (меснати делови длана, подлактица, надлактица, list или бутина) и то се назива „узимање узорака са алтернативних места“ (енглески: Alternative Site Testing, скраћено: AST). Како бисте могли узимати узорак капиларне крви из других места на телу, морате заменити нормалну капичу са специјалном Accu-Chek Softclix AST-капичом.

Информације за наручивање

Уколико ђелите наручити Accu-Chek Softclix ланцетар, Accu-Chek Softclix ланцете или Accu-Chek Softclix AST капичу, обратите се вашој Служби за кориснике (погледајте одељак “Кориснички и сервисни центар”).

Последње ажурирање

2019-04

Кориснички и сервисни центар

Србија
Кориснички и сервисни центар:
Тел: 011 2471 990
diabetes.care@adoc.rs
Овлашћени представник/Distributor:
ADOC d.o.o. Beograd,
Милорада Јовановића 11, Beograd, Србија.
Број решења: 515-02-01864-19-003 од 19.08.2019.

	Пажиња, водити рачуна о сигурносним напоменама у упутству за употребу овог производа.
	Само за једнократну употребу
	Upotrebљиво до
	Стерилизација зрачењем
	Произвођач
	Каталошки број
	Број серије
	Globalni број трговинске јединице
	Овај производ испуњава захтеве Европске Директиве 93/42/EEC о медицинским средствима.

0123

ACCU-CHEK i SOFTCLIX су заштитени ђигови фирме Roche.
© 2020 Roche Diabetes Care
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Germany
www.accu-check.com

	Внимание! Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в инструкции по использованию этого продукта.
	Только для однократного применения
	Использовать до
	Стерилизованы облучением
	Производитель
	Каталожный номер
	Номер партии
	Международный Торговый Идентификационный Номер
	Данный продукт отвечает требованиям Европейской Директивы 93/42/EEC по медицинским изделиям.

0123















ACCU-CHEK, SOFTCLIX, АККУ-ЧЕК и СОФТКЛИКС – товарные знаки фирмы Roche.
© 2020 Roche Diabetes Care
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Germany
www.accu-check.com



Accu-Chek® Softclix

Lancetar

Пристрій для проколювання

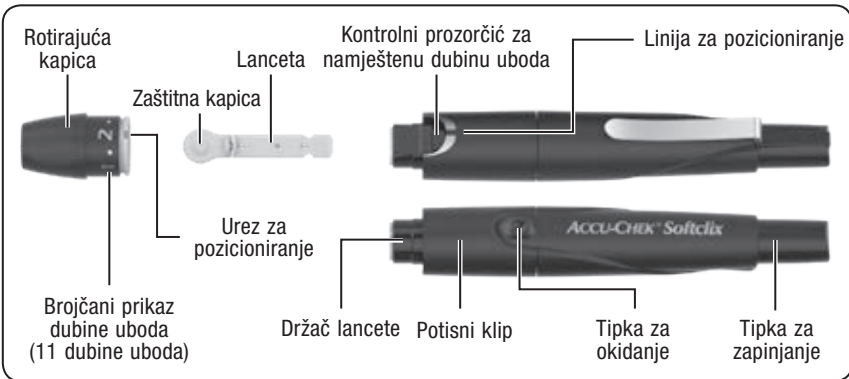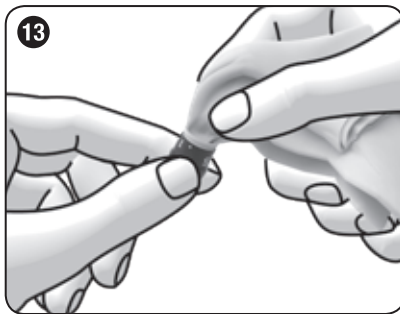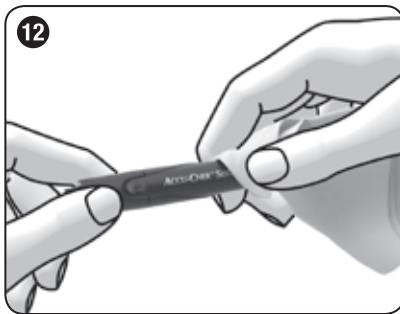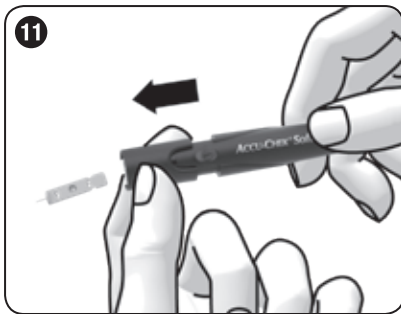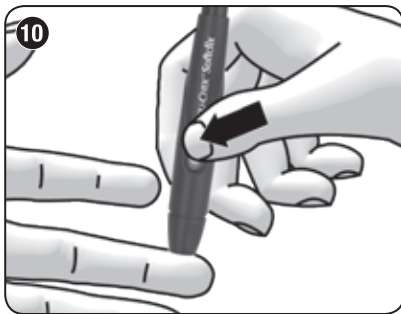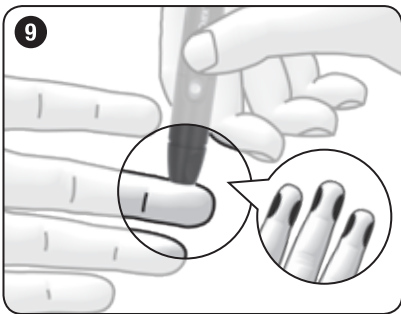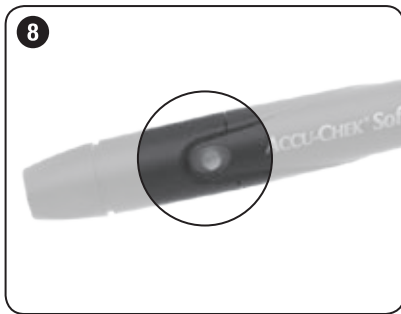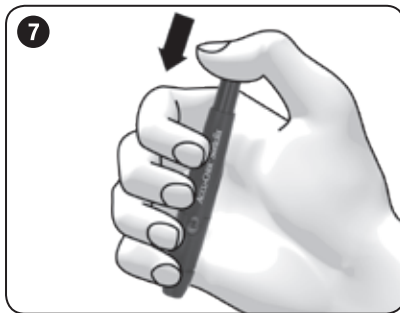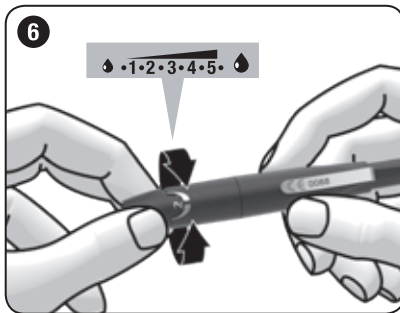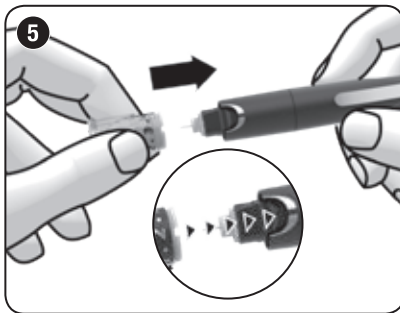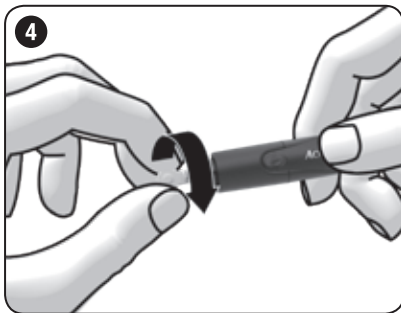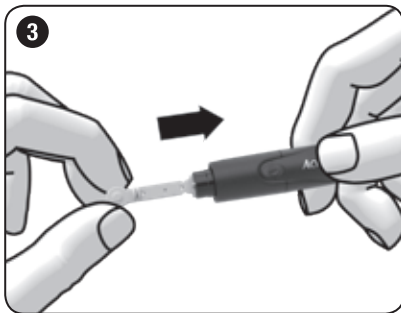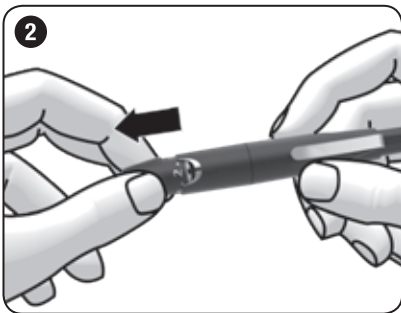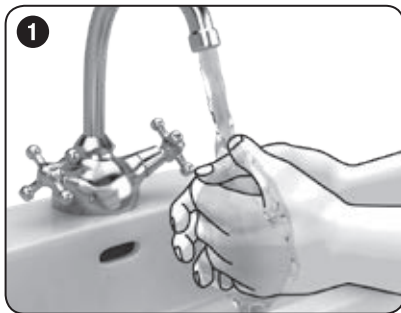

Upute za uporabu

Lancetar Accu-Chek Softclix je uređaj za jednostavno, gotovo bezbolno vađenje uzoraka kapilarne krvi iz jagodica prstiju. Lancetar omogućuje 11 različitih dubina uboda tako da se dubina uboda može prilagoditi stanju vaše kože.

Ove upute za uporabu sadrže sljedeća 2 simbola:

Ovaj simbol upozorava da **možete biti izloženi riziku od ozljede ili ugrožavanja vašeg zdravlja**.

Ovaj simbol upozorava na postupke koji bi mogli **oštetiti lancetar**.

Lancetar Accu-Chek Softclix namijenjen je samo za osobnu uporabu! Njime se smije vaditi krvi samo **jedne te iste** osobe. Kada lancetar zajednički koristi više osoba, čak i onda kada su to članovi iste obitelji, ili kada ih liječnik koristi za uzimanje uzoraka krvi od više različitih osoba, tada postoji rizik od prijenosa infekcije. Ovaj lancetar stoga nije prikladan za profesionalno korištenje u zdravstvenim ustanovama.

- Lancetar, uključivši i sve njegove dijelove, čuvajte izvan doseg djece mlađe od 3 godine. Ako se manji sastavni dijelovi lancetara (npr. kapice ili sl.) progutaju, postoji opasnost od gušenja.
- Ako lancetar s umetnutom lancetom padne na pod, lanceta može ispasti iz svog držača. Tada više ne možete vaditi krv. U pojedinim slučajevima lanceta može viriti iz izlaznog otvora kapice tako da se na nju možete ozlijediti. Zato

pazite da ne dodirujete prednju stranu kapice. Ako je lancetar pao na pod, oprezno ga podignite. Skinite kapicu s lancetara. Pazite da se ne ozlijedite na lancetu. U svakom slučaju lancetu izbacite i uklonite.

U lancetar Accu-Chek Softclix umećite samo lancete Accu-Chek Softclix. Druge lancete mogu uzrokovati nepravilan rad ili kvar lancetara.

Priprema

► Prije vađenja krvi operite ruke toplom vodom i sapunom (vidi sliku **1**). Dobro ruke posušite. Time se smanjuje mogućnost zagađenja mjesta uboda i pospešuje prokrvljenje.

Umetanje lancete

Da biste s lancetom mogli izvaditi krv morate u nj umetnuti lancetu.

- Skinite kapicu s lancetara (vidi sliku **2**).
- Umetnite novu lancetu u držač lancete do kraja (vidi sliku **3**).
- Lanceta se mora čujno uglaviti na svoje mjesto.
- Odvrnite zaštitnu kapicu s lancete i skinite je (vidi sliku **4**).
- Ponovo namjestite kapicu. Pri tome moraju urez za pozicioniranje na kapici i crta za pozicioniranje na lancetaru biti u istoj ravni (vidi sliku **5**). Kapica se mora čujno uglaviti na svoje mjesto.

Namještanje dubine uboda

Možete namjestiti 11 dubina uboda (od 0,5 do 5,5). Namještena dubina uboda prikazuje se u kontrolnom prozorčiću. Što je veći broj, to je veća i dubina uboda.

Ako još nemate iskustva s ovim lancetom, preporučujemo da namjestite manju dubinu uboda, npr. dubinu uboda 2.

► Zakrećite kapicu dok ne namjestite željenu dubinu uboda (vidi sliku **6**).

Zapinjanje lancetara

Kako biste mogli vaditi krv prvo morate zapeti lancetar.

► Pritisnite tipku za zapinjanje do kraja (vidi sliku **7**). Pri tom nemojte istovremeno pritisnuti tipku za okidanje.

Lancetar je pravilno zapet kada je sredina tipke za okidanje žuta (vidi sliku **8**).

Lancetar zapnite neposredno prije vađenja krvi.

Vađenje kapljice krvi

Općenito govoreći krv se može vaditi iz bilo kojeg prsta. Neki prsti mogu biti neprikladni za vađenje krvi, npr. u slučaju infekcije kože ili nokta. Preporučujemo vađenje kapilarne krvi iz bočne strane jagodice prsta jer je taj dio najmanje osjetljiv na bol.

► Kod vađenja krvi svaki put koristite novu lancetu. Time se smanjuje rizik od infekcije, a vađenje krvi je gotovo bezbolno.

- Lancetar koristite **samo** ako je kapica na svom mjestu. Korištenjem lancetara bez kapice, lanceta će prodrijeti pređuboko i ubod će biti bolan.

► Čvrsto pritisnite lancetar na odabrano mjesto uboda (vidi sliku **9**).

► Pritisnite tipku za okidanje (vidi sliku **10**). Lanceta je otpuštena i stvara ubod na koži.

► Nježno masirajte prst prema jagodici dok se ne pojavi kapljica krvi.

Količina krvi koju ćete dobiti ovisi o odabranoj dubini uboda i jačini pritiska lancetara na površinu kože.

Ako je dobivena količina krvi premala, pokušajte ponovo, ali ovoga puta lancetar jače pritisnite uz kožu. Ako još uvijek ne dobivate dovoljnu količinu krvi, ponovite postupak s većom dubinom uboda.

Ako dobivate previše krvi, smanjite dubinu uboda.

► Izvršite mjerenje glukoze u krvi odmah nakon što ste izvadili krv prema uputama za uporabu vašeg aparata za mjerenje glukoze u krvi.

Nakon vađenja krvi preporučeno je zaštititi mjesto uboda kako biste ga održali čistim.

Izbacivanje upotrijebljene lancete

► Skinite kapicu s lancetara (vidi sliku **2**).

► Potisni klip potisnite prema naprijed (vidi sliku **11**).

Iskorištena lanceta bit će izbačena.

- Ponovo namjestite kapicu.
- Iskorištene lancete zbrinite u skladu s važećim propisima vaše zemlje.

Iskorištene lancete zbrinite na način kojime će se onemogućiti ozljeđivanje iglom.

Čuvanje lancetara

Nemojte čuvati lancetar u zapetom stanju i ne izlažite ga visokim temperaturama, npr. u zagrijanom automobilu. To može utjecati na njegovu funkciju.

Lancetar čuvajte uvijek bez umetnute lancete.

Čišćenje i dezinfekcija lancetara i kapice

Da bi se spriječio prijenos infekcije lancetar i kapicu morate redovito čistiti i dezinficirati:

- najmanje jedanput tjedno,
- kada na njima zaostane krvi,
- uvijek kada netko drugi uzme lancetar u ruke, npr. da bi vam pomogao.

Za to su vam potrebne krpe koje ne ispuštaju vlakna, u koje se lancetar može potpuno zamotati, voda i 70%-tni izopropanol. Prije dezinfekcije lancetar i kapicu morate očistiti od krvi i drugih onečišćenja.

Da se lancetar i kapica ne bi oštetili:

- Nikad ne potapajte lancetar i kapicu u tekućine.
- Za čišćenje koristite vodu, a za dezinfekciju samo 70%-tni izopropanol.

- Skinite kapicu s lancetara (vidi sliku **2**).
- Izbacite lancetu (vidi sliku **11**).

Čišćenje

- Vodom lagano navlažite krpu.
- Temeljito obrišite lancetar i kapicu, lancetar samo izvana (vidi sliku **12**), a kapicu izvana i iznutra (vidi sliku **13**).
- Posušite lancetar i kapicu suhom krpom.

Dezinfekcija

- Dobro namočite krpu 70%-tnim izopropanolom.
- Temeljito brišite 2 minute zasebno lancetar i kapicu, lancetar samo izvana, a kapicu izvana i iznutra.
- Ponovno postavite kapicu.
- Lancetar potpuno zamotajte u krpu.
- Ostavite lancetar da zamotan odstoji 8 minuta.

► Ponovno odmotajte lancetar i ostavite ga da se osuši na zraku.

Druga mjesta za uzimanje kapljice krvi

Kapilarnu krv namijenjenu za mjerenje glukoze u krvi možete izvaditi ne samo iz jagodica prstiju, već i iz drugih mjesta na tijelu (jastučica dlana, podlaktice, nadlaktice, lista ili bedra), takozvana mjerenja iz alternativnih mjesta na tijelu (engleski: Alternative Site Testing, skraćeno: AST). Da biste mogli kapilarnu krv vaditi iz drugih mjesta na tijelu morate običnu kapicu zamijeniti posebnom kapicom – AST kapicom Accu-Chek Softclix.

Podaci za narudžbu

Ukoliko želite naručiti lancetar Accu-Chek Softclix ili lancete Accu-Chek Softclix ili AST kapicu Accu-Chek Softclix, obratite se službi podrške za korisnike (vidi odlomak “Služba podrške za korisnike”).

Posljednja izmjena

2019-04

Služba podrške za korisnike

Hrvatska
Služba podrške za korisnike:
Besplatna telefonska linija:
0800 60 00 60


	Pozor, slijedite sigurnosne naputke u uputama za uporabu ovog proizvoda.
	Samo za jednokratnu uporabu
	Upotrijebljivo do
	Sterilizirano pomoću radijacije
	Proizvođač
	Kataloški broj
	Oznaka serije
	Globalni broj trgovačke jedinice
	Ovaj proizvod odgovara zahtjevima Europske Direktive 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima.

CE 0123

ACCU-CHEK i SOFTCLIX su zaštićeni znakovi tvrtke Roche.

© 2020 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Germany
www.accu-check.com

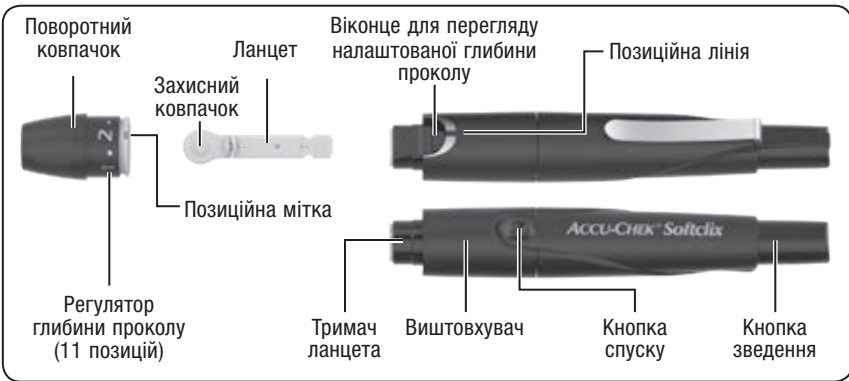

Інструкція із застосування

Пристрій для проколювання Accu-Chek Softclix (Акку-Чек Софтклікс) призначений для простого, практично безболісного взяття капілярної крові з кінчика пальця. Пристрій для проколювання має 11 позицій регулювання глибини проколу, що дає змогу користувачеві вибрати індивідуальну глибину проколу залежно від типу шкіри.

У даній інструкції використовуються такі 2 символи:

Цей символ вказує на **можливість травмування або заподіяння шкоди Вашому здоров'ю**.

Цей символ вказує на **дії, які можуть призвести до пошкодження пристрою для проколювання**.

Пристрій для проколювання Акку-Чек Софтклікс призначений для індивідуального використання! Його слід використовувати для взяття крові лише в **однієї** людини.

Щоб уникнути ризику передавання інфекції, пристрій для проколювання не дозволяється використовувати декількома особами, навіть якщо вони є членами однієї родини, а також його не можна застосовувати лікарям для взяття крові у різних людей. Таким чином даний пристрій для проколювання не призначений для професійного використання в медичних установах.

- Зберігайте пристрій для проколювання та всі його компоненти у місці, недоступному для дітей віком до 3 років. У разі ковтання дрібних деталей (ковпачків, насадок тощо) існує ризик удусення.
- Якщо пристрій для проколювання зі вставленим lancetом впаде, то lancet у тримачі може послабитися. У такому разі його більше не можна використовувати для взяття крові. У деяких випадках lancet може виступати з отвору у ковпачку та спричинити травму. Тому намагайтеся не торкатися передньої частини ковпачка. Якщо пристрій для проколювання впаде, обережно підніміть його. Потім зніміть ковпачок з пристрою для проколювання. Будьте уважні, щоб не поранитися lancetом. У будь-якому разі вийміть lancet і утилізуйте його.

Використовуйте пристрій для проколювання Акку-Чек Софтклікс тільки з lancetами марки Акку-Чек Софтклікс. Використання інших lancetів може завдати правильній роботі або пошкодити пристрій для проколювання.

Підготовка

► Перед взяттям крові вимийте руки теплою водою з милом (див. **1**). Витріть руки насухо. Це допоможе знизити ризик забруднення в місці проколювання та покращити циркуляцію крові.

Встановлення lanceta

Для взяття крові за допомогою пристрою для проколювання необхідно встановити lancet.

- Зніміть ковпачок із пристрою для проколювання (див. **2**).
- Вставте новий lancet у тримач lanceta до упору (див. **3**). Lancet має зафіксуватися з клацанням.
- Зніміть захисний ковпачок із lanceta, відкрутивши його (див. **4**).
- Знову надіньте ковпачок. Потім потрібно сумістити позиційну мітку на ковпачку з позиційною лінією на пристрої для проколювання таким чином, щоб вони були на одній лінії (див. **5**). Ковпачок має зафіксуватися з клацанням.

Налаштування глибини проколу

Можна встановити 11 позицій глибини проколу (від 0,5 до 5,5). У віконці відображатиметься встановлена глибина проколу. Що більше число, то більша глибина проколу.

Якщо у Вас немає досвіду використання пристрою для проколювання, рекомендовано встановити малу глибину проколу, наприклад 2.

► Повертайте ковпачок, доки не буде встановлено потрібну глибину проколу (див. **6**).

Зведення пристрою для проколювання

Перед взяттям крові потрібно звести пристрій для проколювання.

► Натисніть кнопку зведення до упору (див. **7**). Не натискайте одночасно з цим кнопку спуску.

Пристрій для проколювання зведено, якщо центральна частина кнопки спуску стала жовтою (див. **8**).

Зводите пристрій для проколювання слід безпосередньо перед взяттям крові.

Взяття краплі крові

Загалом взяття кров можна з будь-якого пальця. Якщо на пальці є інфекція шкіри чи нігтя, то його не можна використовувати для взяття крові. Рекомендовано взяття капілярної крові з бокових поверхонь кінчиків пальців, оскільки в цих місцях больові відчуття найнижчі.

► Щоразу використовуйте новий lancet для взяття крові. Це зменшує ризик інфікування та зводить дискомфорт до мінімуму.

- Використовуйте пристрій для проколювання **тільки** з прикріпленим ковпачком. Без ковпачка lancet проникає надто глибоко й укол може бути болісним.

► Щільно притисніть пристрій для проколювання до обраного місця проколювання (див. **9**).

► Натисніть кнопку спуску (див. **10**).

Lancet вивільняється і входить у шкіру.

► Формуванню краплі крові допоможе легке натискання на палець у напрямку кінчика пальця.

Кількість крові, що з'явилася в ділянці проколу, залежить від глибини проколу та сили, з якою пристрій для проколювання притиснуто до шкіри.

Якщо крові недостатньо, повторіть спробу, притиснувши сильніше пристрій для проколювання до шкіри при наступному взятті крові. Якщо цього недостатньо, можна поступово збільшувати глибину проколу.

Якщо крові забагато, слід зменшити глибину проколу.

► Відразу після взяття крові проведіть визначення рівня глюкози у крові згідно з керівництвом користувача Вашого глюкометра.

Рекомендовано захистити місце проколювання від забруднення.

Виштовхування використаного lanceta

- Зніміть ковпачок із пристрою для проколювання (див. **2**).
- Посуньте виштовхувач уперед (див. **11**).

Використаний lancet виштовхнеться.

- Знову надіньте ковпачок.
- Викидайте використані lanceti відповідно до місцевих норм.

Утилізуйте використані lanceti таким чином, щоб уникнути травмування голками.

Зберігання пристрою для проколювання

Не зберігайте пристрій для проколювання у зведеному стані, а також при високій температурі, наприклад у нагрітому автомобілі. Це може порушити функціонування пристрою.

Зберігайте пристрій для проколювання без вставленого lanceta.

Очищення та дезінфікація ковпачка і пристрою для проколювання

Щоб запобігти інфекції, потрібно регулярно чистити та дезінфікувати пристрій для проколювання і ковпачок:

- принаймні 1 раз на тиждень;
- за наявності слівів крові;
- щоразу перед тим, як інша особа братиме пристрій для проколювання, наприклад щоб допомогти вам.

Вам потрібні безворсова серветка, якою можна повністю обгорнути пристрій для проколювання, вода і 70 % розчин ізopropanolu.

Перед дезінфекцією пристрою для проколювання та ковпачка потрібно сполучку видалити сліди крові й інші забруднення.

Щоб не пошкодити пристрій для проколювання та ковпачок:

- Ніколи не занурюйте пристрій для проколювання та ковпачок у рідину.
- Для очищення використовуйте лише воду, а для дезінфекції — 70 % розчин ізopropanolu.

► Зніміть ковпачок із пристрою для проколювання (див. **2**).

► Виштовхніть lancet (див. **11**).

Очищення

- Намочіть серветку легко водою.
- Ретельно протріть пристрій для проколювання та ковпачок. Пристрій для проколювання витирайте лише ззовні (див. **12**), а ковпачок — і ззовні, і всередині (див. **13**).
- Витріть пристрій для проколювання та ковпачок за допомогою сухої серветки.

Дезінфекція

- Намочіть серветку 70 % розчином ізopropanolu.
- Ретельно протріть пристрій для проколювання та ковпачок протягом приблизно 2 хвилин. Пристрій для проколювання протирайте лише ззовні, а ковпачок — і ззовні, і всередині.
- Знову надіньте ковпачок.
- Загорніть пристрій для проколювання в серветку.
- Залиште пристрій для проколювання в такому стані на 8 хвилин.
- Розгорніть пристрій для проколювання й дайте йому висохнути на повітрі.

Альтернативні місця для взяття крові

Брати капілярну кров для визначення рівня глюкози у крові можна не лише з кінчиків пальців, а й із інших частин тіла (з подушечок долоні, передпліччя, плеча, литки чи стегна). Це так зване визначення в альтернативних місцях (англ. Alternative Site Testing — AST). Щоб брати капілярну кров з інших частин тіла, замініть звичайний ковпачок на насадку AST Акку-Чек Софтклікс.

Інформація для замовлення

Щоб замовити пристрій для проколювання Акку-Чек Софтклікс, lanceti Акку-Чек Софтклікс або насадку AST Акку-Чек Софтклікс, зверніться до уповноваженого представника виробника в Україні (див. розділ "Уповноважений представник").

CE 0123

ACCU-CHEK, SOFTCLIX та AKKY-ЧЕК є торговими марками компанії Roche (Рохе).

© 2020 Roche Diabetes Care

«Рохе Діабетес Кеа ГмбХ»,
Зандгофер Штрассе 116
68305, Мангайм
Німеччина
www.accu-check.com

