

ИНСТРУКЦИЯ по применению изделия медицинского назначения:

Однокомпонентный илеостомный калоприемник «Стамадресс Плюс», с зажимом, стандартный, непрозрачный

Функциональное назначение медицинского изделия

Предназначены для использования пациентами с наличием временной или постоянной колостомы или илеостомы.

Показания

Показаны пациентам, которые нуждаются в наложении временной или постоянной стомы и которым требуется медицинское изделие для сбора отделяемого из стомы после данной операции.

Противопоказания

Не следует применять пациентам с повышенной чувствительностью к их компонентам, или пациентам, у которых в прошлом наблюдалась аллергическая реакция на эти компоненты.

ПОДГОТОВКА МЕШКА

Кожа вокруг стомы должна быть чистой, сухой, не должна подвергаться воздействию растворителей или жиросодержащих веществ.

ПОДГОТОВКА МЕШКОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫРЕЗАННЫМ ОТВЕРСТИЕМ


Выберите мешок с предварительно вырезанным отверстием, диаметр которого равен наибольшему диаметру стомы. Не увеличивайте предварительно вырезанное отверстие.

ПОДГОТОВКА МЕШКОВ, СТАРТОВОЕ ОТВЕРСТИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДОВЫРЕЗАТЬ

Используя маркировку на защитной бумаге пластины, начертите точный контур стомы.




ПРИКЛЕИВАНИЕ МЕШКА

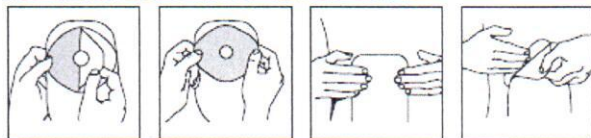


Убедитесь в плотном прилегании вокруг стомы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЖИМА

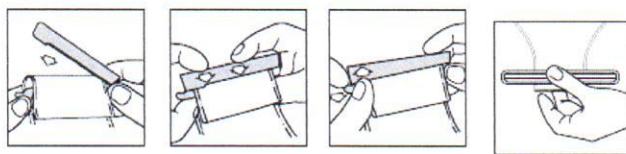


Расположите зажим сверху на удлиненной части мешка

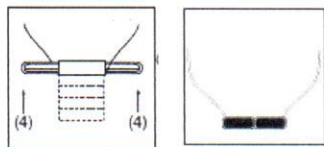

Оберните конец мешка вокруг зажима 4 раза

СНЯТИЕ МЕШКА

Данное изделие может оставаться на теле на время принятия ванны, душа или плавания.
После контакта с водой просушить, промокнув сухим полотенцем.

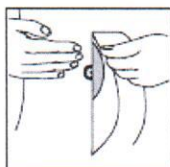

УТИЛИЗАЦИЯ

Следуйте местным правилам и требованиям утилизации.

