

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи столика потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Столик медицинский инструментальный СИ соответствует техническим условиям
ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подписи лиц,
ответственных за приемку _____

МП

Столик медицинский инструментальный
СИ

Паспорт

1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов и медикаментов в операционных, перевязочных, кабинетах врачей, на постах медицинских сестер в отделениях больницы, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры (длина, ширина – без учета колесных опор, высота – с колесными опорами):

длина – 1200 мм, ширина – 570 мм, высота – 870 мм

Масса столика не более 25 кг.

Максимальная нагрузка на поддон – не более 20 кг

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят: Столик – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборки столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами и представляет собой конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса и двух съемных поддонов. Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом.


Освободите столик от упаковки. Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Столики могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытых хранилищах при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность до 98 % при 25 °С.

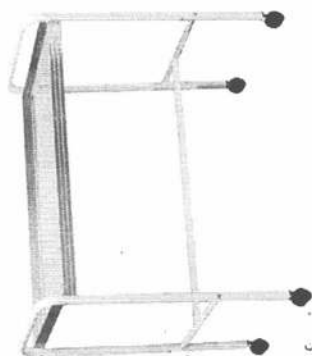

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный

(наименование)

СИ _____ **ТУ РБ 14440234.004-94**

(обозначение)

(номер ТУ)

Дата изготовления _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____


(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Столик медицинский инструментальный
СИ-01

Паспорт

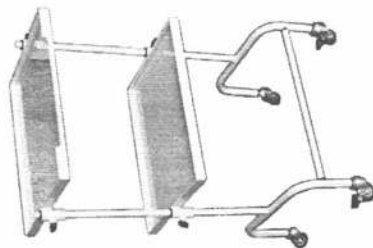

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный
(наименование)

СИ-01 _____
(обозначение) ТУ РБ 14440234.004-94
(номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТПН, заполняется потребителем)

1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-01 (далее столик) предназначен для оснащения медицинских учреждений и служит для размещения на нем инструмента, материалов, медикаментов, в том числе применяемых в стоматологической практике, в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больницы, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор, высота – с колесными опорами):

длина – 540 мм, ширина – 390 мм, высота – 880 мм.

Масса столика не более 10 кг.

Максимальная нагрузка на полку – не более 5 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

столик* – 1 шт.,

паспорт – 1 шт.,

коробка упаковочная – 1 шт.

Материал поддона	Отметка наличия
Поддон нерж.	✓
Поддон окрашен.	---

* – поставляется в разобранном виде в составе:

стойка	- 2 шт.	винт 7x50	- 2 шт.
рама	- 2 шт.	винт M10x20	- 4 шт.
труба со втулками	- 1 шт.	шайба	- 4 шт.
полка (стекло)	- 1 шт.	ручка (фиксатор)	- 4 шт.
полка (поддон)	- 1 шт.	ключ шестигранный 4 мм	- 1 шт.
колесная опора без тормоза	- 2 шт.	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.
колесная опора с тормозом	- 2 шт.		

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, состоящую из стоек, рам и двух съемных полок – металлической в виде поддона и стеклянной. Рамы регулируются по высоте. Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Поддон по согласованию с Заказчиком изготавливается окрашенным полимерной порошковой краской, либо из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Материал поддона указан в разделе 3 настоящего паспорта.

Освободите столик от упаковки и произведите его сборку:

- установите с помощью ключа шестигранного 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты M10x20 и шайбы так, чтобы на каждой стойке располагалось 1 колесо с тормозом, 1 колесо без тормоза;

- установите рамы на стойках и зафиксируйте их ручками (фиксаторами) на удобной для Вас высоте;

- соедините винтами 7x50 с помощью ключа шестигранного 4 мм снизу стойки с трубой через втулки, установленные в трубе изготовителем;

- в верхнюю раму вложите стеклянную полку, в нижнюю – металлический поддон, предварительно сняв защитную пленку (при наличии).

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения нижней трубы со стойками, с помощью ключа шестигранного 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи столика потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс +375 232 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Столик медицинский инструментальный СИ-01 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

7 Свидетельство о приеме

Столик медицинский инструментальный СИ-02 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.


Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Столик медицинский инструментальный
СИ-02

Паспорт

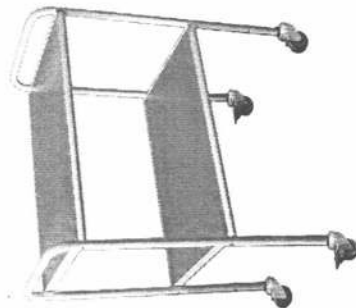

----- Линия отреза -----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный

(наименование)

СИ-02 ТУ РБ 14440234.004-94

(обозначение)

(номер ТУ)

Дата изготовления _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-02 (далее столик) предназначен для размещения на нем материалов, медикаментов, оборудования в кабинетах врачей, в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор, высота – с колесными опорами): длина – 640 мм, ширина – 450 мм, высота – 880 мм.
Расстояние между полками – 400 мм
Масса столика не более 18 кг.
Максимальная нагрузка на полку – не более 8 кг.
Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- столик* – 1 шт.,
- паспорт – 1 шт.,
- коробка упаковочная – 1 шт.

* – поставляется в разобранном виде в составе:

стойка	- 2 шт.,	винт 7x50	- 8 шт.,
труба со втулками	- 4 шт.,	винт M10x20	- 4 шт.,
полка	- 2 шт.,	шайба	- 4 шт.,
колесная опора без тормоза	- 2 шт.,	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.,
колесная опора с тормозом	- 2 шт.,	ключ шестигранный 4 мм	- 1 шт.,

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса и двух полок, изготовленных из ламинированной ДСП. Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие каркаса, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям.

Сборку столика производите в следующем порядке (см. рисунок 1):

- 1) освободите столик от упаковки;
- 2) установите с помощью ключа шестигранного 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты M10x20 и шайбы следующим образом:
 - положите стойки на плоской поверхности вверх уголками,
 - установите и затяните винтами на каждую стойку: слева – шайбу и 1 колесо с тормозом, справа – шайбу и 1 колесо без тормоза;
- 3) соберите каркас в следующем порядке:
 - сориентируйте стойки таким образом, чтобы уголки для установки полок располагались внутри каркаса,
 - соедините винтами 7x50 с помощью ключа шестигранного 4 мм стойки с трубами через втулки, установленные в трубах изготовителем, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм,

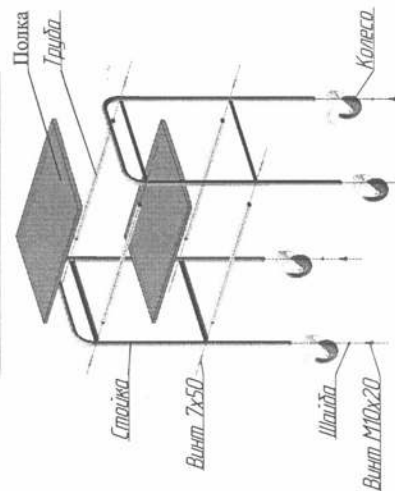


Рисунок 1 – Схема сборки столика

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения труб со стойками, с помощью ключа шестигранного 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи столика потребителю.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс +375 232 68 35 73, 68 36 47

6 Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи столика потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приеме

Столик медицинский инструментальный СИ-03 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный

(наименование)

СИ-03 _____ **ТУ РБ 14440234.004-94**

(обозначение)

(номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)


КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

(Гарантийный талон изъят
дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Столик медицинский инструментальный
СИ-03

Паспорт

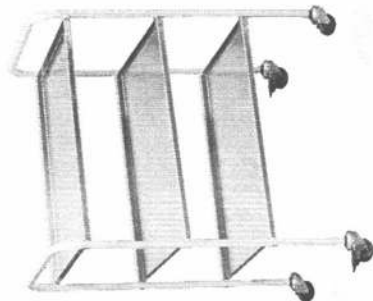

1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-03 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструментов, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больницы, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор, высота - с колесными опорами):

длина – 515 мм, ширина – 420 мм, высота – 885 мм.

Рабочие размеры полки: длина – 473 мм, ширина – 373 мм.

Расстояние между полками – 300 мм

Масса столика не более 9 кг.

Максимальная нагрузка на полку не более 8 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

столик* – 1 шт.,

паспорт – 1 шт.,

коробка упаковочная – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка	- 2 шт.,	винт 7x50	- 12 шт.,
труба со втулками	- 6 шт.,	винт M10x20	- 4 шт.,
полка	- 3 шт.,	шайба	- 4 шт.,
колесная опора без тормоза	- 2 шт.,	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.,
колесная опора с тормозом	- 2 шт.,	ключ шестигранный 4 мм	- 1 шт.,

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса и трех съемных полок. Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие каркаса, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Полки по согласованию с Заказчиком изготавливаются окрашенными полимерной порошковой краской, либо из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Материал полок указан в разделе 3 настоящего паспорта.

Сборку столика производите в следующем порядке (см. рисунок 1):

1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с полок (при наличии);

2) установите с помощью ключа шестигранный 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты M10x20 и шайбы следующим образом:

- положите стойки на плоской поверхности вверх уголками,

- установите и затяните винтами на каждую стойку: слева – шайбу и 1 колесо с тормозом, справа – шайбу и 1 колесо без тормоза;

3) соберите каркас в следующем порядке:

- сориентируйте стойки таким образом, чтобы уголки для полок располагались внутри каркаса,

- соедините винтами 7x50 с помощью ключа шестигранный 4 мм стойки с трубами через втулки, установленные в трубах изготовителем, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм,

- установите нижнюю полку, при необходимости выровняйте положение полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,

- зажмите нижние винты до упора,

- установите среднюю полку, произведите при необходимости выравнивание положения средней полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,

- зажмите средние винты до упора,

- установите верхнюю полку,

- зажмите верхние винты до упора.

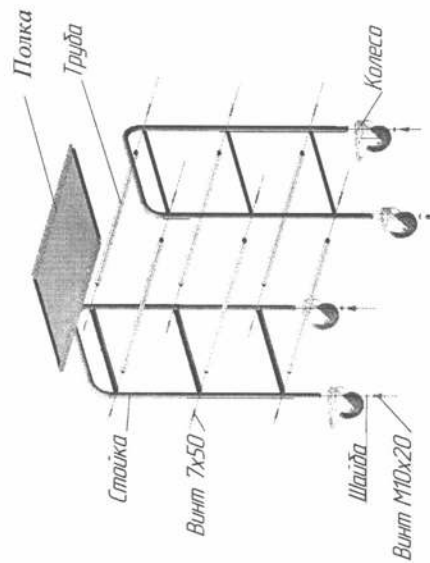


Рисунок 1 – Схема сборки столика

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения труб со стойками, с помощью ключа шестигранный 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи столика потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федунинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс +375 232 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приеме

Столик медицинский инструментальный СИ-04 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковщик _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

----- Линия отреза -----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный
(наименование)

СИ-04 _____ **ТУ РБ 14440234.004-94**
(обозначение) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)


КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

(дата, подпись и штамп осуществляющей гарантийный ремонт)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Столик медицинский инструментальный СИ-04

Паспорт

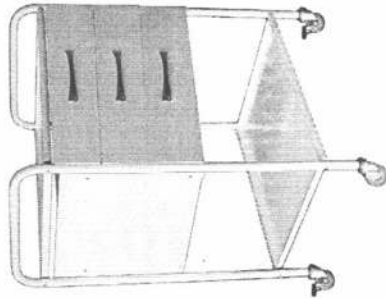

1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-04 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор, высота - с колесными опорами):

длина – 640 мм, ширина – 450 мм, высота – 880 мм.

Масса столика не более 23,5 кг.

Максимальная нагрузка на полку не более 8 кг, на ящик – не более 5 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

столлик* – 1 шт.,
паспорт – 1 шт.,
коробка упаковочная – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

Материал полки	Отметка наличия
Нержавеющая сталь	V
Сталь с покрытием полимерной краской	--

стойка	- 2 шт.,	пластина	- 6 шт.;
труба со втулками	- 4 шт.,	винт M4x6	- 6 шт.;
рамка	- 1 шт.,	винт M5x6	- 6 шт.;
ящик	- 3 шт.,	винт 7x50	- 12 шт.,
полка	- 2 шт.,	винт M10x20	- 4 шт.,
колесная опора без тормоза	- 2 шт.,	шайба	- 4 шт.,
колесная опора с тормозом	- 2 шт.,	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.,
ручка ящика	- 3 шт.,	ключ шестигранный 4 мм	- 1 шт.

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборки столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, трех выдвижных ящиков и двух съемных полок. Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие столика, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Полки по согласованию с Заказчиком изготавливаются окрашенными полимерной порошковой краской, либо из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Материал полок указан в разделе 3 настоящего паспорта.

Сборку столика производите в следующем порядке (см. рисунок 1):

- 1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с полок (при наличии);
- 2) установите с помощью ключа шестигранный 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты M10x20 и шайбы следующим образом:
 - положите стойки на плоской поверхности вверх направляющими, в которые будут вставлены ящики,
 - установите и затяните винтами на каждую стойку: слева – шайбу и 1 колесо с тормозом, справа – шайбу и 1 колесо без тормоза;
- 3) соберите каркас в следующем порядке:
 - сориентируйте стойки таким образом, чтобы направляющие для ящиков располагались внутри каркаса,
 - соедините винтами 7x50 с помощью ключа шестигранный 4 мм стойки через втулки с рамкой, расположив рамку на задней стороне столика, и трубами, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм,
 - установите нижнюю полку, при необходимости выровняйте положение полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,
 - зажмите нижние винты до упора,
 - установите верхнюю полку, произведите при необходимости выравнивание положения полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,
 - зажмите верхние и средние винты до упора;

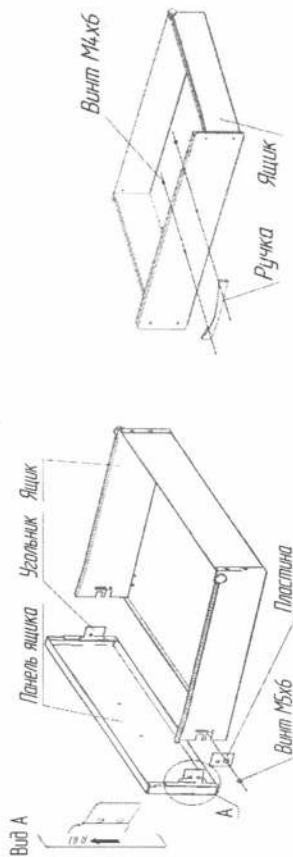
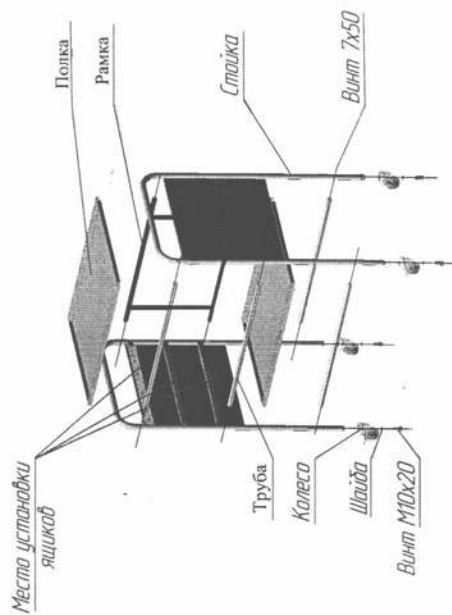


Рисунок 1 – Схема сборки столика

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения труб со стойками, с помощью ключа шестигранный 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Столик медицинский инструментальный
СИ-05

Паспорт

1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-05 (далее – столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор, высота – с колесными опорами): длина – 650 мм, ширина – 405 мм, высота – 860 мм.

Расстояние между полками – 400 мм

Масса столика не более 11 кг.

Максимальная нагрузка на поддон не более 10 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

столик* – 1 шт., паспорт – 1 шт., упаковка – 1 шт.

* – поставляется в разобранном виде в составе:

стойка с колесными опорами – 2 шт.;
рамка – 2 шт.;
поддон – 2 шт.;
винт крепежный – 8 шт.;
ключ – 1 шт.

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса на колесных опорах и поддонов. Полимерное покрытие каркаса, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Поддоны изготовлены из нержавеющей стали.

Сборку столика (при поставке в разобранном виде) производите в следующем порядке:

- 1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с поддонов (при наличии);
- 2) соберите каркас, соединив винтами с помощью ключа стойки с рамками;
- 3) установите верхний и нижний поддоны на собранный каркас;
- 4) проверьте винтовые соединения.

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения труб со стойками, с помощью ключа шестигранного 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи столика потребителю.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс 8 (10 375 232) 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Столик медицинский инструментальный СИ-05 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____

(подпись)

(штамп ОТК)

----- Линия отреза -----

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА
Гарантийный талон издается (дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный

(наименование)

СИ-05

(обозначение)

ТУ РБ 14440234.004-94

(номер ТУ)

Дата изготовления _____

(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____

(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс +375 232 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Столик медицинский инструментальный СИ-06 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковщик _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

----- Линия отреза -----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный

(наименование)

СИ-06 _____ **ТУ РБ 14440234.004-94**

(обозначение) _____ (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)


КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Столик медицинский инструментальный СИ-06

Паспорт

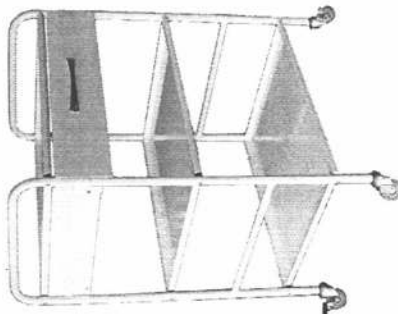

1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-06 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор,

высота - с колесными опорами):

длина – 640 мм, ширина – 450 мм, высота – 880 мм.

Масса столика не более 17 кг.

Максимальная нагрузка на полку не более 8 кг, на ящик – не более 5 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

столик* – 1 шт.,

паспорт – 1 шт.,

коробка упаковочная – 1 шт.

Материал полки	Отметка наличия
Нержавеющая сталь	V
Сталь с покрытием полимерной краской	--

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка	- 2 шт.,	винт М4х6	- 2 шт.,
труба со втулками	- 6 шт.,	винт 7х50	- 12 шт.,
ящик	- 1 шт.,	винт М10х20	- 4 шт.,
полка	- 3 шт.,	шайба	- 4 шт.,
колесная опора без тормоза	- 2 шт.,	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.,
колесная опора с тормозом	- 2 шт.,	ключ шестигранный 4 мм	- 1 шт.,
ручка ящика	- 1 шт.,		

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, выдвижного ящика и трех съемных полок. Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие столика, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Полки по согласованию с Заказчиком изготавливаются окрашенными полимерной порошковой краской, либо из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Материал полок указан в разделе 3 настоящего паспорта.

Сборку столика производите в следующем порядке (см. рисунок 1):

- 1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с полок (при наличии);
- 2) установите с помощью ключа шестигранного 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты М10х20 и шайбы следующим образом:
 - положите стойки на плоской поверхности вверх направляющими, в которые будет вставлен ящик,

- установите и затяните винтами на каждую стойку: слева – шайбу и 1 колесо с тормозом, справа – шайбу и 1 колесо без тормоза;
- 3) соберите каркас в следующем порядке:
 - ориентируйте стойки таким образом, чтобы направляющие для ящика располагались внутри каркаса,

- соедините винтами 7х50 с помощью ключа шестигранного 4 мм стойки с трубами через втулки, установленные в трубах изготовителем, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм,

- установите нижнюю полку, при необходимости выровняйте положение полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,

- зажмите нижние винты до упора,

- установите среднюю и верхнюю полку, произведите при необходимости выравнивание положения полок одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,

- зажмите средние и верхние винты до упора;

4) на ящик установите ручку, используя винты М4х6;

5) вставьте ящик в направляющие, закрутите его до упора.

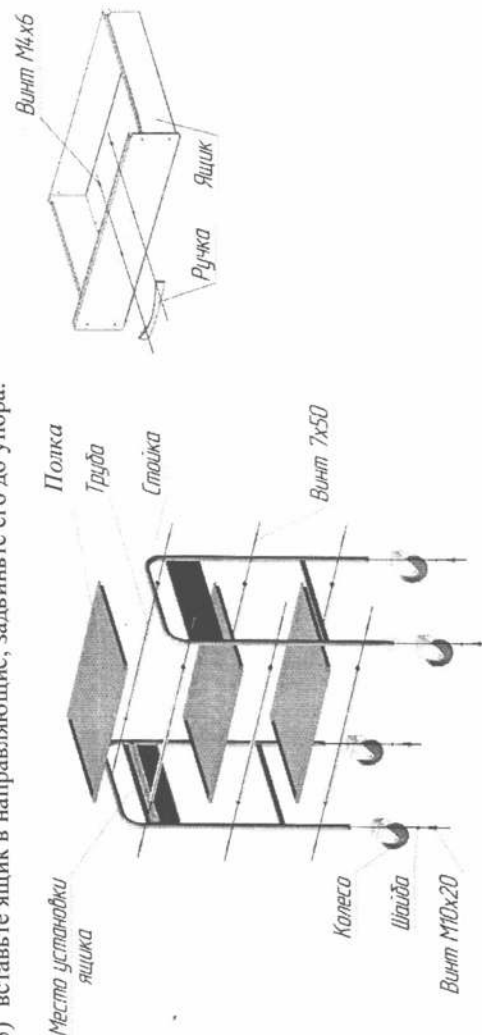


Рисунок 1 – Схема сборки столика

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения труб со стойками, с помощью ключа шестигранного 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Столик медицинский инструментальный СИ-07 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Упаковщик _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

----- Линия отреза -----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный
(наименование)

СИ-07 _____
(обозначение) **ТУ РБ 14440234.004-94**
(номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)


КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Столик медицинский инструментальный СИ-07

Паспорт

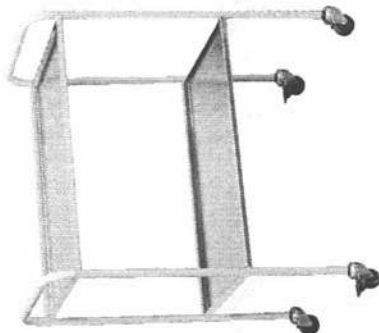

1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-07 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор,

высота - с колесными опорами):

длина – 640 мм, ширина – 450 мм, высота – 880 мм.

Расстояние между полками – 400 мм

Масса столика не более 11 кг.

Максимальная нагрузка на полку не более 8 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

столик* – 1 шт.,

паспорт – 1 шт.,

коробка упаковочная – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка	- 2 шт.,	винт 7x50	- 8 шт.,
труба со втулками	- 4 шт.,	винт M10x20	- 4 шт.,
полка	- 2 шт.,	шайба	- 4 шт.,
колесная опора без тормоза	- 2 шт.,	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.,
колесная опора с тормозом	- 2 шт.,	ключ шестигранный 4 мм	- 1 шт.,

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса и двух съемных полок. Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие каркаса, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Полки по согласованию с Заказчиком изготавливаются окрашенными полимерной порошковой краской, либо из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Материал полок указан в разделе 3 настоящего паспорта.

Сборку столика производите в следующем порядке (см. рисунок 1):

1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с полок (при наличии);
2) установите с помощью ключа шестигранного 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты M10x20 и шайбы следующим образом:

- положите стойки на плоской поверхности вверх уголками,
- установите и затяните винтами на каждую стойку: слева – шайбу и 1 колесо с тормозом, справа – шайбу и 1 колесо без тормоза;

3) соберите каркас в следующем порядке:

- ориентируйте стойки таким образом, чтобы уголки для полок располагались внутри каркаса,
- соедините винтами 7x50 с помощью ключа шестигранного 4 мм стойки с трубами через втулки, установленные в трубах изготовителем, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм,
- установите нижнюю полку, при необходимости выровняйте положение полки одновременно нажатием на стойки в диагональном направлении,
- зажмите нижние винты до упора,
- установите верхнюю полку, произведите при необходимости выравнивание положения верхней полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,
- зажмите верхние винты до упора.

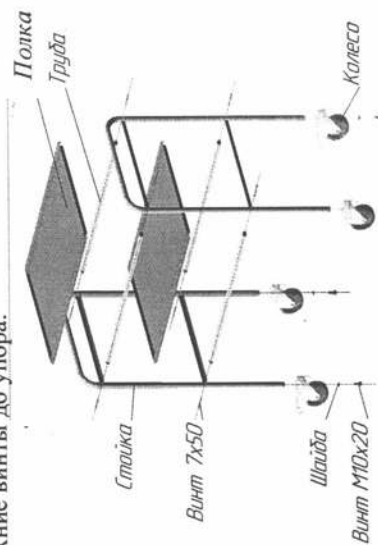


Рисунок 1 – Схема сборки столика

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения трубок со стойками, с помощью ключа шестигранного 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантий изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи столика потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»

тел/факс +375 232 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приеме

Столик медицинский инструментальный СИ-08 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Упаковщик _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

-----Линия отреза-----

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный
(наименование)


СИ-08 _____ **ТУ РБ 14440234.004-94**
(обозначение) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

**КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

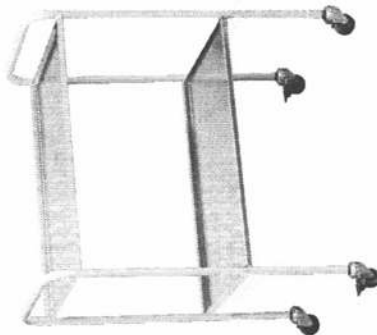

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Столик медицинский инструментальный
СИ-08

Паспорт

1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-08 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор,

высота – с колесными опорами):

длина – 640 мм, ширина – 450 мм, высота – 880 мм.

Расстояние между полками – 400 мм

Масса столика не более 12 кг.

Максимальная нагрузка: на стеклянную полку – не более 5 кг,

на металлическую полку – не более 8 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

столик* – 1 шт.,

паспорт – 1 шт.,

коробка упаковочная – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка	- 2 шт.,	винт 7x50	- 8 шт.,
труба со втулками	- 4 шт.,	винт M10x20	- 4 шт.,
полка (поддон)	- 1 шт.,	шайба	- 4 шт.,
полка (стекло)	- 1 шт.,	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.,
колесная опора без тормоза	- 2 шт.,	ключ шестигранный 4 мм	- 1 шт.,
колесная опора с тормозом	- 2 шт.,		

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса и двух съемных полок – металлической в виде поддона и стеклянной. Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие каркаса, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Поддон по согласованию с Заказчиком изготавливается окрашенным полимерной порошковой краской, либо из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Материал поддона указан в разделе 3 настоящего паспорта.

Сборку столика производите в следующем порядке (см. рисунок 1):

- 1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с поддона (при наличии);
- 2) установите с помощью ключа шестигранного 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты M10x20 и шайбы следующим образом:

- положите стойки на плоской поверхности вверх уголками,
- установите и затяните винтами на каждую стойку: слева – шайбу и 1 колесо с тормозом, справа – шайбу и 1 колесо без тормоза;

3) соберите каркас в следующем порядке:

- сориентируйте стойки таким образом, чтобы уголки для установки полок располагались внутри каркаса,
- соедините винтами 7x50 с помощью ключа шестигранного 4 мм стойки с трубами через втулки, установленные в трубах изготовителем, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм,
- установите нижний поддон, при необходимости выровняйте положение поддона одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,
- зажмите нижние винты до упора,
- установите верхнюю полку. При необходимости, с осторожностью во избежание повреждения стекла, выровняйте положение полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,
- зажмите верхние винты до упора.

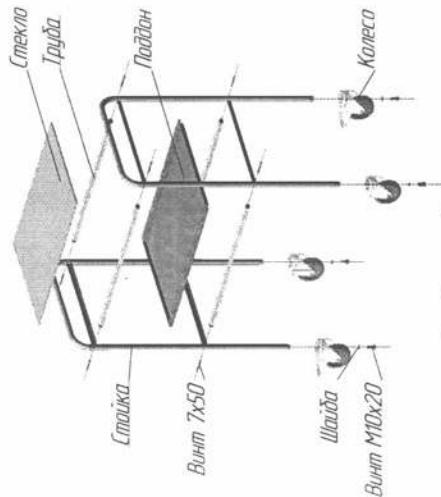


Рисунок 1 – Схема сборки столика

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения труб со стойками, с помощью ключа шестигранного 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

7 Свидетельство о приеме

Столик медицинский инструментальный СИ-09 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____


Упаковщик _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Столик медицинский инструментальный
СИ-09

Паспорт

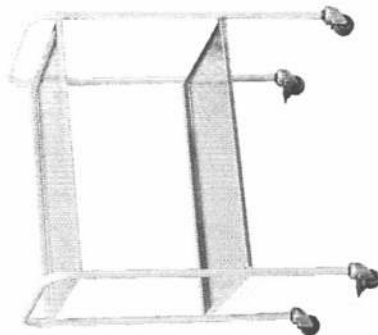

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный
(наименование)

СИ-09 _____
(обозначение) ТУ РБ 14440234.004-94
(номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)



1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-09 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больницы, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор,

высота - с колесными опорами):

длина – 640 мм, ширина – 450 мм, высота – 880 мм.

Расстояние между полками – 400 мм

Масса столика не более 13 кг.

Максимальная нагрузка на стеклянную полку – не более 5 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

столик* – 1 шт., паспорт – 1 шт., коробка упаковочная – 2 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка	- 2 шт.,	винт 7x50	- 8 шт.,
труба со втулками	- 4 шт.,	винт М10х20	- 4 шт.,
полка (стекло)	- 2 шт.,	шайба	- 4 шт.,
колесная опора без тормоза	- 2 шт.,	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.,
колесная опора с тормозом	- 2 шт.,	ключ шестигранный 4 мм	- 1 шт.,

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса и двух стеклянных съемных полок. Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие каркаса, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям.

Сборку столика производите в следующем порядке (см. рисунок 1):

- 1) освободите столик и стекла, упакованные отдельно, от упаковки;
- 2) установите с помощью ключа шестигранного 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты М10х20 и шайбы следующим образом:
 - положите стойки на плоской поверхности вверх уголками,
 - установите и затяните винтами на каждую стойку: слева – шайбу и 1 колесо с тормозом, справа – шайбу и 1 колесо без тормоза;
- 3) соберите каркас в следующем порядке:
 - сориентируйте стойки таким образом, чтобы уголки для установки полок располагались внутри каркаса,
 - соедините винтами 7x50 с помощью ключа шестигранного 4 мм стойки с трубами через втулки, установленные в трубах изготовителем, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм,

- установите нижнюю полку. При необходимости, с осторожностью во избежание повреждения стекла, выровняйте положение полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,
- зажмите нижние винты до упора,
- установите верхнюю полку. При необходимости, с осторожностью во избежание повреждения стекла, выровняйте положение верхней полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,
- зажмите верхние винты до упора.

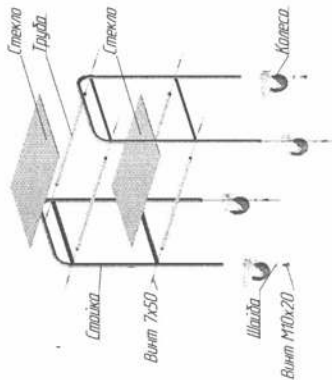


Рисунок 1 – Схема сборки столика

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения труб со стойками, с помощью ключа шестигранного 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантий изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи столика потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс +375 232 68 35 73, 68 36 47

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи столика потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Феофановского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс +375 232 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Столик медицинский инструментальный СИ-10 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

----- Линия отреза -----

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный

(наименование)

СИ-10 _____ **ТУ РБ 14440234.004-94**

(обозначение)

(номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

**КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**


Гарантийный талон издать

дата, подписать и штамповать, осуществляющей гарантийный ремонт

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Столик медицинский инструментальный
СИ-10

Паспорт

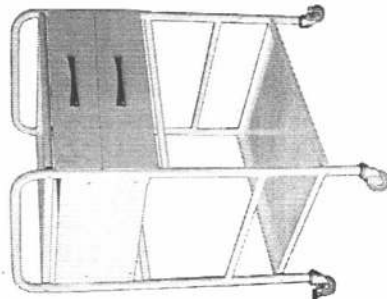

Столик медицинский инструментальный СИ-10 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор,

высота - с колесными опорами):

длина – 640 мм, ширина – 450 мм, высота – 880 мм.

Масса столика не более 19,5 кг.

Максимальная нагрузка на поддон не более 8 кг, на ящик – не более 5 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

столик* – 1 шт.,

паспорт – 1 шт.,

коробка упаковочная – 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

стойка	- 2 шт.,	винт М4х6	- 4 шт.,
труба со втулками	- 6 шт.,	винт 7х50	- 12 шт.,
ящик	- 2 шт.,	винт М10х20	- 4 шт.,
полка (поддон)	- 2 шт.,	шайба	- 4 шт.,
колесная опора без тормоза	- 2 шт.,	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.,
колесная опора с тормозом	- 2 шт.,	ключ шестигранный 4 мм	- 1 шт.,
ручка ящика	- 2 шт.,		

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, двух выдвижных ящиков и двух съемных полок (поддонов). Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие столика, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Поддоны по согласованию с Заказчиком изготавливаются окрашенными полимерной порошковой краской, либо из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Материал поддонов указан в разделе 3 настоящего паспорта.

Сборку столика производите в следующем порядке (см. рисунок 1):

- 1) освободите столик от упаковки, снимите защитную пленку с поддонов (при наличии);
- 2) установите с помощью ключа шестигранного 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты М10х20 и шайбы следующим образом:
 - положите стойки на плоской поверхности вверх направляющими, в которые будет вставлен ящик,

- установите и затяните винтами на каждую стойку: слева – шайбу и 1 колесо с тормозом, справа – шайбу и 1 колесо без тормоза;
- 3) соберите каркас в следующем порядке:
 - сориентируйте стойки таким образом, чтобы направляющие для ящиков располагались внутри каркаса,
 - соедините винтами 7х50 с помощью ключа шестигранного 4 мм стойки с трубами через втулки, установленные в трубах изготовителем, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм,
 - установите нижний поддон, при необходимости выровняйте положение поддона одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,
 - зажмите нижние винты до упора,
 - установите верхний поддон, произведите при необходимости выравнивание положения поддона одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,
 - зажмите верхние и средние винты до упора;
 - 4) на ящики установите ручки, используя винты М4х6;
 - 5) вставьте ящики в направляющие, закрутите их до упора.

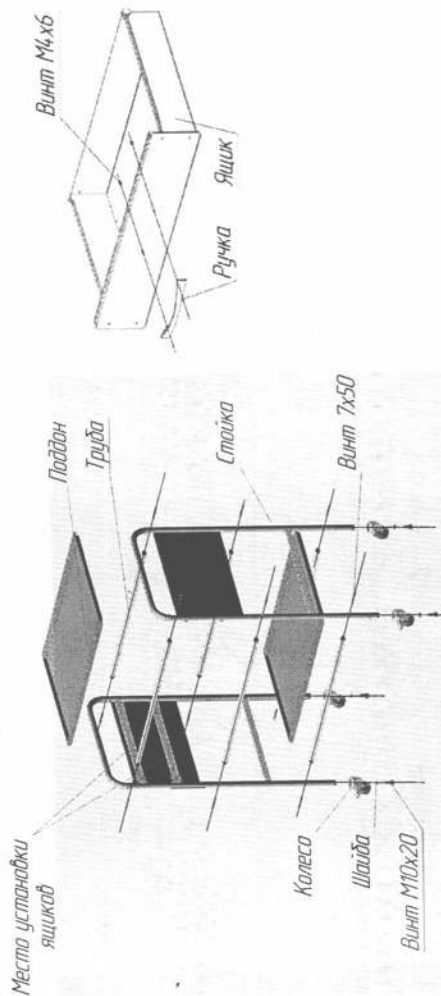


Рисунок 1 – Схема сборки столика

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения труб со стойками, с помощью ключа шестигранного 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.


Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность до 98 % при 25 °С.

Столик медицинский инструментальный СИ-11 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковщик _____
Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

Столик медицинский инструментальный
СИ-11

Паспорт

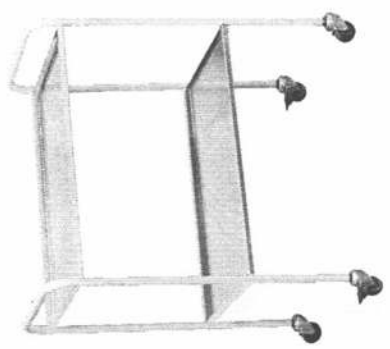

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА
Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

-----Линия отреза-----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:
Столик медицинский инструментальный
(наименование)
СИ-11 **ТУ РБ 14440234.004-94**
(обозначение) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-11 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструктории могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор,

высота – с колесными опорами):

длина – 640 мм, ширина – 450 мм, высота – 880 мм.

Расстояние между полками – 400 мм

Масса столика не более 10 кг.

Максимальная нагрузка на полку не более 8 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

столик* – 1 шт., паспорт – 1 шт., коробка упаковочная – 1 шт.

* – поставляется в разобранном виде в составе:

стойка	- 2 шт.,	винт 7x50	- 8 шт.,
труба со втулками	- 4 шт.,	винт M10x20	- 4 шт.,
полка	- 2 шт.,	шайба	- 4 шт.,
колесная опора без тормоза	- 2 шт.,	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.,
колесная опора с тормозом	- 2 шт.,	ключ шестигранный 4 мм	- 1 шт.,

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса и двух съемных полок. Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Столик, в том числе полки, изготовлен полностью из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами.

Сборку столика производите в следующем порядке (см. рисунок 1):

- 1) освободите столик от упаковочной пленки с полок (при наличии);
- 2) установите с помощью ключа шестигранного 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты M10x20 и шайбы следующим образом:
 - положите стойки на плоской поверхности вверх уголками,
 - установите и затяните винтами на каждую стойку: слева – шайбу и 1 колесо с тормозом, справа – шайбу и 1 колесо без тормоза;
- 3) соберите каркас в следующем порядке:
 - сориентируйте стойки таким образом, чтобы уголки для полок располагались внутри каркаса,
 - соедините винтами 7x50 с помощью ключа шестигранного 4 мм стойки с трубами через втулки, установленные в трубах изготовителем, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм,

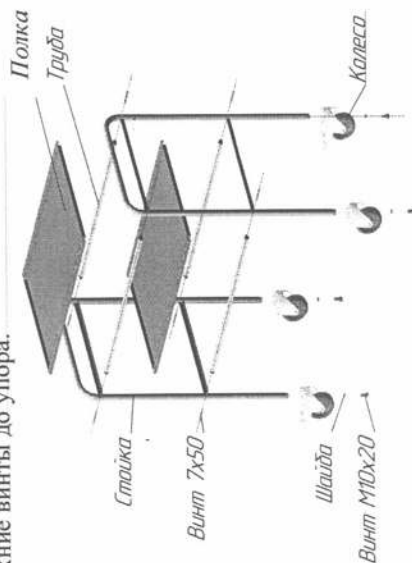


Рисунок 1 – Схема сборки столика

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения труб со стойками, с помощью ключа шестигранного 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи столика потребителю.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,


г. Гомель, ул. Федюнинского, 19

УП «Ратон-МедТех»

тел/факс +375 232 68 35 73, 68 36 47

Столик медицинский инструментальный СИ-12

Паспорт

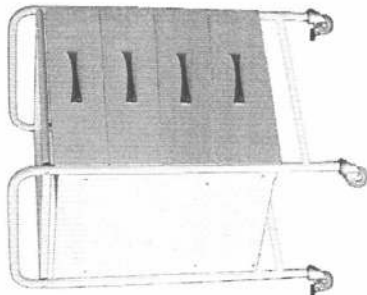

6 Гарантия изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи столика потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении столика на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс +375 232 68 35 73, 68 36 47

7 Свидетельство о приемке

Столик медицинский инструментальный СИ-12 соответствует техническим условиям ТУ РБ 14440234.004-94 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковщик _____

Ответственный за приемку _____ (подпись) _____ (штамп ОТК)

----- Линия отреза -----

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:

Столик медицинский инструментальный
(наименование)

СИ-12 _____
(обозначение) **ТУ РБ 14440234.004-94**
(номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Столик медицинский инструментальный СИ-12 (далее столик) предназначен для размещения на нем инструмента, материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, операционных, на постах медицинских сестер в отделениях больницы, в клиниках, поликлиниках и других медицинских учреждениях.

Внимание! Столик не является транспортным средством!

В связи с постоянной работой по совершенствованию столика, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры столика (длина, ширина – без учета колесных опор, высота - с колесными опорами):

длина – 640 мм, ширина – 450 мм, высота – 880 мм.

Масса столика не более 26,5 кг.

Максимальная нагрузка на полку не более 8 кг, на ящик – не более 5 кг.

Столик драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- столлик* — 1 шт.,
- паспорт — 1 шт.,
- коробка упаковочная — 1 шт.

* - поставляется в разобранном виде в составе:

Материал полки	Отметка наличия
Нержавеющая сталь	✓
Сталь с покрытием полимерной краской	--

стойка	- 2 шт.,	пластина	- 8 шт.;
труба со втулками	- 4 шт.,	винт М4х6	- 8 шт.;
рамка	- 1 шт.,	винт М5х6	- 8 шт.;
ящик	- 4 шт.,	винт 7х50	- 12 шт.,
полка	- 1 шт.,	винт М10х20	- 4 шт.,
колесная опора без тормоза	- 2 шт.,	шайба	- 4 шт.,
колесная опора с тормозом	- 2 шт.,	ключ шестигранный 8 мм	- 1 шт.,
ручка ящика	- 4 шт.,	ключ шестигранный 4 мм	- 1 шт.

4 Устройство столика и указания по сборке и эксплуатации

Подготовка столика к эксплуатации, в том числе сборка столика и ввод в эксплуатацию выполняется потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Столик представляет собой разборную металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, четырех выдвижных ящиков и съемной верхней полки. Столик установлен на самоориентирующиеся колесные опоры, две из которых оборудованы стопорным механизмом. Полимерное покрытие столика, наносимое методом порошкового напыления, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Полка по согласованию с Заказчиком изготавливается окрашенной полимерной порошковой краской, либо из нержавеющей стали, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Материал полки указан в разделе 3 настоящего паспорта.

Сборку столика производите в следующем порядке (см. рисунок 1):

- 1) освободите столик от упаковок, снимите защитную пленку с полки (при наличии);
- 2) установите с помощью ключа шестигранный 8 мм колесные опоры на стойки, используя винты М10х20 и шайбы следующим образом:
 - положите стойки на плоской поверхности вверх направляющими, в которые будут вставлены ящики,
 - установите и затяните винтами на каждую стойку: слева — шайбу и 1 колесо с тормозом, справа — шайбу и 1 колесо без тормоза;
- 3) соберите каркас в следующем порядке:
 - сориентируйте стойки таким образом, чтобы направляющие для ящиков располагались внутри каркаса,
 - соедините винтами 7х50 с помощью ключа шестигранный 4 мм стойки через втулки с рамкой, расположив рамку на задней стороне столика, и трубами, не зажимая винты до упора 0,5-1 мм,
 - установите верхнюю полку, произведите при необходимости выравнивание положения полки одновременным нажатием на стойки в диагональном направлении,
 - зажмите все винты, соединяющие трубы и рамку со стойками, до упора;
- 4) произведите сборку каждого ящика, для чего

- соедините панель ящика с ящиком с помощью пластин и винтов М5х6, как показано на рис. 1, сориентировав при этом угольники, расположенные на панели ящика, стрелкой вверх,
- на ящик установите ручки, используя винты М4х6;
- 5) вставьте ящики в направляющие, закрутите их до упора.

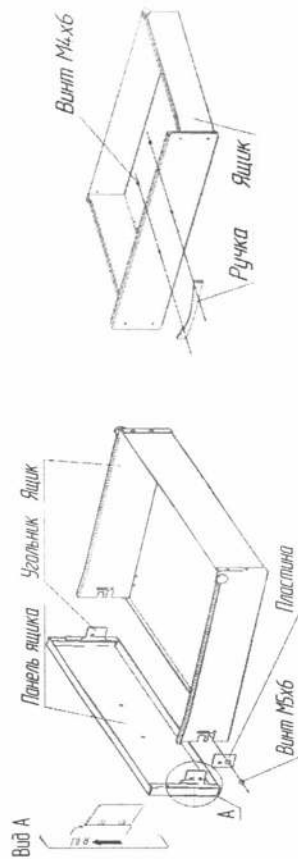
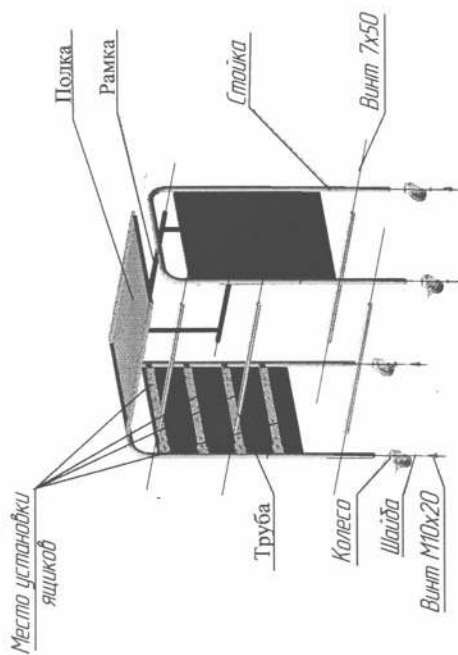


Рисунок 1 – Схема сборки столика

Произведите санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого столик готов к эксплуатации.

Внимание! Периодически, по мере ослабления, подтягивайте винтовые соединения труб и рамки со стойками, с помощью ключа шестигранный 4 мм.

5 Транспортирование и хранение

Столик может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.