

Ретракционная нить витая, пропитанная алюминия хлорида гексагидратом.

Применяется при ретракции тканей десны вокруг зуба для улучшения качества оттиска челюсти и гемостаза краевой десны.

СОСТАВ: полиэстер/полиамидная конъюгированная пряжа.

Пропитанная алюминия хлорида гексагидратом 0,50 мг ± 0,10 мг/дюйм.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Пропитанную нить обрезают до необходимой длины, используя край на колпачке.
- Нить плотно надевают на шейку зуба и осторожно вдавливают в десневую борозду с помощью инструмента для укладки ретракционных нитей.
- Оставляют нить в борозде на 5 минут.
- Непосредственно перед съемкой слепка нить снимают.

СОДЕРЖИМОЕ:


- Дозатор на 254 см (100 дюймов).

ХРАНЕНИЕ:

- После использования закрывают колпачком и хранят в сухом месте.

МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Только для использования в стоматологии.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не использовать у пациентов с аллергией на алюминия хлорида гексагидрат в анамнезе.
- Раздражает кожу и глаза.
- Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке

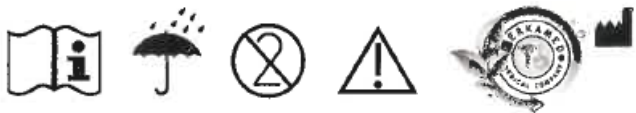

PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski
37-450 Stalowa Wola, Польша
ul. Kwiatkowskiego 1
Тел./Факс 0048 15 842-35-85

Последнее обновление:
18.11.2019/2