

АО «Новосибхимфарм»	Лейкопластырь фиксирующий нестерильный «Мультипласт»® по ТУ 21.20.24-043-00480520-2011	стр. 1 из 3
		Инструкция по применению медицинского изделия

Указание по применению медицинского изделия
Лейкопластыря фиксирующего, нестерильного «Мультипласт»®

Наименование:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Мультипласт»® по
ТУ 21.20.24-043-00480520-2011

Описание:

Лейкопластырь представляет собой тканевую подложку (основу), покрытую клеевым слоем. Лейкопластырь выпускается в рулонах на картонной гильзе, или в виде полосы подложки с клеевым слоем с защитным покрытием.

Состав:

Материал подложка (основа): ткань хлопчатобумажная

Клеевой слой: термоплавкий клей.

Гильза картонная

Упаковка: пачка картонная

Описание принципа действия:

Неинвазивное сцепление с поверхностью кожи с целью фиксации повязок на месте или прикрепления предметов.

Область применения:

Перевязочное медицинское изделие.

Условия применения:

В стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических медицинских учреждениях, в полевых и домашних условиях.

Показания к применению:

Для фиксации повязок, крепления дренажных трубок, зондов, катетеров и пр.

Противопоказания:

Возможна индивидуальная непереносимость.

Способ применения:


Отрезать полосу лейкопластыря необходимого размера, клеевой стороной наложить на повязку и края полосы прижать к коже.

Возможные побочные действия при применении:

Возможны аллергические реакции в местах прикрепления. В этих случаях не рекомендуется применение лейкопластыря.

Взаимодействия с другими медицинскими изделиями:

Не использовать одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках.

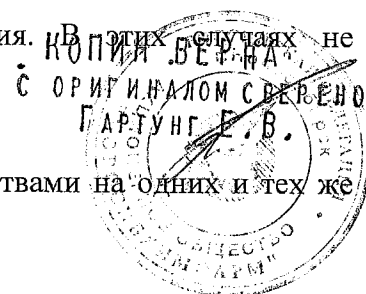

АО «Новосибхимфарм»	Лейкопластырь фиксирующий нестерильный «Мультипласт»® по ТУ 21.20.24-043-00480520-2011	стр. 2 из 3
		Инструкция по применению медицинского изделия

Указание возможности и особенностей применения для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих хронические заболевания:

Исследование применения медицинского изделия лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Мультипласт»® у людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых имеющих, хронические заболевания не проводилось.

Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Сведения о возможном влиянии использования на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Исследования о возможном влиянии медицинского изделия лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Мультипласт»® на способность управлять транспортными средствами, механизмами не проводились. Решение об использовании следует принимать, оценивая соотношение возможного риска для пациента.

Форма выпуска:

Лейкопластырь в рулоне упаковывают в пачки складные из картона.

Пачки помещают в ящик из гофрированного картона.

Условия хранения:

Условия хранения лейкопластыря:

- в транспортной упаковке – 2 (С) ГОСТ 15150, но при температуре от минус 20 до плюс 30 °С;

- в потребительской упаковке – хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 20 до плюс 30 °С.

Условия транспортирования:

Условия транспортирования - по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, но при температуре от минус 20 до плюс 30 °С.

Срок годности:

Гарантийный срок годности - 4 года со дня изготовления. Не использовать позднее срока, указанного на упаковке.

Требования безопасности и охраны окружающей среды:

В условиях эксплуатации лейкопластырь по токсикологическим и санитарно-химическим показателям отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к материалам, контактирующим с кожными покровами человека.


Лейкопластырь относится к горючим веществам, не взрывоопасен.

Охрана окружающей среды по ГОСТ 17.2.3.01.

При производстве лейкопластыря образующиеся отходы складироваться в контейнеры и утилизируются в установленном порядке.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использованный лейкопластырь относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

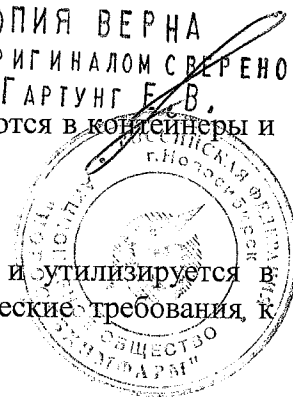

АО «Новосибхимфарм»	Лейкопластырь фиксирующий нестерильный «Мультипласт»® по ТУ 21.20.24-043-00480520-2011	стр. 3 из 3
		Инструкция по применению медицинского изделия

Неиспользованный лейкопластырь специальных мер предосторожности при уничтожении не требует.

Технические характеристики:

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Мультипласт»® выпускается в виде рулона, намотанного на картонную гильзу следующих размеров (в сантиметрах), 2х300, 3х300, 1х500, 2х500, 3х500, 4х500, 5х500.

Лейкопластырь должен иметь равномерный сплошной или штриховой, или волнообразный клеевой слой, не должен содержать загрязненных участков, посторонних включений, складок.

Сопротивление отслаиванию должно быть не менее 0,35 Н/см.

Легко отстает при разматывании, легко прилипает к коже.

Производитель/организация, принимающая претензии:

АО «Новосибхимфарм»

630028, Россия, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275

тел. (383) 363-32-44; факс (383) 363-32-55, e-mail: mail@nskpharm.ru

