



КОПИЯ ВЕРНА

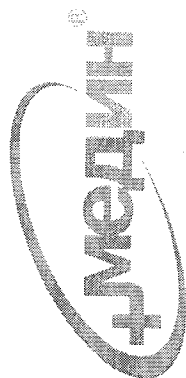

КРОВАТЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ КН-01

ТУ ВУ 800003039.041-2015

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

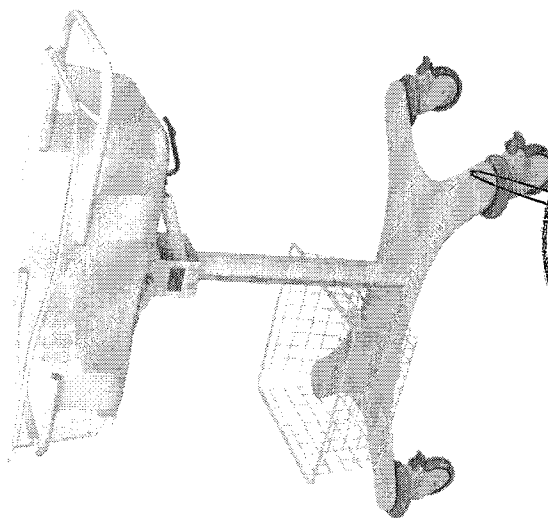


Директор

ООО «Мединдустрия Сервис»

В. Елисеев

« 06 » 2015 г.

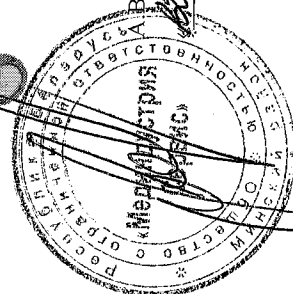

Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Кровати для новорожденных КН-01 (далее – кровать) по назначению все пользователи должны внимательно изучить данные Руководство по эксплуатации до начала использования изделия. Руководство по эксплуатации написано для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Руководство по эксплуатации предназначено для медицинского персонала, ответственного за использование кровати во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Руководству по эксплуатации.
- Руководство по эксплуатации следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Медиондустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка.....	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание.....	6
6 Состав изделия и устройство	7
7 Комплект поставки.....	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	9
9 Технические характеристики	9
10 Уход и обслуживание	10
11 Сведения об утилизации	11
12 Сведения об упаковке.....	12
13 Гарантии Изготовителя	12
14 Свидетельство об упаковке.....	14
15 Свидетельство о приемке.....	15
Приложение 1 Гарантийный талон.....	17
Приложение 2 Акт-рекламация.....	19
Приложение 3 Талон обратной связи потребителя с производителем.....	21

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Для обеспечения качества нашей продукции и сервиса просим Вас заполнить нижеприведенную форму и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на е-мэйл: feedback@medip.by.

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « _____ » _____ 20 г.

Предприятие (потребитель) _____

Ф.И.О. представителя потребителя _____

Е.мэйл, тел., факс _____

Изделие, катал. номер, заводской номер _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Условия эксплуатации _____

Удовлетворённость изделием _____

Надёжность _____

Функциональность _____

Дизайн _____

Пожелание потребителя _____

Подпись _____

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство кровати, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем Руководстве по эксплуатации
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать кровать грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра кровать на наклонных поверхностях пола.
	Во время передвижения кровати следует избегать препятствий и столкновений.
	Не перемещать кровать по электрическим кабелям.


2. Символы

Особенно важная информация в настоящем Руководстве по эксплуатации обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Обратитесь к Паспорту
SN	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Предупреждение
	Бережь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле

	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

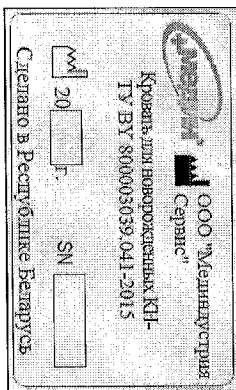

Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другие.

4. Использование изделия по назначению

Кровать для новорожденных КН-01 предназначена для нахождения и ухода за новорожденными во время пребывания в родильном отделении и перемещения его в пределах данного отделения, а также для обеспечения оптимальных условий работы медицинского персонала.

5. Общее описание

Кровать может использоваться в детских отделениях, родильных и неонатальных отделениях, родильных домах.

Кровать изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 в соответствии с требованиями ТУ ВУ 800003039.041 – 2015.

Кровать соответствует требованиям ГОСТ 20790 для изделий группы 2 класса В. Каркас кровати выполнен из конструкционных углеродистых сталей и алюминированного профиля с полимерным порошковым покрытием, что позволяет производить многоразовую обработку и дезинфекцию тележки растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделия.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

* Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

* Дата «__» ____ 20__ г.

* Составлен комиссией в составе:
Представителя приобретателя

представителя изготовителя, продавца (поставщика)
(подпись, Ф.И.О.)

* На изделие _____
(наименование, Ф.И.О.)

* Заводской номер изделия _____
(полное наименование, тип, марка)

Предприятие-изготовитель ООО «Мединаутстрия Сервис»

* Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

* Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

1. Вид и условия работы _____
(место, день, время, характер работы и т.д.)

* 2. Неисправность изделия _____
(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Вина виновной стороны _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)
(указать текст изготовления, продавца (поставщика) или приобретателя)

Подписи членов комиссии:

* Представитель приобретателя _____

(Ф.И.О., подпись) _____ * Представитель продавца (поставщика)
(Ф.И.О., подпись) _____
м.п. _____

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by
Полн, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.

6. Состав изделия и устройство

6.1 Внешний вид кровати представлен на рисунке 1.

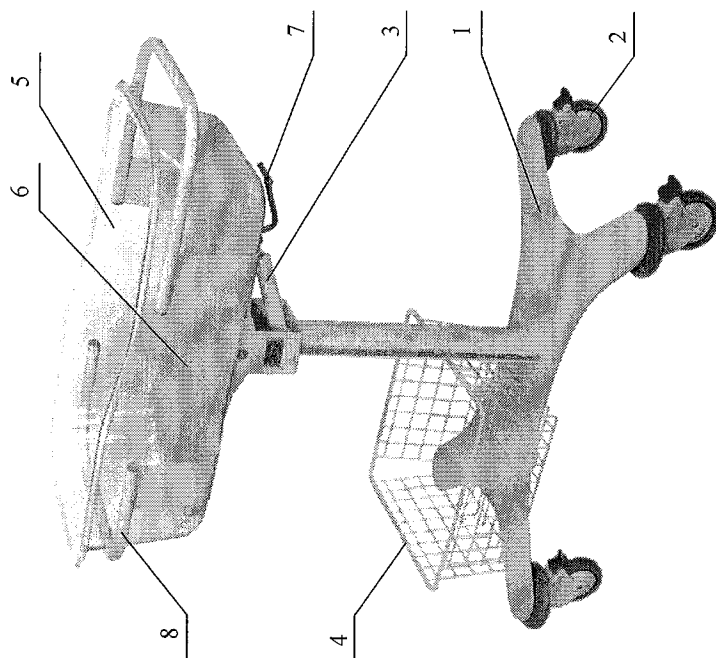


Рисунок 1. Внешний вид кровати.

1 – Основание; 2 – Колесо Ø 100 мм; 3 – Пружина газовая; 4 – Корзина; 5 – Ванна-кювета
6 – Матрас; 7 – Рукоятка управления газовой пружиной; 8 – Люлька.

Кровать состоит из основания 1, люльки 8, ванной-кюветы 5 и матраса 6 (Рисунок 1).

6.2 В основание встроены два поворотных колеса с тормозом и два колеса без тормоза. На основание крепится корзина 4. Вверху на стойке крепится люлька и газовая пружина 3, управляющая наклоном люльки. При нажатии на рукоятку 7 осуществляется регулировка наклона люльки.

6.3 В люльку устанавливается ванна-кювета 5 с матрасом 6.

6.4. Наклон люльки кровати.

Взявшись за поручень люльки одной рукой, нажмете другой рукой на рукоятку 7 (Рисунок 1) и наклоните люльку вниз. Для того чтобы наклонить люльку вверх необходимо нажать на рукоятку 7 снизу вверх и приподнять люльку.

6.5. Мобильные возможности кровати.

Перемещение кровати во всех направлениях возможно благодаря закрепленным на основании колесам.

На основании установлены два поворотных колеса Ø 100 мм с тормозом и два поворотных колеса Ø 100 мм без тормоза.

ВНИМАНИЕ! На полу под кроватью не должно быть препятствий!
Во время перемещения кровати следует избегать столкновений!

6.6. Работа тормоза.

Педаль тормоза на колесе 2 (Рисунок 1) имеет два положения:

БЛОКИРОВКА:

Кровать заблокирована в рабочем положении нажатием педали тормоза в нижнее положение, при котором блокируются колеса.

СВОБОДНО:

Разблокировка колеса выполняется при помощи подъема педали колеса в среднее положение, что позволяет перемещать кровать.

7. Комплект поставки

Комплект поставки кровати должен соответствовать указанному в Таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Количество
Кровать	1
Ванна-ковчег	1
Корзина проволочная	1
Матрас	1
Руководство по эксплуатации	1

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

8.1 Условия хранения:

Кровать должна храниться в закрытом помещении.

Температура хранения от -50 °C до +40 °C

Относительная влажность воздуха от 30 до 75%

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мелинидустрия Сервис»

(юридическое лицо, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Платернинский совет, район д. Дубовицы.

Проповольственный бокс ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21

Гарантийный талон № _____

КРОВАТЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ КН-01

(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.041-2015.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяцев
(месяцев, дней, часов и т.д.).

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

8.2 Условия эксплуатации:

Установка изделия производится в специально оборудованном кабинете.

Температура эксплуатации от +10 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха от 30 до 75%

8.3 Условия транспортирования

Кровать следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Температура при транспортировании от -50 °C до +50 °C

Относительная влажность воздуха от 30 до 95%

	ВНИМАНИЕ! Перед использованием кровати должна находиться не менее 3-х часов в помещении при комнатной температуре.
	ВНИМАНИЕ! Перед использованием кровати необходимо снять защитную пленку с внутренней и наружной стороны ванны-кюветы.

9. Технические характеристики

9.1	Безопасная рабочая нагрузка на кровать, кг	10
9.2	Масса кровати, не более, кг	28
9.3	Высота кровати при горизонтальном положении кюветы, мм, не более	990
9.4	Наклон кюветы относительно горизонтальной плоскости, не менее:	
	вверх	15°
	вниз	15°
9.5	Длина кровати по бамперам, мм, не менее	830
9.6	Общая длина кровати, мм, не менее	915
9.7	Ширина кровати по бамперам, мм, не менее	535
9.8	Длина ванны-кюветы, мм, не менее	750
9.9	Глубина ванны-кюветы, мм, не менее	215
9.10	Ширина ванны-кюветы, мм, не менее	450
9.11	Диаметр колёсных опор, мм	100

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ .
	Применение механических методов очистки при дезинфекции не допускается!
	Применение дезинфицирующих средств содержащих хлор или веществ, способных выделять хлор в процессе применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ . Это может привести к коррозии элементов, изготовленных из нержавеющей стали.
	Не допускается применение чистящих веществ, содержащих спирт (таких как дезинфицирующие растворы для мытья рук), либо использование распылителей дезинфицирующих растворов. Их применение может вызвать вымывание смазки в местах сочленения и привести к коррозии механических элементов. Применение спирта может повредить пластмассовые детали и матрасы.

Дезинфекцию кровати следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

При проведении дезинфекции рекомендуется использовать водные растворы дезинфицирующих средств на альдегидной основе.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время экспозиции.
- После обработки кровати дезинфицирующими растворами обязательно протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

10.2 Техническое обслуживание.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Руководства по эксплуатации и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 7 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
---	--

15. Свидетельство о приемке

Кровать для новорожденных КН-01 зав. № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия

обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Заказчик
(при наличии)

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

14. Свидетельство об упаковке

Кровать для новорожденных КН-01 зав. № _____ упакована в ООО «Медиондустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ должность _____
число, месяц, год

	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации кровати.
---	---

ТО-1 (ежемесячное техническое обслуживание) проводится силами медицинского учреждения:

- во время обычной чистки проведите общую визуальную проверку исправности оборудования;
- чистку изделия необходимо выполнять после каждой смены. При дезинфекции учитывайте рекомендации п.10.1 настоящего Руководства по эксплуатации.
- хорошо просушите поверхность, протерев их сухой тканью сразу же после выполнения чистки или дезинфекции.

ТО-2 (выполняется не реже одного раза в месяц) проводится силами медицинского учреждения:

- выполните работы согласно ТО-1;
- проверьте комплектность и при необходимости произведите подтяжку крепежа;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

11 Сведения об утилизации

	Кровать для новорожденных КН-01 не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов кровати производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.
11.1 Металл.

Металл составляет 90% от общего веса кровати. Большинство металлических деталей сделано из черной и нержавеющей стали. Утилизацию металлических частей кровати производят специализированные организации по переработке промышленных отходов.

11.2 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



11.3 Упаковка.

Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически расщепляются.

11.4 Газовые пружины.

Газовые пружины могут быть утилизированы как металлическое вторсырье после того, как из них специализированной организацией будет удален весь газ и масло.

11.5 Пенополиуретановые подушки.

Пенополиуретан может использоваться при вторичной переработке только на специализированных предприятиях. Отходы из пенополиуретана следует собирать в отдельные контейнеры, предназначенные для сбора отходов из пластмасс.

12. Сведения об упаковывании

Кровать упаковывают в деревянные ящики. Упаковка производится в соответствии с документацией и стандартами предприятия.

13. Гарантии изготовителя

1. ООО «Мединдустрія Сервис» (далее – Изготовитель) гарантирует конечному потребителю, что вся новая продукция, приобретенная напрямую, через дилеров или других авторизованных представителей, не содержит дефектов изготовления и материалов, при использовании в соответствии с предпологаемым (преднамеренным) назначением и соблюдении правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортировки, указанными в руководстве по эксплуатации. Данная Ограниченная гарантия предоставляется без права ее передачи.
2. Срок гарантии (далее – «Гарантийный срок») – 24 месяца. Начало Гарантийного срока исчисляется с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее восьми месяцев с даты изготовления изделия.
3. Ремонтные работы, требуемые для восстановления изделия до состояния полной функциональности, включая замену дефектных деталей или компонентов изделия, а так же оплата расходов по их стандартной доставке в течение Гарантийного срока, осуществляются за счет Изготовителя.

4. Ремонт в течение Гарантийного срока производится только после получения Изготовителем Акта-рекламации с обязательным указанием: наименования изделия, модели, серийного номера, даты поставки, даты ввода в эксплуатацию, описания повреждения и возврата дефектных деталей или компонентов завод-изготовителю.

5. Ремонт или замена компонентов изделия производится непосредственно представителями Изготовителя, либо представителями уполномоченного сервисного центра.


6. Ответственность ООО «Мединдустрія Сервис» ограничивается ремонтными работами, полной или частичной заменой деталей или компонентов, признанных дефектными в Гарантийный срок.

7. В случае наступления гарантийного случая Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Время нахождения изделия в гарантийном ремонте определяется отметками в фирменном Талоне на Гарантийный Ремонт.

8. Следующие действия и убытки являются не гарантийными:

- Ущерб, причиненный природными явлениями, такими как пожар, наводнение, ветер, землетрясение, молнии и т.д.
 - Ущерб, причиненный нарушениями правил подготовки изделия к эксплуатации или несоблюдением надлежащих условий эксплуатации изделия.
 - Ущерб, причиненный в результате столкновения с другими предметами, падении, пролива жидкостей или погружения в жидкости.
 - Ущерб, причиненный в результате несанкционированного ремонта или разборки изделия.
 - Ущерб, причиненный в результате любого другого злоупотребления, неправильного использования, неправильного обращения или неправильного применения изделия.
- Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия
- Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия.
 - Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклеек с серийными номерами на его деталях).
9. Ни при каких обстоятельствах изделие не должно использоваться не по назначению.
10. ООО «Мединдустрія Сервис» не несет ответственности за любые другие непредвиденные расходы, потери или повреждения, напрямую или косвенно связанные с продажей, использованием или невозможностью использования изделия.


КОПИЯ ВЕРНА

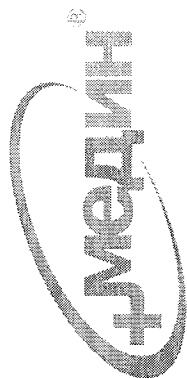

КРОВАТЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ КН-02

ТУ ВУ 800003039.041-2015

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

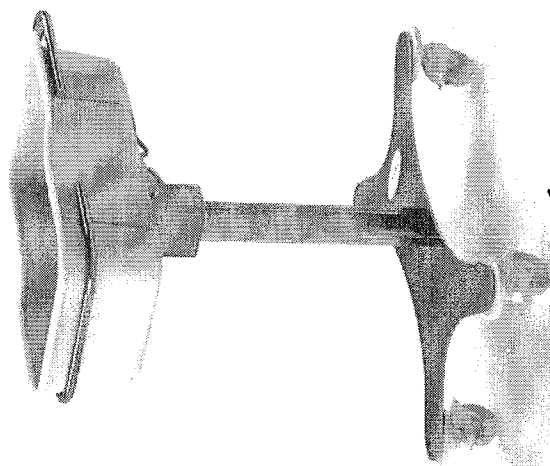

Директор

А.В. Елисеев

«14» 06 2020г.



ООО «Мединдустрия Сервис»

Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Кровати для новорожденных КН-02 (далее – кровать) по назначению все пользователи должны внимательно изучить данные Руководство по эксплуатации до начала использования изделия. Руководство по эксплуатации написано для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Руководство по эксплуатации предназначено для медицинского персонала, ответственного за использование кровати во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Руководству по эксплуатации.
- Руководство по эксплуатации следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка.....	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание.....	6
6 Состав изделия и устройство	7
7 Комплект поставки	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	9
9 Технические характеристики	9
10 Уход и обслуживание	10
11 Сведения об утилизации	11
12 Сведения об упаковке.....	12
13 Гарантии Изготовителя	12
14 Свидетельство об упаковке.....	14
15 Свидетельство о приемке.....	15
Приложение 1 Гарантийный талон.....	17
Приложение 2 Акт-рекламации.....	19
Приложение 3 Талон обратной связи потребителя с производителем.....	21

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Для обеспечения качества нашей продукции и сервиса просим Вас заполнить нижеприведенную форму и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: feedback@medin.by.

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « » 20 г.

Предприятие (потребитель) _____

Ф.И.О. представителя потребителя _____

E-mail, тел., факс _____

Изделие, катал. номер, заводской номер _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Условия эксплуатации _____

Удовлетворённость изделием _____

Надёжность _____

Функциональность _____

Дизайн _____

Пожелание потребителя _____

Подпись _____

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство кровати, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем Руководстве по эксплуатации
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать кровать грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра кровать на наклонных поверхностях пола.
	Во время передвижения кровати следует избегать препятствий и столкновений.
	Не перемещать кровать по электрическим кабелям.


2. Символы

Особенно важная информация в настоящем Руководстве по эксплуатации обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Обратитесь к Паспорту
SN	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Предупреждение
	Бережь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле

	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

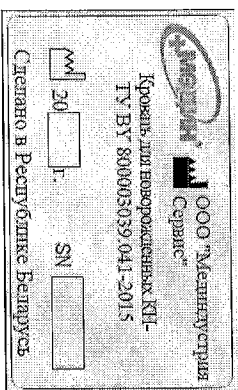

Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Кровать для новорожденных КН-02 предназначена для нахождения и ухода за новорожденными во время пребывания в родильном отделении и перемещения сто в пределах данного отделения, а также для обеспечения оптимальных условий работы медицинского персонала.

5. Общее описание

Кровать может использоваться в детских отделениях, родильных и неонатальных отделениях, родильных домах.

Кровать изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 в соответствии с требованиями ТУ ВУ 800003039.041 – 2015.

Кровать соответствует требованиям ГОСТ 20790 для изделий группы 2 класса В. Каркас кровати выполнен из конструкционных углеродистых сталей и алюминированного профиля с полимерным порошковым покрытием, что позволяет производить многоразовую обработку и дезинфекцию тележки растворам, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделия.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

* Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

* Дата «__» _____ 20__ г.

* Составлен комиссией в составе:
Представители приобретателя

представители изготовителя, продавца (поставщика) _____ (должность, Ф.И.О.)

* На изделие _____ (наименование, Ф.И.О.)

* Заводской номер изделия _____ (полное наименование, тип, марка)

Предприятие-изготовитель ООО «Медианалюстра Сервис»

* Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

* Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

1. Вид и условия работы _____ (наименование, вид, место, характер работы и т.д.)

* 2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Винована сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать как: изготовитель, продавец (поставщик) или приобретатель)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

* Представитель приобретателя _____

(Ф.И.О., подпись)
М.П.

* Представитель продавца (поставщика) _____

(Ф.И.О., подпись)
М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by
Полн, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.

6. Состав изделия и устройство

6.1 Внешний вид кровати представлен на рисунке 1.

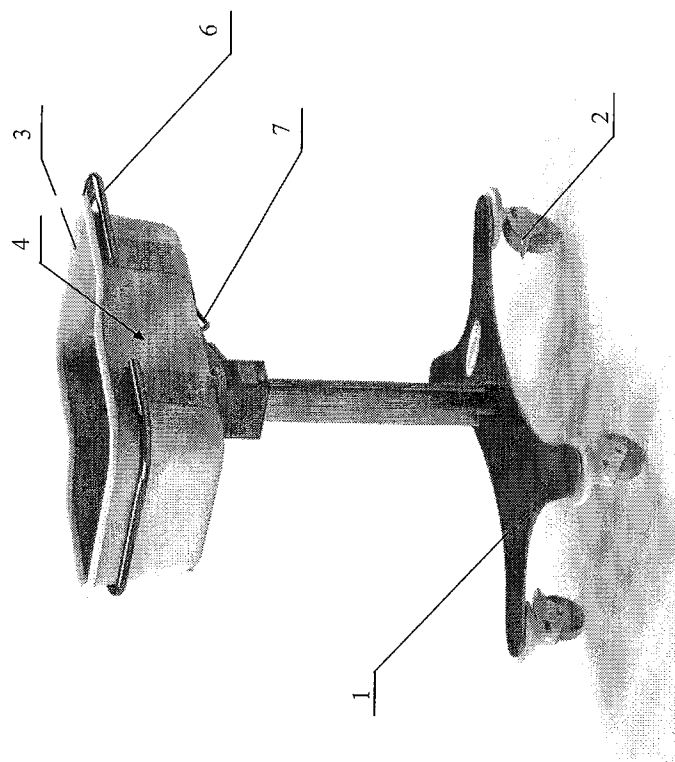


Рисунок 1. Внешний вид кровати.

1 – Основание; 2 – Колесо Ø 100 мм; 3 – Ванна-кувета
4 – Матрас; 6 – Люлька; 7 – Рукоятка управления приводом наклона;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мелинистрыя Сервис»

(индивидуально-предприниматель, его адрес, телефон, расчетный счет)
223043 Республика Беларусь, Минский район, Птаеринский совет, район д. Дубовинны,
Противоположенная база ООО «Детрмех», каб. №65, Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21

Гарантийный талон № _____

КРОВАТЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ КН-02

(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)
Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.041-2015.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяцев
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

Кровать состоит из основания 1, люльки 68, ванна-ковчеза 3 и матраса 4 (Рисунок 1).

6.2 В основание встроены два поворотных колеса с тормозом и два колеса без тормоза. Вверху на стойке крепится люлька и привод наклона люльки. При нажатии на ручку 7 осуществляется регулировка наклона люльки.

6.3 В люльку устанавливается ванна-ковчеза 3 с матрасом 4.

6.4. Наклон люльки кровати.

Взявшись за ручку люльки одной рукой, нажимаете другой рукой на ручку 7 (Рисунок 1) и наклоните люльку вниз. Для того чтобы наклонить люльку вверх необходимо нажать на ручку 7 снизу вверх и приподнять люльку.

6.5. Мобильные возможности кровати.

Перемещение кровати во всех направлениях возможно благодаря закрепленным на основании колесам.

На основании установлены два поворотных колеса Ø 100 мм с тормозом и два поворотных колеса Ø 100 мм без тормоза.



ВНИМАНИЕ: На полу под кроватью не должно быть препятствий!
Во время перемещения кровати следует избегать столкновений!

6.6 Работа тормоза.

Педаль тормоза на колесе 2 (Рисунок 1) имеет два положения:

БЛОКИРОВКА:

Кровать заблокирована в рабочем положении нажатием педали тормоза в нижнее положение, при котором блокируются колеса.

СВОБОДНО:

Разблокировка колеса выполняется при помощи подъема педали колеса в среднее положение, что позволяет перемещать кровать.

7 Комплект поставки

Комплект поставки кровати должен соответствовать указанному в Таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Количество
Кровать	1
Ванна-ковчеза	1
Матрас	1
Руководство по эксплуатации	1

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

8.1 Условия хранения:

Кровать должна храниться в закрытом помещении.

Температура хранения от -50 °C до +40 °C

Относительная влажность воздуха от 30 до 75%

8.2 Условия эксплуатации:

Установка изделия производится в специально оборудованном кабинете.

Температура эксплуатации от +10 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха от 30 до 75%

8.3 Условия транспортирования

Кровать следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Температура при транспортировании от -50 °C до +50 °C

Относительная влажность воздуха от 30 до 95%

	ВНИМАНИЕ! Перед использованием кровать должна находиться не менее 3-х часов в помещении при комнатной температуре.
	ВНИМАНИЕ! Перед использованием кровати необходимо снять защитную пленку с внутренней и наружной стороны ванны-ковчезы.

9. Технические характеристики

9.1	Безопасная рабочая нагрузка на кровать, кг	10
9.2	Масса кровати, не более, кг	28
9.3	Высота кровати при горизонтальном положении коветы, мм, не более	900
9.4	Наклон коветы относительно горизонтальной плоскости, не менее:	
	вверх	15°
	вниз	15°
9.5	Длина кровати по бамперам, мм, не менее	830
9.6	Общая длина кровати, мм, не менее	915
9.7	Ширина кровати по бамперам, мм, не менее	535
9.8	Длина ванны-ковчезы, мм, не менее	750

9.9	Глубина ванны-ковчеза, мм, не менее	215
9.10	Ширина ванны-ковчеза, мм, не менее	450
9.11	Диаметр колёсных опор, мм	100

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

⚠	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ .
⚠	Применение механических методов очистки при дезинфекции не допускается!
⚠	Применение дезинфицирующих средств содержащих хлор или веществ, способных выделять хлор в процессе применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ . Это может привести к коррозии элементов, изготовленных из нержавеющей стали.
⚠	Не допускается применение чистящих веществ, содержащих спирт (таких как дезинфицирующие растворы для мытья рук), либо использование распылителей дезинфицирующих растворов. Их применение может вызывать вымывание смазки в местах сочленения и привести к коррозии механических элементов. Применение спирта может повредить пластмассовые детали и матрасы.

Дезинфекцию кровати следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

При проведении дезинфекции рекомендуется использовать водные растворы дезинфицирующих средств на альдегидной основе.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время экспозиции.
- После обработки кровати дезинфицирующими растворами обязательно протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

15. Свидетельство о приемке

Кровать для новорожденных КН-02 зав. № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП _____
личная подпись _____
расшифровка подписи _____

число, месяц, год

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель _____
предприятия _____
обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____
личная подпись _____
расшифровка подписи _____

число, месяц, год

Заказчик
(при наличии)

МП _____
личная подпись _____
расшифровка подписи _____

число, месяц, год

14. Свидетельство об упаковке

Кровать для новорожденных КН-02 зав. № _____ упакована в ООО «Медиондустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность	личная подпись	расшифровка подписи
-----------	----------------	---------------------

число, месяц, год

10.2 Техническое обслуживание.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Руководства по эксплуатации и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 7 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации кровати.

ТО-1 (ежедневное техническое обслуживание) проводится силами медицинского учреждения:

- во время обычной чистки проводите общую визуальную проверку исправности оборудования;
- чистку изделия необходимо выполнять после каждой смены. При дезинфекции учитывайте рекомендации п.10.1 настоящего Руководства по эксплуатации.
- хорошо просушите поверхности, протерев их сухой тканью сразу же после выполнения чистки или дезинфекции.

ТО-2 (выполняется не реже одного раза в месяц) проводится силами медицинского учреждения:

- выполните работы согласно ТО-1;
- проверьте комплектность и при необходимости произведите подтяжку крепежа;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

11 Сведения об утилизации

	Кровать для новорожденных КН-02 не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов кровати производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

11.1. Металл.

Металл составляет 90% от общего веса кровати. Большинство металлических деталей сделано из черной и нержавеющей стали. Утилизацию металлических частей кровати производят специализированные организации по переработке промышленных отходов.

11.2. Пластмасса.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



11.3. Упаковка.

Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически расщепляются.

11.4. Газовые пружины.

Газовые пружины могут быть утилизированы как металлическое вторсырье после того, как из них специализированной организацией будет удален весь газ и масло.

11.5. Пенополиуретановые подушки.

Пенополиуретан может использоваться при вторичной переработке только на специализированных предприятиях. Отходы из пенополиуретана следует собирать в отдельные контейнеры, предназначенные для сбора отходов из пластмасс.

12. Сведения об упаковке

Кровать упаковывают в деревянные ящики. Упаковка производится в соответствии с документацией и стандартами предприятия.

13. Гарантии изготовителя

1. ООО «Мединдустрия Сервис» (далее – Изготовитель) гарантирует конечному потребителю, что вся новая продукция, приобретенная напрямую, через дилеров или других авторизованных представителей, не содержит дефектов изготовления и материалов, при использовании в соответствии с предполагаемым (предназначенным) назначением и соблюдении правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортировки, указанными в руководстве по эксплуатации. Данная Ограниченная гарантия предоставляется без права ее передачи.

2. Срок гарантии (далее – «Гарантийный срок») – 24 месяца. Начало Гарантийного срока исчисляется с даты ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее восьми месяцев с даты изготовления изделия.

3. Ремонтные работы, требуемые для восстановления изделия до состояния полной функциональности, включая замену дефектных деталей или компонентов изделия, а также оплата расходов по их стандартной доставке в течение Гарантийного срока, осуществляются за счет Изготовителя.

4. Ремонт в течение Гарантийного срока производится только после получения Изготовителем Акта-рекламации с обязательным указанием наименования изделия, модели, серийного номера, даты поставки, даты ввода в эксплуатацию, описания повреждения и возврата дефектных деталей или компонентов заводу-изготовителю.

5. Ремонт или замена компонентов изделия производится непосредственно представителями Изготовителя, либо представителями уполномоченного сервисного центра.

6. Ответственность ООО «Мединдустрия Сервис» ограничивается ремонтными работами, полной или частичной заменой деталей или компонентов, признанных дефектными в Гарантийный срок.

7. В случае наступления гарантийного случая Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Время нахождения изделия в гарантийном ремонте определяется отметками в фирменном Талоне на Гарантийный Ремонт.

8. Следующие действия и убытки являются не гарантийными:

- Ущерб, причиненный природными явлениями, такими как пожар, наводнение, ветер, землетрясение, молния и т.п.
- Ущерб, причиненный нарушениями правил подготовки изделия к эксплуатации или несоблюдением надлежащих условий эксплуатации изделия.
- Ущерб, причиненный в результате столкновения с другими предметами, падения, пролива жидкостей или погружения в жидкостях.
- Ущерб, причиненный в результате несанкционированного ремонта или разборки изделия.
- Ущерб, причиненный в результате любого другого злоупотребления, неправильного использования, неправильного обращения или неправильного применения изделия.

Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия

- Незначительные регулировки, связанные с естественным износом изделия.
- Изменение, удаление, затирание или повреждение серийного номера изделия (или наклейки с серийными номерами на его деталях).

9. Ни при каких обстоятельствах изделие не должно использоваться не по назначению. 10. ООО «Мединдустрия Сервис» не несет ответственности за любые другие непредвиденные расходы, потери или повреждения, напрямую или косвенно связанные с продажей, использованием или невозможностью использования изделия.