

Руководство по эксплуатации:

Ходунки для взрослых шагающие складные арт. Х-1С предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис. 1) из двух «П» образных опор (1), шарнирно скрепленных. Каждая опора имеет ножки (5) с отверстиями и кнопочными фиксаторами (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки ходунков оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 28 мм. Принцип действия ходунков состоит в попеременной перестановке опор и отображен на рис. 2.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующей кнопки (3). При складывании необходимо нажать фиксирующую кнопку (3), затем повернуть опоры (1) внутрь.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки (5) на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
высота, мм	800	975
шаг регулировки по высоте		25
ширина		560
длина шага, мм		350
нагрузка, кг		120
вес ходунков, кг		2,48

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ С ХОДУНКАМИ



рис. 2

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Изготовитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2 в

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

Зарегистрированный товарный знак

АВЕРСУС®



ХОДУНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ШАГАЮЩИЕ СКЛАДНЫЕ арт. Х-1С

Рег. удостов. Росздравнадзора № ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.



рис. 1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки для взрослых шагающие складные арт. Х-1С
изготовлены по ГОСТ ИСО 11199-1-2015

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На резиновые наконечники
гарантия не распространяется.

Дата
выпуска

ОТК

Партия

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Руководство по эксплуатации:

Ходунки для взрослых шагающие складные (с опорой на 2-х уровнях) X-1C2 предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис. 1) из двух опор (1), шарнирно скрепленных. Каждая опора имеет две ножки (5) с отверстиями и кнопочными фиксаторами (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки оснащены резиновыми наконечниками (2), с внутренним диаметром 28 мм. Принцип действия ходунков состоит в попеременной перестановке опор и отображен на рис. 2.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующей кнопки (3). При складывании необходимо нажать фиксирующую кнопку (3), затем повернуть опоры (1) внутрь.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки (5) на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

ВНИМАНИЕ! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками!

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех опор с поверхностью, по которой происходит передвижение!

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Min	Max
Высота, мм	790	960
Шаг регулировки по высоте		25
Ширина		580
Длина шага		450
Нагрузка, кг		120
Вес ходунков, кг		2,4

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ С ХОДУНКАМИ



РИС.2

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2 в

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Зарегистрированный товарный знак



АВЕРСУС®



ХОДУНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ШАГАЮЩИЕ складные (с опорой на 2-х уровнях) X-1C2

Рег. удостов. Росздравнадзора № ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.



РИС.1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки для взрослых шагающие складные (с опорой на 2-х уровнях)
Изготовлены по ГОСТ ИСО 11199-1-2015

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На резиновые наконечники гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Дата выпуска

ОТК

Партия

Ходунки для взрослых шагающие складные (с подмышечной опорой) арт. Х-1СП предназначены для опоры при ходьбе людей массой до 120 кг и ростом до 190 см, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, а также инвалидов и старелых

Ходунки состоят (См. рис. 1) из двух опор (3), шарнирно скрепленных между собой перекладинами (1 и 2) и двух стоек (7) с подмышечниками (8). Каждая опора имеет две ручки (6) с отверстиями и фиксирующими кнопками (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки оснащены резиновыми наконечниками (5), с внутренним диаметром 28 мм.

Для регулирования высоты опор (3) необходимо: последовательно на каждой из 4-х ручек ходунка нажать фиксирующую кнопку (4) Сдвинуть трубки ножки (6) относительно друг друга на нужную длину, и при совмещении отверстий зафиксировать положение кнопкой. Шаг регулировки высоты ходунка - 25 мм.

Для регулирования высоты стоек (7) необходимо: снять фиксирующий хомут (9), для чего нажать на выступающую часть сердечника хомута, до полного его утапливания в трубку опоры (3), затем снять хомут. Сдвинуть трубку стойки (7) относительно трубки опоры (3) на нужную высоту, и при совмещении отверстий, зафиксировать положение хомутом. Шаг регулировки - 30 мм.

Принцип действия ходунков состоит в попеременной перестановке опор и отображен на рис. 2.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (3) до щелчка фиксирующей кнопки. При складывании необходимо одновременно нажать фиксирующую кнопку на перекладине (1), затем повернуть соответствующую опору вплотную к перекладине (2), далее повторить действие с другой опорой.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Х-1СП

	Высота, мм		Ширина	
	Min	Max	Глубина	
Высота до ручек	805	980		535 мм
Высота до стоек	1145	1608		450 мм
			Вес ходунков	3,8 кг
			Длина шага	350 мм

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ С ХОДУНКАМИ

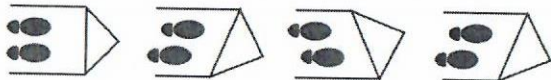


рис. 2

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2 в

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Зарегистрированный товарный знак



Ходунки для взрослых шагающие складные (с подмышечной опорой) арт. Х-1СП

Рег. удостов. Минздравсоцразвития № ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.



рис. 1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки для взрослых шагающие складные (с подмышечной опорой) арт. Х-1СП изготовлены по ГОСТ ИСО 11199-1-2015

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На резиновые наконечники гарантия не распространяется.

Дата выпуска
ОТК
Партия

Производитель: ООО «Аверсус» Россия, г. Москва

Ходунки для взрослых складные предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух «П» образных опор (1), шарнирно скрепленных. Каждая опора имеет ножки (5) с отверстиями и кнопочными фиксаторами (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки ходунков оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 28 мм.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующих кнопок (3). При складывании необходимо нажать фиксирующие кнопки (3), затем повернуть опоры (1) внутрь.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки (5) на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
Высота, мм	800	975
Шаг регулировки по высоте		25
Ширина		540
Нагрузка, кг		120
Вес ходунков, кг		2.48

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Изготовитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.


Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

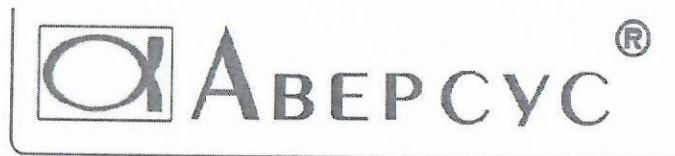

Ходунки для взрослых складные арт. Х-3С

Рег. удостовер. Росздравнадзора № ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.

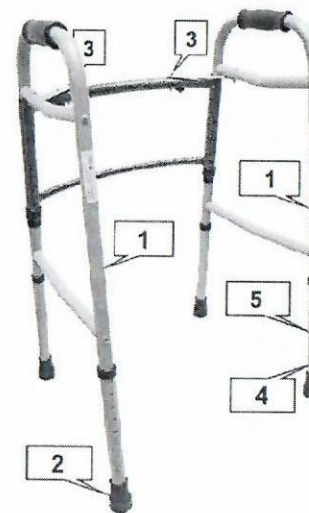


Рис.1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревающих приборов.

Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки для взрослых складные
изготовлены по ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На наконечник гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Дата выпуска
ОТК
Партия

Руководство по эксплуатации:

Ходунки для взрослых не складные Х-1 предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 120 кг и ростом от 165 см до 190 см.

Ходунки состоят (см. рис. 1) из двух опор (1), скрепленных между собой перекладиной (2). Каждая опора имеет ножки с отверстиями и фиксирующими кнопками (3), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки оснащены резиновыми наконечниками (4) с внутренним диаметром 28 мм.

Принцип действия ходунков состоит в перестановке ходунков по формуле: шаг-перестановка - шаг. При этом, перестановка производится путем поднятия и перестановки ходунков.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (3), переставить ножки на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
высота, мм	800	975
шаг регулировки по высоте		25
ширина		715
нагрузка, кг		120
вес ходунков, кг		2,4

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Зарегистрированный товарный знак

АВЕРСУС®



ХОДУНКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ не складные арт. Х-1

Рег. удостов. Росздравнадзора № ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.



рис. 1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки для взрослых не складные Х-1
изготовлены по ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На резиновые наконечники
гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Дата
выпуска

ОТК

Партия

Руководство по эксплуатации:

Ходунки детские шагающие складные арт. ХД-1С предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 60 кг и ростом до 165 см.

Ходунки состоят (см. рис. 1) из двух «П» образных опор (1), шарнирно скрепленных. Каждая опора имеет ножки (5) с отверстиями и кнопочными фиксаторами (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки ходунков оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 28 мм. Принцип действия ходунков состоит в попеременной перестановке опор и отображен на рис. 2.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующей кнопки (3). При складывании необходимо нажать фиксирующую кнопку (3), затем повернуть опоры (1) внутрь.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки (5) на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
высота, мм	625	750
шаг регулировки по высоте		25
ширина		480
длина шага, мм		170
нагрузка, кг		60
вес ходунков, кг		2,1

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ С ХОДУНКАМИ



рис. 2

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Изготовитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться изготовителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2 в

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Зарегистрированный товарный знак

АВЕРСУС®



ХОДУНКИ ДЕТСКИЕ ШАГАЮЩИЕ СКЛАДНЫЕ арт. ХД-1С

Рег. удостов. Росздравнадзора № ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.



рис. 1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки детские шагающие складные арт. ХД-1С

изготовлены по ГОСТ ИСО 11199-1-2015

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На резиновые наконечники гарантия не распространяется.

Дата
выпуска

ОТК

Партия

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Руководство по эксплуатации:

Ходунки детские (складные) предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 65 кг и ростом до 135 см.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух «П» образных опор (1), шарнирно скрепленных. Каждая опора имеет ножки (5) с отверстиями и кнопочными фиксаторами (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки ходунков оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 28 мм.

Для подготовки сложенных ходунков к работе раздвинуть опоры (1) до щелчка фиксирующих кнопок (3). При складывании необходимо нажать фиксирующие кнопки (3), затем повернуть опоры (1) внутрь.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки (5) на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
Высота, мм	635	760
Шаг регулировки по высоте		25
Ширина		510
Нагрузка, кг		65
Вес ходунков, кг		2.48

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Перед применением для уточнения индивидуальных рекомендаций при использовании проконсультируйтесь с врачом.


Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2


тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

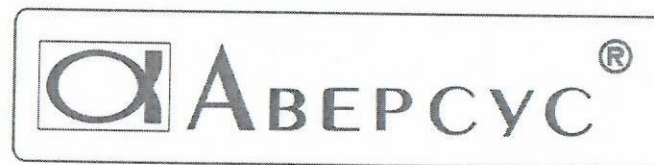

Ходунки детские (складные) арт. ХД-3С

Рег. удостов. Росздравнадзора №ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.

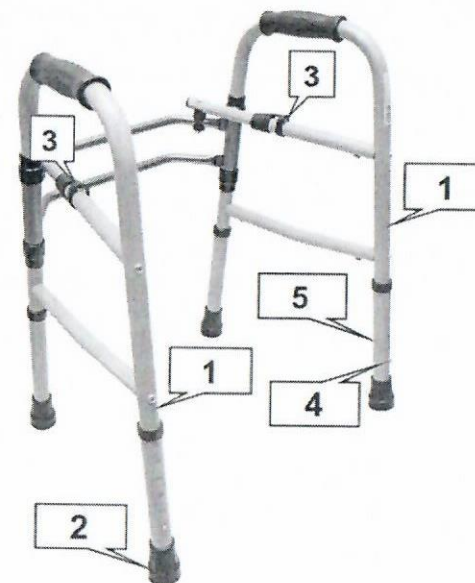

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ходунки детские (складные)

Изготовлены по ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска
ОТК
Партия

На наконечник гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Руководство по эксплуатации:

Ходунки детские (нескладные) ХД-1 предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения детей 5-10 лет, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 65 кг.

Ходунки состоят (см. рис.1) из двух опор (1), скрепленных между собой перекладиной. Каждая опора имеет ножки с отверстиями (3), и фиксирующими кнопками (4), позволяющими регулировать высоту ходунков. Ножки оснащены резиновыми наконечниками (2) с внутренним диаметром 24 мм.

Принцип действия ходунков состоит в перестановке ходунков по формуле: шаг-перестановка - шаг. Причем, перестановка производится путем поднятия и перестановки ходунков.

Для регулирования высоты ходунков необходимо последовательно на каждой из четырех ножек ходунков нажать кнопочный фиксатор (4), переставить ножки на требуемую высоту, убедиться, что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении.

Внимание! Недопустимо пользоваться ходунками с износившимися резиновыми наконечниками.

Необходимо соблюдать осторожность при перемещении ходунков, опираться только при контакте всех четырех ножек с поверхностью, по которой происходит движение.

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	min	max
высота, мм	620	745
шаг регулировки по высоте		25
ширина		520
нагрузка, кг		65
вес ходунков, кг		1,9

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать ходунки следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилам перевозок, действующими на транспорте данного вида.

По окончании эксплуатации или срока хранения ходунки подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Зарегистрированный товарный знак

АВЕРСУС®



ХОДУНКИ ДЕТСКИЕ (нескладные) арт. ХД-1

Рег. удостов. Росздравнадзора № ФСР 2009/06105 от 04.03.2019 г.



рис. 1

Хранить ходунки в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Ходунки детские (нескладные) ХД-1
изготовлены по ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015**

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

**На резиновые наконечники
гарантия не распространяется.**

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Дата
выпуска

ОТК

Партия