

ПАСПОРТ

КУШЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ 1111.1428

Назначение

Кушетка медицинская (в дальнейшем кушетка) предназначена для размещения на ней пациента в процедурных и смотровых кабинетах. Для удобства использования имеется возможность регулировать с последующей фиксацией угол наклона головной секции. Угол наклона 0-60 градусов. Основание кушетки выполнено из металлической трубы и уголка. Ложё кушетки обшито винилискожей с наполнением пенополиуретаном. Ножки кушетки на подпятниках. Покрытие металлических частей – полимерное покрытие, устойчиво к механическим и химическим воздействиям. Максимальная нагрузка – 180 кг.

Правила транспортирования и хранения

1. Кушетка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).
2. Условия хранения кушетки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

Подготовка кушетки к эксплуатации

1. После освобождения составных частей кушетку от упаковки, удалить антикоррозийную смазку со всех деталей, где она нанесена, а также промыть теплой водой с мылом и протереть насухо окрашенные поверхности.

Рис.1 Эскиз кушетки медицинской 1111.1428

Комплектность поставки кушеток в собранном виде должна отвечать таблице 1.

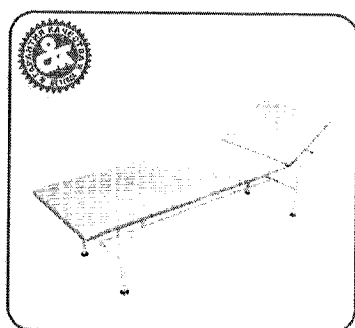


Таблица 1.

Обозначение варианта исполнения кушетки	Кол-во, шт.	Отметка наличия
1		3
Кушетка медицинская 1111.1428		

Гарантии изготовителя:

1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям ГОСТ 19917 и ТО РБ 100615733.005-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 3-х месяцев со дня отгрузки.

3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет кушетки и её части в случае неисправностей при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

4. Пересылка кушетки, подлежащей гарантийному ремонту, производится за счет предприятия-изготовителя.

5. Срок службы кушетки не менее 6 лет.

6. При направлении кушетки на гарантийный ремонт необходимо приложить гарантийный талон.

7. Адрес предприятия-изготовителя:

220113. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лукьяновича, 10
ОАО «Опытно-механический завод».

Гарантийный талон на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока.

Изделие медицинской техники: Кушетка медицинская 1111.1428
(наименование)

ТО РБ 100615733.005-2001

Номер и дата изготовления

(заполняется предприятием – изготовителем)

Введена в эксплуатацию

(дата, подпись)



ПАСПОРТ

КУШЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ 1111.1436

Назначение

Кушетка медицинская (в дальнейшем кушетка) предназначена для размещения на ней пациента в процедурных и смотровых кабинетах. Для удобства использования имеется возможность регулировать с последующей фиксацией угол наклона головной секции. Угол наклона 0-60 градусов. Основание кушетки – деревянный каркас (ламинированное ДСП). Ложё кушетки обшито винилискожей с наполнением пенополиуретаном. Ножки кушетки на подпятниках. Максимальная нагрузка – 180 кг.

Правила транспортирования и хранения

1. Кушетка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 °С).
2. Условия хранения кушетки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 °С до +40 °С и относительная влажность не более 98% при +25 °С).

Подготовка кушетки к эксплуатации

1. После освобождения составных частей кушетку от упаковки, удалить антикоррозийную смазку со всех деталей, где она нанесена, а также промыть теплой водой с мылом и протереть насухо окрашенные поверхности.

Рис.1 Эскиз кушетки медицинской 1111.1436

Комплектность поставки кушеток в собранном виде должна отвечать таблице 1.

Таблица 1.

Обозначение варианта исполнения кушетки	Кол-во, шт.	Отметка наличия
	2	3
Кушетка медицинская 1111.1436	1	

Директор

Д.М.Прохор

1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям ГОСТ 19917 и ТО РБ 100615733.005-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 3-х месяцев со дня отгрузки.

3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет кушетки и её части в случае неисправностей при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

4. Пересылка кушетки, подлежащей гарантийному ремонту, производится за счет предприятия-изготовителя.

5. Срок службы кушетки не менее 6 лет.

6. При направлении кушетки на гарантийный ремонт необходимо приложить гарантийный талон.

7. Адрес предприятия-изготовителя:

220113. Республика Беларусь, г. Минск, ул. Лукьяновича, 10
ОАО «Опытно-механический завод».

Гарантийный талон на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока.

Изделие медицинской техники: Кушетка медицинская 1111.1436
(наименование)

ТО РБ 100615733.005-2001

Номер и дата изготовления

(заполняется предприятием – изготовителем)

Введена в эксплуатацию

(дата, подпись)

