

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10



Трость тактильная складная ТТС

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.606.00.00.00 РЭ

Республика Беларусь

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.03.606.00.00.00РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством трости тактильной складной (далее - трость), условиями её эксплуатации и технического обслуживания.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Трость предназначена в качестве вспомогательного технического средства реабилитации при самостоятельном передвижении слепых и слабовидящих людей. Трость помогает ориентироваться в пространстве, обеспечивает безопасность от столкновения с препятствиями, является средством подачи сигнальных звуков. Белый цвет трости со светоотражающей плёнкой на корпусе используется в качестве предупредительного сигнала для водителей и пешеходов. Трость не может служить в качестве опоры при ходьбе.

1.1.2 Вид климатического исполнения УХЛ1.1 ГОСТ 15150.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Технические характеристики трости приведены в таблице (обозначения см. на рисунке).

Таблица

Обозначение КД	Длина, ($L \pm 20$), мм	Длина трости в сложенном виде, ($L_1 \pm 10$), мм	Масса, (± 0.02), кг
ЦСИЕ.03.606.00.00.00	907	223	0,23
-01	957	233	0,24
-02	1007	243	0,25
-03	1057	253	0,26
-04	1107	263	0,27
-05	1157	273	0,28
-06	1207	283	0,29
-07	1257	293	0,30
-08	1307	303	0,31
-09	1357	313	0,32
-10	1407	323	0,33

1.2.2 Срок службы – не менее 2 лет.

1.3 Устройство

1.3.1 Трость состоит из пяти звеньев 2, соединённых между собой эластичным шнуром 5, позволяющим складывать трость.


1.3.2 На нижнем звене расположен съёмный наконечник 1, позволяющий производить его замену при износе.

1.3.3 На втором от ручки звене 3 расположена широкая световозвращающая плёнка 4.

1.3.4 Ручка 7 изготовлена шаровидной формы с петлей 8 для удобства пользования.

1.3.5 На ручке расположена специальная лента 6 для фиксации трости в сложенном состоянии (далее - фиксатор).

1.3.6 Сложенная трость укладывается в специальный чехол.

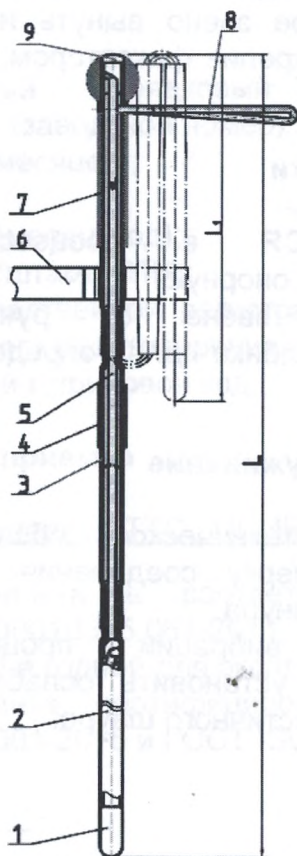

Рисунок

1.4 Подготовка к работе

1.4.1 Распаковать изделие.

1.4.2 Внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации.

Для приведения трости в рабочее состояние необходимо:

1.4.3 Освободить все звенья от фиксатора.

1.4.4 Установить каждое звено в предыдущее.

1.4.5 При необходимости натяжения эластичного шнура выкрутить наконечник 1 и достать заглушку 9.

1.5 Подготовка к использованию

1.5.1 Продеть руку в петлю и взять трость за ручку.

1.5.2 Трость готова к использованию.

1.5.3 Для складывания трости необходимо последовательно каждое звено вынуть из предыдущего и собрать их воедино, закрепив фиксатором. Уложить трость в чехол.

2 Меры безопасности

2.1 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** в процессе эксплуатации использовать трость как опорную!

2.2 На втором звене от ручки расположена световозвращающая плёнка для определения габаритов трости.

3 Техническое обслуживание

3.1 Ежедневное техническое обслуживание трости включает в себя проверку соединения каждого звена и натяжение эластичного шнура.

3.2 При появлении вибрации в процессе эксплуатации необходимо правильно установить ослабленное звено или увеличить натяжение эластичного шнура.

4 Комплектность

4.1 Комплект поставки изделия включает:

- трость

- 1 шт.;

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- чехол - 1 шт.;
- наконечник - 1 шт.

5 Маркировка

Маркировка трости должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485»;
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТУ;
- длину изделия;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код.

6 Свидетельство о приемке

Трость тактильная складная ТТС ЦСИЕ.03.606.00.00.00

наименование изделия

обозначение

зав.номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ BY 100010315.067-2011, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

7 Свидетельство об упаковывании

Трость тактильная складная ТТС ЦСИЕ.03.606.00.00.00

наименование изделия

обозначение

зав.номер

упакована РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Начальник участка

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

8.2 При выходе из строя трости во время гарантийного срока, трость принимается в ремонт, при наличии настоящего РЭ и при условии соблюдения пользователем указанных в нем правил эксплуатации.

8.3 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате ремонтных работ, проведенных пользователем самостоятельно или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

8.4 Гарантийный ремонт тростей производит РУП БПОВЦ по адресу: 220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

9 Сведения о государственной регистрации

Трость является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.103855.

Действительно до: 01.03.2021 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (017) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.