

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кресла косметологические AP 101/102 E

ТУ ВУ 192187683.009-2015

Кресло косметологическое AP 101E



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание 230±23 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность 100 Вт
- Общий вес AP101/102 - 50/52.5 кг
- Длина кресла, разложенного горизонтально не более 2000 мм
- Максимальная высота кресла, разложенного горизонтально не более 800 мм
- Минимальная высота кресла, разложенного горизонтально не более 600 мм
- Максимальная ширина кресла не более 650 мм.
- Грузоподъемность до 105 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОДУШЕК

- Верхняя: не более 840 x 620 мм
- Средняя: не более 460 x 620 мм
- Нижняя: (цельная) не более 650x620 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- кресло;
- пульт управления;
- шнур питания;
- руководство по эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Кресла косметологические предназначены для оснащения рабочего места косметологических кабинетов, педикюрных салонов, центров оздоровления и лечебных учреждений и удобного размещения пациента для проведения процедуры. Кресла позволяют расположить пациента в позициях от лежащей до сидячей, с возможностью выбора требуемого наклона позвоночника и фиксации наиболее комфортного положения (позы) для пациента и удобной для специалиста во время проведения процедуры.

Высота кресла, спинка, подушка для ног регулируются автоматически. Наклон – механически.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Пульт оснащен кнопками: подъема и опускания кресла.

Нажимая кнопку можем электронно регулировать выбранный параметр

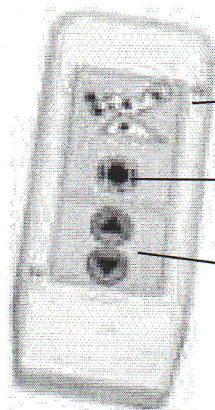

Индикация выбранного мотора

Кнопка выбора мотора

Регулировка подъема/опускания



СПОСОБ УСТАНОВКИ И РЕГУЛИРОВКИ


Способ установки и регулировки подушек прост, тем не менее следует соблюдать осторожность при изменении положений и убедиться в том, зафиксирован ли регулятор положения!

Доступ к блокировкам со всех сторон. И так:

- Чтобы поднять вверх подушку **А** ее следует просто поднять, осторожно вверх не прикасаясь к регулятору положения. Чтобы ее опустить: держать подушку рукой и одновременно поднять вверх регулятор **1**, что позволит опустить подушку.

- Подушку **В** можно установить под углом, поднимая ее, или опуская с одновременной перестановкой регулятора **2** на следующий зубок.

- Подушку спинки **С** можно поднять даже до вертикального положения не отпуская регулятора. При ее опускании в горизонтальное положение, достаточно поднять регулятор **3** и второй рукой опустить спинку.

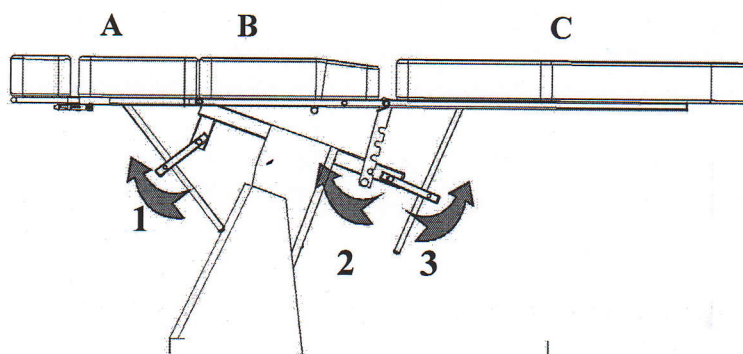

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ КРЕСЕЛ

Кресла легко содержать в чистоте. Кожимитовый материал можно чистить влажной тряпочкой и мыльной водой. После каждого использования провести дезинфекцию традиционными средствами: Спитадерм или 70% Салициловый Спирт. Рекомендуем использование на кресло сменных чехлов, облегчающих поддержку чистоты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не перегружать. Допустимый вес человека, сажающегося в кресло – 105 кг.
- Садится исключительно на сидение.
- Предохранять от влажности и пыли.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или сервисной службы.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Кресло транспортируется транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте, осуществляющем доставку груза.

В части воздействия климатических факторов кресла должны транспортироваться по группе 5 ГОСТ 15150.

В части воздействия механических факторов кресла должны транспортироваться по группе Л ГОСТ 23216.

Упакованные кресла должны храниться в условиях 2 по ГОСТ 15150. При хранении не допускается наличие в окружающей среде паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.).

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация осуществляется в соответствии с правилами утилизации медицинских изделий и медицинской техники, установленными в нормативных документах страны-потребителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям ТУ ВУ 192187683.009-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кресла - не менее 24 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - не менее 6 месяцев со дня продажи.

За критерий предельного состояния принимается такое состояние кресла, при котором восстановление его работоспособности и электробезопасности невозможно или экономически нецелесообразно.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При обнаружении неисправности оборудования следует обратиться к производителю.

Контактная информация – ООО «ЮСВ-медицинские системы», Минский р-н, д.Тарасово, ул. Ратомская 16, пом 6, тел. +375 17 513 69 51

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА МАКИРОВКЕ:



-Изделие типа В



- «Внимание, обратитесь к эксплуатационным документам»

