

**ЭКРАН
ЗАЩИТНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ,
арт.1000-1**

TY BY 291235525.011-2016

Паспорт
ЭЗС.00.000 ПС



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Экран защитный стоматологический, арт.1000-1 (далее – экран) предназначен для защиты лица, глаз, органов дыхания врачей-стоматологов, а также при выполнении всех видов ортопедических работ, связанных с пылевыделением.

1.2 Экран предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры защитного щитка экрана, мм, не более:

- длина 285

- ширина 235

2.2 Срок службы, мес, не менее..... 2

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- оправа 1 шт.;

- защитный щиток 10 шт.;

- паспорт..... 1 шт.;

- тара потребительская 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


4.1 Экран состоит из защитного щитка, изготовленного из прозрачной полимерной пленки и оправы.

4.2 Снять защитные пленки с обеих сторон щитка.

4.3 Щиток закрепить в оправе с помощью боковых зажимов – сначала с одной стороны оправы, затем – с другой. (см. рис.1).

4.4 Обработка экрана проводится мыльным раствором с последующим ополаскиванием.

Допускается обработку проводить согласно инструкции "Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения", утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165.

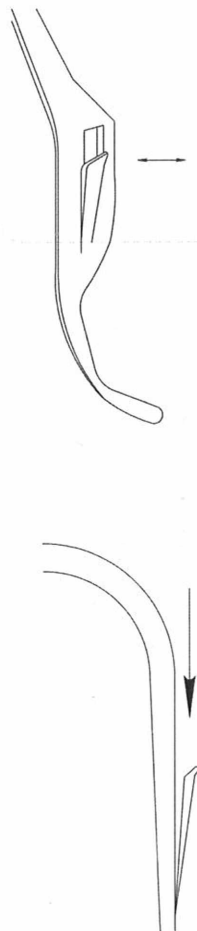

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Экран в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50° С до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

5.2 Хранить экран допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°С.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Экран защитный стоматологический, арт.1000-1 соответствует ТУ ВУ 291235525.011-2016 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска м.п.

Подпись ответственного за приемку

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Экран защитный стоматологический, арт.1000-1 упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации

Дата упаковки м.п.

Упаковку произвел м.п. Подпись

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие экрана требованиям ТУ ВУ 291235525.011-2016 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 2 месяца со дня продажи.