

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра здравоохранения
Республики Беларусь

Б.Н. Андросюк

«24»

2022 г.




УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
ООО «Партнер Групп СМК»

А.Г. Приходько

«24»

2022 г.

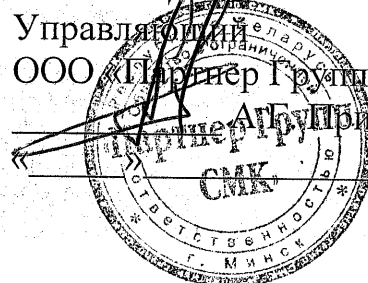

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВОСК ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДЛЯ КОСТНЫХ ТКАНЕЙ

Инструкция по применению

ТУ ВУ 192632187.001-2021

Производства ООО «Партнер Групп СМК», Республика Беларусь (контрактное производство:
ИУП «Саулес Сапнис», 247407, Республика Беларусь, гомельская область, Светлогорский район,
д. Медведово, ул. Школьная 5).

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Директора
РУП «Центр экспертиз и
испытаний в здравоохранении

М.И. Злотникова

«23»

03

2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор
ГУ «Республиканский научно –
практический центр «Кардиология»

Н.П. Митьковская

«22»

11 2021 г.



СОГЛАСОВАНО


Управляющий
ООО «Партнер Групп СМК»

А.Г. Приходько

«01»

09

2021 г.

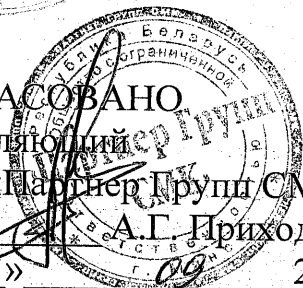

СОГЛАСОВАНО

Директор
ГУ «Республиканский научно –
практический центр травматологии и
ортопедии»

М.А. Герасименко

«12»

2021 г.




СОГЛАСОВАНО

Главный врач
УЗ «Городская клиническая больница
Скорой медицинской помощи»
Г. Минска

А.В. Борисов

«02»

12 2021 г.

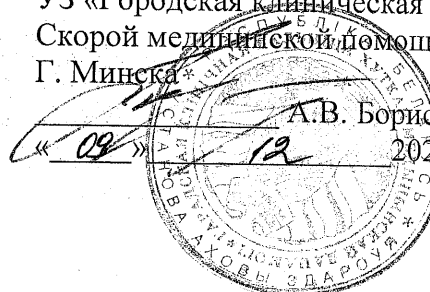

Воск хирургический для костных тканей

(инструкция по применению)

Производитель: ООО «Партнер Групп СМК», Республика Беларусь,
220002 г. Минск, ул. Червякова, 8/2

Область применения

Хирургический воск предназначен для остановки кровотечения из рассеченной, просверленной костной ткани или костных фрагментов путем механического заполнения костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры.

Описание

Хирургический воск является не рассасывающимся стерильным хирургическим материалом, состоящим из следующих компонентов: воск белый пчелиный, парафин, изопропил пальмитат.

Характеристики изделия

Хирургический воск имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, в пакетах по 2,5 г. Допускается желтый оттенок.

Способ применения

Используя асептические методы, следует согреть хирургический воск до желаемой консистенции путем размягчения пальцами. Затем размягченный воск накладывается на края костной ткани с учетом хирургических показаний и предпочтений хирурга.

Реакция тканей

Использование хирургического воска приводит к локальному гемостазу в костных тканях и создает механический барьер (тампонаду). Незначительная воспалительная реакция отмечалась в тканях, непосредственно прилегающих к месту имплантации.

Противопоказания

Не рекомендуется применение хирургического воска в местах, где желательны быстрая регенерация и срастание костных тканей.

Побочные реакции

Побочные реакции, связанные с использованием этого материала, включают незначительную воспалительную реакцию в тканях, прилегающих к месту имплантации, и замедление остео генеза. Как и любое другое инородное тело, хирургический воск может обострять существующую инфекцию.

Меры предосторожности

Следует использовать необходимое количество хирургического воска; излишек удаляют из зоны хирургического вмешательства. Хирургический воск может являться физическим барьером в процессе костной регенерации. Упаковку, содержащую хирургический воск, следует вскрывать непосредственно перед использованием материала, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения или чрезмерного высушивания материала.

Срок годности

Срок годности – 5 лет с даты изготовления.

Транспортирование и хранение

Хирургический воск транспортируют всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хирургический воск хранят в упакованном виде в крытых помещениях, вдали от влаги и прямого воздействия тепла при температуре не выше плюс 35 °С.