

7.2 Хранить стеллаж допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж медицинский СТЕ_____, заводской №_____
соответствует ТУ ВУ 800017554.068-2016 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ Подпись ответственного за приемку_____ м.п.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Стеллаж медицинский СТЕ_____, заводской №_____
упакован согласно требованиям, предусмотренным в КД.
Дата упаковки_____ Упаковку произвел_____ м.п._____ Подпись_____

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ ВУ 800017554.068-2016 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес. со дня получения потребителем (даты продажи).

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Стеллаж медицинский СТЕ_____, заводской №_____
ТУ ВУ 800017554.068-2016

Приобретен _____

_____, дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____

_____, дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

_____, города _____

_____, Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия


_____, Подпись и печать руководителя учреждения- владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

СТЕЛЛАЖ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕ

ТУ ВУ 800017554.068-2016

Паспорт
БИПЯ.324251.068 ПС.СТЕ

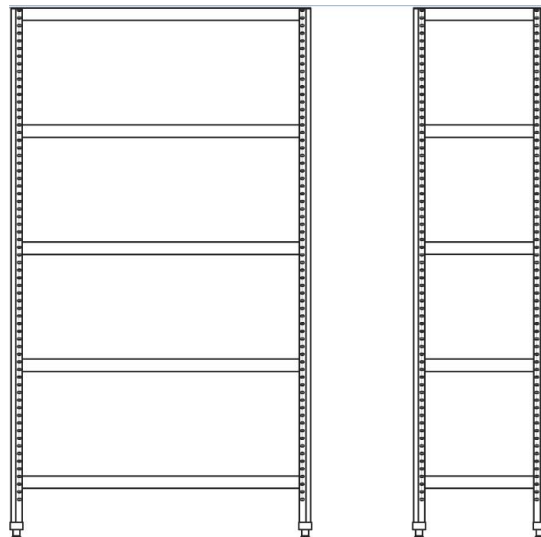

Рисунок

Количество полок на стеллаже показано условно.
Количество полок – см. ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ СТЕЛЛАЖА.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Стеллаж медицинский СТЕ (в дальнейшем - стеллаж) предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и принадлежностей в больницах и других медицинских учреждениях.

По конструкции стеллаж – сборно-разборный. Изготовлен из стали с полимерным покрытием.

1.2 Стеллаж предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм..... см. табл.1

2.2 Габаритные размеры полки, мм..... см. табл.1

2.3 Масса, кг*:

- не менее.....16

- не более.....71

2.4 Допускаемая нагрузка на полку, кг*:

- не менее.....30

- не более.....100

2.5 Количество полок, шт..... см. табл.2

2.6 Шаг перфорации стоек, мм 29

2.7 Срок службы, лет, не менее.....5

* - в зависимости от размера стеллажа и количества полок.

Таблица 1

Размер стеллажа (длина х ширина), мм	Размер полки (длина х ширина), мм	Размер стеллажа (длина х ширина), мм	Размер полки (длина х ширина), мм
725x425	700x400	1025x625	1000x600
725x525	700x500	1125x425	1100x400
725x625	700x600	1125x525	1100x500
825x425	800x400	1125x625	1100x600
825x525	800x500	1225x425	1200x400
825x625	800x600	1225x525	1200x500
925x425	900x400	1225x625	1200x600
925x525	900x500	135x425	1300x400
925x625	900x600	1325x525	1300x500
1025x425	1000x400	1425x425	1400x400
1025x525	1000x500	1425x525	1400x500
Высота стеллажа выбирается из ряда: 1800 ⁺¹⁰ мм, 2000 ⁺¹⁰ мм, 2200 ⁺¹⁰ мм			
По требованию заказчика допускается изготавливать стеллажи других размеров			

3 ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ СТЕЛЛАЖА (при заказе):

СТЕ 1200x500x2010 (4), где: 1200x500 – размер полки, мм;

2010 – высота стеллажа, мм;

4 – количество полок, шт.

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки – согласно таблицы 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.						
Полки	3	4	5	6	7	8	9
Стойка с опорой	4	4	4	4	4	4	4
Винт М6х16 с прессшайбой	48	64	80	96	112	128	144
Паспорт	1	1	1	1	1	1	1

5 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Стеллаж (см. рис.) представляет собой разборную конструкцию, которая состоит из стоек и полок. Полки скреплены со стойками при помощи крепежа (винт с прессшайбой).

5.2 Стеллаж поставляется потребителю в разобранном виде. Вскройте упаковку, очистите от пыли.

5.3 Осмотрите стеллаж для определения его состояния после транспортирования и хранения. Соберите стеллаж, отрегулируйте его устойчивость вращением опор. Стеллаж должен стоять устойчиво на ровной поверхности.

Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

5.4 Выполните санитарную обработку стеллажа путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора моющего средства, или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата). Допускается проводить дезобработку любыми средствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь.

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

6.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Стеллаж в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.