



Автоматизированный коагулологический анализатор

CS-2000i/CS-2100i

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГЛАВА 1:	ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 2:	ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАВА 3:	ВНЕШНИЙ ВИД И ФУНКЦИИ ПРИБОРА
ГЛАВА 4:	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГЛАВА 5:	ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА
ГЛАВА 6:	АНАЛИЗ
ГЛАВА 7:	ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ГЛАВА 8:	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ГЛАВА 9:	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

SYSMEX CORPORATION
КОБЭ, ЯПОНИЯ

Авторские права © 2006-2009 SYSMEX CORPORATION

Все права защищены. Данное руководство пользователя или любая его часть не могут быть воспроизведены в любой форме и любым способом без предварительного письменного разрешения SYSMEX CORPORATION.

Код № 461-2678-5
ОТПЕЧАТАНО В ЯПОНИИ
Дата последней редакции: Февраль 2009
Версия программного обеспечения 00-53
и позднее

2. Добавление кювет

Если кюветы начнут заканчиваться в ходе анализа, то на экране появится сообщение об ошибке «Кюветы скоро закончатся». Если вы добавите кюветы в прибор в ходе отображения данного сообщения, то анализ продолжится без прерывания.

Если кювет не осталось, то на экране появится сообщение об ошибке «Анализ отложен, поскольку кюветы закончились». Добавьте кюветы, затем нажмите кнопку «Начать анализ». Анализ будет продолжен.

1. Откройте крышку загрузочного отсека для кювет.
2. Добавьте кюветы. В загрузочном отсеке помещается примерно 500 кювет.



ОСТОРОЖНО: Не наполняйте загрузчик кюветами выше линии предела. Это может стать причиной засора.

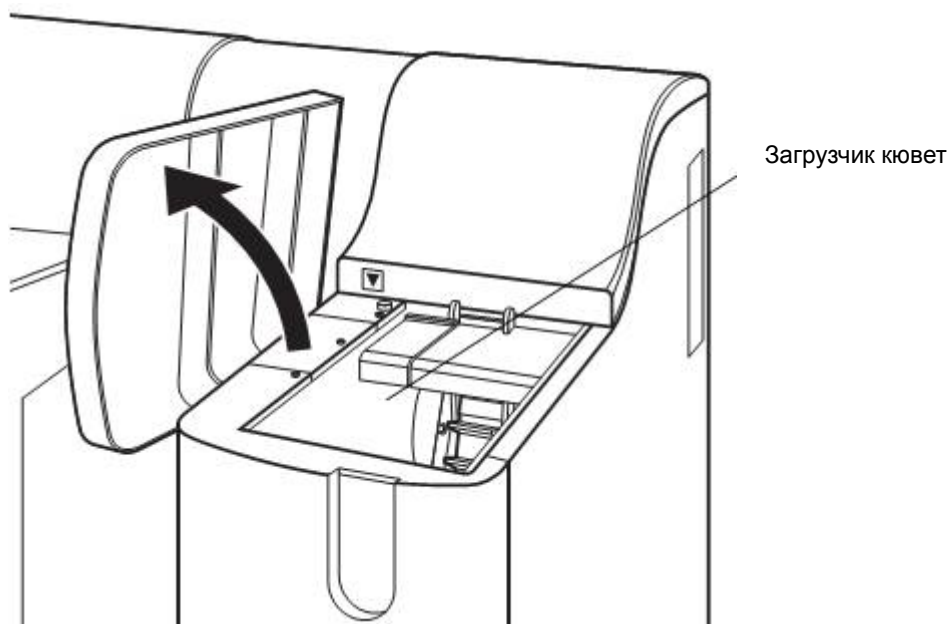


Рис. 7-30: Добавление кювет

3. Закройте крышку отсека для загрузки кювет.



ОСТОРОЖНО:

- Используйте только специализированные кюветы (SUC-400A).
- Кюветы одноразовые. Повторное их использование приведет к получению неверных результатов анализа.
- В загрузчике могут оставаться несколько кювет.



ПРИМЕЧАНИЕ: Относительно номеров кювет, см. Глава 7.: 7.8 Список запчастей.

7. Замените предохранители, после чего установите держатель предохранителей в прибор.

ОСТОРОЖНО:

- Чтобы избежать удара электрическим током, перед обслуживанием отсоедините шнур питания от прибора.
- Для обеспечения защиты от возгорания, заменяйте предохранители только на элементы соответствующего типа и характеристик.

Таблица 7-01: Предохранители

Основной блок



Спецификация	№ детали	Описание	Тип	Количество
100 - 240 VAC	266-7768-1	Предохранитель 250V 10A 50T100H	с задержкой срабатывания	2

Пневматическое устройство

Спецификация	№ детали	Описание	Тип	Количество
100 - 117 VAC	266-5011-3	Предохранитель 250V 4A ST4-4A-N1	с задержкой срабатывания	2
220 - 240 VAC	266-5293-0	Предохранитель 250V 3.15A No. 19195	с задержкой срабатывания	2

7.8 Список запасных частей

1. Список расходных материалов

Таблица 7-02: Расходные материалы

№ детали	Описание	Мин. партия
064-1481-0	Кюветы SUC-400A	3 000
CR323182	Галогеновая лампа JB12V24WF6/SSM	1
266-7768-1	Предохранитель 50T100H (250V 10A)	1
266-5011-3	Предохранитель 250V-4A-N1	1
424-1160-8	Коническая чашка для образца 4 мл	1
061-0611-4	Прокалыватель № 20	1
013-1771-4	SLD флаконы	10