

1 Область применения

Маска медицинская одноразовая серии ММО (далее – маска) предназначена для ограничения передачи инфекционных агентов от персонала пациентам в медицинских помещениях, а также может эффективно способствовать сокращению выхода инфекционных агентов из носовой и ротовой полости бессимптомного носителя или пациента с клиническими симптомами.


Маска предназначена для однократного (одноразового) использования в течение одной смены (не более 8 часов, в зависимости от условий эксплуатации).

Маска предназначена для применения при температуре окружающей среды от минус 5 до плюс 30° С, относительной влажности до 80% при температуре плюс 25° С, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа.

Марки масок, типы масок по уровню защиты и их назначение приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Марки масок, типы масок по уровню защиты и их назначение.

Марка маски	Тип маски по ГОСТ Р 58396	Назначение
ММО-I	I	Для использования пациентами медицинских учреждений в случаях повышенной эпидемиологической опасности при эпидемиях и пандемиях.
ММО-II	II	Для использования медицинским персоналом в медицинских помещениях общего профиля.
ММО-III	III	Для использования медицинским персоналом в операционных и в медицинских помещениях с высокой вирулентной нагрузкой.

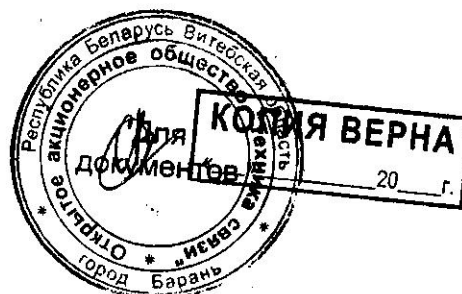

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	30.11.19	46.0051		

ЛЯШБ.305262.002 ИС1

Лист
2

6 Правила пользования

6.1 Маску используют однократно.

6.2 Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок, и плотно фиксировалась.

6.3 Носовой фиксатор следует плотно подогнать по спинке носа для обеспечения наиболее полного прилегания к лицу.

6.4 При использовании маски необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками. В случае прикосновения к маске необходимо вымыть руки (провести обработку рук кожными антисептиками).

6.5 Менять маски необходимо не реже чем через 8 часов. Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.

6.6 Снимать маску следует за ушные петли, не прикасаясь к фильтрующей поверхности.

Внимание! Правильное использование маски сохранит Ваше здоровье.

Расшифровка применяемых пиктограмм:



-смотрите указания по эксплуатации



-максимальная относительная влажность при хранении



-запрет на повторное применение



-не сорить, выбрасывать в урну



-возможна вторичная переработка упаковки (полиэтилен низкого давления)




-возможна вторичная переработка маски (полипропилен)

Изготовитель – ОАО «Техника связи»

Республика Беларусь, 211011, Витебская область, г. Барань, ул. Набережная, 1

тел.: +375 (216) 55 72 95

e-mail: contact@t-c.by

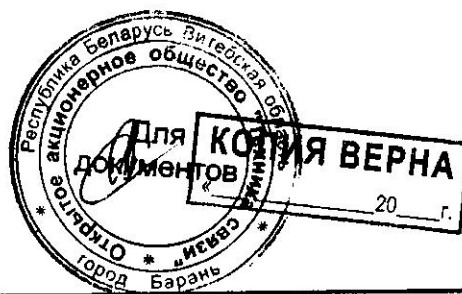

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
32M	15/05/0051			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
32M	15/05/0051			

ЛЯШБ.305262.002 ИС1

Лист
4