

Инструкция по применению

3-ходовый краник

Стерильный, одноразовый

Модификации (Кат. №): AM0101, AM0102, AM0103, AM0104, AM0106, AM0108, AM0109, AM0110.

Тип: тип «On» (открытый); тип «Off» (закрытый).

Тип соединения: Луер (Luer); вращающийся адаптер.

Давление: 45psi, 500psi, 1000psi

Описание

3-ходовой краник изготавливается из PC (поликарбонат). Изделие используют в операциях чрескожной ангиопластики. Пропускная способность 250мл/1 мин. Устойчив к давлению 8 бар. Подвижность в осевом и радиальном направлениях на 360° обеспечивает безопасную и быструю стыковку. Липидостойкий материал устойчив для анестезиологических препаратов, апирогенен, нетоксичен, без фталатов.

Технические характеристики изделия содержатся на индивидуальной упаковке.

Применение

Основная цель - построить мультипространства для мониторинга давления, ангиографического ликвора и гепаринизации физ. растворов и т. д.

Инструкция по применению

- Вскройте упаковку, извлеките изделие, проверьте отсутствие повреждений.
- Соедините с другими устройствами такими как трубка (линия) контроля давления, ангиографический шприц, с магистралью инфузионной системы и т.д.;
- Контролируйте давление или наплавление и интенсивность потока поворотным регулятором (краник).

Меры предосторожности

- Стерилизован EO (оксид этилен). Не использовать, если есть повреждение индивидуальной упаковки;
- Изделие предназначено для одноразового использования, утилизировать после применения. Не использовать повторно. Повторное использование одноразового изделия приводит к потенциальному риску для пациента и специалиста. Это может привести к ухудшению функциональных возможностей изделия;
- Загрязнение или ограниченная функциональность изделия может привести к травме, заболеванию или смерти пациента;
- После использования, подлежит утилизации как медицинские отходы, в соответствии с нормативными требованиями страны-потребителя;
- Срок годности составляет 3 года. Изделие не должно использоваться по истечении срока годности;
- Любые изменения в структуре изделия не допускаются во время использования.

Противопоказания

- Нет противопоказаний.


Хранение

- Хранить в сухом и прохладном месте, защищать от прямого света.

Срок годности

- 3 года
- Дата производства и срок годности указаны на упаковке

[Symbols] [Символы, применяемые на этикетке]

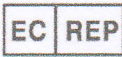	Изготовитель		Стерилизация оксидом этилена
	Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе		Использовать только один раз
	Дата изготовления		Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Использовать до		Не использовать при повреждении упаковки
	Код партии		Номер по каталогу
			
Знак CE и идентификационный номер Нотифицированного органа. Изделие отвечает основным требованиям Директивы 93/42/ЕЭС с поправками, внесенными Директивой 2007/47/ЕЭС для изделий медицинского назначения.			

[Manufacturer] [Производитель]

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
No. 925 Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C

[European representative] [Представитель в Европе]

Shanghai International Holding Corp., GmbH(Europe)
EiffestraiBe 80.20537 Hamburg, Germany


[Republic of Belarus representative] [Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь]

УП «Мединтерсервис»,
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1

ТРАФИМОВИЧ С.В.

ДИРЕКТОР

УП МЕДИНТЕРСЕРВИС

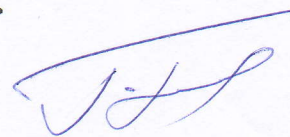

Инструкция по применению

Коннектор инфузионный стерильный для одноразового использования с принадлежностями:

**Коннектор инфузионный для безигольного доступа
(с/без удлинительной линией)**

Стерильный, одноразовый

Модификации (Кат. №): NFC01, NFC01A, NFC02, NFC02A, NFC05, NFC05A, NFC06, NFC06A, NFV0101, NFV0102, NFV0201, NFV0202, NFV0301, NFV0302, NFV0106, NFV0203A, NFV0306.

**Коннектор инфузионный высокого давления для безигольного доступа
(с/без удлинительной линией)**

Стерильный, одноразовый

Модификации (Кат. №): NFC08A, NFC08B, NFC08C, NFV0107, NFV0207, NFV0307, NFV0105, NF0206, NFV0305.

**Коннектор инфузионный для безигольного доступа с анти-возвратным клапаном
(с/без удлинительной линией)**

Стерильный, одноразовый

Модификации (Кат. №): NFC21, NFC22, NFV0108, NFV0208, NFV0308.

Описание

Коннектор инфузионный стерильный для одноразового использования с принадлежностями (далее – коннектор инфузионный), состоит из инфузионных коннекторов, обратного клапана, анти-возвратного клапана, крышечек, стопора (регулятор скорости потока), коннекторов Luer (Люэр), трубок (линий), переходников. Для изготовления изделия используется PC (поликарбонат), силиконовый каучук, PE (полиэтилен), PU (полиуретан).

Технические характеристики изделия содержатся на индивидуальной упаковке.

Применение

Коннектор инфузионный предназначен для безигольного подсоединения шприцов, инфузионных линий и систем при проведении инфузии, гравитационной трансфузии, забора жидкости при трансфузии вены, катеризации вены. Это приводит к тому, что жидкость течет в одном направлении. Это позволяет избежать загрязнения частицами.

Инструкция по применению

- Вскройте упаковку, извлеките изделие, проверьте отсутствие повреждений;
- Открутить крышечки, закрывающие концы коннектора инфузионного, с помощью инжектора, который не содержит иглы, наберите 2-3 мл физиологического раствора, соедините с инфузионным коннектором, и положите конец трубки вверх наружу.
- Соединить инфузионный коннектор и периферическим IV катетер (каннюля).
- Инжектор выпускает воздух между инжектором и соединителем.
- Если трансфузия происходит прямо сейчас, соедините коннектор инфузионный с трансфузионной системой (набором). Если не осуществляется трансфузия, используйте физиологический раствором для промывания крови в коннекторе инфузионном и периферическом IV катетере (канюля).
- После использования, подлежит утилизации как медицинские отходы, в соответствии с нормативными требованиями страны-потребителя.

Меры предосторожности

- Стерилизован ЕО (оксид этилен), не использовать, если есть повреждение индивидуальной упаковки;
- Изделие предназначено для одноразового использования, утилизировать после применения, не использовать повторно. Повторное использование одноразового изделия приводит к потенциальному риску для пациента и специалиста. Это может привести к ухудшению функциональных возможностей изделия;
- Загрязнение или ограниченная функциональность изделия может привести к травме, заболеванию или смерти пациента;
- Срок годности составляет 3 года, игла для ангиографии не должна использоваться по истечении срока годности;
- Любые изменения в структуре изделия не допускаются во время использования.

Противопоказания

- Нет противопоказаний.

Хранение

- Хранить в сухом и прохладном месте, защищать от прямого света.

Срок годности

- 3 года
- Дата производства и срок годности указаны на упаковке


[Symbols] [Символы, применяемые на этикетке]



Изготовитель

STERILE EO

Стерилизация оксидом этилена

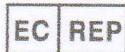

Уполномоченный представитель в
Европейском Сообществе



Использовать только один раз



Дата изготовления



Осторожно! Обратитесь к инструкции
по применению



Использовать до



Не использовать при повреждении
упаковки



Код партии



Номер по каталогу



Знак CE и идентификационный номер Нотифицированного органа. Изделие отвечает основным требованиям Директивы 93/42/ЕЭС с поправками, внесенными Директивой 2007/47/ЕЭС для изделий медицинского назначения.

[Manufacturer] [Производитель]

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
No. 925 Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C

[European representative] [Представитель в Европе]

Shanghai International Holding Corp., GmbH(Europe)
Eiffestraße 80.20537 Hamburg, Germany

[Republic of Belarus representative] [Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь]

УП «Мединтерсервис»,

Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1

ТРАФИМОВИЧ С.В.

ДИРЕКТОР

Инструкция по применению

Трубка (линия) высокого давления

Стерильная, одноразовая

Модификации (Кат. №): PMT0101, PMT0102, PMT0103, PMT0104, PMT0105, PMT0106; PMT0201, PMT0202, PMT0203, PMT0204; PMT0501, PMT0502, PMT0503, PMT0504, PMT0505, PMT0509; PMT0301, PMT0302, PMT0303, PMT0304

Тип: с коннектором Luer-Lock; с 3-ходовых краником и фиксированным коннектором Luer-Lock; с поворотным адаптером

Давление: 40psi; 500psi; 1200psi

Длина: 30см, 60см, 90см, 120см, 150см, 180см

Состав изделия

Трубка (линия) высокого давления состоит из колпачков, коннекторов Luer-Lock, трубки и других принадлежностей.

Описание

Трубка (линия) высокого давления представляет собой многофункциональную соединительную трубку, все компоненты и принадлежности изготовлены из высококачественных материалов. Трубка (линия) высокого давления - стерильна, апиrogenна и безопасна в применении, что позволяет избежать перекрестной инфузии между пациентами.

Технические характеристики изделия содержатся на индивидуальной упаковке.

[Применение]

Трубка(линия) высокого давления представляет собой многофункциональную соединительную трубку, которая может использоваться в инфузии, например, в инфузионных контейнерах, инфузионных системах. Также используется для увеличения инфузионных систем.

Инструкция по применению

- Откройте упаковку, снимите защитное покрытие;
- Достаньте трубку (линию) высокого давления и проверьте на соответствие коннекторов;
- Подключите трубку (линию) высокого давления к инфузионной системе или к другим устройства с помощью коннекторов Luer-Lock;

Меры предосторожности

- Трубка (линия) высокого давления стерилизована ЕО (оксид этилен), не использовать, если есть повреждение индивидуальной упаковки;
- Трубка (линия) высокого давления предназначена для одноразового использования, утилизировать после применения, не использовать повторно. Повторное использование одноразового изделия приводит к потенциальному риску для пациента и специалиста. Это может привести к ухудшению функциональных возможностей изделия;
- Загрязнение или ограниченная функциональность изделия может привести к травме, заболеванию или смерти пациента;

- Срок годности составляет 3 года. Трубка (линия) высокого давления не должна использоваться по истечении срока годности;
- Любые изменения в структуре изделия не допускаются во время использования.
- Избегайте воздействия сырости, нагревания и загрязнения.

Противопоказания

- Нет противопоказаний.

Хранение

- Хранить в сухом и прохладном месте, защищать от прямого света.

Срок годности

- 3 года
- Дата производства и срок годности указаны на упаковке

[Symbols] [Символы, применяемые на этикетке]

	Изготовитель		Стерилизация оксидом этилена
	Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе		Использовать только один раз
	Дата изготовления		Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Использовать до		Не использовать при повреждении упаковки
	Код партии		Номер по каталогу

CE 0123

Знак CE и идентификационный номер Нотифицированного органа. Изделие отвечает основным требованиям Директивы 93/42/ЕЭС с поправками, внесенными Директивой 2007/47/ЕЭС для изделий медицинского назначения.

[Manufacturer] [Производитель]

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
No. 925 Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C

[European representative] [Представитель в Европе]

Shanghai International Holding Corp., GmbH(Europe)
EiffestraiBe 80.20537 Hamburg, Germany

[Republic of Belarus representative] [Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь]

УП «Мединтерсервис»,
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1

ТРАФИМОВИЧ С.В.

ДИРЕКТОР

УП МЕДИНТЕРСЕРВИС

Инструкция по применению

Трубка (линия) спиральная Стерильная, одноразовая

Модификации (Кат.№): PMT0107, PMT0108, PMT0109, PMT0110, ET0501A, ET0501, ET0501B, ET0502

Тип: с коннектором Luer-Lock;

Давление: 350psi; 500psi

Длина: 150см; 200см

Состав изделия

Трубка (линия) спиральная состоит из колпачков, коннекторов Luer-Lock, трубки и других принадлежностей.

Описание

Трубка (линия) спиральная представляет собой многофункциональную соединительную трубку, все компоненты и принадлежности изготовлены из высококачественных материалов, асептична, апиrogenна и безопасна в применении, что позволяет избежать перекрестной инфузии между пациентами.

Технические характеристики изделия содержатся на индивидуальной упаковке.

Применение

Трубка (линия) спиральная представляет собой многофункциональную соединительную трубку, которая может использоваться в инфузии, например, в инфузионных контейнерах, инфузионных системах. Также используется для увеличения инфузионных систем.

Инструкция по применению

- Откройте упаковку, снимите защитное покрытие;
- Достаньте трубку (линию) спиральную и проверьте на соответствие коннекторов;
- Подключите трубку (линию) спиральную к инфузионной системе или к другим устройства с помощью коннекторов Luer-Lock;

Меры предосторожности

- Трубка (линия) спиральная стерилизована ЕО (оксид этилен), не использовать, если есть повреждение индивидуальной упаковки;
- Трубка (линия) спиральная предназначена для одноразового использования, уничтожить после применения, не использовать повторно. Повторное использование одноразового изделия приводит к потенциальному риску для пациента и специалиста. Это может привести к ухудшению функциональных возможностей изделия;
- Загрязнение или ограниченная функциональность изделия может привести к травме, заболеванию или смерти пациента;
- После использования, утилизировать как медицинские отходы, в соответствии с нормативными требованиями страны-потребителя;
- Срок годности составляет 3 года. Трубка (линия) спиральная не должна использоваться по истечении срока годности;
- Любые изменения в структуре изделия не допускаются во время использования.
- Избегайте воздействия сырости, нагрева и загрязнения.

Противопоказания

- Нет противопоказаний.

Хранение

- Хранить в сухом и прохладном месте, защищать от прямого света.


Срок годности

- 3 года
- Дата производства и срок годности указаны на упаковке

[Symbols] [Символы, применяемые на этикетке]



Изготовитель

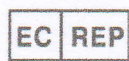

Уполномоченный представитель в
Европейском Сообществе



Дата изготовления



Использовать до



Код партии



Стерилизация оксидом этилена



Использовать только один раз



Осторожно! Обратитесь к инструкции
по применению



Не использовать при повреждении
упаковки



Номер по каталогу



Примеси или наличие фталатов: Ди-(2-этилгексил)-фталат (ДЭГФ)



Знак CE и идентификационный номер Нотифицированного органа. Изделие отвечает основным требованиям Директивы 93/42/ЕЭС с поправками, внесенными Директивой 2007/47/ЕЭС для изделий медицинского назначения.

[Manufacturer] [Производитель]

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.
No. 925 Jinyuan yi Road, 201803, Shanghai, P.R.C

[European representative] [Представитель в Европе]

Shanghai International Holding Corp., GmbH(Europe)
EiffestraiBe 80.20537 Hamburg, Germany

[Republic of Belarus representative] [Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь]

УП «Мединтерсервис»,
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1

ТРАФИМОВИЧ С.В.

ДИРЕКТОР

УП МЕДИНТЕРСЕРВИС