

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Кровать больничная односекционная КБ-1П (в дальнейшем - кровать) предназначена для использования в медицинских учреждениях.

Исполнение кровати: на опорах или на колесах.

Колеса диаметром 125 мм, два из них с тормозом.

1.2 Кровать предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С и относительной влажности 80 % при температуре +25 °С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм, исполнение на колесах:

длина..... 2120±20

ширина..... 950±20

высота..... 925±20

2.2 Габаритные размеры, мм, исполнение на опорах:

длина..... 2120±20

ширина..... 950±20

высота..... 925±20

2.3 Размеры ложа, мм

длина..... 1940±10

ширина..... 840±10

2.4 Габаритные размеры матраца, мм:

длина..... 1950±10

ширина..... 840±10

высота..... 70±5

2.5 Масса (без принадлежностей), кг, не более..... 60

2.6 Допускаемая нагрузка, кг, не более..... 150

2.7 Усилие перемещения

кровати на колесах, Н, не более..... 200

2.8 Срок службы, лет, не менее..... 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы:

Наименование	Кол-во
Основание в сборе с лежаком	1
Стойки (для колёс (опор))	2
Боковины (передняя и задняя)	2
Болт М10х25 (для крепления колёс)	4
Болт М8х70 (для крепления стоек)	8
Паспорт БИПЯ.942811.057.КБ-1П ПС	1
Принадлежности (по желанию заказчика)	
Штатив-стойка для капельниц	1
Стойка-штанга для подтягивания лежащих больных	1
Матрас четырёхсекционный	1
Ограждения боковые складные (комплект)	2

4 ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Основание кровати, стойки изготовлены из металлических труб размером 60х30мм и 50х50мм; ложе – труба металлическая 30х20мм с перфорированным листом; покрытие – порошковое, полимерное.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Кровать поставляется потребителю в разобранном виде. Распакуйте кровать, очистите от пыли.

4.3 К стойкам поз. 2 прикрепите колёса поз.4 при помощи болта поз.9 или вкрутите опоры поз. 5 – если не установлены изготовителем (см. рис.1). Соедините стойки кровати поз.2 с основанием поз.1 при помощи болтов поз. 10 – если не установлены изготовителем (см. рис.1).

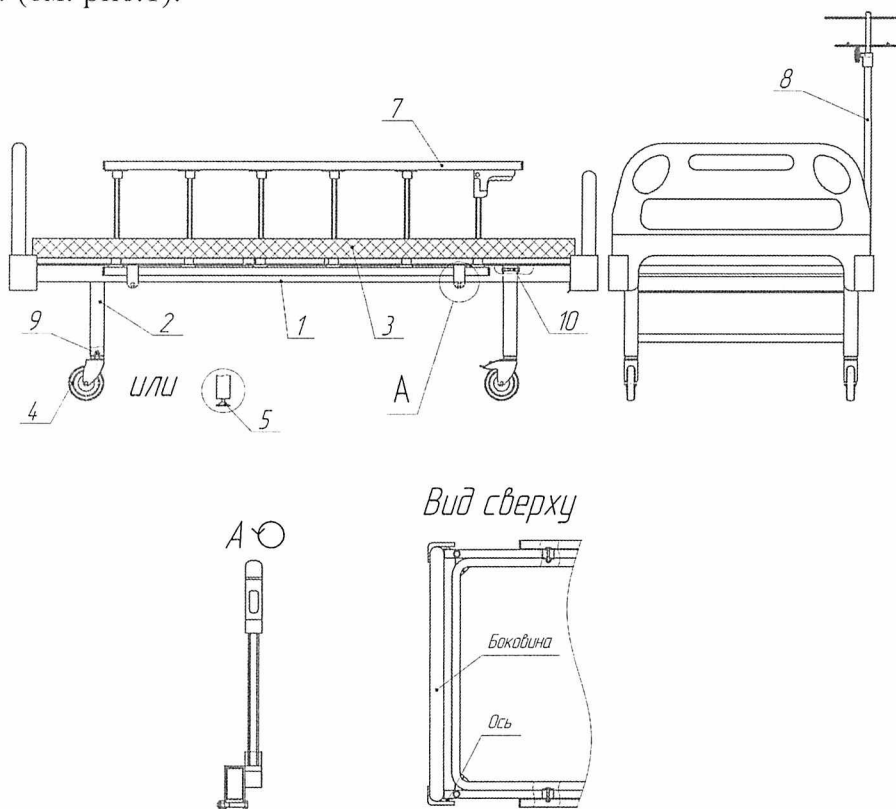


Рис.1

4.4. Возьмите боковины. Отведите крючки, которые расположены внизу боковин вверх, наденьте боковины на оси, которые приварены к основанию кровати. Отпустите крючки. Боковины должны быть зафиксированы (см. рис.1, вид сверху).

4.5 Ограждение поз. 7 надеть сверху на основание кровати, зафиксировав с помощью крепежа (прилагается в комплекте с ограждением) (см. рис.1, вид А).

4.6 Штатив для пакетов поз. 8 вставить в отверстие в основании кровати (см. рис.1). Уложите матрас поз. 3 на ложе кровати.

4.7 Выполните санитарную обработку кровати путем протирания ее поверхностей салфеткой, смоченной 3,0 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 %-го раствора моющего средства или 1,0 % раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата). Также допускается обработку проводить дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации кровати необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения.

5.2 Во избежание поломки ходовой части кровати не следует переезжать с резкими толчками через высокие пороги и другие препятствия – *для кровати на колесах*.

5.3 Раз в полгода производите осмотр, очистку и смазку подшипниковых узлов колес – *для кровати на колесах*.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Кровать в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 100 % при температуре +25 °С.

6.2 Хранить кровать допускается в помещении при температуре от -50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре +25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать больничная односекционная КБ-1П заводской №_____ соответствует ТУ ВУ 800017554.079-202_ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Кровать больничная односекционная КБ-1П заводской №_____ упакована согласно требованиям, предусмотренных в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п. _____ Подпись _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, предусмотренным в ТУ ВУ 800017554.079-202_, при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи)

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Кровать больничная односекционная КБ-1П

заводской № _____, ТУ ВУ 800017554.079-202__

Приобретена _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения- владельца

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Кровать больничная двухсекционная КБ-2П (в дальнейшем - кровать) предназначена для использования в медицинских учреждениях.

Исполнение кровати: на опорах или на колесах.

Колеса диаметром 125 мм, два из них с тормозом.

1.2 Кровать предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С и относительной влажности 80 % при температуре +25 °С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм, исполнение на колесах:

длина..... 2120±20

ширина..... 950±20

высота..... 925±20

2.2 Габаритные размеры, мм, исполнение на опорах:

длина..... 2120±20

ширина..... 950±20

высота..... 925±20

2.3 Размеры ложа, мм

длина..... 1940±10

ширина..... 840±10

2.4 Габаритные размеры матраца, мм:

длина..... 1950±10

ширина..... 840±10

высота..... 70±5

2.5 Угол подъема головной секции 0° - 70°

2.6 Масса (без принадлежностей), кг, не более..... 60

2.7 Допускаемая нагрузка, кг, не более..... 150

2.8 Усилие перемещения

кровати на колесах, Н, не более..... 200

2.9 Срок службы, лет, не менее..... 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы:

Наименование	Кол-во
Основание в сборе с лежаком	1
Стойки (для колёс (опор)	2
Боковины (передняя и задняя)	2
Болт М10х25 (для крепления колёс)	4
Болт М8х70 (для крепления стоек)	8
Паспорт БИПЯ.942811.057.КБ-2П ПС	1
Принадлежности (по желанию заказчика)	
Штатив-стойка для капельниц	1
Стойка-штанга для подтягивания лежащих больных	1
Матрас четырёхсекционный	1
Ограждения боковые складные (комплект)	2

4 ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Основание кровати, стойки изготовлены из металлических труб размером 60х30мм и 50х50мм; ложе – труба металлическая 30х20мм с перфорированным листом; покрытие – порошковое, полимерное.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Кровать поставляется потребителю в разобранном виде. Распакуйте кровать, очистите от пыли.

4.3 К стойкам поз. 2 прикрепите колёса поз.4 при помощи болта поз.9 или вкрутите опоры поз. 5 – *если не установлены изготовителем* (см. рис.1). Соедините стойки кровати поз.2 с основанием поз.1 при помощи болтов поз. 10 – *если не установлены изготовителем* (см. рис.1).

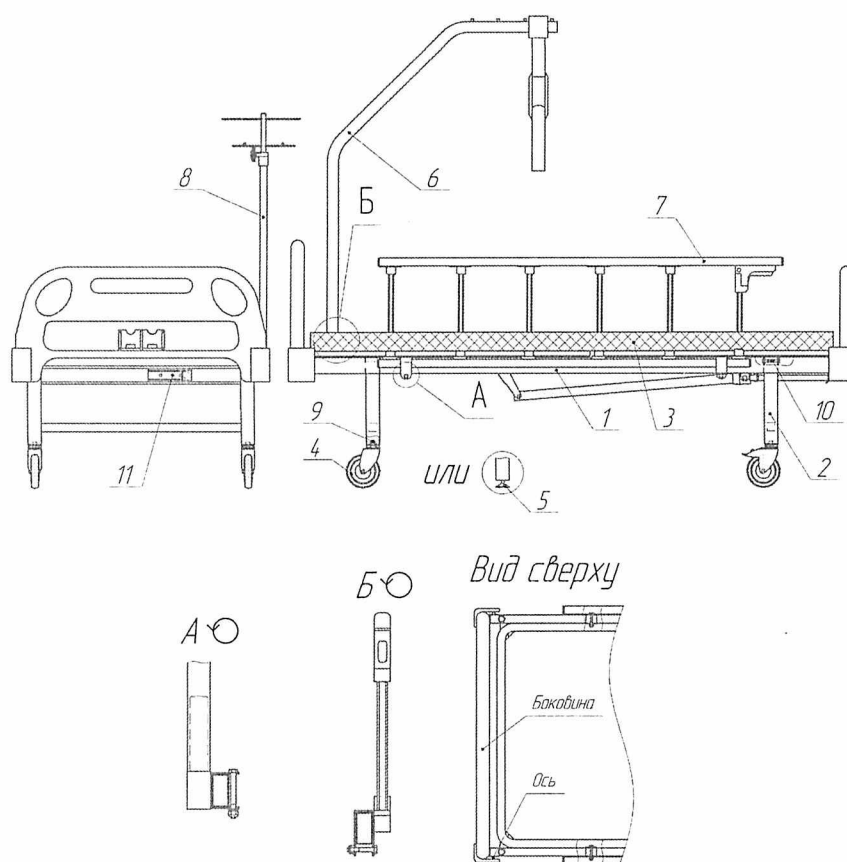


Рис.1

4.4. Возьмите боковины. Отведите крючки, которые расположены внизу боковин вверх, наденьте боковины на оси, которые приварены к основанию кровати. Отпустите крючки. Боковины должны быть зафиксированы (см. рис.1, вид сверху).

4.5 Стойку для подтягивания пациентов поз.6 присоедините к основанию кровати при помощи кронштейна и крепежа (прилагается в комплекте со стойкой) (см. рис.1, Вид А).

4.6 Ограждение поз. 7 надеть сверху на основание кровати, зафиксировав с помощью крепежа (прилагается в комплекте с ограждением) (см. рис.1, вид Б). Штатив для капельниц поз. 8 вставить в отверстие в основании кровати (см. рис.1). Уложите матрац поз. 3 на ложе кровати.

4.7 Для поднятия головной секции необходимо вытянуть ручку механизма подъёма поз.11 на себя. Разложить ручку в г-образное положение и начать вращать её по ходу часовой стрелки. Когда секция достигнет нужного угла подъёма, сложите ручку в

исходное положение. Для опускания головной секции необходимо выполнить всё тоже самое, только вращать ручку в противоположном направлении.

4.8 Выполните санитарную обработку кровати путем протирания ее поверхностей салфеткой, смоченной 3,0 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора моющего средства или 1,0 % раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата). Допускается обрабатывать дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом Беларуси.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации кровати необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения.

5.2 Во избежание поломки ходовой части кровати не следует переезжать с резкими толчками через высокие пороги и другие препятствия – *для кровати на колесах*.

5.3 Раз в полгода производите осмотр, очистку и смазку подшипниковых узлов колес – *для кровати на колесах*.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Кровать в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 100 % при температуре +25 °С.

6.2 Хранить кровать допускается в помещении при температуре от -50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре +25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать больничная двухсекционная КБ-2П заводской №_____ соответствует ТУ ВУ 800017554.079-202__ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Кровать больничная двухсекционная КБ-2П заводской №_____ упакована согласно требованиям, предусмотренных в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п. _____ Подпись

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, предусмотренным в ТУ ВУ 800017554.079-202__, при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Кровать больничная двухсекционная КБ-2П,

заводской №_____, ТУ ВУ 800017554.079-202__

Приобретена_____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию_____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города_____

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения- владельца

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Кровать больничная четырёхсекционная КБ-4П (в дальнейшем - кровать) предназначена для использования в медицинских учреждениях.

Исполнение кровати: на опорах или на колесах.

Колеса диаметром 125 мм, два из них с тормозом.

1.2 Кровать предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С и относительной влажности 80 % при температуре +25 °С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм, исполнение на колесах:

длина..... 2120±20
ширина..... 950±20
высота..... 925±20

2.2 Габаритные размеры, мм, исполнение на опорах:

длина..... 2120±20
ширина..... 950±20
высота..... 925±20

2.3 Размеры ложа, мм

длина..... 1940±10
ширина..... 840±10

2.4 Габаритные размеры матраца, мм:

длина..... 1950±10
ширина..... 840±10
высота..... 70±5

2.5 Угол подъема головной секции 0° - 70°

2.6 Угол подъема тазобедренной секции 0° - 40°

2.7 Масса (без принадлежностей), кг, не более..... 65

2.8 Допускаемая нагрузка, кг, не более..... 150

2.9 Усилие перемещения
кровати на колесах, Н, не более..... 200

3.0 Срок службы, лет, не менее..... 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы:

Наименование	Кол-во
Основание в сборе с лежаком	1
Стойки (для колёс (опор)	2
Боковины (передняя и задняя)	2
Болт М10х25 (для крепления колёс)	4
Болт М8х70 (для крепления стоек)	8
Паспорт БИПЯ.942811.057.КБ-4П ПС	1
Принадлежности (по желанию заказчика)	
Штатив-стойка для капельниц	1
Стойка-штанга для подтягивания лежащих больных	1
Матрас четырёхсекционный	1
Ограждения боковые складные (комплект)	2

4 ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Основание кровати, стойки изготовлены из металлических труб размером 60х30мм и 50х50мм; ложе – труба металлическая 30х20мм с перфорированным листом; покрытие – порошковое, полимерное.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Кровать поставляется потребителю в разобранном виде. Распакуйте кровать, очистите от пыли.

4.3 К стойкам поз. 2 прикрепите колёса поз.4 при помощи болта поз.9 или вкрутите опоры поз. 5 – *если не установлены изготовителем* (см. рис.1). Соедините стойки кровати поз.2 с основанием поз.1 при помощи болтов поз. 10 – *если не установлены изготовителем* (см. рис.1).

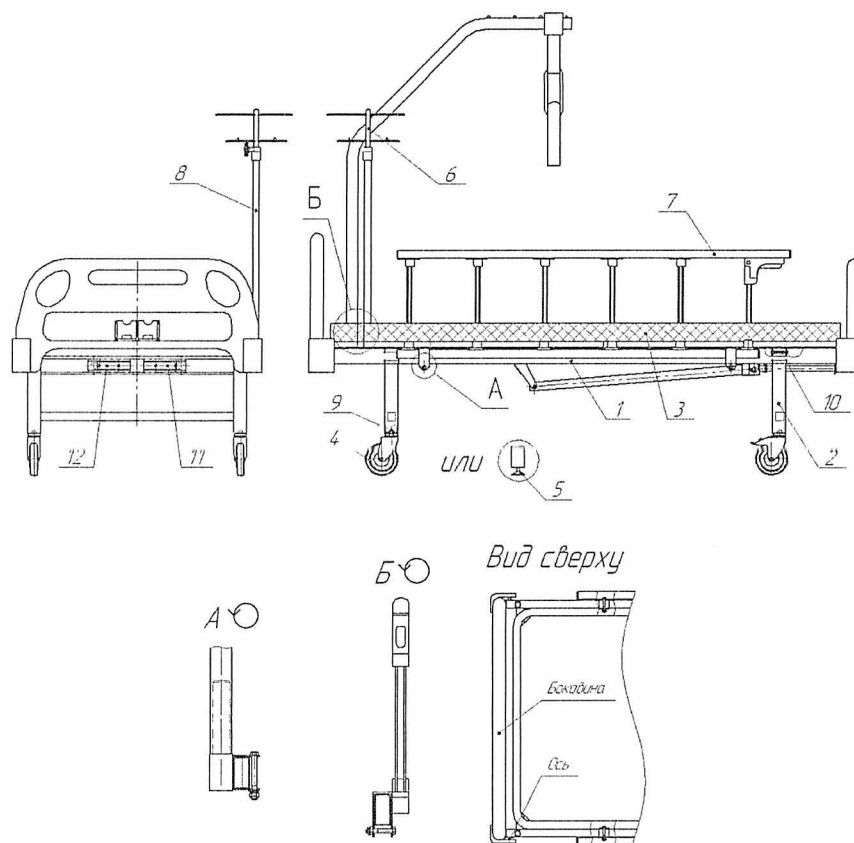


Рис.1

4.4. Возьмите боковины. Отведите крючки, которые расположены внизу боковин вверх, наденьте боковины на оси, которые приварены к основанию кровати. Отпустите крючки. Боковины должны быть зафиксированы. (см. рис.1, вид сверху)

4.5 Стойку для подтягивания пациентов поз.6 присоедините к основанию кровати при помощи кронштейна и крепежа (прилагается в комплекте со стойкой) (см. рис.1, Вид А).

4.6 Ограждение поз. 7 надеть сверху на основание кровати, зафиксировав с помощью крепежа (прилагается в комплекте с ограждением) (см. рис.1, вид Б). Штатив для капельниц поз. 8 вставить в отверстие в основании кровати (см. рис.1). Уложите матрас поз. 3 на ложе кровати.

4.7 Для поднятия головной секции необходимо вытянуть ручку механизма подъёма поз.11 на себя. Разложить ручку в г-образное положение и начать вращать её по ходу часовой стрелки. Когда секция достигнет нужного угла подъёма, сложите ручку в исходное положение. Для опускания головной секции необходимо выполнить всё тоже самое, только вращать ручку в противоположном направлении. Для поднятия

тазобедренной секции необходимо выполнить всё также, как описано выше, только при помощи механизма подъёма поз.12.

4.8 Выполните санитарную обработку кровати путем протирания ее поверхностей салфеткой, смоченной 3,0 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора моющего средства или 1,0 % раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата). Допускается обрабатывать дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации кровати необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения.

5.2 Во избежание поломки ходовой части кровати не следует переезжать с резкими толчками через высокие пороги и другие препятствия – *для кровати на колесах*.

5.3 Раз в полгода производите осмотр, очистку и смазку подшипниковых узлов колес – *для кровати на колесах*.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Кровать в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 100 % при температуре +25 °С.

6.2 Хранить кровать допускается в помещении при температуре от -50 °С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре +25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать больничная четырёхсекционная КБ-4П заводской №_____ соответствует ТУ ВУ 800017554.079-202_ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Кровать больничная четырёхсекционная КБ-4П заводской №_____ упакована согласно требованиям, предусмотренных в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п. _____ Подпись

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, предусмотренным в ТУ ВУ 800017554.079-202_, при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Кровать больничная четырёхсекционная КБ-4П,
заводской № _____, ТУ ВУ 800017554.079-202_

Приобретена _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения- владельца