

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.077-2022 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

Адрес изготовителя: СЗАО «Белмедматериалы», Беларусь, 225730, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Тележка для перевозки больных и пострадавших ТСП, заводской № _____, ТУ ВУ 800017554.077-2022

Приобретена _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

города _____

Подпись и печать руководителя

ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения-владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ И ПОСТРАДАВШИХ ТСП

Копия верна


ТУ ВУ 800017554.077-2022

Директор

СЗАО «Белмедматериалы»

Паспорт

ТСП-01.00.000 СБ

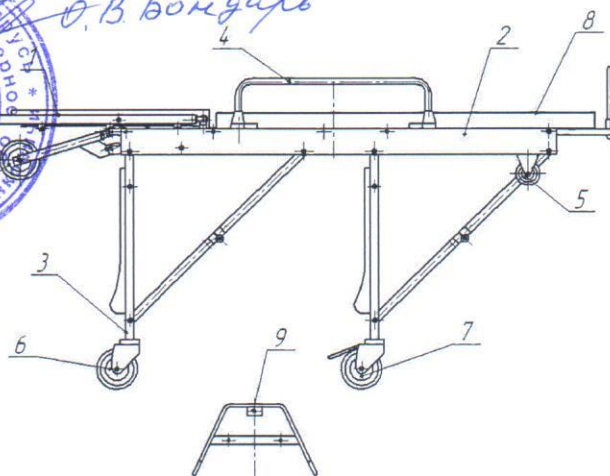

1. Подголовник
2. Каркас
3. Стойка
4. Ограждение
5. Опорное колесо

6. Колесо
7. Колесо с тормозом
8. Матрас
9. Фиксирующее устройство

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тележка для перевозки больных и пострадавших ТСП (в дальнейшем - тележка) предназначена для перемещения больных и пострадавших на догоспитальном этапе и их размещения при транспортировании в специализированных транспортных средствах скорой медицинской помощи.

1.2 Тележка предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры тележки, мм:

длина.....	1920±10
ширина.....	620±10
высота (с поднятым подголовником).....	1300±10
высота (до панели).....	820±10
2.2 Угол наклона подголовника	(45±4)°
2.3 Масса, кг, не более.....	60
2.4 Допускаемая нагрузка, кг, не более.....	161
2.5 Срок службы, лет, не менее.....	5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- тележка	1 шт.
- матрас	1 шт.
- ремень безопасности.....	2 шт.
- фиксирующее устройство.....	1 шт.
- паспорт.....	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Тележка представляет собой каркас 2, установленный на четырех самоориентирующихся колесах 6-7 (см. рисунок), обеспечивающих легкость хода тележки. Каркас тележки выполняется из труб, соединенных поперечинами.

4.2 К каркасу крепится подголовник 1, который может устанавливаться под разным углом. Фиксация наклонного положения осуществляется при помощи механизма подъема.

4.3 Складывание тележки осуществляется путем нажатия на ручки.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на

5 ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 Перед эксплуатацией очистите тележку и насухо протрите. Тележку следует держать в чистоте и периодически обрабатывать дезинфицирующими растворами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь

5.2 Во избежание поломки ходовой части тележки не следует свозить ее по лестницам, пересезжать с резкими толчками через высокие пороги и другие препятствия.

5.3 Раз в полгода производите осмотр, очистку и смазку подшипниковых узлов колес.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Тележка в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 98 % при температуре +25 °С.

6.2 Хранить тележку допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре +25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тележка для перевозки больных и пострадавших ТСП, заводской номер _____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка для перевозки больных и пострадавших ТСП, заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.077-2022 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ м.п.

Подпись ответственного за приемку _____