

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проводники инфузионные однократного применения

ТУ РБ 05838972.007-95

ИСЖЕ.942274.01 ИП

Дата выпуска 14.05.2021. Рев. 08

Настоящая инструкция применяется для проводников инфузионных однократного применения, которые включают в себя следующие варианты исполнений: прозрачные, светонепроницаемые и трехходовые.

НАЗНАЧЕНИЕ: Проводник инфузионный однократного применения (далее – проводник) предназначен для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов с помощью шприцевых насосов.

ФОРМА ВЫПУСКА: Проводник выпускается в первичной упаковке, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Детали проводника изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях.

Проводник в первичной упаковке стерилен, апирогенен и нетоксичен. Стерилизован окисью этилена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Специальные противопоказания неизвестны.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Побочных действий не обнаружено.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ (прозрачный и светонепроницаемый):

1. Проверить целостность первичной упаковки и срок годности проводника.
2. Вскрыть первичную упаковку и извлечь проводник.
3. Снять колпачок 1 (см. рис 1) и подсоединить коннектор 2 к шприцу с лекарственным препаратом.

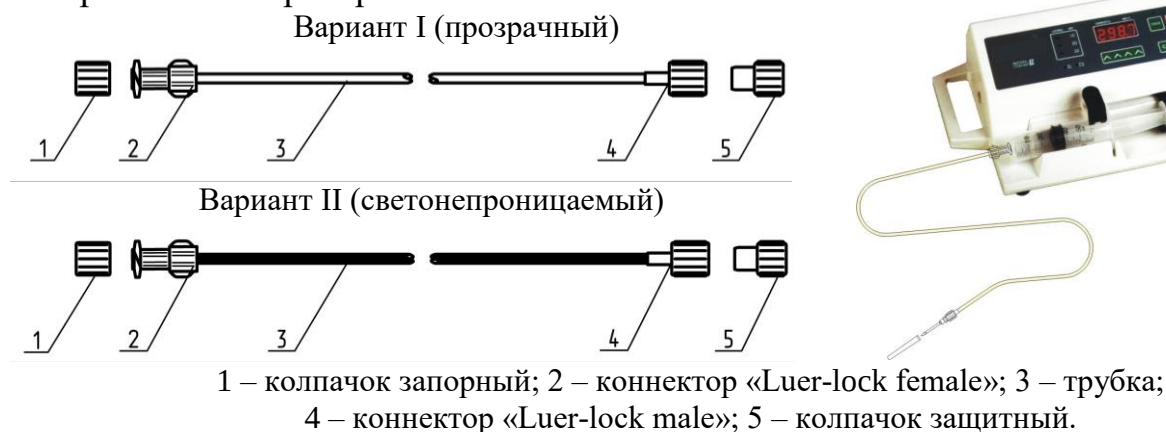


Рисунок 1 – Проводник инфузионный


4. Снять колпачок 5 и надеть на коннектор 4 иглу инъекционную.
5. Плавно надавливая на шток шприца, заполнить проводник лекарственным препаратом до полного вытеснения воздуха из трубки 3 и появления капли из иглы инъекционной.
6. Надеть колпачок на иглу инъекционную.
7. Убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в трубке проводника
8. Закрепить шприц с проводником в гнезде шприцевого насоса.
9. Обработать место венопункции спиртом, йодом или другим антисептиком.
10. Снять колпачок с иглы инъекционной и произвести венопункцию.



11. Задать требуемую скорость введения препарата (см. инструкцию по эксплуатации шприцевого насоса).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ (трехходовой):

1. Проверить срок годности проводника и целостность первичной упаковки.
2. Вскрыть первичную упаковку и извлеките проводник.
3. Снять колпачок 1 (см. рис. 2) и надежно подключить одну или две магистрали к коннектору 2.

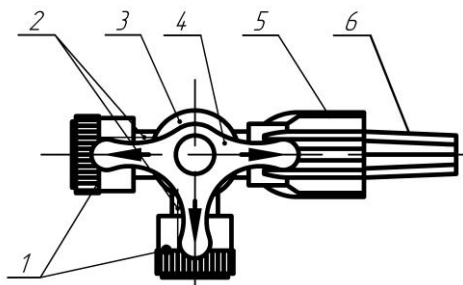

1 – колпачок запорный; 2 – коннектор корпуса «Luer-lock female»; 3 – корпус; 4 – поворотное устройство; 5 – коннектор корпуса «Luer-lock male»; 6 – колпачок защитный.

Рисунок 2 – Проводник инфузионный трехходовой

4. Снять защитный колпачок 6 и подсоединить подходящее устройство к коннектору 5.

5. С помощью вращения поворотного устройства 4 установить необходимое направление потоков жидкости.

6. После окончания использования утилизировать проводник в установленном порядке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Проводник предназначен для однократного применения. Не использовать повторно. Повторное использование может быть опасным как для пациента, так и для персонала.

Не подвергать повторной стерилизации. Повторная стерилизация или повторное использование могут вызвать инфекцию или критические реакции.

Проводник имеет коннекторы Luer-lock (male и female) обеспечивающие герметичное, безопасное и надежное соединение с инъекционными иглами, венозными катетерами, шприцами Luer-lock.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Слишком сильное затягивание может привести к повреждению резьбы разъема Luer и образования открытых трещин. Соединяйте разъем Luer правильно.


БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Не использовать не по назначению. Перед использованием изделия убедитесь в его целостности и работоспособности. Во избежание повреждений вследствие неправильного применения используйте изделие в соответствии с данной инструкцией по применению. Не использовать при нарушении целостности первичной упаковки.

После использования подлежит обработке и утилизации.

В случае нарушения вышеперечисленного, надежность применения изделия не гарантируется, и производитель не несет ответственности.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ:

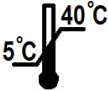	Дата изготовления
	Использовать до
	Код партии
	Не использовать повторно
	Не применять при повреждении упаковки
	Стерилизация с применением окиси этилена
	Ограничение температуры
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле

ХРАНЕНИЕ:

Проводники должны храниться во вторичной упаковке при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.

Защитить проводники от попадания прямых солнечных лучей и хранить в сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Утилизацию производить в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 07.02.2018 г. № 14 и инструкции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 22 ноября 2002 г. № 81.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Производственное унитарное предприятие «ФреБор» (Унитарное предприятие «ФреБор»).

Республика Беларусь, 222518, г. Борисов, Минская обл., ул. Чапаева, 64, 6 этаж.
Телефон: + 375 177 734265, факс + 375 177 732471

Адрес электронной почты: info@frebor.by