


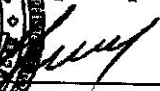

Унитарного предприятия «ФреБор»

 С.А.Мороз


05 2021

Зажим пуповины новорожденного однократного применения
ТУ ВУ 600012098.015-2007

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИСЖЕ.942251.01 ИП

СОГЛАСОВАНО


Заместитель директора по
производству
Унитарного предприятия «ФреБор»

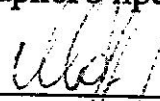 И.А.Мороз
«13» 05 2021

Руководитель службы контроля
качества
Унитарного предприятия «ФреБор»

 Т.А.Прус
«13» 05 2021

Начальник отдела маркетинга и сбыта
Унитарного предприятия «ФреБор»

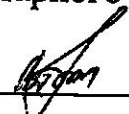 М.С.Вафина
«13» 05 2021

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Зажим пуповины новорожденного однократного применения
ТУ ВУ 600012098.015-2007

ИСЖЕ.942251.01 ИП

Дата выпуска 14.05.2021. Рев. 03


НАЗНАЧЕНИЕ: Зажим пуповины новорожденного однократного применения предназначен для пережатия пуповины после рождения ребенка.

ФОРМА ВЫПУСКА: Зажим пуповины выпускается в первичной упаковке, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Детали системы изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях.

Зажим пуповины в первичной упаковке стерилен, апирогенен и нетоксичен. Стерилизованы окисью этилена.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Специальные противопоказания неизвестны.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Побочных действий не обнаружено.

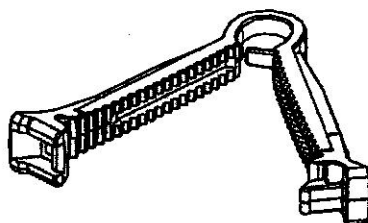

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Приготовить два зажима в первичной упаковке.
2. Проверить целостность первичной упаковки и срок годности зажимов.
3. Через 2-3 минуты после рождения (пока пуповина не перестанет пульсировать) вскрыть первичную упаковку и извлечь зажимы.
4. На расстоянии 10-15 см от пупочного кольца новорожденного наложить один зажим с полным охватом пуповины и сжать до защелкивания замка (характерный щелчок), через несколько сантиметров – другой.
5. Смазать пуповину между зажимами 96 % спиртом и перерезать стерильными ножницами.
6. Смазать место разреза 5 % настойкой йода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Температура эксплуатации зажима от плюс 18 до плюс 42 °С.

Зажим пуповины предназначен для однократного применения. Не использовать повторно. Повторное использование может быть опасным как для пациента, так и для персонала.

Не подвергать повторной стерилизации. Повторная стерилизация или повторное использование могут вызвать инфекцию или критические реакции.

Не использовать не по назначению. Использовать в соответствии с инструкцией по применению. Не использовать при нарушении целостности первичной упаковки.

После использования подлежит обработке и утилизации.

В случае нарушения вышеперечисленного, надежность применения изделия не гарантируется, и производитель не несет ответственности.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ:

	Дата изготовления
	Использовать до
	Код партии
	Не использовать повторно
	Не применять при повреждении упаковки
	Стерилизация с применением окиси этилена
	Ограничение температуры
	Хрупкое. Осторожно
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле

ХРАНЕНИЕ:

Зажимы пуповины должны храниться во вторичной упаковке при температуре от плюс 5 °C до плюс 40 °C.

Защитить зажимы пуповины от попадания прямых солнечных лучей и хранить в сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:

Утилизацию производить в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 07.02.2018 г. № 14 и инструкции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 22 ноября 2002 г. № 81.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Производственное унитарное предприятие «ФреБор» (Унитарное предприятие «ФреБор»).

Республика Беларусь, 222518, г. Борисов, Минская обл., ул. Чапаева, 64, 6 этаж.
Телефон: + 375 177 734265, факс + 375 177 732471

Адрес электронной почты: info@frebor.by