

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наконечники для дозаторов пипеточных ТУ ВУ 100129639.023-2021

1. Назначение

Наконечник для дозаторов пипеточных предназначен для использования в качестве сменного элемента в дозаторах при осуществлении дозирования проб биожидкостей и реактивов при проведении лабораторных исследований.

2. Описание

Наконечники для дозаторов пипеточных представляют собой конические трубочки разного объёма.

В зависимости от объёма, наконечник может иметь следующие варианты исполнения:

наконечник 2 – 300 мкл для дозаторов пипеточных;

наконечник 100 – 1000 мкл для дозаторов пипеточных;

наконечник 1000 – 5000 мкл для дозаторов пипеточных.

По бактериологическому статусу наконечники – асептические, или бактериально чистые по производству. Изготавливаются в беспылевой (свободной от пылевых частиц на 99,9%) контролируемой среде при температуре +250°C.

3. Материал

Наконечники для дозаторов пипеточных изготавливаются из прозрачного полипропилена, допущенного для контакта с пищевыми продуктами. Полипропилен – механически прочный термостойкий материал, плотность 0,91 г/см³. Обладает высокой стойкостью к кислотам, щелочам, растворам солей и другим неорганическим агрессивным средам (кроме ароматических и галоген содержащих углеводородов).

4. Технические характеристики

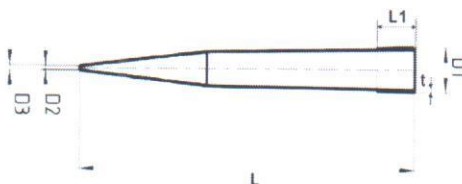


Рисунок 1. Наконечник для дозаторов

Наконечник для дозаторов пипеточных	L, мм	L1, мм	t, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	Масса, г	Цвет
2-300 мкл	49,3 ± 0,5	15,3 ± 0,5	0,9 ± 0,1	7,35 ± 0,5	0,5 ± 0,01	1,1 ± 0,05	0,35 ± 0,02	бесцветный
100-1000 мкл	71,3 ± 0,5	9,8 ± 0,5	0,95 ± 0,1	9,5 ± 0,5	0,8 ± 0,03	1,4 ± 0,05	0,9 ± 0,03	бесцветный
1000-5000 мкл	147,5 ± 0,5	20,0 ± 0,5	1,3 ± 0,2	11,8 ± 0,5	1,1 ± 0,05	2,0 ± 0,05	3,0 ± 0,3	бесцветный

5. Порядок использования изделия

Изделия предназначены для профессионального использования в лабораториях.

Методика дозирования:

- Наконечник должен быть герметично присоединён к посадочному конусу.
- Температура сменных наконечников, дозатора и дозируемой жидкости должна быть одинаковой.

- Смочите сменный наконечник перед началом дозирования путём последовательного пятикратного набора и сброса дозируемой жидкости.
- При необходимости для удаления капелек снаружи наконечника промокните его кончик нетканой целлюлозой. При этом убедитесь, что жидкость не вытекает из наконечника.

6. Условия эксплуатации

Наконечник предназначен для однократного использования.

При использовании наконечника допустимы биоматериалы и реагенты: моча, спинномозговая жидкость, экссудаты, жидкие реагенты.

Все манипуляции с наконечником должны проводиться в перчатках.

Не использовать после истечения срока годности или если упаковка повреждена.

7. Противопоказания к применению

При использовании изделий по назначению противопоказаний в применении нет.

8. Комплектность

Наконечник для дозаторов пипеточных независимо от варианта исполнения реализуется в групповой упаковке. Комплект поставки:

- наконечник 2 – 300 мкл для дозаторов пипеточных – 1 упаковка (500 шт.)
- наконечник 100 – 1000 мкл для дозаторов пипеточных – 1 упаковка (500 шт.)
- наконечник 1000 – 5000 мкл для дозаторов пипеточных – 1 упаковка (100 шт.)

9. Упаковка и маркировка

Наконечники упаковываются в пакет полиэтиленовый одношовный по ГОСТ 12302.

На групповой упаковке указаны: товарный знак, наименование изделия, количество изделий в упаковке, название и адрес изготовителя, номер регистрационного удостоверения, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, указание «для однократного применения», «петля Мебиуса», знак, призывающий к охране окружающей среды, знак запрета на повторное применение, знак о неиспользовании при повреждении упаковки, цифровое обозначение материала (полипропилен: 5).

10. Условия транспортировки и хранения

Наконечники транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранить наконечники необходимо в закрытых складских помещениях в условиях 3 по ГОСТ 15150 защищёнными от прямого воздействия солнечного света.

11. Утилизация

Одноразовые изделия утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН от 07.02.2018 № 14 по утилизации медицинских отходов класса Б.

12. Гарантия и срок годности

Производитель гарантирует соответствие наконечников требованиям технических условий и (или) конструкторской документации при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет с даты изготовления.

Производитель:

ОДО «Полиэфир», 220140, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 62, административно производственное здание Литер А4/КП, к.147.

Тел./факс: +375 17 397 05 65, email: polyefir@mail.ru, web: www.polyefir.by