

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.

Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road,
Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, P.R. China

Tel: +86-574-8778 6632
Fax: +86-574-8778 6644
info@greatcare.cn



Creating a Better Care

Инструкция по применению

Мочеприемники с принадлежностями в составе:

Мочеприемники, двухтактный клапан

(включая системные компоненты и принадлежности)

Модификации (кат. №): GCU 2015: GCU 201501, GCU 201502.

Мочеприемники, поворотный клапан

(включая системные компоненты и принадлежности)

Модификации (кат. №): GCU 2015: GCU 201503, GCU 201504.

Мочеприемники, Т-образный клапан

(включая системные компоненты и принадлежности)

Модификации (кат. №): GCU 2016: GCU 201601, GCU 201602.

Мочеприемники, без системы слива

(включая системные компоненты и принадлежности)

Модификации (кат. №): GCU 2017: GCU 201701, GCU 201702, GCU 201703, GCU 201704.

Мочеприемники дренируемые

(включая системные компоненты и принадлежности)

Модификации (кат. №): GCU 2102, GCU 2103, GCU 2107, GCU 2108, GCU 2109.

Мочеприемники дренируемые, урометрические

(включая системные компоненты и принадлежности)

Модификации (кат. №): GCU 2201, GCU 2202.

Мочеприемники ножные

(включая системные компоненты и принадлежности)

Модификация (кат. №): GCU 2301.

Мочеприемники детские

(включая системные компоненты и принадлежности)

Модификация (кат. №): GCU 2401.

Объем: 100 мл – 5000 мл

- изготовлены из нетоксичного поливинилхлорида, полиэтилена, полиэтилена с нетканой подложкой (полиэстер).
- имеют различные типы кранов и клапанов для опорожнения мочеприемника.
- одна или обе стенки мочеприемника могут быть прозрачны, для лучшей видимости цвета и количества мочи.
- снабжен длинной (90см или 110см), гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с различными типами колпачков, клапанов, идеально подходящих к любому размеру и типу катетера.

ДИРЕКТОР
УП МЕДИНТЕРСЕРВИС

С.В. ТРАФИМОВИЧ

- мочеприемники стомийные одна/двухкомпонентные имеют мешок бесшумный, мягкий, задняя часть покрыта нетканым материалом, фланцевая пластина имеет адгезивный слой на гипоаллергенной основе.
- поставляется в герметичной стерильной упаковке, обеспечивающей сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности.
- не содержит латекс и фталаты.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Представляет собой резервуар, предназначен для взятия мочи на анализ, также для уростомной мочеприемной системы у людей, у которых, по разным причинам, временно или постоянно, невозможен нормальный акт мочеиспускания, и лежащих больных.
- Выбрать подходящий размер мочеприемника.
- Извлечь мочеприемник из стерильной упаковки.
- Убедиться в отсутствии повреждений на мочеприемниках, заломов на сливных (дренажных) трубках.
- Соединить мешок при помощи дренажной трубки с катетером, либо мешок с фланцевой пластиной (для мочеприемников стомийных), после закрепить мочеприемник на койке, бедре или поясе пациента.
- Когда уровень мочи достигнет определенного объема, необходимо заменить мочеприемник однократного применения на другой, слить содержимое при использовании многоразового мочеприемника открыв канальный клапан (краник), сменить мешок или слить содержимое открыв канальный клапан (краник) при использовании мочеприемника стомийного 2-х компонентного.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Выбор размера мочеприемника, индивидуален для каждого пациента, должен производиться только опытными клиническими специалистами.
- Устройство используется только в соответствии с указаниями медицинского персонала.
- Перед применением мочеприемника необходимо проверить, не использовать при наличии повреждений.
- Во избежание повреждения мочеприемника не используйте острые и режущие предметы во время установки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- стерилизовано ЕО (оксид этилен).
- для однократного применения.
- перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- не использовать при нарушении целостности индивидуальной упаковки.
- срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.
- хранить при температуре от 0 до +45°C.
- после использования, утилизировать как медицинские отходы, в соответствии с нормативными требованиями страны-потребителя.

СИМВОЛЫ

Толкование обозначений, используемых для упаковки:




Изготовитель

STERILE EO

ДИРЕКТОР
УП МЕДИНТЕРСЕРВИС
Стерилизация оксидом этилена

С.В. ТРАФИМОВИЧ

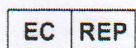

Уполномоченный представитель в
Европейском Сообществе



Дата изготовления



Использовать до



Код партии



Не стерилизовать повторно



Беречь от влаги



0197 Знак CE и идентификационный номер Нотифицированного органа.



Использовать только один раз



Осторожно! Обратитесь к инструкции по
применению



Не использовать при повреждении упаковки



Номер по каталогу



Не допускать воздействия солнечного света



Хрупкое, обращаться осторожно

Дата вступления в силу

Данное издание Инструкции пользователя вступает в силу в 2019.01.20



Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd

Unit 93, Building 12, No.818, Qiming Road, Yinzhou, 315105, Ningbo, Zhejiang,
P.R. China

Производственная площадка: No.92 Cishanhe Rd. Chunxiao, Beilun, Ningbo, 315830 Zhejiang, P.R. China



Greatcare Medical GmbH

Bonner Str. 31, 50389 Wesseling, Germany

Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь

УП «Мединтерсервис»,

Республика Беларусь, 220141, г. Минск, пр-т Независимости 168, корпус 2, пом. 3Н, ком. 1.

