

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за протезом на верхнюю конечность ПР0, ПР2, ПР4, ПР8

Для обеспечения правильного ухода за протезом необходимо:

- протез содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильзы протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, кисти, металлических деталей и насадок;
- протез хранить в сухом, чистом месте.
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- при одевании и снятии верхней одежды, кисть покрыть легкой хлопчатобумажной салфеткой для лучшего скольжения;
- чтобы сохранить кисть (оболочку) косметическую необходимо содержать ее в чистоте, для этого ежедневно после пользования необходимо мыть водой с детским мылом или каким-либо другим моющим средством;
- следует избегать механических повреждений кисти косметической, попадания на поверхность печатной краски, пишущей пасты, так как пятна от них полностью не смываются. Загрязнения могут образовываться не только от прямого попадания краски и пишущей пасты, но и от загрязненной здоровой руки и трения об одежду;
- свежие пятна грязи с поверхности кисти косметической необходимо смывать губкой или чистой тряпочкой намыленной мылом с получением обильной пены или каким-либо другим моющим средством с нейтральным РН;
- мыло смывать теплой водой при температуре 30-40°C. Влажную кисть вытирать чистой салфеткой. Сильно загрязненные места можно протереть спиртом.

Для предохранения кисти (оболочки) косметической от загрязнения необходимо соблюдать следующие правила:

- не прикасаться к кисти потной рукой;
- не носить кисть в кожаной перчатке, даже с текстильной подкладкой;
- избегать при ходьбе систематического трения об одежду;
- во время работы по хозяйству и на садовом участке, для защиты кисти косметической следует одеть трикотажную перчатку;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-оптопечический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор
В. А. Каневич

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу
за протезом стопы ПНО

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на культю надеть предохранительный чехол, который должен плотно облегать культю и не образовывать складок. При повышенной потливости рекомендуется применять шерстяной чехол;
- в положении сидя или стоя, погрузить культю в мягкий вкладыш, а затем в приемную гильзу;
- найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез при помощи рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
- обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на торец культи (подошвенную часть);

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы;
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия. Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор

В. А. Калевич

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу
за протезом голени ПНЗ

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на культю надеть предохранительный чехол, который должен плотно облегать культю и не образовывать складок. При повышенной потливости рекомендуется применять шерстяной чехол;
- в положении сидя или стоя, погрузить культю в мягкий вкладыш, а затем в приемную гильзу;
- найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез при помощи рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
- обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза голени должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на связку надколенника, внутренний мыщелок и боковые поверхности вдоль гребня большеберцовой кости и частично на торец культи;
- повышенное давление может ощущаться лишь над наколенником, которое перестает беспокоить по мере освоения ходьбы на протезе;

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы;
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании лайнера (силиконового чехла), обеспечивать ежедневный уход за чехлом согласно прилагаемой инструкции по пользованию.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор

В. А. Колевич

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за протезом бедра ПН6

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на культю надеть предохранительный чехол, который должен плотно облегать культю и не образовывать складок. При повышенной потливости рекомендуется применять шерстяной чехол;
- в положении сидя или стоя, погрузить культю в приемную гильзу голени, протянуть мягкие ткани при помощи чехла (протяжки) через отверстие;
- найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез при помощи рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
- обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза бедра должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на седалищный бугор.

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы. Исключение составляют рабочие протезы, специально предназначенные для выполнения рабочих операций.
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании лайнера (силиконового чехла), обеспечивать ежедневный уход за чехлом согласно прилагаемой инструкции по использованию.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор

А. Калевич

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за протезом после вычленения бедра ПН8

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- протез надевается на нательное белье (шорты) которое должно облегать культю с минимальным образованием складок;
- в положении сидя или стоя, погрузить культю в приемную гильзу;
- найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез при помощи рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
- обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на дистальную поверхность культи.

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы.
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор

В.А. Калевич

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за протезом при врожденном недоразвитии нижней конечности ПН9

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на нижнюю конечность надеть предохранительный чехол (чулок), который должен плотно облегать и не образовывать складок;
- в положении сидя или стоя, погрузить культю в приемную гильзу;
- найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на нижнюю конечность;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез при помощи рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
- обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на подошвенную часть стопы.

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы.
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи нижней конечности;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В.А. Каневит

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за аппаратом на нижнюю конечность
АН0, АН2, АН4, АН6, АН8

НАДЕВАНИЕ АППАРАТА:

- аппарат рекомендуется надевать на трикотажный чулок;
- расположить нижнюю конечность в приемные гильзы;
- найти наиболее удобное положение нижней конечности в приемных гильзах, после чего дать нагрузку на конечность;
- отрегулировать крепление.

УХОД ЗА АППАРАТОМ:

- избегать сильных ударов аппаратом и по аппарату, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали;
- аппарат необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать аппарат, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей, шарниров;
- аппарат хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- трущиеся металлические части аппарата и шарнирные соединения необходимо периодически осматривать и смазывать смазочными материалами;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

Режим ношения аппарата определяется состоянием здоровья пациента и рекомендациями врача - травматолога - ортопеда.

По вопросам индивидуального пользования аппаратом необходимо проконсультироваться с врачом - травматологом - ортопедом.

При использовании аппарата необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт аппарата необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу аппарата в течение трех месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор
В. А. Калевич

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу
за тугором на верхнюю конечность TP0, TP2, TP4, TP6, TP8

НАДЕВАНИЕ ТУТОРА:

- тугор рекомендуется надевать на нателное белье;
- расположить приемную гильзу на верхней конечности и плотно зафиксировать при помощи крепления.

УХОД ЗА ТУТОРОМ:

- избегать сильных ударов тугором и по тугору;
- тугор необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;
- приемную полость гильзы необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать тугор, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей;
- тугор хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании тугора необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт тугора необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу тугора в течение семи месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал


Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор

В.А.Калевич

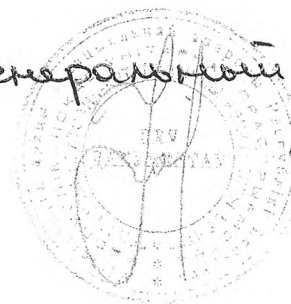

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за
ортезом на лучезапястный сустав TP0-05

Ортез на лучезапястный сустав TP0-05, TP0-05-XX-XXX (далее изделие) назначается: в период ранней реабилитации после травм и операций на дистальном (нижнем) отделе предплечья, лучезапястном суставе, для профилактики и лечения сгибательных контрактур, при тендовагинитах, повреждении связок лучезапястного сустава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу и серийно.

При серийном изготовлении размер определяется обхватом кисти и длиной изделия вдоль усиливающей планшетки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер	1	2
Обхват кисти, мм	190±10	210±10
Длина изделия вдоль усиливающей планшетки, мм	280±10	290±10


Изделие надевать на одежду.

Рекомендуется носить изделие по рекомендации врача ортопеда-травматолога.

Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию изделия.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой извлечь планшетки;
- стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- изделие выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- после высыхания в изделие вложить планшетки;
- не подвергать глажению.

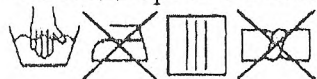

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор

В. А. Калевич

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за
ортезом на верхнюю конечность TP8-06

Ортез на верхнюю конечность TP8-06 (далее изделие) назначается: в период реабилитации после травм и операций на ключице, плечевом суставе, плече; при ушибах, частичном повреждении связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения; при подвывихах, вывихах плеча.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу и серийно.

При серийном изготовлении размер определяется длиной предплечья в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер	1 (женский)	2 (мужской)
Длина предплечья, мм	320±20	340±20

Ортез надевать на одежду.

Рекомендуется носить изделие по рекомендации врача ортопеда-травматолога.

Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию изделия.

Изделие крепится на теле при помощи ремня и пряжек, что позволяет осуществлять регулировку, натяжение и фиксацию на теле пациента.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- изделие выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.



Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор

В.А. Колесник

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за
ортезом на верхнюю конечность TP8-07

Ортез на верхнюю конечность TP8-07 (далее изделие) назначается: для поддержания руки после травм (растяжение, ушибы, переломы, вывихи); при артрозах; артритах; миозитах; в послеоперационный период.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу и серийно.

При серийном изготовлении размер определяется длиной предплечья в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер	1 (женский)	2 (мужской)
Длина предплечья, мм	395±20	420±20

Изделие надевать на одежду.

Рекомендуется носить изделие по рекомендации врача ортопеда-травматолога.

Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию изделия.

С помощью застёжки текстильной «контакт» изделие фиксируется на теле и регулируется его натяжение.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- изделие выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.



Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор

В. А. Калевич

Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу
за татором на нижнюю конечность
ТН0, ТН2, ТН4, ТН6, ТН8

НАДЕВАНИЕ ТУТОРА:

- татор рекомендуется надевать на чулок (носок, колготки);
- расположить приемную гильзу на нижнюю конечность и плотно зафиксировать при помощи крепления.

УХОД ЗА ТУТОРОМ:

- избегать сильных ударов татором и по татору;
- татор необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать татор, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей;
- татор хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытереть тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании татора необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт татора необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу татора в течение семи месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by



Генеральный директор
В.А. Калевит

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за реклинаторами КР1-03, КР1-04

1 Реклинаторы КР1-03 и КР1-04 (далее изделия) предназначены для детей и подростков с начальными формами нарушения осанки и лёгких нефиксированных деформациях, преимущественно с локализацией в верхне-грудном отделе позвоночника, при слабой функции мышечно-связочного аппарата для исправления искривления в сагиттальной плоскости, преимущественно при сутулости.

1.1 Размер изделия определяется длиной спинки в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	0	00	1	2	3	4	5	6	7	8
Длина спинки КР1-03, мм	—	—	330±20	340±20	350±20	360±20	370±20	380±20	390±20	400±20
Длина спинки КР1-04, мм	310±20	320±20	330±20	340±20	350±20	360±20	370±20	380±20	390±20	400±20

1.2 Противопоказаниями к назначению изделий являются:

- тяжелая сердечная патология;
- открытая травма груди;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Изделие надевать в положении стоя поверх майки, облегаяющей тело. Прежде чем натянуть ремни и застегнуть изделие, следует установить пациента в положении коррекции, т.е. придать надплечьям положение максимально возможного отведения назад, свести лопатки, подтянуть живот и держать голову прямо.


3 Рекомендуются пользоваться изделием во время сидения при школьных и домашних занятиях. Во время сна, прогулок, бега, игр, связанных с частичной сменой поз, изделие необходимо снимать.

4 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- перед стиркой из изделия следует вынуть планшетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в изделие вставить планшетки;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

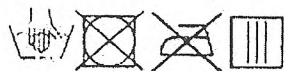

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В.А. Калевич

Памятка-инструкция

по уходу и эксплуатации за корсетом корригирующим типа Шено КР4-16-05 ПЭТ

Корсет корригирующий типа Шено (далее-корсет) – ортопедическое изделие индивидуального изготовления, предназначенное для оказания воздействия на искривленный позвоночник с целью коррекции деформации, восстановления баланса туловища. Корсет изготавливается в соответствии с назначениями в бланке заказа, оформленном с учетом медицинских показаний и анатомо-физиологических особенностей пациента.

Корсет следует носить поверх хлопчатобумажной футболки, которая должна быть без швов по краям, достаточно длинной и как можно тоньше, или одевать корсет в трикотажном х/б чехле можно без нательного белья.

Длительность использования и общая продолжительность применения корсета определяются в соответствии с рекомендациями и планом наблюдения, утвержденным врачом-травматологом-ортопедом.

Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию корсета.

Для обеспечения правильного ухода за корсетом необходимо:

- внутреннюю поверхность корсета протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- стирку чехла производить только вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами, выжимать слегка, без выкручивания;
- после стирки чехол прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- сушить чехол в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- гладить чехол при температуре не более 100 °С;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании корсета необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт корсета следует производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует износостойкость и надежность в течение 7 месяцев со дня выдачи готового корсета, на элементы крепления 30 дней со дня выдачи готового корсета при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения. В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно производит ремонт корсета, гарантия не распространяется на корректировочные работы.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В. А. Каревич

Памятка-рекомендация по первоначальному использованию корсета корректирующего типа Шено КР4-16-05ПЭТ

Корсет корректирующий типа Шено (далее-корсет) - ортопедическое изделие индивидуального изготовления, предназначенное для оказания воздействия на искривленный позвоночник с целью коррекции деформации, восстановления баланса туловища. Корсет изготавливается в соответствии с назначениями в бланке заказа, оформленном с учетом медицинских показаний и анатомо-физиологических особенностей пациента.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При регулярном использовании корсета осуществляется воздействие на позвоночник, путем давления на определенные зоны достигается коррекция искривления позвоночника. Для получения и закрепления корректирующего эффекта необходимо приложить дополнительно и собственные усилия, включающие лечебную гимнастику с дыхательными упражнениями, и ЛФК в воде. Рекомендуется выполнять упражнения несколько раз в день (время назначается врачом индивидуально). Без собственных усилий действие корсета будет незначительным, а причиняемые неудобства существенными.

Основное условие корсетного лечения: в течение первых 2-х недель время ношения корсета должно достичь до 23-х часов в сутки.

НАДЕВАНИЕ КОРСЕТА:

- надевать корсет следует с помощью другого человека (особенно при первоначальном применении);
- корсет следует носить поверх хлопчатобумажной футболки, которая должна быть без швов по краям, достаточно длинной и как можно тоньше, или одевать корсет в трикотажном х/б чехле можно без нательного белья;
- корсет следует надевать стоя с расстегнутыми застежками, затем необходимо лечь;
- положить обе руки на талию и потянуться вверх;
- застегнуть все ремни и застежки;
- затянуть поочередно по одной застежке до нужной нагрузки;
- расправить аккуратно белье под корсетом.

ТРЕБОВАНИЕ К ЭЛЕМЕНТАМ КРЕПЛЕНИЯ:

- для застегивания элементов крепления ремни необходимо брать в расправленном состоянии без перекосов, складок и заминов, и равномерно затянуть по длине (нельзя сжимать в кулак, резко затягивать до нужной нагрузки);
- необходимо разгладить и прижать рукой место соединения застежек;
- периодически элементы крепления следует очищать от ниток и ворсинок.

Правильный уход, использование элементов крепления продлевает их срок эксплуатации.

ЭТАПЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОРСЕТА:

Этап 1 1-ый и 2-ой день (6 часов:2+2+2)

- 2 часа носить корсет, затем снимать и проверять, нет ли покраснения кожи или синяков на теле.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ:

- не допускать повреждений кожи. Кожа должна оставаться мягкой, особенно в тех местах, где корсет плотно прилегает к телу;
- мыть кожу детским мылом, лучше принимать душ, а не ванну. Надевать корсет через 15 минут после душа (необходимо, чтобы кожа высохла);
- необходимо покрасневшие места протирать 40% этиловым спиртом или антисептическим раствором (мукосанина, септомирина) в первые 2-3 недели применения корсета;
- нельзя наносить мази или лосьоны на кожу непосредственно под корсет.

При повреждении кожи корсет временно не носить (до заживления кожи). Для лечения, консультации следует обратиться к врачу. Иногда кожа на местах, которые находятся под давлением, темнеет. Это нормальное явление. После окончания использования корсета кожа постепенно приобретет свой естественный цвет.

Этап 2 3-й и 4-й день (12 часов)

Если по прошествии 6 часов ношения корсета не возникло осложнений, то его можно носить 3 раза по 4 часа в период бодрствования и 2-3 часа в период сна.

Этап 3 5-й и 6-й день (16 часов)

Носить корсет следует весь день, и 4-5 часов ночного сна. Через каждые 4 часа кожу

необходимо проверять.

Этап 4 7-й и 8-й день

Если после прохождения 3-го этапа не возникло осложнений, тогда наступает 23-х часовой режим ношения корсета, оставшиеся 60 мин. необходимы для ухода за телом, корсетом, лечебной гимнастики.

Необходимо осуществлять контроль и уход за кожей до 3-х раз в день.

УХОД ЗА КОРСЕТОМ:

- внутреннюю поверхность корсета протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- стирку чехла производить только вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами и выжимать слегка, без выкручивания;
- после стирки чехол прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- сушить чехол в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- гладить чехол при температуре не более 100 °С.

ОДЕЖДА:

- рекомендуется носить брюки с резинкой на талии или комбинезон, свободные платья.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В КОРСЕТЕ?

В корсете можно вести обычный образ жизни. По поводу физических нагрузок необходимо проконсультироваться с врачом-травматологом-ортопедом. Не допускается делать упражнения связанные с ударами, толчками и подъемом тяжестей.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию корсета;
- переходить на следующий этап, только завершив предыдущий;
- при возникновении проблем с кожей проконсультироваться с врачом;
- во время приема пищи корсет немного ослабить (лучше частое, дробное питание);
- соблюдать рекомендации врача-травматолога-ортопеда;
- первичный осмотр 1 раз в 3 месяца, повторный и последующие осмотры 1 раз в 6 месяцев с посещением каб. 209 г. Минск, ул. Одоевского 10.

Ремонт корсета необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует износостойкость и надежность в течение 7 месяцев со дня выдачи готового корсета, на элементы крепления 30 дней со дня выдачи готового корсета при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения. В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно производит ремонт корсета, гарантия не распространяется на корректировочные работы.

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор
В. А. Калевич

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за корсетом для фиксации головы из
пенополиуретана КР0-02-05

1. Корсет для фиксации головы КР0-02-05 (далее изделие) назначают при шейно-плечевом синдроме, миалгии и невралгии шеи, травме без повреждения связок и костей, кривошее у детей и др.
2. Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.
3. Крепление изделия и регулировка фиксации на шее за счет застежки текстильной «контакт».
4. Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.
5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
-периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.
6. Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by



Генеральный Директор
В.А. Калевич

Памятка – инструкция
по уходу и эксплуатации за корректором осанки КР0-15

1. Корректор осанки КР0-15 (далее изделие) предназначен для разгрузки мышцы грудного отдела позвоночника, обеспечения поддержания правильной осанки за счет регулируемого раздвижения плеч с одновременной умеренной фиксацией поясничного отдела позвоночника. Используется как лечебно-профилактическое средство при различных вариантах нарушения осанки у детей и взрослых, при умеренно выраженных кифотической и сколиотической деформациях грудного отдела позвоночника, при ушибах, миозитах, компрессионных переломах и переломах отростков позвонков в грудном и грудно-поясничном отделах позвоночника в подостром и восстановительном периодах.

1.1 Размер изделия определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обхват талии, мм	650-690	700-740	750-790	800-840	850-890	900-940	950-990	1000-1040	1050-1090	1100-1150

1.2 Длина спинки в зависимости от размера в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Размер изделия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Длина спинки по вертикальной средней линии, мм	450±20	460±20	460±20	470±20	470±20	480±20	490±20	500±20	510±20	520±20

В случае если значение измерения находится на границе двух размеров, рекомендуется выбирать наибольший размер изделия.

1.3 Противопоказанием к назначению изделий является:

- тяжелая сердечная патология;
- открытая травма груди;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Изделие надевать в положении стоя поверх майки, облегающей тело. Прежде чем натянуть ремни и застегнуть изделие, следует установить пациента в положение коррекции, т.е. придать надплечьям положение максимально возможного отведения назад, свести лопатки, подтянуть живот и держать голову прямо.


3 Изделие используется в комплексе с физиотерапевтическим лечением, массажем, мануальной терапией, лечебной физкультурой. Детям рекомендуется пользоваться изделием во время сидения при школьных и домашних занятиях. Во время сна, прогулок, бега, игр, связанных с частичной сменой поз, изделие необходимо снимать.

4 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- перед стиркой из изделия следует вынуть планшетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в изделие вставить планшетки;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

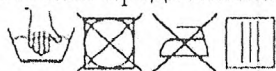

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор
В.А. Калевин

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за корсетом фиксирующим КР0-12

1 Корсет фиксирующий КР0-12 (далее изделие) предназначен для ограничения подвижности пояснично-грудного отдела позвоночника, при различных патологиях ниже поясничного, пояснично-крестцового и верхне грудного отделов позвоночника. Корсет создаёт умеренное комфортное чувство в области позвоночника и ограничивает его подвижность за счёт применения жёстких планшетонок.

1.1 Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- тяжёлая сердечная патология;
- открытая травма груди;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Изделие необходимо надевать на белье.

2.1 Изделие следует застёгивать на текстильную застёжку, затем на ремень-подхват.

3 Изделие должен плотно охватывать позвоночник.


4 Режим ношения изделия определяется врачом ортопедом - травматологом. Перед сном изделие рекомендуется снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- перед стиркой из изделия следует вынуть планшетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в изделие вставить планшетки;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

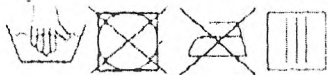

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В. А. Калевит

Памятка - инструкция
по уходу и эксплуатации за наколенниками
ПНО-03, ПНО-03-01, ПНО-03-02, ПНО-03-03

Наколенники - наколенник резиновый ПНО-03, ПНО-03-ХХ, наколенник из эластичного полотна глухой ПНО-03-01, наколенник из эластичного полотна с застёжкой «контакт» ПНО-03-02, наколенник из эластичного полотна на шнуровке ПНО-03-03 (далее изделие) назначаются при артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений над коленом и под коленом и должен соответствовать данным бланка заказа. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

При серийном изготовлении размер изделия ПНО-03-01 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

Таблица 1

Размер изделия	3	4
Обхват над коленом, см	50-53	54-57
Обхват под коленом, см	42-45	46-49


При серийном изготовлении размер изделия ПНО-03-02, ПНО-03-03 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 2. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

Таблица 2

Размер изделия	0	1	2	3	4
Обхват над коленом, см	31-34	35-38	39-42	43-46	47-50
Обхват под коленом, см	24-27	28-31	32-35	35-38	39-42

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению

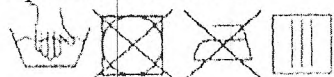

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В.А. Калевич

Памятка – инструкция
по уходу и эксплуатации за наколенником
ПОО-03-04

Наколенник ПОО-03-04, ПОО-03-ХХ (далее изделие) назначается при артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленных суставах и служит для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно. При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений над коленом и под коленом и соответствовать данным бланка заказа. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.


При серийном изготовлении размер изделия определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

Таблица 1

Размер изделия	Обхват над коленом, мм	Обхват под коленом, мм
0	310-340	250-270
1	330-380	270-290
2	390-420	290-310
3	430-460	310-330
4	470-500	330-350
5	510-540	350-370
6	550-580	370-390

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению

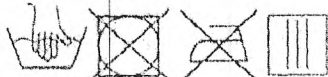

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор

В.А. Калевиц

Памятка – инструкция
по уходу и эксплуатации за наколенником с шинами ПИО-03-05

Наколенник с шинами ПИО-03-05, ПИО-03-XX (далее изделие) назначается для фиксации коленного сустава при повреждениях капсульно-связочного аппарата коленного сустава, при дегенеративном и посттравматическом артрозе, при синовитах, на этапе восстановительного реабилитационного лечения после операций на коленном суставе.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений бедра и голени, должен соответствовать данным бланка заказа.


При серийном изготовлении размер изделия определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	Объём бедра, мм	Объём голени, мм
1	350-380	270-290
2	390-420	290-310
3	430-460	310-330
4	470-500	330-350
5	510-540	350-370
6	550-580	370-390
7	590-620	400-420
8	630-650	430-440
9	670-700	450-470

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из изделия вынимать шины;
- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в изделие вставить шины

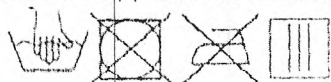

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор

В.А. Каневич

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за спецбрюками ПИО-04

1. Спецбрюки на парную ампутацию бедер, голени и на сочетанную ампутацию бедра и голени ПИО-04 (далее спецбрюки) назначаются при двухсторонней ампутации нижних конечностей независимо от длины культей, в случае выявления противопоказаний к протезированию. Кроме того, спецбрюки могут быть назначены дополнительно к протезам при двухсторонней экзартикуляции в тазобедренных суставах или двусторонних культях бедер.

2. Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов;

3. Изделие надевать на нательное белье.

4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку не производить;
- поверхность брюк протирать раствором нейтральных моющих средств с помощью губки;
- протереть сухой тряпкой;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- химчистку производить с применением всех общепринятых органических растворителей;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

5. Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В. А. Калевич

Памятка – инструкция
по уходу и эксплуатации за стремянкой при врождённом вывихе бедра
ПНО-07

Стремьянка при врождённом вывихе бедра у детей ПНО-07 (далее изделие) предназначена для лечения врождённого вывиха бёдер у новорожденных детей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Режим ношения изделия – по рекомендации врача ортопеда-травматолога.

Изделие рекомендуется надевать на ребёнка лежа на нательное бельё или прокладывать пелёнку. Бретели верхней части должны располагаться на спинке ребёнка. Пояс должен плотно прилегать к телу и находиться под грудью.

Помочи одеть на ножки так, чтобы петля проходила под стопой, нижнюю застёжку застегнуть на щиколотке, а верхнюю отрегулировать и застегнуть под коленом. Необходимо застегнуть помочи сзади и спереди на поясе так, чтобы они плотно облегли ребёнка.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытереть насухо;
- просушить вдали от источников тепла в расправленном виде;
- необходимо уделять внимание коже ребёнка и предупредить опрелости;
- снимать изделие рекомендуется ежедневно, вымыть тело ребёнка тёплой водой с мылом и вытереть насухо.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В.А. Каневский

Памятка – инструкция
по уходу и эксплуатации за шинами
ПНО-08, ПНО-08-01, ПНО-08-02, ПНО-08-03

1. Шины предназначены для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

1.1 Для изделий ПНО-08 и ПНО-08-02 размер определяется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	0	1	2	3	4
Расстояние максимального разведения ног, мм	242,6	276,6	300,8	363,2	401,6

1.2 Для изделия ПНО-08-01 размер изделия определяется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Размер изделия	Длина трубки шинки-распорки ОПН 52.00.00, (мм)	Расстояние разведения ног минимум/максимум, (мм)
12	40	120-170
14	60	140-190
16	80	160-210
18	100	180-230
20	120	200-250
22	140	220-270
24	160	240-290
26	180	260-310
28	200	280-330
30	220	300-350
32	240	320-370
34	260	340-390
36	280	360-410

2 Противопоказанием к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 Изделия рекомендуется надевать на нательное белье.

4 Режим носки шинки определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- шинки не стирать;
- кожаные детали 1 раз неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор
В.Р. Калевит

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации
за трусиками абдукционными ПИО-09-05

1 Трусики абдукционные ПИО-09-05 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей.

1.1 Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

2.1 Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Застегнуть крепление на ножках на застежку текстильную «контакт». Отрегулировать бретели через плечики в зависимости от роста.


3 Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недель.

4 По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-ортопедом.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- корпус 1 раз в неделю протирать антисептическим средством;
- стирку съемного чехла производить вручную при температуре воды 40°C, в короткий промежуток времени нейтральным моющим средством;
- сушить в подвешенном состоянии вдали от источников тепла;
- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;
- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
- снимать изделие рекомендуется ежедневно и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

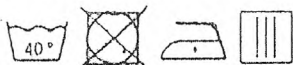

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимира, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В.А. Калевич

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации
за трусиками абдукционными ПИО-09-04

1 Трусики абдукционные ПИО-09-04 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей.

1.1 Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

2.1 Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Застегнуть крепление на теле на шнурки. Отрегулировать бретели через плечики в зависимости от роста.

3 Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недель.

4 По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-ортопедом.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не более 40°C, предварительно вынув вкладыш из изделия;


- сушить в подвешенном состоянии;

- гладить при температуре не более 110°C;

- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;

- снимать изделие рекомендуется ежедневно и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

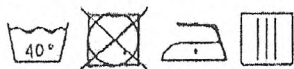

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор

В.А. Калевич

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации
за трусиками абдукционными ПИО-09-03

1 Трусики абдукционные ПИО-09-03 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей.

1.1 Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

2.1 Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Застегнуть крепление на теле на застежку текстильную «контакт». Отрегулировать бретели через плечики в зависимости от роста.

3 Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недель.

4 По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом травматологом-ортопедом.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытирать насухо;


- сушить в расправленном виде вдали от источников тепла;

- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;

- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;

- снимать изделие рекомендуется ежедневно и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

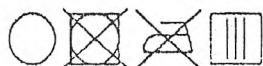

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор

В.А. Каневит

Памятка - инструкция
по уходу и эксплуатации за поясом-креплению протеза ПИО-15

Пояс-крепление протеза ПИО-15, ПИО-15-ХХ (далее – изделие) предназначен для крепления протезов бедра (голени) вместо кожаных поясов РБ 655, РБ 656 согласно медицинскому назначению.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Изделие рекомендуется надевать на нательное бельё. Сначала застегнуть изделие, начиная с нижней пуговицы, затем затянуть и завязать шнур.

Надеть протез и пристегнуть к поясу с помощью деталей крепления.

Режим ношения изделия определяется ношением протеза.

Сняв изделие, рекомендуется ежедневно промыть тело тёплой водой с мылом и вытереть насухо.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушку производить в расправленном виде в подвешенном состоянии; утюжить при температуре 60-70°C, исключая эластичные вставки и детали крепления.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор
В.А. Каревич

Памятка - инструкция
по уходу и эксплуатации за поясами фиксирующими ПИО-16, ПИО-16-01,
ПИО-16-02

1 Пояса-ремни фиксирующие ПИО-16, ПИО-16-01, ПИО-16-02, (далее изделия) предназначены для частичной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника при умеренно-выраженных болях на почве остеохондроза, спондилолистезе 1 ст., в послеоперационном периоде после резекции дисков и др.

1.1 При серийном изготовлении размер изделий определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Обхват талии, мм	700-749	750-799	800-849	850-899	900-949	950-999	1000-1049	1050-1099	1100-1149	1150-1200

2 Противопоказаниями к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 Изделия рекомендуется надевать на нательное белье, лежа на плоской поверхности, застегнуть пряжки, встать.

4 Режим носки пояса определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;

необходимо уделять внимание коже, соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждать опрелости и потертости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор
В.А. Калевич

**Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за приспособлением для поддержания
нижней конечности ПИО-17**

1 Приспособление для поддержания нижней конечности ПИО-17 (далее приспособление) предназначено для разгрузки тазобедренного сустава при ортопедических заболеваниях бедренной кости и тазобедренного сустава, таких как остеохондропатия тазобедренного сустава.

1.1 Противопоказаниями к назначению приспособления являются:

- психоэмоциональная непереносимость;
- заболевания кожных покровов;
- аллергические реакции на материал;

наличие сгибательных контрактур области тазобедренных и коленных суставов.

2 Приспособление рекомендуется надевать на одежду.


3 Режим ношения изделия определяется рекомендациями лечащего врача-травматолога-ортопеда.

4 Приспособление регулируется по объему с помощью пряжек и ремешков.

5 Для обеспечения правильного ухода за приспособлением необходимо:

- кожаные манжеты протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытирать насухо;
- не подвергать глажению и стирке.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

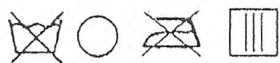

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В.А. Калевич

Памятка – инструкция
по уходу и эксплуатации за распоркой с креплением ПИО-20-01

1 Распорка с креплением ПИО-20-01 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

1.1 Размер изделия определяется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	Длина трубки шинки-распорки ОПИ 52.00.00, (мм)	Расстояние разведения ног минимум/максимум, (мм)
12	40	120-170
14	60	140-190
16	80	160-210
18	100	180-230
20	120	200-250
22	140	220-270
24	160	240-290
26	180	260-310
28	200	280-330
30	220	300-350
32	240	320-370
34	260	340-390
36	280	360-410

2 Противопоказанием к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 Изделия рекомендуется надевать на нательное белье.

4 Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие не стирать, кроме съемных бретелей;
- бретели стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- кожаные детали 1 раз неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

6 Необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В.А. Каневский

Памятка – инструкция
по уходу и эксплуатации за распоркой модифицированной
ППО-20

1 Распорка модифицированная ППО-20 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

2 Противопоказанием к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 Изделия рекомендуется надевать на нательное белье. Уложить ребенка на изделие так, чтобы спинка располагалась на лентах, ножки уложить в манжеты и зафиксировать при помощи шнура. Бретели крепить спереди.

4 Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие не стирать, кроме бретелей;
- бретели стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- кожаные детали 1 раз неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

6 Необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В.А. Каревич

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за защитой для рук
ПНО-31, ПНО-31-01, ПНО-31-02, ПНО-31-03

Защита для рук ПНО-31, ПНО-31-01, ПНО-31-02, ПНО-31-03 (далее изделие) предназначены и могут быть использованы как защита для рук при передвижении инвалидов на колясках, а также может служить защитой ладонной части кисти рук при опоре на трость во время ходьбы.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При серийном изготовлении размер изделия определяется измерением — ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Размер изделия	1	2	3
Ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, мм	100-115	115-130	130-145

Изделие надевать непосредственно на руку или на руку в перчатке.

Плотность прилегания регулировать с помощью застёжки «контакт» Чистку производить мыльным раствором с помощью щетки. Сушить при комнатной температуре.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор
В.А. Калевит

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации
за чехлом утепленным ПИО-32

Чехол утеплённый ПИО-32 (далее изделие) предназначен для категории лиц, передвигающихся на инвалидной коляске, вело-кресло-коляске в осенне-зимний период.

Необходимо надеть на пациента тёплую верхнюю одежду.

Разместить изделие на коляске клапаном вверх, зафиксировать изделие на коляске с помощью шнура (привязать к металлическим деталям корпуса коляски).

Расстегнуть клапан, усадить человека в коляску, застегнуть клапан.

Застегнуть и завязать кулиску так, чтобы не мешала дыханию.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирке не подвергать;
- поверхность изделия промыть мыльным раствором нейтральных моющих средств с помощью губки или щётки, а затем промыть водой;
- протереть сухой тряпочкой;
- просушить вдали от источников тепла в расправленном виде.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор
В.А. Калевич

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации
за поясами для фиксации грудной клетки ПИО-36 (женский), ПИО-37
(мужской)

1. Пояса для фиксации грудной клетки ПИО-36, ПИО-37 (далее изделия) назначаются при ушибах грудной клетки и грудного отдела позвоночника, при межреберной невралгии и после оперативного лечения для ограничения подвижности грудной клетки.

2. Противопоказаниями к назначению изделий являются:

- тяжелая сердечная патология;
- открытая травма груди;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3. При серийном изготовлении размер изделий определяется обхватом груди в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	1	2	3	4	5	6
Обхват груди, мм	750-840	850-940	950-1040	1050-1140	1150-1240	1250-1340


4. Изделие надевать в положении лежа поверх белья. Изделие застегнуть на застежку текстильную «контакт», затем застегнуть ремни плечевые.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

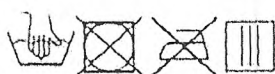

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А.

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный директор
В. А. Калевич

Памятка – инструкция по уходу и эксплуатации
за поясом-креплением протеза бедра ПИО-35

Пояс-крепление протеза бедра ПИО-35 (далее изделие) предназначен для обеспечения фиксации протеза бедра. Рекомендуется применять в случае невозможности применения пояса кожаного узкого РБ-655 или широкого РБ-656.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим носки изделия определяется режимом носки протеза.


С помощью рамки, стяжных ремней и застёжки «контакт» производится натяжение, регулировка, фиксация изделия на теле и протезе бедра.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени;
- выжимать слегка ручную, не выкручивая;
- сушить вдали от источников тепла в подвешенном состоянии;
- утюжке не подвергать;
- химическую чистку проводить с применением всех общепринятых органических растворителей;
- застёжку «контакт» периодически очищать от ниток, ворсинок.

При ношении изделия рекомендуется соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

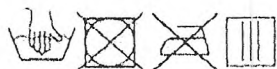

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by



Генеральный директор
В.А. Калевит

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за стяжкой переднего отдела стопы
ППО-40

Стяжка переднего отдела стопы ППО-40 (далее изделие) назначается для поддержания переднего отдела стопы и предупреждения его распластанности, а также до и после хирургических операций на стопе в области головок плюсневых костей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Размер изделия определяется обхватом стопы в пучковой части, в соответствии с таблицей 1

Таблица 1

Размер стяжки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Окружность стопы в пучковой части, мм	170±10	180±10	190±10	200±10	210±10	220±10	230±10	240±10	250±10	260±10

Изделие предназначено для использования в обуви на низком и среднем каблуке.


Режим ношения изделия – по рекомендации врача-ортопеда. Валик Зейца располагать капелькой в направлении плюсны.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

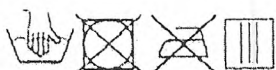

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В.А. Калевит

Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за поддерживающей повязкой с подушкой
ППО-41

Поддерживающая повязка с подушкой ППО-41, ППО-41-ХХ (далее изделие) назначается для поддержания и отведения плечевого сустава:

- после травм и операций на ключице, плечевом суставе, плече;
- при подвывихах и вывихах плеча;
- при артрозах, миозитах;
- при ушибах, частичном повреждении связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При серийном изготовлении размер определяется длиной предплечья, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер	1	2
Длина предплечья, мм	360±20	390±20


Изделие рекомендуется носить на одежду (футболку, рубашку).

Режим ношения изделия - по рекомендации врача ортопеда-травматолога.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из чехла подушки следует вынимать вкладыш из пенополиуретана;
- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в тёплой, а затем холодной воде;
- выжимать вручную без выкручивания, не использовать механические воздействия;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в чехол вставить вкладыш из пенополиуретана;
- текстильную застежку «контакт» периодически необходимо очищать от ворсинок и ниток.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

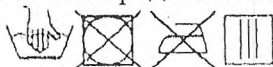

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Генеральный Директор
В.А. Каплевич

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал:

246034, Республика Беларусь,

г. Гомель, ул.Владимирова, 8а, (0232) 517210, (0232) 517223.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.

Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок:

(017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479;

сайт: www.bpovc.by.

Генеральный директор

В.А. Каревич

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал
246034 г.Гомель, ул. Владимирова, 8а



**Устройство для лечения врожденной косолапости у детей
ПНО-51 СТБ 932-2008**

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ



Директор

В.А. Калевич

Республика Беларусь

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 (далее - устройство), с условиями его эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Устройство относится к изделиям медицинского назначения и может быть использовано в ортопедии и травматологии в раннем консервативном и послеоперационном лечении врожденной косолапости у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Устройство может быть использовано в ряде случаев при лечении плоскостопия у детей в раннем детском возрасте и предназначено для использования при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические данные

2.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение по КД	Условное обозначение изделия (модификация)	Маркировка (на под-стопниках)	Размеры без ботинок, мм			Масса, кг, не более
			Длина L ± 5	Ширина B ± 2	Высота H ± 3	
ЦСИЕ.02.057.00.00.00	ПИО-51	0	240...295	100	43...55	0,50
-01	ПИО-51-01	1	280...335	100	43...52	0,57
-02	ПИО-51-02	2	320...375	115	43...50	0,63
-03	ПИО-51-03	3	360...417	115	43...48	0,70

2.2 Устройство выпускается 4-х типоразмеров согласно таблице 2.

Таблица 2

Условное обозначение изделия (модификация)	Расстояние разведения ног ребёнка минимум / максимум, мм
ПИО-51	187...240
ПИО-51-01	227...283
ПИО-51-02	267...323
ПИО-51-03	307...365

2.3 Срок службы* – 1-2 года (для металлических элементов). Ботинки меняют по мере роста стопы ребёнка (не чаще чем 2 раза в год).

* - по заключению врачей по мере роста ребёнка.

3 Устройство

Устройство (см. рисунок, стр. 6) включает следующие основные элементы:

- подстоппники 1;
- пара кожаных ботиночек 2 с язычком 3 и с открытым носком 4 снабжённых тремя фиксирующими ремешками * 5, 6, 7;
- планки 8; винтовые соединения 9, 13 и 15.

Примечание – Изображение устройства на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

4 Подготовка к работе и использование по назначению

4.1 Изделие поступает к пользователю в собранном виде. Лечащий врач-ортопед раскручивает винтовое соединение 9 и надевает на ножки ребёнка правый и левый комплекты с помощью язычка 3 и трёх фиксирующих ремешков * 6, 7, 5 поочерёдно с визуальным контролем необходимого положения пятки ребёнка в ботинке 2 через отверстие 16 и пальцев стопы через открытый носок 4. Правый и левый комплекты соединяют между собой жёстко и внахлест с помощью гаек 9 на заданном расстоянии и контролируют положение планок 8 по шкале 11 в пазу 10. Угол поворота стоп задают ослаблением винтового соединения 13 с фиксацией положения ботинка 2 по градуированной шкале 14 с шагом 10°. Ботинки 2 используют, начиная с минимального размера, а по мере увеличения длины стопы ребёнка выполняют лишь замену ботинка 2. С ростом ребёнка, в зависимости от требуемого диапазона раздвижения ног на ширину плеч ребёнка, по назначению врача-ортопеда выписывается следующая модификация изделия.

5 Меры безопасности

5.1 Во избежание нанесения травмы ребёнку все узлы и детали устройства должны быть надёжно зафиксированы.

5.2 Ботинки рекомендуется надевать на трикотажный носок.

5.3 Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребёнка и рекомендациями лечащего врача-ортопеда.

* Возможен вариант крепления ботиночка с помощью шнурков, которые заменяют ремешки 5 и 7. Лечащий врач-ортопед в соответствии с индивидуальными особенностями пациента вправе определять способ крепления ботинка на стопе.

Генеральный директор

Р. Д. Колесник

5.4 Запрещается подвергать устройство ударам.

5.5 При эксплуатации обуви необходимо соблюдать следующие условия:

- необходимо правильно подбирать ботинки по длине стопы, а также следить за своевременной заменой ботинок по мере роста ребёнка;

- ежедневно просушивать обувь при комнатной температуре;
- запрещается сушить обувь на нагревательных поверхностях;
- запрещается мыть обувь в воде;
- необходимо избегать попадания на обувь щелочей, кислот, активных растворителей.

Примечание – при повышенной потливости ног или намокании обуви может окрашиваться изнутри.

5.6 Пользователю запрещается производить изменение параметров устройства или изменять его конструкцию без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

6 Техническое обслуживание

6.1 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- протирать изделие дезинфицирующим раствором;
- поверхность обуви протирать мягкой влажной тряпкой;
- следить за надёжной фиксацией деталей устройства.

7 Комплектность

7.1 Устройство	1 шт.
7.2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
7.3 Гаечный ключ	1 шт.
7.4 Отвёртка	1 шт.

8 Маркировка

Маркировка устройства должна иметь:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485 и СТБ ISO 9001;
- наименование и условное обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТНПА;

Генеральный Директор
В. А. Колесов

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер) или номер заказа (при выпуске по индивидуальному заказу);
- цвет и размер обуви (при изготовлении мелкими партиями);
- материал верха, подкладки и низа обуви;
- гарантийный срок (месяцев, дней);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код.

9 Свидетельство о приемке

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей

наименование изделия

ПАО-51

СТБ 932-2008

обозначение

зав. № или № заказа (при наличии)

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 932-2008, ТО ВУ 100010315.327-2013, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковке

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей

наименование изделия

ПАО-51

СТБ 932-2008

обозначение

зав. № или № заказа (при наличии)

упаковано на

РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Генеральный директор

11 Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийный срок эксплуатации металлических элементов устройства – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

Гарантийный срок эксплуатации обуви (ботинок) – 45 дней со дня ввода изделия в эксплуатацию (даты продажи или выдачи заказчику), гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления.

11.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт устройства в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за нарушения условий хранения, транспортирования, изменений и ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

11.3 Гарантия не распространяется на устройства, имеющие нарушения требований эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

11.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений.

11.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, тел. (0232)

51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.


12 Сведения о государственной регистрации

Устройство является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники:

Действительно до

Генеральный Директор
В.А. Каревич

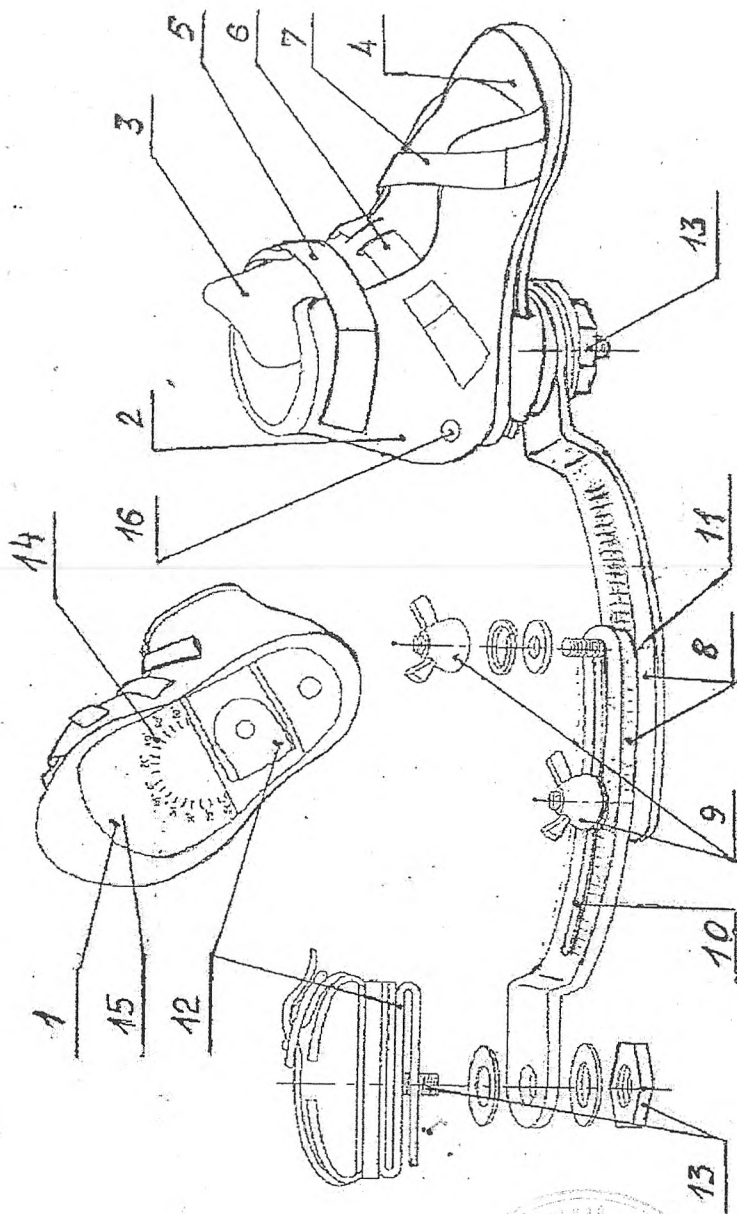

РИСУНОК

