

ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ПОЯСОМ- КРЕПЛЕНИЕМ ПРОТЕЗА БЕДРА ПИО-35

Пояс-крепление протеза бедра ПИО-35(далее изделие) предназначен для обеспечения фиксации протеза бедра. Рекомендуется применять в случае невозможности применения пояса кожаного узкого РБ-655 или широкого РБ-656.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим носки изделия определяется режимом носки протеза.

С помощью рамки, рамки стяжных ремней и застежки «контакт» производится натяжение, регулировка, фиксация изделия на теле и протезе бедра.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени;
- выжимать слегка ручную, не выкручивая;
- сушить вдали от источников тепла в подвешенном состоянии;
- утюжке не подвергать;
- химическую чистку проводить с применением всех общепринятых органических растворителей;
- застежку «контакт» периодически очищать от ниток, ворсинок.

При ношении изделия рекомендуется соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpove-vitebsk.by

ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ПОЯСОМ- КРЕПЛЕНИЕМ ПРОТЕЗА БЕДРА ПИО-35

Пояс-крепление протеза бедра ПИО-35(далее изделие) предназначен для обеспечения фиксации протеза бедра. Рекомендуется применять в случае невозможности применения пояса кожаного узкого РБ-655 или широкого РБ-656.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим носки изделия определяется режимом носки протеза.

С помощью рамки, рамки стяжных ремней и застежки «контакт» производится натяжение, регулировка, фиксация изделия на теле и протезе бедра.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени;
- выжимать слегка ручную, не выкручивая;
- сушить вдали от источников тепла в подвешенном состоянии;
- утюжке не подвергать;
- химическую чистку проводить с применением всех общепринятых органических растворителей;
- застежку «контакт» периодически очищать от ниток, ворсинок.

При ношении изделия рекомендуется соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpove-vitebsk.by

Генеральный директор
В.А. Каревич

ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА СТЯЖКОЙ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ

ПНО-40

Стяжка переднего отдела стопы ПНО-40 (далее изделие) назначается для поддержания переднего отдела стопы и предупреждения его распластанности, а также до и после хирургических операций на стопе в области головок плюсневых костей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Размер изделия определяется обхватом стопы в пучковой части, в соответствии с таблицей.

Размер стяжки	1	2	3	4	5
Окружность стопы в пучковой части, мм	170±10	180±10	190±10	200±100	210±10
Размер стяжки	6	7	8	9	10
Окружность стопы в пучковой части, мм	220±10	230±10	240±10	250±10	260±10



Изделие предназначено для использования в обуви на низком и среднем каблуке.

Режим ношения изделия - по рекомендации врача-ортопеда. Валик Зейца располагать капелькой в направлении плюсны.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

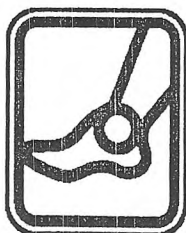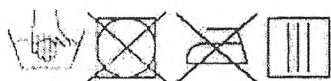

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный Директор
В.А. Калевич

ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА СТЯЖКОЙ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ

ПНО-40

Стяжка переднего отдела стопы ПНО-40 (далее изделие) назначается для поддержания переднего отдела стопы и предупреждения его распластанности, а также до и после хирургических операций на стопе в области головок плюсневых костей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Размер изделия определяется обхватом стопы в пучковой части, в соответствии с таблицей.

Размер стяжки	1	2	3	4	5
Окружность стопы в пучковой части, мм	170±10	180±10	190±10	200±100	210±10
Размер стяжки	6	7	8	9	10
Окружность стопы в пучковой части, мм	220±10	230±10	240±10	250±10	260±10



Изделие предназначено для использования в обуви на низком и среднем каблуке.

Режим ношения изделия - по рекомендации врача-ортопеда. Валик Зейца располагать капелькой в направлении плюсны.


Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

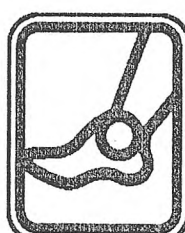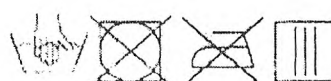

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

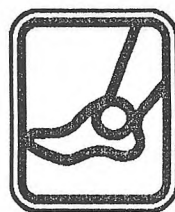

ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ПОЯСАМИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПИО-36 (ЖЕНСКИЙ), ПИО-37 (МУЖСКОЙ)

1. Пояса для фиксации грудной клетки ПИО-36, ПИО-37 (далее изделия) назначаются при ушибах грудной клетки и грудного отдела позвоночника, при межреберной невралгии и после оперативного лечения для ограничения подвижности грудной клетки.

2. Противопоказаниями к назначению изделий являются:

- тяжелая сердечная патология;
- открытая травма груди;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3. При серийном изготовлении размер изделий определяется обхватом груди в соответствии с таблицей.

Размер изделия	1	2	3	4	5	6
Обхват груди, мм	750-840	850-940	950-1040	1050-1140	1150-1240	1250-1340

4. Противопоказаниями к назначению изделий являются:

- тяжелая сердечная патология;
- открытая травма груди;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

5. Изделие надевать в положении лежа поверх белья. Изделие застегнуть на застежку текстильную «контакт», затем застегнуть ремни плечевые.


6. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить ручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать ручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству

производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

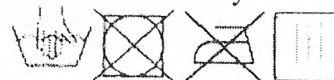

Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный директор

В. А. Калевич

ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ЗАЩИТОЙ ДЛЯ РУК ПНО-31, ПНО-31-01, ПНО-31-02, ПНО-31-03

- Защита для рук ПНО-31, ПНО-31-01, ПНО-31-02, ПНО-31-03 (далее изделие) предназначены и могут быть использованы как защита для рук при передвижении инвалидов на коляске, а также могут служить защитой ладонной части кисти при опоре на трость во время ходьбы.
- Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.
- Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.
- При серийном изготовлении размер изделия определяется измерением – ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	1	2	3
Ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, мм.	100-115	115-130	130-145

- Изделие надевать непосредственно на руку или на руку в перчатке.
- Плотность прилегания регулируется с помощью застежки «контакт».
- Чистку изделия производить мыльным раствором с помощью щетки.
- Сушить при комнатной температуре.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpove-vitebsk.by

Генеральный директор
В. А. Калевич

ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ЗАЩИТОЙ ДЛЯ РУК ПНО-31, ПНО-31-01, ПНО-31-02, ПНО-31-03

- Защита для рук ПНО-31, ПНО-31-01, ПНО-31-02, ПНО-31-03 (далее изделие) предназначены и могут быть использованы как защита для рук при передвижении инвалидов на коляске, а также могут служить защитой ладонной части кисти при опоре на трость во время ходьбы.
- Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.
- Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.
- При серийном изготовлении размер изделия определяется измерением – ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	1	2	3
Ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, мм.	100-115	115-130	130-145

- Изделие надевать непосредственно на руку или на руку в перчатке.
- Плотность прилегания регулируется с помощью застежки «контакт».
- Чистку изделия производить мыльным раствором с помощью щетки.
- Сушить при комнатной температуре.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpove-vitebsk.by



ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ПОВЯЗКОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ НА ГОЛЕНОСТОП ПИО-28

1.1 Повязка эластичная на голеностоп ПИО-28 (далее - повязка) предназначена для лечения растяжения связок голеностопного сустава, при возникновении травм и заболеваний голеностопного сустава.

1.2 Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

1.3 Размер изделия определяется обхватом голеностопного сустава в соответствии с таблицей.

Размер изделия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обхват голеностопного сустава, мм	400-440	450-490	500-540	550-590	600-640	650-690	700-740	750-790	800-840	850-890


1.1 Рекомендуется повязку надевать на носок, чулок.

1.2 При пользовании повязкой следует следить за правильным кровообращением конечности. Не допускать застоя крови, не должно чувства онемения и покалывания в пальцах, нога не должна принимать синюшный оттенок.

1.3 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

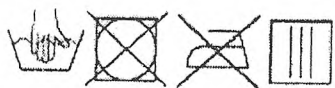

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Генеральный Директор
В. В. Калевис

Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лаза 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)



ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА РАСПОРКОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ППО-20-01

1. Распорка с креплением ППО-20-01 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

Размер изделия определяется в соответствии с таблицей.

Размер изделия	Длина трубки шинки-распорки ОПИ 52.00.00 (мм)	Расстояние разведения ног минимум/максимум. (мм)
12	40	120-170
14	60	140-190
16	80	160-210
18	100	180-230
20	120	200-250
22	140	220-270
24	160	240-290
26	180	260-310
28	200	280-330
30	220	300-350
32	240	320-370
34	260	340-390
36	280	360-410

2. Противопоказаниями к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3. Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

4. Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- шинки не стирать, кроме съемных бретелей;
- бретели стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- кожаные детали 1 раз неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

6. Необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА РАСПОРКОЙ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПИО-20

1 Распорка модифицированная ПИО-20 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

2 Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 Изделие рекомендуется надевать на нательное белье. Уложить ребенка на изделие так, чтобы спинка располагалась на лентах, ножки уложить в манжеты и зафиксировать при помощи шнура. Бретели крепить спереди.

4 Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- шинки не стирать, кроме бретелей;
- бретели стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

6 Необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный Директор
В. А. Калевич

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА РАСПОРКОЙ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПИО-20

1 Распорка модифицированная ПИО-20 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

2 Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 Изделие рекомендуется надевать на нательное белье. Уложить ребенка на изделие так, чтобы спинка располагалась на лентах, ножки уложить в манжеты и зафиксировать при помощи шнура. Бретели крепить спереди.

4 Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- шинки не стирать, кроме бретелей;
- бретели стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

6 Необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

**ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
ПОДУШКОЙ ФРЕЙКА АБДУКЦИОННОЙ
ПНО-18-01**

Подушка Фрейка абдукционная ПНО-18-01 (далее изделие) предназначена для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденно-го вывиха бедра у детей.

Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.



Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Завязать крепление на теле на шнурки. Застегнуть бретели через плечики на пуговицы.

Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом-травматологом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недель.

По вопросам индивидуального пользования изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-травматологом-ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не более 40 °С;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
- снимать изделие рекомендуется ежедневно и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.

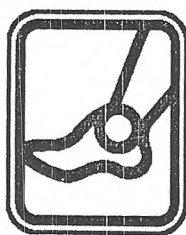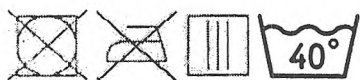

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный Директор
В. В. Каревич

**ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
ПОДУШКОЙ ФРЕЙКА АБДУКЦИОННОЙ
ПНО-18-01**

Подушка Фрейка абдукционная ПНО-18-01 (далее изделие) предназначена для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденно-го вывиха бедра у детей.

Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.



Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Завязать крепление на теле на шнурки. Застегнуть бретели через плечики на пуговицы.

Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом-травматологом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недель.

По вопросам индивидуального пользования изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-травматологом-ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не более 40 °С;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
- снимать изделие рекомендуется ежедневно и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.

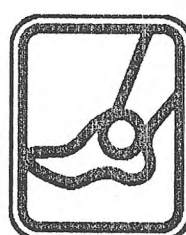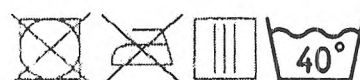

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

**ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПИО-17**

1. Приспособление для поддержания нижней конечности ПИО-17 (далее при-способление) предназначено для разгрузки тазобедренного сустава при орто-педических заболеваниях бедренной кости и тазобедренного сустава, таких как остеохондропатия тазобедренного сустава.

1.1. Противопоказаниями к назначению приспособления являются:

- психоэмоциональная непереносимость;
- заболевания кожных покровов;
- аллергические реакции на материал;
- наличие сгибательных контрактур области тазобедренных и коленных суста-


2. Приспособление рекомендуется надевать на одежду.

3. Режим ношения изделия определяется рекомендациями лечащего врача-травматолога-ортопеда.

4. Приспособление регулируется по объему с помощью пряжек и ремешков.

5. Для обеспечения правильного ухода за приспособлением необходимо:

- кожаные манжеты протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытирать насухо;
- не подвергать глажению и стирке.

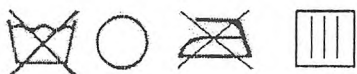

Изготовитель:
Витебский филиал
РУП «Белорусский
протезно-
ортопедический
восстановительный
центр», г. Витебск, ул.
Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный директор
В. А. Калевит

**ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПИО-17**

1. Приспособление для поддержания нижней конечности ПИО-17 (далее при-способление) предназначено для разгрузки тазобедренного сустава при орто-педических заболеваниях бедренной кости и тазобедренного сустава, таких как остеохондропатия тазобедренного сустава.

1.1. Противопоказаниями к назначению приспособления являются:

- психоэмоциональная непереносимость;
- заболевания кожных покровов;
- аллергические реакции на материал;
- наличие сгибательных контрактур области тазобедренных и коленных суста-



2. Приспособление рекомендуется надевать на одежду.

3. Режим ношения изделия определяется рекомендациями лечащего врача-травматолога-ортопеда.

4. Приспособление регулируется по объему с помощью пряжек и ремешков.

5. Для обеспечения правильного ухода за приспособлением необходимо:

- кожаные манжеты протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытирать насухо;
- не подвергать глажению и стирке.

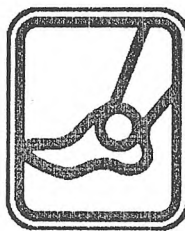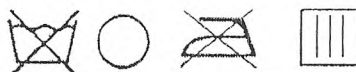

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by


ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ПОЯСАМИ ФИКСИРУЮЩИМИ ПНО-16, ПНО-16-01, ПНО-16-02

- Пояса-ремни фиксирующие ПНО-16, ПНО-16-01, ПНО-16-02, (далее изделия) предназначены для частичной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника при умеренно-выраженных болях на почве остеохондроза, спондилолистезе 1ст., в послеоперационном периоде после резекции дисков и др.
- При серийном изготовлении, размер изделий определяется - обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	Обхват талии, мм
75	700-749
80	750-799
85	800-849
90	850-899
95	900-949
100	950-999
105	1000-1049
100	1050-1099
115	1100-1149
120	1150-1200

- Противопоказаниями к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.
- Изделия рекомендуется надевать на нательное белье, лежа на плоской поверхности, застегнуть пряжки, встать.
- Режим носки шинок, определяет лечащий врач-ортопед.
- Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
 - кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
 - сушить вдали от отопительных приборов;
 - не подвергать глажению;
 - необходимо уделять внимание коже, соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждать опрелости и потертости.

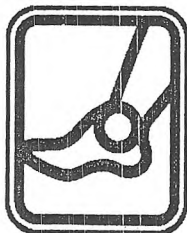

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный Директор
В.А. Калевит


ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ПОЯСАМИ ФИКСИРУЮЩИМИ ПНО-16, ПНО-16-01, ПНО-16-02

- Пояса-ремни фиксирующие ПНО-16, ПНО-16-01, ПНО-16-02, (далее изделия) предназначены для частичной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника при умеренно-выраженных болях на почве остеохондроза, спондилолистезе 1ст., в послеоперационном периоде после резекции дисков и др.
- При серийном изготовлении, размер изделий определяется - обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	Обхват талии, мм
75	700-749
80	750-799
85	800-849
90	850-899
95	900-949
100	950-999
105	1000-1049
100	1050-1099
115	1100-1149
120	1150-1200

- Противопоказаниями к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.
- Изделия рекомендуется надевать на нательное белье, лежа на плоской поверхности, застегнуть пряжки, встать.
- Режим носки шинок, определяет лечащий врач-ортопед.
- Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
 - кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
 - сушить вдали от отопительных приборов;
 - не подвергать глажению;
 - необходимо уделять внимание коже, соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждать опрелости и потертости.

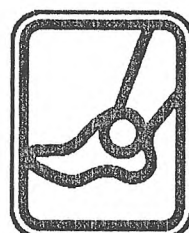

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by



**ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗА ПОЯСОМ-КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА ПИО-15**

Пояс-крепление протеза ПИО-15, ПИО-15-ХХ (далее - изделие) предназначен для крепления протезов бедра (голени) вместо кожаных поясов РБ 655, РБ 656 согласно медицинскому назначению.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Изделие рекомендуется надевать на нательное бельё. Сначала застегнуть изделие, начиная с нижней пуговицы, затем затянуть и завязать шнур.

Надеть протез и пристегнуть к поясу с помощью деталей крепления.

Режим ношения изделия определяется ношением протеза.

Сняв изделие, рекомендуется ежедневно промыть тело тёплой водой с мылом и вытереть насухо.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушку производить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- утюжить при температуре 60-70°C, исключая эластичные вставки и детали крепления.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Генеральный Директор
В. А. Каневит



ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА МАНЖЕТКОЙ – СТЯЖКОЙ ПИО-13

Манжетка - стяжка ПИО-13 (далее изделие) назначается для поддержания переднего отдела стопы и предупреждения его распластанности, а также до и после хирургических операций на стопе в области головок плюсневых костей.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

Размер изделия определяется обхватом стопы в пучковой части, в соответствии с таблицей.


Размер стяжки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Окружность стопы в пучковой части, мм	160±10	170±10	180±10	190±10	200±10	210±10	220±10	230±10	240±10	250±10

Изделие предназначено для использования в обуви на низком и среднем каблуке. Валик Зейца необходимо располагать капелькой в направлении плюсны. Режим ношения изделия - по рекомендации врача травматолога - ортопеда.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

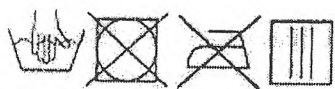

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный Директор
В. А. Калевич



Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за абдукционными трусиками ПИО-09-05

1. Абдукционные трусики ПИО-09-05 (далее – изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов и врожденного вывиха бедра у детей.
2. Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.
3. Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребенка и рекомендациями лечащего врача-ортопеда.
4. По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-ортопедом.
5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
 - корпус 1 раз в неделю протирать антисептическим средством
 - сушить вдали от источников тепла;
 - стирку съемного чехла производить вручную при температуре воды 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
 - выжимать вручную без выкручивания;
 - сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
 - необходимо уделить внимание коже ребенка и предупредить опрелости;
 - снимать изделие рекомендуется ежедневно, вымыть тело ребенка теплой водой с мылом и вытереть насухо;
 - застежку «контакт» периодически очищать от ниток и ворсинок.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Генеральный директор
В. В. Калевич

ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУСИКОВ АБДУКЦИОННЫХ ПИО-09-04.

- Трусики абдукционные ПИО-09-04 предназначены для лечения дисплазии и врожденного вывиха бедра у детей.
- Изделие надевать на белье.
- Уложить ребенка на изделие спиной так, чтобы вкладыш располагался между раздвинутыми коленями.
- Застегнуть бретели на плечиках, по бокам завязать шнурки.
- Ребенок должен находиться в трусиках постоянно (включая ночное время).
- Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- ✓ стирку производить вручную, при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени, предварительно вынув вкладыш из изделия;
- ✓ выжимать вручную;
- ✓ сушить в подвешенном состоянии;
- ✓ гладить при температуре не более 110°C;
- ✓ необходимо уделять внимание коже и предупреждать потертости. Снимать изделие рекомендуется ежедневно, обмывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо.




Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУСИКОВ АБДУКЦИОННЫХ ПИО-09-04.

- Трусики абдукционные ПИО-09-04 предназначены для лечения дисплазии и врожденного вывиха бедра у детей.
- Изделие надевать на белье.
- Уложить ребенка на изделие спиной так, чтобы вкладыш располагался между раздвинутыми коленями.
- Застегнуть бретели на плечиках, по бокам завязать шнурки.
- Ребенок должен находиться в трусиках постоянно (включая ночное время).
- Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- ✓ стирку производить вручную, при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени, предварительно вынув вкладыш из изделия;
- ✓ выжимать вручную;
- ✓ сушить в подвешенном состоянии;
- ✓ гладить при температуре не более 110°C;
- ✓ необходимо уделять внимание коже и предупреждать потертости. Снимать изделие рекомендуется ежедневно, обмывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо.

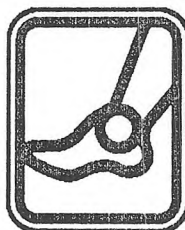

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный Директор
В.А. Калевич



ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ТРУСИКАМИ АБДУКЦИОННЫМИ ПИО-09-03

1 Трусики абдукционные ПИО-09-03 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей.

1.1 Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

2.1. Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90° . Застегнуть крепление на теле на застежку текстильную «контакт». Отрегулировать бретели через плечики в зависимости от роста.

3 Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недель.

4 По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом травматологом-ортопедом.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытирать насухо;

- сушить в расправленном виде вдали от источников тепла;

- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;

- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;

- снимать изделие рекомендуется ежедневно, и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.



Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Генеральный директор
В. А. Каневский

**ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА ШИНАМИ
ПНО-08, ПИ-08-01, ПНО-08-02, ПНО-08-03**

1. Шины предназначены для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

1.1 Для изделий ГНО-08 и ПНО-08-02 размер определяется в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Размер изделия, мм	0	1	2	3	4
Расстояние максимального разведения ног, мм	242,6	276,6	300,8	363,2	401,6

1.2. Для изделия ПНО-08-01 размер изделия определяется в соответствии с табл. 2.

Таблица 2.

Размер изделия	Длина трубки шинки-распорки ОПИ 52.00.00, мм	Расстояние разведения ног минимум/максимум, мм
12	40	120-170
14	60	140-190
16	80	160-210
18	100	180-230
20	120	200-250
22	140	220-270
24	160	240-290
26	180	260-310
28	200	280-330
30	220	300-350
32	240	320-370
34	260	340-390
36	280	360-410

2 Противопоказанием к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 Изделия рекомендуется надевать на нательное белье.

4 Режим носки шинок определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- шинки не стирать;
- кожаные детали 1 раз неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.



Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22.

Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный директор

В. П. Колосов

**ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
СПЕЦБРЮКАМИ ПИО-04**

1. Спецбрюки на парную ампутацию бедер, голени и на сочетанную ампутацию бедра и голени ПИО-04 (далее спецбрюки) назначаются при двухсторонней ампутации нижних конечностей независимо от длины культей, в случае выявления противопоказаний к протезированию. Кроме того, спецбрюки могут быть назначены дополнительно к протезам при двухсторонней экзартикуляции в тазо-бедренных суставах или двухсторонних культях бедер.
2. Противопоказаниями к назначению изделия являются: индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.
3. Изделие надевать на нательное белье.
4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
 - стирку не производить;
 - поверхность брюк протирать раствором нейтральных моющих средств с помощью губки;
 - протереть сухой тряпкой;
 - сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
 - не подвергать глажению;
 - химчистку производить с применением всех общепринятых органических растворителей;
 - периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.
5. Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Ладо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный директор
В.А. Калевич

**ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
СПЕЦБРЮКАМИ ПИО-04**

1. Спецбрюки на парную ампутацию бедер, голени и на сочетанную ампутацию бедра и голени ПИО-04 (далее спецбрюки) назначаются при двухсторонней ампутации нижних конечностей независимо от длины культей, в случае выявления противопоказаний к протезированию. Кроме того, спецбрюки могут быть назначены дополнительно к протезам при двухсторонней экзартикуляции в тазо-бедренных суставах или двухсторонних культях бедер.
2. Противопоказаниями к назначению изделия являются: индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.
3. Изделие надевать на нательное белье.
4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
 - стирку не производить;
 - поверхность брюк протирать раствором нейтральных моющих средств с помощью губки;
 - протереть сухой тряпкой;
 - сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
 - не подвергать глажению;
 - химчистку производить с применением всех общепринятых органических растворителей;
 - периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.
5. Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Ладо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by



ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА НАКОЛЕННИКОМ ПИО-03-04

Наколенник ПИО-03-04, ПИО-03-XX (далее изделие) назначается при артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленных суставах и служит для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.


При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерения над коленом и под коленом, и соответствовать данным бланка заказа. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

При серийном изготовлении размер изделия определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм

Размер изделия	Обхват над коленом, мм	Обхват под коленом, мм
	310-340	250-270
1	330-380	270-290
2	390-420	290-310
3	430-460	310-330
4	470-500	330-350
5	510-540	350-370
6	550-580	370-390

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

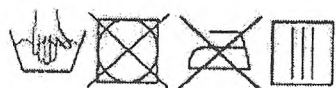

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА НАКОЛЕННИКАМИ ПИО-ОЗ, ПИО-03-01, ПИО-03-02, ПИО-03-03

Наколенники - наколенник резиновый ПИО-ОЗ, ПИО-13-ХХ, наколенник из эластичного полотна глухой ПИО-03-01, наколенник из эластичного полотна с застёжкой «контакт» ПИО-03-02, наколенник из эластичного полотна на шнуровке ПИО-03-03 (далее изделие) назначаются при артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений над коленом и под коленом и должен соответствовать данным бланка заказа. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-01 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

Таблица 1.

Размер изделия	3	4
Размер над коленом, см	50-53	54-57
Размер под коленом, см	42-45	44-49



При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-02, ПИО-03-03, определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 2. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

Таблица 2.

Размер изделия	0	1	2	2	4
Размер над коленом, см	31-34	35-38	39-42	43-46	47-50
Размер под коленом, см	24-27	28-31	32-35	36-39	40-43

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению

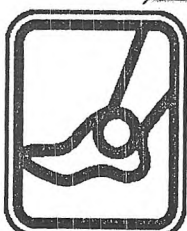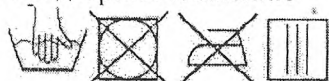

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА НАКОЛЕННИКАМИ ПИО-ОЗ, ПИО-03-01, ПИО-03-02, ПИО-03-03

Наколенники - наколенник резиновый ПИО-ОЗ, ПИО-13-ХХ, наколенник из эластичного полотна глухой ПИО-03-01, наколенник из эластичного полотна с застёжкой «контакт» ПИО-03-02, наколенник из эластичного полотна на шнуровке ПИО-03-03 (далее изделие) назначаются при артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений над коленом и под коленом и должен соответствовать данным бланка заказа. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-01 определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

Таблица 1.

Размер изделия	3	4
Размер над коленом, см	50-53	54-57
Размер под коленом, см	42-45	44-49



При серийном изготовлении размер изделия ПИО-03-02, ПИО-03-03, определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 2. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

Таблица 2.

Размер изделия	0	1	2	2	4
Размер над коленом, см	31-34	35-38	39-42	43-46	47-50
Размер под коленом, см	24-27	28-31	32-35	36-39	40-43

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению

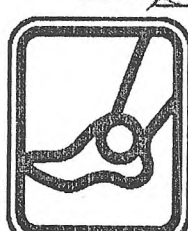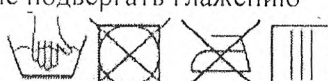

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный директор
В.А.Канел

ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА НАКОЛЕННИКОМ С ШИНАМИ ПИО-03-05

Наколенник с шинами ПИО-03-05, ПИО-ОЗ-ХХ (далее изделие) назначается для фиксации коленного сустава при повреждениях капсульно-связочного аппарата коленного сустава, при дегенеративном и посттравматическом артрозе, при синовитах, на этапе восстановительного реабилитационного лечения после операций на коленном суставе.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При индивидуальном изготовлении размер определяется в зависимости от измерений бедра и голени, и должен соответствовать данным бланка заказа. Допустимые отклонения объёмных размеров должны быть в пределах ± 10 мм.

При серийном изготовлении размер изделия определяется обхватом над коленом и под коленом, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Размер изделия	Объем бедра, мм	Объем голени, мм
1	350-380	270-290
2	390-420	290-310
3	430-460	310-330
4	470-500	330-350
5	510-540	350-370
6	550-580	370-390
7	590-620	400-420
8	630-650	430-440
9	660-700	450-470

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из изделия вынимать шины;
- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в изделие вставить шины



Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.



Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22.

Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный директор
В.А. Калевит

**ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
КОРСЕТОМ ФИКСИРУЮЩИМ КРО-12.**

1. Корсет фиксирующий КРО-12 (далее корсет), предназначен для ограничения подвижности пояснично-грудного отдела позвоночника, при различных патологиях нижепоясничного, пояснично-крестцового и верхнегрудного отделов позвоночника.

2. Корсет создает умеренное комфортное чувство в области позвоночника и ограничивает его подвижность за счет применения жестких планшетонок.

3. Режим носки устанавливается врачом ортопедом - травматологом.

4. Корсет должен надеваться на нательное белье и плотно прилегать по всей поверхности позвоночника за счет сжатия эластичных боковин и ремней-подхватов, а также за счет индивидуальной прогибки планшетонок.

5. Корсет должен плотно охватывать позвоночник.

6. Чтобы сохранить внешний вид корсета необходимо:

- перед стиркой вынуть планшетонок;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- изделие не кипятить;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- рекомендуется гладить с паром, боковины и ремни-подхваты не утюжить.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

**ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
КОРСЕТОМ ФИКСИРУЮЩИМ КРО-12.**

1. Корсет фиксирующий КРО-12 (далее корсет), предназначен для ограничения подвижности пояснично-грудного отдела позвоночника, при различных патологиях нижепоясничного, пояснично-крестцового и верхнегрудного отделов позвоночника.

2. Корсет создает умеренное комфортное чувство в области позвоночника и ограничивает его подвижность за счет применения жестких планшетонок.

3. Режим носки устанавливается врачом ортопедом - травматологом.

4. Корсет должен надеваться на нательное белье и плотно прилегать по всей поверхности позвоночника за счет сжатия эластичных боковин и ремней-подхватов, а также за счет индивидуальной прогибки планшетонок.

5. Корсет должен плотно охватывать позвоночник.

6. Чтобы сохранить внешний вид корсета необходимо:

- перед стиркой вынуть планшетонок;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- изделие не кипятить;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- рекомендуется гладить с паром, боковины и ремни-подхваты не утюжить.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный Директор
В.А. Калевич



ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА КОРРЕКТОРОМ ОСАНКИ КРО -15

1. Корректор осанки КРО-15 (далее изделие) предназначен для разгрузки мышц грудного отдела позвоночника, обеспечения поддержания правильной осанки за счет регулируемого раздвижения плеч с одновременной умеренной фиксацией поясничного отдела позвоночника. Используется как лечебно-профилактическое средство при различных вариантах нарушения осанки у детей и взрослых, при умеренно выраженных кифотической и сколиотической деформациях грудного отдела позвоночника, при ушибах, миозитах, компрессионных переломах и переломах отростков позвонков в грудном и грудо - поясничном отделах позвоночника в подостром и восстановительном периодах.

1.1 Размер изделия определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Размер изделия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обхват талии, мм	650 690	700 740	750 790	800 840	850 890	900 940	950 990	1000 1040	1050 1090	1100 1150

1.2 Длина спинки в зависимости от размера в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2.

Размер изделия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Длина спинки по вертикальной средней линии, мм	450±20	460±20	460±20	470±20	470±20	480±20	490±20	500±20	510±20	520±20

В случае, если значение измерения находится на границе двух размеров, рекомендуется выбирать наибольший размер изделия.

1.3 Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- тяжелая сердечная патология;
- открытая травма груди;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2. Изделие надевать в положении стоя поверх майки, облегающей тело. Прежде чем натянуть ремни и застегнуть изделие, следует установить пациента в положении коррекции, т.е. придать надплечьям положение максимально возможного отведения назад, свести лопатки, подтянуть живот и держать голову прямо.

3. Изделие используется в комплексе с физиотерапевтическим лечением, массажем, мануальной терапией, лечебной физкультурой. Детям рекомендуется

**ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
КОРСЕТОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГОЛОВЫ
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА КР0-02-05**

1 Корсет для фиксации головы КР0-02-05 (далее изделие) назначают при шейно-плечевом синдроме, миалгии и невралгии шеи, травме без повреждений связок и костей, кривошее у детей и др.

2 Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 Крепление изделия и регулировка фиксации на шею за счет застежки текстильной «контакт».

4 Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

**ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
КОРСЕТОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГОЛОВЫ
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА КР0-02-05**

1 Корсет для фиксации головы КР0-02-05 (далее изделие) назначают при шейно-плечевом синдроме, миалгии и невралгии шеи, травме без повреждений связок и костей, кривошее у детей и др.

2 Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.


3 Крепление изделия и регулировка фиксации на шею за счет застежки текстильной «контакт».

4 Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

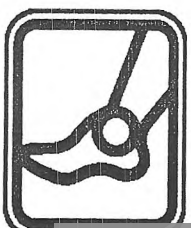

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

**ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
КОРСЕТОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГОЛОВЫ
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА КР0-02-05**

1 Корсет для фиксации головы КР0-02-05 (далее изделие) назначают при шейно-плечевом синдроме, миалгии и невралгии шеи, травме без повреждений связок и костей, кривошее у детей и др.

2 Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.


3 Крепление изделия и регулировка фиксации на шею за счет застежки текстильной «контакт».

4 Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

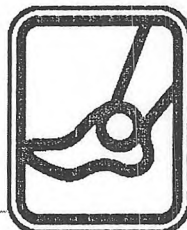

Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;
67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

**ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ
ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА
КОРСЕТОМ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГОЛОВЫ
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА КР0-02-05**

1 Корсет для фиксации головы КР0-02-05 (далее изделие) назначают при шейно-плечевом синдроме, миалгии и невралгии шеи, травме без повреждений связок и костей, кривошее у детей и др.

2 Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3 Крепление изделия и регулировка фиксации на шею за счет застежки текстильной «контакт».

4 Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель:
Витебский филиал РУП
«Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный
центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.
Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;



ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА КОРСЕТОМ КОРРИГИРУЮЩИМ ТИПА ШЕНО КР4-16-05ПЭТ

Корсет корригирующий типа Шено (далее-корсет) - ортопедическое изделие индивидуального изготовления, предназначенное для оказания воздействия на искривленный позвоночник с целью коррекции деформации, восстановления баланса туловища. Корсет изготавливается в соответствии с назначениями в бланке заказа, оформленном с учетом медицинских показаний и анатомо-физиологических особенностей пациента.

Корсет следует носить поверх хлопчатобумажной футболки, которая должна быть без швов по краям, достаточно длинной и как можно тоньше, или одевать корсет в трикотажном х/б чехле можно без нательного белья.

Длительность использования и общая продолжительность применения корсета определяются в соответствии с рекомендациями и планом наблюдения, утвержденным врачом-травматологом-ортопедом.

Не допускается самостоятельное внесение изменений в конструкцию корсета.

Для обеспечения правильного ухода за корсетом необходимо:

- внутреннюю поверхность корсета протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- стирку чехла производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами, выжимать слегка без выкручивания;
- после стирки чехол прополоскать в теплой, а затем в холодной воде; сушить чехол в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- гладить чехол при температуре не более 100 °C;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании корсета необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт корсета следует производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует износостойкость и надежность в течение 7 месяцев со дня выдачи готового корсета, на элементы крепления 30 дней со дня выдачи готового корсета при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения. В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно производит ремонт корсета, гарантия не распространяется на корректировочные работы.

Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Ладо 113.**

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный директор
В. А. Каневский



ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗА РЕКЛИНАТОРАМИ КР1-03, КР1-04

1 Реклинаторы КР1-03 и КР1-04 (далее изделия) предназначены для детей и подростков с начальными формами нарушения осанки и лёгких нефиксированных деформациях, преимущественно с локализацией в верхне - грудном отделе позвоночника, при слабой функции мышечно - связочного аппарата для исправления искривления в сагиттальной плоскости, преимущественно при сутулости.

1.1. Размер изделия определяется длиной спинки в соответствии с таблицей.

Размер изделия	0	00	1	2	3	4	5	6	7	8
Длина спинки КР1-03, мм			330±20	340±20	350±20	360±20	370±20	380±20	390±20	400±20
Длина спинки КР1-04, мм	310±20	320±20	330±20	340±20	350±20	360±20	370±20	380±20	390±20	400±20

1.2 Противопоказаниями к назначению изделий являются:

- тяжелая сердечная патология;
- открытая травма груди;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.


2 Изделие надевать в положении стоя поверх майки, облегаяющей тело. Прежде чем натянуть ремни и застегнуть изделие, следует установить пациента в положении коррекции, т.е. придать надплечьям положение максимально возможного отведения назад, свести лопатки, подтянуть живот и держать голову прямо.

3 Рекомендуются пользоваться изделием во время сидения при школьных и домашних занятиях. Во время сна, прогулок, бега, игр, связанных с частичной сменой поз, изделие необходимо снимать.

4 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- перед стиркой из изделия следует вынуть планшетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в изделие вставить планшетки;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

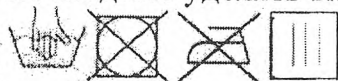

Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Ладо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный директор



**Памятка - инструкция
по уходу за татором на нижнюю конечность ТН0, ТН2, ТН4, ТН6, ТН8**

НАДЕВАНИЕ ТУТОРА:

- татор рекомендуется надевать на чулок (носок, колготки);
- расположить приемную гильзу на нижнюю конечности и плотно зафиксировать при помощи крепления.

УХОД ЗА ТУТОРОМ:

- избегать сильных ударов татором по татору;
- татор необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать татор, необходимо проверить, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей;
- татор хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или источником тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании татора необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт татора необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу татора в течении самих месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортировки и хранения

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный директор

В. Р. Калевич



ПАМЯТКА - ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ТУТОРОМ НА НИЖНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ ТР0, ТР2, ТР4, ТР6, ТР8

НАДЕВАНИЕ ТУТОРА:

- татор рекомендуется надевать на чулок (носок, колготки);
- расположить приемную гильзу на нижнюю конечности и плотно зафиксировать при помощи крепления.

УХОД ЗА ТУТОРОМ:

- избегать сильных ударов татором по татору;
- татор необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать татор, необходимо проверить, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей;
- татор хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или источником тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании татора необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт татора необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу татора в течении самих месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортировки и хранения

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лаза 113.**

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Генеральный директор

В.А. Каневский



Памятка-инструкция по эксплуатации и уходу за аппаратом на нижнюю конечность АНО, АН2, АН4, АН6, АН8

НАДЕВАНИЕ АППАРАТА:

- аппарат рекомендуется надевать на трикотажный чулок;
- расположить нижнюю конечность в приемные гильзы;
- найти наиболее удобное положение нижней конечности в приемных гильзах, после чего дать нагрузку на конечность;
- отрегулировать крепление.

УХОД ЗА АППАРАТОМ:

- избегать сильных ударов аппаратом и по аппарату, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали;
- аппарат необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать аппарат, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, металлических деталей, шарниров;
- аппарат хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- трущиеся металлические части аппарата и шарнирные соединения необходимо периодически осматривать и смазывать смазочными материалами;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

Режим ношения аппарата определяется состоянием здоровья пациента и рекомендациями врача - травматолога - ортопеда.

По вопросам индивидуального пользования аппаратом необходимо проконсультироваться с врачом - травматологом - ортопедом.

При использовании аппарата необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт аппарата необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу аппарата в течение трех месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Генеральный директор
В. А. Калевич



ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА АППАРАТОМ НА ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ АР0, АР2, АР4, АР8

НАДЕВАНИЕ АППАРАТА

- аппарат рекомендуется надевать на нательное белье;
- расположить приемную гильзу на верхней конечности и плотно зафиксировать при помощи крепления.

УХОД ЗА АППАРАТОМ

- избегать сильных ударов аппаратом и по аппарату, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали;
- аппарат необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать аппарат, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы металлических деталей;
- аппарат хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- трущиеся металлические части аппарата и шарнирные соединения необходимо периодически осматривать и смазывать смазочными материалами;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании аппарата необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Генеральный директор
В. А. Калевич

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ПРОТЕЗОМ СТОПЫ ПНО

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на культю надеть предохранительный чехол, который должен плотно облегать культю и не образовывать складок. При повышенной потливости рекомендуется применять шерстяной чехол;
- в положении сидя или стоя, погрузить культю в мягкий вкладыш, а затем в приемную гильзу;
- найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука. учтенном при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез при помощи рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
- обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза. не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза голени должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на торец культи (подошвенную часть).

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы;
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Генеральный Директор
В. А. Каневич

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ПРОТЕЗОМ ГОЛЕНИ ПНЗ

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на культю надеть предохранительный чехол, который должен плотно облегать культю и не образовывать складок. При повышенной потливости рекомендуется применять шерстяной чехол;
- в положении сидя или стоя, погрузить культю в мягкий вкладыш, а затем в приемную гильзу;
- найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука. учтенном при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез при помощи рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
- обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза. не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза голени должна плотно облегать культю. не вызывая болевых ощущений. обеспечивать преимущественную нагрузку на связку надколенника. внутренний мыщелок и боковые поверхности вдоль гребня большеберцовой кости и частично на торец культи;
- повышенное давление может ощущаться лишь над наколенником, которое перестает беспокоить по мере освоения ходьбы на протезе.

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу. не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы;
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, петли повреждений приемной гильзы. стопы. металлических деталей;
- протез хранить в сухом. чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла. не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании лайнера (силиконового чехла). обеспечивать ежедневный уход за чехлом согласно прилагаемой инструкции по использованию.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpove-vitebsk.by](http://www.bpove-vitebsk.by)

Генеральный директор
В.А. Калевич



ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ПРОТЕЗОМ БЕДРА ПН6

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на культю надеть предохранительный чехол, который должен плотно облегать культю и не образовывать складок. При повышенной потливости рекомендуется применять шерстяной чехол;

- в положении сидя или стоя, погрузить культю в приемную гильзу голени, протянуть мягкие ткани при помощи чехла (протяжки) через отверстие;

- найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;

- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;

- обувь надевать на протез при помощи рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;

- обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;

- приемная гильза бедра должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на седалищный бугор.

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы. Исключение составляют рабочие протезы, специально предназначенные для выполнения рабочих операций.

- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;

- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;

- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;

- протез хранить в сухом, чистом месте;

- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;

- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;

- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании лайнера (силиконового чехла), обеспечивать ежедневный уход за чехлом согласно прилагаемой инструкции по использованию.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Генеральный директор
[Подпись]

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ПРОТЕЗОМ ПОСЛЕ ВЫЧЛЕНЕНИЯ БЕДРА ПН8

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- протез надевается на нательное белье (шорты) которое должно облегать культю с минимальным количеством складок;
- в положении сидя или стоя, погрузить культю в приемную гильзу;
- найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенном при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез при помощи рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
- обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на дистальную поверхность культи.

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы;
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Генеральный Директор
В. А. Каревич

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ПРОТЕЗОМ ПРИ ВРОЖДЕННОМ НЕДОРАЗВИТИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПН9

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на нижнюю конечность надеть предохранительный чехол (чулок), который должен плотно облегать и не образовывать складок;
- в положении сидя или стоя, погрузить культю в приемную гильзу;
- найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука. учтенном при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез при помощи рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
- обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза должна плотно облегать нижнюю конечность, не вызывая болевых ощущений. обеспечивать преимущественную нагрузку на подошвенную часть стопы.

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы;
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи нижней конечности;
- приемную полость гильз необходимо обтирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Генеральный Директор
В.А. Колесник



ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ПРОТЕЗОМ НА ВЕРХНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ ПРО, ПР2, ПР4, ПР8

Для обеспечения правильного ухода за протезом необходимо:

- протез содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
 - приемную полость гильзы протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором;
 - прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, кисти, металлических деталей и насадок;
 - протез хранить в сухом и чистом месте;
 - сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
 - не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
 - при одевании и снятии верхней одежды, кисть покрыть легкой хлопчатобумажной салфеткой для лучшего скольжения;
 - чтобы сохранить кисть (оболочку) косметическую необходимо содержать ее в чистоте, для этого ежедневно после пользования необходимо мыть водой с детским мылом или каким-либо другим моющим средством;
 - следует избегать механических повреждений кисти косметической, попадания на поверхность печатной краски, пищевой пасты, так как пятна от них полностью не смываются. Загрязнения могут образовываться не только от прямого попадания краски и пищевой пасты, но и от загрязненной здоровой руки и трения об одежду;
 - свежие пятна грязи с поверхности кисти косметической необходимо смывать губкой или чистой тряпочкой намыленной мылом с получением обильной пены или каким-либо другим моющим средством с нейтральным PH;
 - мыло смывать теплой водой при температуре 30 - 40 °С. Влажную кисть вытирать чистой салфеткой. Сильно загрязненные места можно протереть спиртом.
- Для предохранения кисти (оболочки) косметической от загрязнения необходимо соблюдать следующие правила:
- не прикасаться к кисти потной рукой;
 - не носить кисть в кожаной перчатке, даже с текстильной подкладкой;
 - избегать при ходьбе систематического трения об одежду;
 - во время работы по хозяйству и на садовом участке, для защиты кисти косметической следует одеть трикотажную перчатку;
 - элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12; 67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Генеральный Директор

В.А.Калевич


Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Витебский филиал
210033, ул. Лазо, 113



Устройство для лечения врожденной косолапости у детей
ПНО-51 СТБ 932-2008

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ

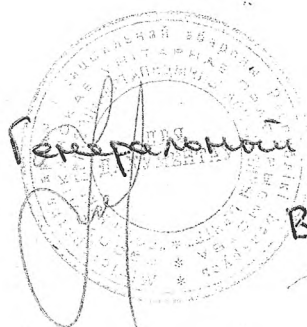

Генеральный Директор

В.А. Каневич

Республика Беларусь

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 (далее - устройство), с условиями его эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Устройство относится к изделиям медицинского назначения и может быть использовано в ортопедии и травматологии в раннем консервативном и послеоперационном лечении врожденной косолапости у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Устройство может быть использовано в ряде случаев при лечении плоскостопия у детей в раннем детском возрасте и предназначено для использования при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические данные

2.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение по КД	Условное обозначение изделия (модификация)	Маркировка (на под-стопниках)	Размеры без ботинок, мм			Масса, кг, не более
			Длина L ± 5	Ширина B ± 2	Высота H ± 3	
ЦСИЕ.02.057.00.00.00	ПИО-51	0	240...295	100	43...55	0,50
-01	ПИО-51-01	1	280...335	100	43...52	0,57
-02	ПИО-51-02	2	320...375	115	43...50	0,63
-03	ПИО-51-03	3	360...417	115	43...48	0,70

2.2 Устройство выпускается 4-х типоразмеров согласно таблице 2.

Таблица 2

Условное обозначение изделия (модификация)	Расстояние разведения ног ребёнка минимум / максимум, мм
ПИО-51	187...240
ПИО-51-01	227...283
ПИО-51-02	267...323
ПИО-51-03	307...365

2.3 Срок службы* – 1-2 года (для металлических элементов). Ботинки меняют по мере роста стопы ребёнка (не чаще чем 2 раза в год).

* - по заключению врачей по мере роста ребёнка.

1 Генеральный директор
В.А. Каневский

3 Устройство

Устройство (см. рисунок, стр. 6) включает следующие основные элементы:

- подстоппники 1;
- пара кожаных ботиночек 2 с язычком 3 и с открытым носком 4, снабжённых тремя фиксирующими ремешками * 5, 6, 7;
- планки 8; винтовые соединения 9, 13 и 15.

Примечание – Изображение устройства на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

4 Подготовка к работе и использование по назначению

4.1 Изделие поступает к пользователю в собранном виде. Лечащий врач-ортопед раскручивает винтовое соединение 9 и надевает на ножки ребёнка правый и левый комплекты с помощью язычка 3 и трёх фиксирующих ремешков * 6, 7, 5 поочерёдно с визуальным контролем необходимого положения пятки ребёнка в ботинке 2 через отверстие 16 и пальцев стопы через открытый носок 4. Правый и левый комплекты соединяют между собой жёстко и внахлест с помощью гаек 9 на заданном расстоянии и контролируют положение планок 8 по шкале 11 в пазу 10. Угол поворота стоп задают ослаблением винтового соединения 13 с фиксацией положения ботинка 2 по градуированной шкале 14 с шагом 10°. Ботинки 2 используют, начиная с минимального размера, а по мере увеличения длины стопы ребёнка выполняют лишь замену ботинка 2. С ростом ребёнка, в зависимости от требуемого диапазона раздвижения ног на ширину плеч ребёнка, по назначению врача-ортопеда выписывается следующая модификация изделия.

5 Меры безопасности

5.1 Во избежание нанесения травмы ребёнку все узлы и детали устройства должны быть надёжно зафиксированы.

5.2 Ботинки рекомендуется надевать на трикотажный носок.

5.3 Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребёнка и рекомендациями лечащего врача-ортопеда.

** Возможен вариант крепления ботиночка с помощью шнурков, которые заменяют ремешки 5 и 7. Лечащий врач-ортопед в соответствии с индивидуальными особенностями пациента вправе определять способ крепления ботинка на стопе.*

Генеральный директор
В.А. Калевит

5.4 Запрещается подвергать устройство ударам.

5.5 При эксплуатации обуви необходимо соблюдать следующие условия:

- необходимо правильно подбирать ботинки по длине стопы, а также следить за своевременной заменой ботинок по мере роста ребёнка;

- ежедневно просушивать обувь при комнатной температуре;
- запрещается сушить обувь на нагревательных поверхностях;
- запрещается мыть обувь в воде;
- необходимо избегать попадания на обувь щелочей, кислот, активных растворителей.

Примечание – при повышенной потливости ног или намокании обуви может окрашиваться изнутри.

5.6 Пользователю запрещается производить изменение параметров устройства или изменять его конструкцию без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

6 Техническое обслуживание

6.1 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- протирать изделие дезинфицирующим раствором;
- поверхность обуви протирать мягкой влажной тряпкой;
- следить за надёжной фиксацией деталей устройства.

7 Комплектность

7.1 Устройство	1 шт.
7.2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
7.3 Гаечный ключ	1 шт.
7.4 Отвёртка	1 шт.

8 Маркировка

Маркировка устройства должна иметь:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485 и СТБ ISO 9001;
- наименование и условное обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТНПА;

3

Генеральный директор

В.А. Колесник

- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер) или номер заказа (при выпуске по индивидуальному заказу);
- цвет и размер обуви (при изготовлении мелкими партиями);
- материал верха, подкладки и низа обуви;
- гарантийный срок (месяцев, дней);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код.

9 Свидетельство о приемке

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей

наименование изделия

ПИО-51

СТБ 932-2008

обозначение

зав. № или № заказа (при наличии)

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 932-2008, ТО ВУ 100010315.327-2013, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковке

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей

наименование изделия

ПИО-51

СТБ 932-2008

обозначение

зав. № или № заказа (при наличии)

упаковано на

РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

*Генеральный директор
В.А. Колесов*

4

11 Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийный срок эксплуатации металлических элементов устройства – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

Гарантийный срок эксплуатации обуви (ботинок) – 45 дней со дня ввода изделия в эксплуатацию (даты продажи или выдачи заказчику), гарантийный срок хранения 18 месяцев с даты изготовления.

11.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт устройства в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за нарушения условий хранения, транспортирования, изменений и ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

11.3 Гарантия не распространяется на устройства, имеющие нарушения требований эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

11.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений.

11.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

246034, г. Витебск, ул. Лазо, 113, тел. (0212)

67-14-12, (0212) 67-14-22.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

12 Сведения о государственной регистрации


Устройство является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.5562/2011.

Действительно до 11.11.2025 г.

5  *Генеральный директор*
В.А. Колевич

Серпуховский
В.А. Кандыт

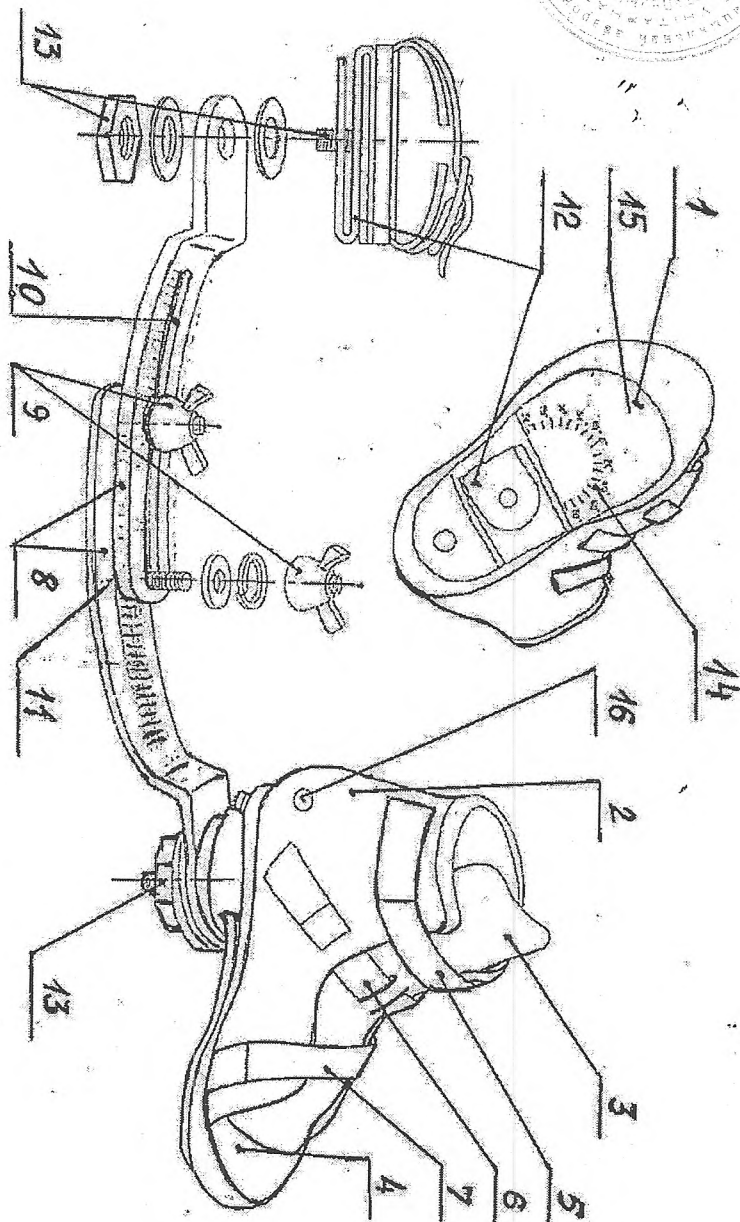

Рисунок

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Витебский филиал:

210033 Республика Беларусь,

г. Витебск, ул. Лазо, 113, (0212) 671412, (0212) 671422.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.

Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок: (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479;

сайт: www.bpovc.by.

Генеральный директор
В.А. Калевит

