

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Министра здравоохранения
Республики Беларусь

И.Г. Лосицкий

2016г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СКАРИФИКАТОР-КОПЬЕ

с центральным, боковым и боковым укороченным копьем,
изготовитель ООО «Бел-Медикон», Республика Беларусь, ТУ ВУ 690821649.003-проект,
согласно договору №222-МТ от 02.03.2016г.

№ 17980


СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора УП «Центр экспертиз
и испытаний в здравоохранении»

С.И. Зинченко

«01»

2016г.

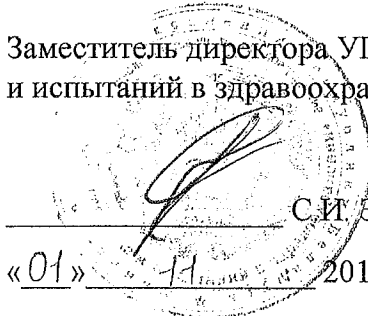

СОГЛАСОВАНО

Главный врач УЗ «9-я городская клиническая
больница», г. Минск

В.С. Кушниренко

2016г.



СОГЛАСОВАНО

Главный врач УЗ «6-я городская клиническая
больница», г. Минск

В.Н. Гурко

2016г.



СОГЛАСОВАНО

Директор ООО «Бел-Медикон», Республика
Беларусь

2016г.



СОГЛАСОВАНО

Главный врач УЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи»,
г. Минск

А.В. Борисов

2016г.





**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ СКАРИФИКАТОР-КОПЬЕ**
с центральным, боковым и боковым укороченным расположением копы,
изготовленный ООО «Бел-Медикон» в соответствии с ТУ ВУ 690821649.003-2016

Скарификатор-копье с центральным, боковым и боковым укороченным расположением копы, одноразовый, стерильный предназначен для прокалывания поверхности кожного покрова, с целью получения проб капиллярной крови и/или скарификации поверхности кожи для проведения аллергических проб.

Скарификатор-копье является СТЕРИЛЬНЫМ медицинским изделием ОДНОКРАТНОГО применения.

Во время процедуры отбора капиллярной крови необходимо обязательно пользоваться специальными резиновыми перчатками.

Перед применением необходимо:

- визуально, оценить и проверить индивидуальную упаковку скарификатора-копье на ее герметичность (отсутствие проколов, прорезов и других физических повреждений индивидуальной упаковки). Индивидуальная упаковка должна быть герметична, в случаях нарушения герметичности индивидуальной упаковки изделие скарификатор-копье ПРИМЕНЯТЬ ЗАПРЕЩЕНО;
- выяснить ориентацию скарификатора путем осмотра знака и надписи на индивидуальной упаковке о направлении острой части скарификатор-копье;
- вскрыть индивидуальную упаковку изделия скарификатор-копье только со стороны тупого конца скарификатора. Вскрытие индивидуальной упаковки изделия скарификатор-копье производить путем зажатия тело изделия скарификатор-копье между большим и указательным пальцами правой (левой) руки выше середины изделия, так, чтобы над пальцами оставалось не более пяти миллиметров скарификатора-копья с тупой стороны, пальцами другой руки зажать упаковочный материал и одновременным движением рук на встречу друг, другу вскрыть индивидуальную упаковку скарификатора-копье с тупой стороны;
- осмотреть поверхность скарификатор-копье, которая должна быть без трещин, забоин, выкрашенных мест, заусенцев, расслоений, прожогов и других загрязнений. В случае наличия чего-либо из перечисленного, скарификатор-копье применять ЗАПРЕЩЕНО.

При извлечении изделия скарификатор-копье из вскрытой индивидуальной упаковки необходимо строго соблюдать осторожность - НЕ РАССТЕРИЛИЗОВЫВАТЬ острую часть изделия (копье).

После извлечения изделия из индивидуальной упаковки применять скарификатор-копье по назначению:

- расположив руку пациента на инъекционном столе, выбрать место на кончике пальца пациента для отбора капиллярной крови (для получения максимального объема крови и уменьшения болезненных ощущений, необходимо осуществлять прокол, немного сместившись от центра подушечки пальца);
- предварительно обработав место прокола спиртовой салфеткой, произвести прокол кожного покрова;
- аккуратно массируя палец по направлению к месту прокола, получить требуемый объем крови;
- зажать место прокола сухим стерильным ватным тампоном;
- по окончании работы необходимо утилизировать скарификатор-копье, используя предназначенный для данных целей контейнер.

Условия хранения:

- избегать деформации изделий или повреждения упаковки. Хранить на складе в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ15150 и размещать в упаковке предприятия-изготовителя на стеллажах.
- температура воздуха от плюс 5 до плюс 45 градусов по Цельсию.
- относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 градусах по Цельсию.
- воздух в помещениях хранения не должен содержать любых примесей вызывающих коррозию металлов.

Срок годности (стерильности) изделия: 36 месяцев с момента радиационной стерилизации и 60 месяцев с момента газовой (окись этилена) стерилизации.

Претензии по качеству направлять в ООО «Бел-Медикон», 222322, РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, г.п. Радошковичи, ул. Заславская д.2, т/ф 80176 707 270, конт.т +375 29 500 21 24, +375 29 500 21 23, факс +375 29 58 38, +375 29 865 20 20

