


Сделано в России

по ТУ 9444-002-50063260-2008

Аспиратор портативный АП-04-«Медпром»

ПАСПОРТ

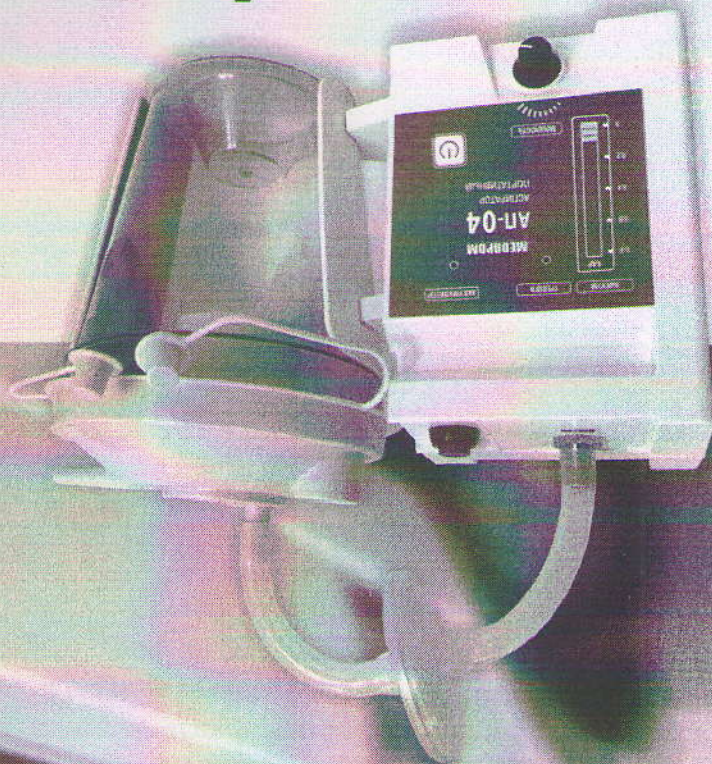

АП-04

Разработка и Производство
Портативной Наркотно-Дыхательной Техники

МЕДПРОМ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Основные технические характеристики	3
3. Комплексность	4
4. Устройство и принцип работы	5
5. Меры безопасности	6
6. Подготовка к работе	7
7. Порядок работы	7
8. Техническое обслуживание	8
9. Возможные неисправности и способы их устранения	9
10. Консервация, упаковка и транспортирование	9
11. Правила хранения и расконсервации	9
12. Сведения об утилизации	10
13. Гарантии изготовителя	10
14. Сведения о рекламациях	10
15. Свидетельство о консервации	12
16. Свидетельство об упаковке	13
17. Таблица учета работы аппарата	14
18. Таблица учета неисправностей аппарата при его эксплуатации ..	15
19. Свидетельство о приемке	16
20. Гарантийный талон	17
21. Маркировка	18

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Аспиратор портативный АП-04 «Медпром» в исполнении АП-04з-«Медпром» (в дальнейшем «аспиратор») предназначен для отсасывания жидкости, содержащейся в верхних дыхательных путях пациента в условиях медицинского транспорта различного назначения, а также на месте происшествия и на дому.

Вид климатического исполнения отсасывателя V2 по ГОСТ Р 50444 для работы при температуре от 5°C до 40°C.

Аппарат допущен к обращению на территории Российской Федерации. Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07783 от 14 июля 2020 года.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Аспиратор работает:
 - а) от сети переменного тока 220 ± 22 В, 50 Гц;
 - б) от внешнего источника постоянного тока 9,5-30 В;
 - в) от встроенного аккумулятора постоянного тока 12 В.
- 2.2. Аспиратор обеспечивает:
 - разрежение в емкости-сборнике, кПа (см.вод.ст.), не менее.....70 (700);
 - производительность по воде не менее, л/мин.....1,5
 - производительность по воздуху не менее, л/мин.....18
 - автоматическое отключение при достижении в емкости-сборнике номинального разрежения;
 - автоматическое отключение аспиратора от пациента при наполнении емкости-сборника.
- 2.3. Объем емкости-сборника 0,8 л.
- 2.4. Масса аспиратора не более 2 кг.
- 2.5. Габаритные размеры аспиратора не более 180x160x90 мм.
- 2.6. Корректируемый уровень звуковой мощности аспиратора не более 63 дБА.
- 2.7. Средний срок службы аспиратора не менее 4 лет.
- 2.8. Драгоценных металлов не содержится.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки аппарата представлен в табл. 1.

Таблица 1


Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1. Аспиратор портативный АП-04-«Медпром» в исполнении АП-04-«Медпром»	ТУ 9444-002-50063260-2008	1
2. Емкость-сборник		1
3. Комплект соединительных трубок		1
4. Наконечник		1
5. Аккумулятор 12В*		1
6. Адаптер 220/12 В		1
7. Соединитель к бортовой сети		1
8. Сумка**		1
Эксплуатационная документация		
9. Паспорт		1
Упаковка		
10. Упаковка		1

* Поставляется установленным в аспиратор
 ** Поставляется по требованию потребителя

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Аспиратор для создания разрежения использует электронасос. Устройство контроля, управления и индикации располагается на печатной плате закрепленной в корпусе из ударопрочного полистирола. На лицевой панели блока управления расположены выключатель питания, ручка регулятора предельного разрежения, линейный индикатор рабочего разрежения, светодиодные индикаторы аварийного состояния «ТРЕВОГА» и контроля состояния аккумуляторной батареи «АККУМУЛЯТОР».

4.2 Аспиратор работает следующим образом. При подаче питания аспиратор начинает работать и создавать разрежение на выходе прерывателя. При достижении рабочего разрежения аспиратор автоматически отключается. При открытии прерывателя под действием разрежения происходит отсасывание содержимого верхних дыхательных путей пациента, и аспиратор снова включается в работу. При наполнении стакана поплавковый клапан поднимается и отключает стакан от пациента, а аспиратор прекращает работу.

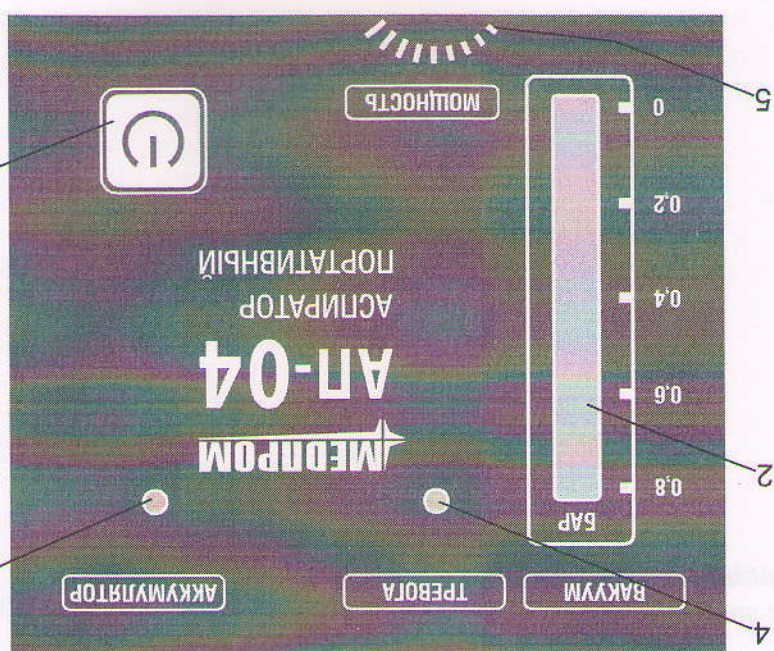

4.5 Аспиратор при включении (и при кратковременном нажатии на кнопку включения) на линейном индикаторе 2 кратковременно показывается степень заряда встроенного аккумулятора, которая сменяется индикацией в режиме реального времени степени разрежения и указанием установленного предельного разрежения.



5.1. К работе с аспиратором допускается персонал только после ознакомления с настоящим паспортом.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В режиме зарядки аккумулятора показания линейного индикатора 2 пропорциональны степени заряда аккумулятора.

Светодиодный индикатор контроля состояния аккумулятора 3 «АККУ-МУЛТОР» светится зелёным при подключении внешнего адаптера, обозначающая работу аспиратора от внешнего электропитания и заряд аккумулятора батареи.

Светодиодный индикатор аварийного состояния «ТРЕВОГА» 4 светится красным с сопровождением сигнала зуммера при переполнении ёмкости сборника.

Через 15 сек после достижения уровня предельного разряда аспиратор автоматически выключается.

4.6 Питание аспиратора включается и выключается длительным нажатием на кнопку 1. Запуск и остановка осуществляется красной кнопкой на крышке прибора.

Мощность регулируется ручкой 5.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. После распаковки проверьте комплектность аспиратора в соответствии с настоящим паспортом.

6.2. Убедитесь внешним осмотром в отсутствии повреждений узлов и деталей аспиратора, трещин и проколов деталей из синтетических материалов.

6.3. Проведите дезинфекцию аспиратора. Для этого необходимо:
- тщательно протереть загрязненные места всего аспиратора;
- наружные поверхности аспиратора и шлангов обработать 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177-77 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644-88: трубку с прерывателем подвергнуть предстерилизационной очистке и стерилизации 6% раствором перекиси водорода.

5.4. Подключите аспиратор к бортовой сети, либо, посредством адаптера, к сети 220В 50Гц. В случае отсутствия сетевого питания, аспиратор готов к автономной работе от встроенного аккумулятора, в течение 1 часа при полностью заряженном аккумуляторе.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Перед применением аспиратор необходимо убедиться в его исправности; для этого: включите аспиратор и убедитесь на слух, что он начал работать; выключите аспиратор.

7.2. Для проведения отсасывания содержимого верхних дыхательных путей необходимо:
- включить аспиратор;
- ввести наконечник в дыхательные пути пациента;
- запустить аспиратор;
- при заполнении емкости-сборника или прекращении отсасывания выключить аспиратор.
Для снятия заполненного емкости-сборника необходимо, перемещая емкость-сборник вверх, отсоединить ее от аспиратора.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Для обеспечения надежной работы аппарата, предупреждения отказов и неисправностей проводят его техническое обслуживание.

8.2 Техническое обслуживание аспираторов, находящихся как на хранении, так и в эксплуатации, проводят в объеме и с периодичностью, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Наименование работ	Периодичность работ				
	Через 6 месяцев	Через 3 года хранения	один раз в год при эксплуатации	Контрольно-поверочная аппаратура	Отсутствие повреждений
1. Проверка внешнего состояния		+	+	Вакуумметр	Вакуумметр
2. Проверка создаваемого в емкости-сборнике разрежения			+	Вакуумметр	Вакуумметр
3. Проверка производительности по воде			+	Секундомер, емкость мерная (не менее 0,6л)	Емкость мерная (не менее 0,6 л)
4. Проверка автоматического отключения емкости-сборника			+		Вакуумметр
5. Проверка автоматического отключения аспиратора			+		Вакуумметр
6. Подзарядка аккумулятора	+				

8.3. При проведении технического обслуживания необходимо соблюдать меры безопасности.

8.4. На техническое обслуживание аспиратор предъявляется с паспортом.

8.5. В случае обнаружения при техническом обслуживании несоответствия аспиратора техническим требованиям табл. 2, дальнейшая эксплуатация аспиратора не допускается и он подлежит ремонту или замене.

8.6. Аспиратор и входящие в его состав элементы в процессе эксплуатации ремонту обслуживающим персоналом не подлежат. Для восстановления работоспособности аспиратора необходимо обращаться к региональным представительством или на предприятие-изготовитель.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

9.1. Аспиратор не включается в автономном режиме. Причина - разряжен аккумулятор. Для устранения неисправности следует произвести подзарядку аккумулятора.

10. КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1. Консервация аспиратора производится в случае длительного хранения или транспортирования.

10.2. Консервацию аспиратора следует производить по ГОСТ 9.014 для условий хранения 1: В3-15, ВУ5.

10.3. Предельный срок хранения без консервации – 2 года.

10.4. Аспираторы в упаковке предприятия - изготовителя в закрепленном состоянии могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, кроме неотапливаемых отсеков самолетов, по ГОСТ Р 50444 в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. Условия транспортирования аспираторов по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Примечание: Не допускается транспортирование и хранение аспираторов совместно с бензином, керосином и кислотами, вредно действующими на металлы, резину и упаковочный материал.

10.5. После транспортирования при отрицательных температурах аспираторы должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях в течение не менее 4 часов.

11.1. Аспиратор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

11.2. Расконсервация аспиратора заключается во вскрытии упаковки предприятия-изготовителя, извлечении аспиратора и проведении операций, указанных в разделе 6 "Подготовка к работе".

14.2. Все предъявленные рекламации потребитель должен регистрировать в таблице 3.

- при истечении гарантийного срока службы;
- при отсутствии или не заполнении паспорта;
- при нарушении условий хранения и требований эксплуатации;
- при механических повреждениях;

Примечание: Не принимаются рекламации по качеству аппарата в следующих случаях:

14.1. При обнаружении неисправности или отказе аспиратора в период гарантийных обязательств потребитель должен быть предъявлен гарантийный талон предприятия, осуществляющему гарантийное обслуживание изделий медицинской техники, или предприятию-изготовителю.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

предъявления гарантийного талона.

13.4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель или предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание, производят ремонт или замену аппарата по

13.3. Гарантийный срок хранения аспиратора должен быть не менее 6 месяцев.

13.2. Срок действия гарантии составляет 12 месяцев со дня получения аспиратора потребителем (или его представителя) в склад, подтверждающего актом приемки Покупателя (или его представителя) или 18 месяцев со дня отгрузки в зависимости от того, какой период завершится ранее.

13.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аспиратора требованиям технических условий TV 9444-002-50063260-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Изделие после окончания использования утилизируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-2010 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий.

12. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Таблица 3

_____ г. 20

М.П.

Дата консервации _____
 Срок консервации _____
 Наименование и марка консерванта _____
 Срок защиты _____
 Консервантно произвел _____
 Изделие после консервации принял _____
 (подпись) (подпись)

Аспиратор портативный АП-043-«Медпром» серийный № _____
 подвезнут на ООО «Медпром» консервации согласно требованиям, предусмотренным
 настоящим паспортом.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Приложение I

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Приложение 2

Аспиратор портативный АП-043-«Медпром»

серийный №

упакован

(наименование или код изготовителя)

согласно требованиям ТУ 9444-002-50063260-2008 и комплекту технической документации.

Дата упаковки

Упаковку произвели

(подпись)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

20 г.

--	--	--	--	--

17. ТАБЛИЦА УЧЕТА РАБОТЫ АППАРАТА

Приложение 3

Приложение 4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Телефон/факс: (812) 297-96-77, (812) 297-97-77

ИНН/КПП 7804542510/780401001

ОГРН 1147847354874

ООО «Медпром»
РФ, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.17, к.3, лит. А, пом. 16Н, ком.9

Предприятие-изготовитель

Начальник ОТК

М.П.

" " 20 г.

новиям ТУ 9444-002-50063260-2008 и приложен к эксплуатации.

произведен в полном соответствии с технической спецификацией по техническим ус-
Асиратор портативный АП-04з-«Медпром», серийный №

19. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приложение 5

Приложение 6

20. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт(замену) в течение гарантийного срока

Аспиратор портативный АП-04э-«Медпром».

серийный № _____

выпущенный _____

(по свидетельству о приемке)

приобретенный _____

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

введен в эксплуатацию _____

(дата, подпись)

принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

(адрес ремонтного предприятия)

МП _____

Подпись руководителя и

печать ремонтного предприятия

МП _____

Подпись руководителя и

печать предприятия-владельца

Предприятие-изготовитель

ООО «Медпром»

РФ, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.17, к.3, лит. А, пом. 16Н, ком.9

ОГРН 1027808002760

ИНН/КПП 7816138937/780401001

Телефон/факс: (812) 297-96-77, (812) 297-97-77

21. МАРКИРОВКА

Знак соответствия, применяемый в системе сертификации ГОСТ Р для указания соответствия маркированной им продукции требованиям, предусмотренным для добровольного подтверждения соответствия.



Внимание, обратитесь к эксплуатационным документам.



Не допускайте контакта с маслами и жирowymi смазками.




Постоянный ток.




Изделие типа В по ГОСТ Р 50267.0.



Год выпуска.

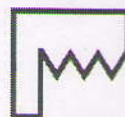

Номер по системе нумерации предприятия - изготовителя.

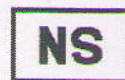

Хрупкое. Осторожно.



Бережь от влаги.



Вверх.



Истечение срока годности.



АП-043-«Медпром»

Аспиратор портативный АП-043-«Медпром» предназначен для отсасывания жидкости, содержащейся в верхних дыхательных путях пациента, в условиях медицинского транспорта различного назначения, а также на месте происшествия и на дому.

по ТУ 9444-002-50063260-2008

Данный паспорт является документом, совмещенным с техническим описанием и руководством по эксплуатации.

ООО «МЕДПРОМ»

194021, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д.17, к.3
лит. А, пом. 16Н, ком.9
тел./факс: +7 (812) 297-97-77
+7 (812) 297-96-77
e-mail: med-prom@mail.ru
<http://www.medprom.spb.ru>



2022

Д.А. Вазин

Генеральный директор ООО «Медпром»

19 (девятнадцать) листов

печатью

Прошито, пронумеровано и скреплено