

## Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами грыжевыми паховыми

Бандажи грыжевые паховые (далее бандажи): односторонние БН5-03-00ЛП, БН5-03-01ЛП, БН5-03-02ЛП, БН5-05-00, БН5-07-00ЛП назначаются при односторонних прямых, косых (пахово-мошоночных) паховых грыжах; двусторонние БН5-04-00, БН5-04-01, БН5-04-02, БН5-04-03, БН5-04-04, БН5-04-05, БН5-08-00 назначаются при двухсторонних прямых, косых (пахово-мошоночных) паховых грыжах. Бандажи предназначены для профилактики увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыж, профилактики развития одно- или двухсторонних грыж при физической нагрузке, натуживании и кашле, а также для профилактики рецидивов грыж в послеоперационном периоде.

Бандажи обеспечивают плотное прилегание пелота в области грыжевых ворот, надёжно удерживая грыжу во вправленном состоянии. Противопоказаниями к назначению бандажей являются:

- индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на компоненты применяемых материалов;
- синдром портальной гипертензии;
- ущемление грыжи;
- невправимые грыжи.

Бандажи БН5-03-00ЛП, БН5-03-01ЛП, БН5-05-00, БН5-07-00ЛП, БН5-04-00, БН5-04-01, БН5-04-03, БН5-08-00 выпускаются в индивидуальном исполнении и серийно. Бандажи БН5-03-02ЛП, БН5-04-02, БН5-04-04, БН5-04-05 выпускаются только в индивидуальном исполнении.

При серийном изготовлении размер бандажей определяется обхватом бёдер без учёта выступа живота в соответствии с таблицей 1. Предельные отклонения размеров должны быть  $\pm 10$  мм.

Таблица 1

| Размер бандажа                              | 0       | 1       | 2        | 3         | 4         |
|---------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Обхват бёдер без учёта выступа живота, (мм) | 780-870 | 880-970 | 980-1070 | 1080-1170 | 1180-1270 |

Обхват бёдер без учёта выступа живота измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне бёдер без учёта выступа живота.


Размер бандажа при индивидуальном изготовлении должен соответствовать размеру, указанному в бланке заказа.

Бандажи следует надевать на нательное белье, в положении лежа. Сначала следует неплотно застегнуть пояс, вправить грыжи, расположить пелоты над местами выпячивания грыж. Затем плотно зафиксировать пояс бандажа, застегнуть и отрегулировать подбедренники, расположив их сзади под ягодичную складку. Вставить нужно аккуратно, придерживая паховые пелоты.

Режим ношения бандажа определяется лечащим врачом. Сняв бандаж рекомендуется ежедневно промывать тело тёплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

Для обеспечения правильного ухода за бандажами необходимо:

- периодически очищать застёжку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;
- кожаные детали протирать влажной салфеткой без замачивания;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- не подвергать глажению.

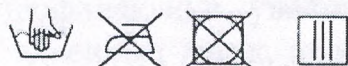

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: [www.bpovc.by](http://www.bpovc.by); E-mail: [gomel@bpovc.by](mailto:gomel@bpovc.by)

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.*

## Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом-поясом дородовым БН1-03

1 Бандаж-пояс дородовый БН1-03 (далее – бандаж) предназначен для женщин в дородовый период для поддержания органов брюшной полости и плода в период второй половины беременности, и предупреждает растяжение, дряблость брюшной стенки и расхождение прямых мышц живота.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Бандаж выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

1.1 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом бедер без учета выступа живота в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Размер бандажа                            | 1       | 2        | 3         | 4         | 5         |
|-------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Обхват бедер без учета выступа живота, мм | 850-940 | 950-1040 | 1050-1140 | 1150-1240 | 1250-1340 |

2 Режим носки бандажа устанавливает врач.

3 Надевать бандаж в положении лежа на нательное белье.

4 Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать низ живота.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;


- не кипятить;

- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;

- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;

- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;

- не подвергать глажению.

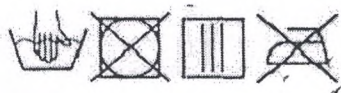

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: [www.bprovcs.by](http://www.bprovcs.by); E-mail: [gomel@bprovcs.by](mailto:gomel@bprovcs.by)

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.*

## Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом-поясом родовым БН1-05

1 Бандаж-пояс родовый БН1-05 (далее – бандаж) предназначен для женщин в родовый период для поддержания органов брюшной полости и плода в период второй половины беременности и предупреждения растяжения, дряблости брюшной стенки и расхождения прямых мышц живота.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

1.1 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом бедер без учета выступа живота в соответствии с таблицей 1.

1.2 Обхват бедер без учета выступа живота измеряют лентой сантиметровой по ТНПА, накладывая ее горизонтально вокруг туловища на уровне ягодичных точек и замыкая на правой стороне туловища.

Таблица 1

| Размер бандажа                            | 1       | 2        | 3         | 4         | 5         |
|-------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Обхват бедер без учета выступа живота, мм | 850-940 | 950-1040 | 1050-1140 | 1150-1240 | 1250-1340 |

1.3 Размер бандажа при индивидуальном исполнении должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

2 Режим носки бандажа устанавливается врачом.


3 Надевать бандаж следует в положении лежа на нательное белье. Застегнуть сначала застежку основной детали, затем застежку ремня-подхвата.

4 Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать низ живота.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- перед стиркой вынуть планшеты из карманов;
- стирку производить вручную при температуре не выше 40 ° С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- после высыхания вставить планшеты в карманы;
- периодически очищать текстильную застежку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

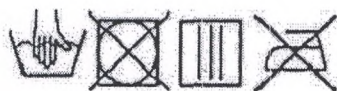

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: [www.bpovc.by](http://www.bpovc.by); E-mail: [gomel@bpovc.by](mailto:gomel@bpovc.by)

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.*

## Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом послеродовым БН2-01

1 Бандаж послеродовый БН2-01 (далее – бандаж) предназначен для женщин в послеродовой период для поддержания мышц брюшного пресса у женщин, а также при опущении внутренних органов малого таза, в послеоперационный период при слабости послеоперационных швов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Бандаж выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

1.1 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Размер бандажа   | 0       | 1       | 2       | 3       | 4         | 5         | 6         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Обхват талии, мм | 600-690 | 700-790 | 800-890 | 900-990 | 1000-1090 | 1100-1190 | 1200-1290 |

1.2 При индивидуальном изготовлении размеры бандажа должны соответствовать бланку заказа.

2 Режим носки бандажа устанавливает врач.


3 Надевать бандаж следует в положении лежа на нательное белье.

4 Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать туловище.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

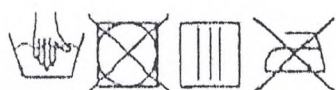

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: [www.bpovc.by](http://www.bpovc.by); E-mail: [gomel@bpovc.by](mailto:gomel@bpovc.by)

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.*

## Памятка – инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом лечебным БНЗ-00

1. Бандаж лечебный БНЗ-00 (далее бандаж) назначается при опущении внутренних органов в послеоперационный период (опущение почек, печени, желудка и кишечника) при слабости послеоперационных швов, прогрессирующем истощении. Бандаж обеспечивает необходимое внутрибрюшное давление, ограничивает смещение внутренних органов.

Противопоказаниями к назначению бандажа являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов.


2. Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье, начинать застегивать необходимо с нижней пуговицы, затем затягивать и завязывать шнуровку.

3. Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4. Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5. Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110°C, исключая эластичные вставки и ремень-подхват.

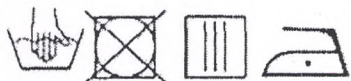

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: [www.bprov.by](http://www.bprov.by); E-mail: [gomel@bprov.by](mailto:gomel@bprov.by)

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.*

## Памятка – инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом лечебным почечным БНЗ-01

1 Бандаж лечебный почечный БНЗ-01 (далее бандаж) назначается при опущении почек, почечно-каменной болезни, опухолях, пиелитах, послеоперационных грыжах и неокрепших рубцах или других послеоперационных состояниях.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Режим ношения бандажа определяется лечащим врачом.


2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье.

3 Застегивать бандаж необходимо начиная с нижней пуговицы, затем затягивать и завязывать шнуровку, застегивать ремень-подхват и подбедренники.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- утюжить при температуре не более 110°C, исключая эластичные вставки.

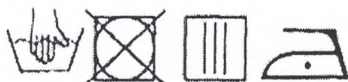

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: [www.bprovcs.by](http://www.bprovcs.by); E-mail: [gomel@bprovcs.by](mailto:gomel@bprovcs.by)

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.*

**Памятка – инструкция  
по уходу и эксплуатации за бандажом лечебным при искусственном  
анусе БНЗ-02**

1. Бандаж лечебный при искусственном анусе БНЗ-02 (далее бандаж) назначается больным со стомой в послеоперационный период после полного или частичного удаления кишечника. Бандаж способствует поддержке передней брюшной стенки у пациентов со стомой, профилактике образования грыж в области стомы, служит для реабилитации при использовании дренажных приспособлений, снижает риск возникновения болевых ощущений, жжения или зуда, связанных с раздражением кожи вокруг стомы или с усиленной перистальтикой кишечника. Бандаж фиксирует положение калоприемника, дренажных приспособлений, предотвращая их смещение во время движения.

Противопоказаниями к назначению являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов.


2. Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье или без него, застегивать начиная с нижней пуговицы, вывести калоприемник в отверстие, затем затягивать и завязывать шнуровку.

3. Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4. Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5. Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110°C, исключая эластичные вставки и ремень-подхват.

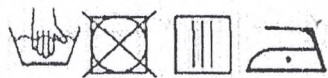

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: [www.bprov.by](http://www.bprov.by); E-mail: [gomel@bprov.by](mailto:gomel@bprov.by)

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.*

## Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом лечебным женским БНЗ-03

1.1 Бандаж лечебный БНЗ-03 (далее бандаж) назначается при опущении органов малого таза, слабости мышц стенок влагалища, выпадении и опущении шейки матки, вправимых паховых грыжах и грыжах белой линии живота у женщин. Бандаж служит для удержания органов малого таза в физиологическом положении, предотвращает дальнейшее опущение органов малого таза, создает правильное внутрибрюшное давление и ограничивает смещение внутренних органов.

1.2 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты применяемых материалов;
- дерматит, гнойничковая инфекция в области применения бандажа;
- невправимые грыжи;
- сдавливание и ущемление органов малого таза;
- синдром портальной гипертензии.

1.3 Размеры бандажа должны соответствовать бланку заказа.


2 Бандаж следует надевать в положении лежа на нательное белье, начинать застегивать нужно с нижней пуговицы, затем затягивать и застегивать ластовицу и нижний ремень-подхват, далее застегнуть основной ремень-подхват.

3 Режим ношения бандажа определяет лечащий врач.

4 Сняв бандаж, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- стирку производить вручную, при температуре воды 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- проводить глажку при низких температурах не более 110°C, исключая эластичные вставки и ремень-подхват.

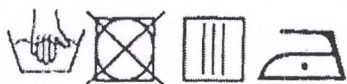

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: [www.bpovc.by](http://www.bpovc.by); E-mail: [gomel@bpovc.by](mailto:gomel@bpovc.by)

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.*

**Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации  
за бандажом - поясом лечебным грыжевым (пупочным)  
БНЗ-05, БНЗ-05-01**

1 Бандаж-пояс лечебный грыжевой (пупочный) далее (бандаж) применяется при пупочных грыжах различной степени выраженности и вентральных грыжах различной локализации.

1.1 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Режим ношения бандажа-пояса определяется лечащим врачом.

3 Бандаж рекомендуется надевать на нательное белье, в положении лежа.

4 Бандаж на теле фиксируется с помощью застёжки на пуговицы или крючки.

5 Грыжа удерживается пелотом и ремнём-подхватом.

6 Сняв бандаж рекомендуется ежедневно промывать тело тёплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

7 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- перед стиркой достать из кармана пелот;

- стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;

- выжимать слегка без выкручивания;

- сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии;

- не подвергать глажению.



**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: [www.bpovc.by](http://www.bpovc.by); E-mail: [gomel@bpovc.by](mailto:gomel@bpovc.by)

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.*

## Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом послеоперационным БНЗ-08

1. Бандаж послеоперационный БНЗ-08 (далее – бандаж) назначается после операций по поводу грыж с неокрепшими послеоперационными рубцами, с рубцами после вторичного заживления раны, а также с целью профилактики расхождения послеоперационных рубцов. При обширных грыжах брюшной стенки назначается бандаж с пелотом на место расположения грыжевого кольца.

1.1 Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов. Бандаж выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

1.2 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Размер бандажа   | 0       | 1       | 2       | 3       | 4         | 5         | 6         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Обхват талии, мм | 600-690 | 700-790 | 800-890 | 900-990 | 1000-1090 | 1100-1190 | 1200-1290 |

1.3 Размер бандажа при индивидуальном исполнении должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.

2 Режим носки бандажа устанавливает врач.


3 Надевать бандаж в положении лежа на нательное белье.

4 Бандаж должен плотно охватывать и поддерживать туловище.

5 Для сохранения внешнего вида бандажа необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- перед стиркой достать планшетки и пелот из карманов;
- не кипятить;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

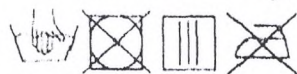

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: [www.bprov.by](http://www.bprov.by); E-mail: [gomel@bprov.by](mailto:gomel@bprov.by)

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.*

## Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажом грыжевым паховым двусторонним на широком эластичном поясе БН5-04-06

1.1 Бандаж грыжевой паховый двусторонний на широком эластичном поясе БН5-04-06 (далее бандаж) назначается при двухсторонних прямых, косых пахово-мошоночных и паховых грыжах. Для профилактики увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыж, профилактики развития одно- или двухсторонних грыж при физической нагрузке, натуживании и кашле, а также для профилактики рецидивов грыж в послеоперационном периоде. Бандаж обеспечивает плотное прилегание пелота в области грыжевых ворот, надёжно удерживая грыжу во вправленном состоянии.

1.2 Противопоказаниями к назначению бандажа являются:

- индивидуальная непереносимость и аллергические реакции на компоненты применяемых материалов;
- синдром портальной гипертензии;
- ущемление грыжи;
- невправимые грыжи.

1.3 Бандаж выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

1.4 При серийном изготовлении размер бандажа определяется обхватом бедер без учета выступа живота в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Размер бандажа                              | 0       | 1       | 2        | 3         | 4         |
|---------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Обхват бедер без учета выступа живота, (мм) | 780-870 | 880-970 | 980-1070 | 1080-1170 | 1800-1270 |

1.5 Размер бандажа при индивидуальном исполнении должен соответствовать размерам, указанным в бланке заказа.


2 Режим ношения бандажа определяется лечащим врачом.

3 Бандаж рекомендуется надевать в положении лежа, после вправления грыжевого выпячивания. Пелоты вставляются в карманы бандажа с одной или двух сторон в зависимости от расположения грыжи.

4 Сняв бандаж рекомендуется ежедневно промывать тело тёплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Для обеспечения правильного ухода за бандажом необходимо:

- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;
- перед стиркой застегнуть все застёжки, вынуть пелоты из карманов;
- стирку производить только ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- не подвергать глажению.

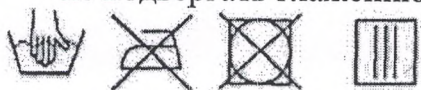

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал

Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А

Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23

Сайт: [www.bpovc.by](http://www.bpovc.by); E-mail: [gomel@bpovc.by](mailto:gomel@bpovc.by)

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.*