

5 Использование изделия

5.1 Для неподвижной установки кровати необходимо застопорить колеса с помощью легкого нажатия носком туфли на стопорные педали. Для придания движения необходимо поднять стопорные педали.

5.2 Поднятие и опускание подголовника и (или) подъемной секции должно осуществляться обслуживающим персоналом следующим образом:

- для поднятия подголовника необходимо взяться рукой за рукоятку подголовника поднять его вверх на необходимый угол;
- для поднятия подъемной секции необходимо взяться рукой за рукоятку подъемной секции поднять ее вверх и зафиксировать в одном из выбранных положений на рычаге;
- для опускания подголовника необходимо приподнять его одной рукой взявшись за рукоятку подголовника, второй рукой опустить вниз ручку в сборе поз. 8, расположенную под рамой со стороны подголовника и опустить секцию вниз на раму. При этом подголовник нельзя бросать, а спокойно опустить на раму.
- для опускания подъемной секции необходимо приподнять секцию одной рукой взявшись за рукоятку подъемной секции, второй рукой опустить вниз рычаг и опустить секцию на раму. При этом секцию нельзя бросать, а спокойно опустить на раму.

5.3 Дезинфекция матраца осуществляется воздушным методом в воздушном стерилизаторе (сухожаровом шкафу).

6 Меры безопасности

6.1 Перед каждым использованием необходимо проверить прочность фиксации составляющих во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям. **ВНИМАНИЕ!** При поднятии и опускании секций исключить попадание рук под секции во избежание травм.

6.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование кровати ненадлежащим образом может привести к ее повреждению и травмам пациента или персонала.

Примеры ненадлежащего использования:

- использование для интенсивной или обычной терапии, предназначенной для целей, не относящихся к нормальной функции больничной кровати,
- использование кровати в барокамере,
- размещение каких-либо предметов или оборудования на колесах или их использование в качестве опоры для человека,
- использование кровати с нагрузками, превышающими предельную,
- перемещение кровати, если два колеса заблокированы,
- использование кровати на улице или транспортировка пациентов в кровати в автомобиле,
- перемещение кровати по мягкому грунту или по не соответствующей поверхности,
- перемещение кровати по уклону, превышающему 10° (с пациентом или без пациента).

7 Хранение, транспортирование, утилизация

7.1 Кровать должна храниться в сухих, закрытых помещениях и должны быть защищены от механических повреждений.

7.2 Кровать транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

7.3 После истечения срока службы кровати и при невозможности ее дальнейшей эксплуатации, составные части кровати подлежат сдаче в «Утильсырьё» и «Втормет».

8 Гарантии изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации кроватей – 24 месяцев с момента реализации через торговую сеть, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Срок службы кровати – 5 лет. Срок службы матраца – 2 месяца.

8.3 Юридический адрес изготовителя:

212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Гришина, 96

Тел.: (0222) 65-07-32, 65-07-40 Факс (0222) 65-07-41

Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: olsa_garden@tut.by



Открытое акционерное общество «Ольса»
Республика Беларусь


Руководство по эксплуатации ИАУБ 22.19.00.000 РЭ для кроватей медицинских ИАУБ 22.19, -01 «Здоровье-2»

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемых изделиях, внешний вид которых приведен на рисунках 1, 2.

Кровати медицинские ИАУБ 22.19, -01 «Здоровье-2» (далее по тексту - кровати) удобны и безопасны в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства по эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право на незначительные конструктивные изменения, для дальнейшего совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя.


Кронштейн переносной*

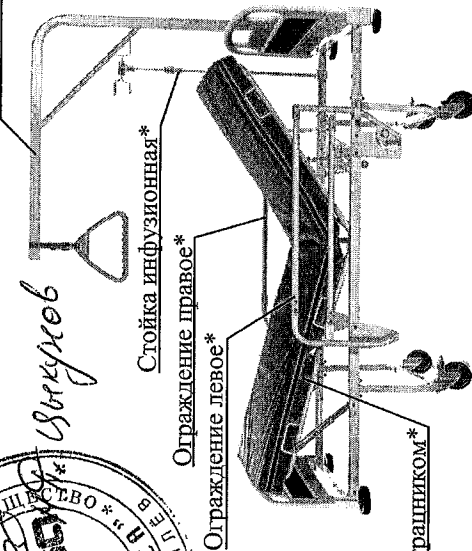

Матрац с наматрачником*

Рисунок 1 – Общий вид кровати ИАУБ 22.19 «Здоровье-2»

Рамы Балканского*

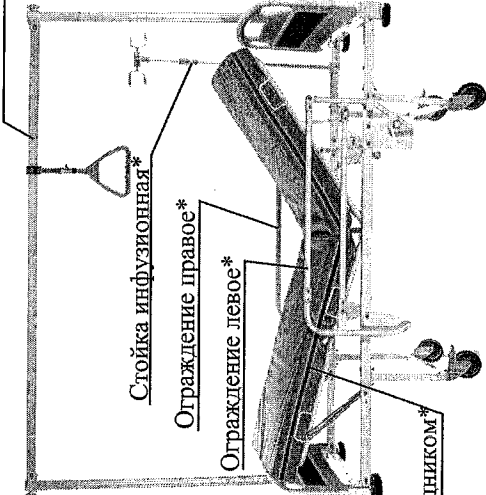

Матрац с наматрачником*

Рисунок 2 – Общий вид кровати ИАУБ 22.19-01 «Здоровье-2»

1 Основные сведения об изделии
Кровати медицинские ИИУБ 22.19, -01 «Здоровье - 2» (д'е по тексту – кровать) предназначены для размещения на них больных при стационар'ном лечении в лечебных учреждениях и соответствует требованиям ТУ РБ 05894597.012-98.

2 Основные технические данные
2.1 Основные технические данные кровати приведены в таблице 1.
Таблица 1

Наименование технической характеристики	Значение	
	ИИУБ 22.19 (рисунок 1)	ИИУБ 22.19-01 (рисунок 2)
Кровать рассчитана на равномерно распределенную нагрузку, кг, не более	180	
Масса кровати, кг, не более	88	91
Габаритные размеры кровати (длина х ширина х высота) в полной комплектации, мм, не более	2226х1030х1672	2226х1030х1954
Габаритные размеры поверхности лежания (длина х ширина), мм, не более	2000х870	
Высота от пола до поверхности лежания (без матраца), мм, не более	545	
- угол наклона подголовника по отношению к раме	0° – 60°	
- угол наклона секции подъемной по отношению к раме	0° – 22°	
Транспортибельность - четыре колеса, два из них с тормозом. Диаметр колеса не более 125 мм		

2.2 Перечень основных применяемых материалов для изготовления кровати: труба и проволока стальная, краска порошковая полиэфирная, ткани х/б и смешанные бытовые, пенополиуретан эластичный, клеенка медицинская.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки включает в себя:

1. Рама - 1 шт. 9. Затвор - 1 шт. 18. Винт М8х55 - 8 шт.
2. Спинка - 1 шт. 10. Кронштейн - 2 шт. 19. Гайка 6 - 2 шт.
3. Опора - 2 шт. 11. Кронштейн - 2 шт. 20. Гайка 8 - 10 шт.
4. Стойка (с колесами) - 2 шт. 12. Заглушка - 2 шт. 21. Гайка М6 (контрящая) - 8 шт.
5. Амортизатор - 4 шт. 13. Заглушка - 2 шт. 22. Гайка М10 (контрящая) - 4 шт.
6. Спинка - 1 шт. 14. Болт М10х35 - 4 шт. 23. Шайба 6 - 4 шт.
7. Пластина - 4 шт. 15. Винт М6х16 - 4 шт. 24. Шайба 10 - 4 шт.
8. Ручка в сборе - 2 шт. 16. Винт М6х35 - 6 шт. 25. Шайба 6 (пружинная) - 2 шт.
17. Винт М8х35 - 2 шт. 26. Шайба 8 (пружинная) - 10 шт.

Примечание:

1. Нумерация перечислений соответствует позициям на рисунке 3.
2. Комплектующие поз. 5, 7, 8, 10-26 упакованы в пакет

3.2 Поставка составных, отмеченных «*» на рисунке 1 и рисунке 2, по требованию заказчика может не осуществляться либо, при необходимости, поставляться самостоятельно за отдельную плату. Комплектность, установка и крепление данных составных указана в соответствующих инструкциях по монтажу.

- 4 Подготовка изделия к использованию
- 4.1 Снимите упаковку, проверьте комплектность.
- 4.2 Расположите раму поз.1 поверхностью лежания вниз.
- 4.3 Опоры с колесами поз. 3 закрепите на раме винтами поз.18, гайками поз.20 и пружинными шайбами поз.26 установив пластины поз.7 (см. А-А). Установите кровать на колеса.
- Внимание! Опоры поз.3 устанавливаются так, чтобы колеса с тормозом располагались по диагонали рамы.

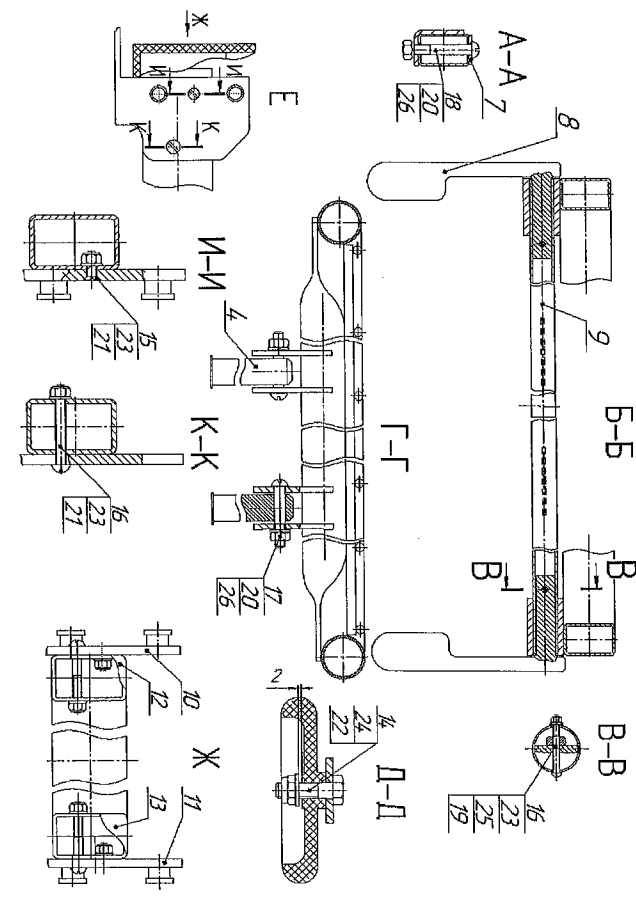
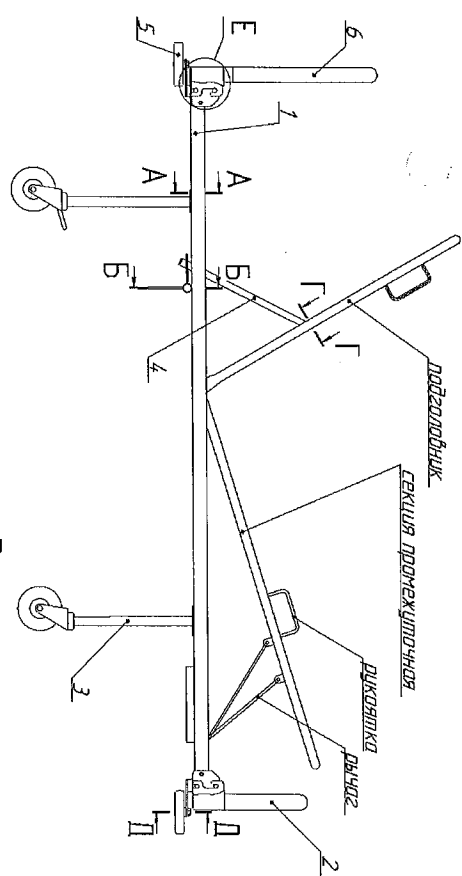


Рисунок 3

- 4.4 Установите и зафиксируйте кронштейны поз. 10 и поз. 11 на раме поз. 1 винтами поз. 15, поз. 16, шайбами поз. 23 и гайками поз. 21 (см. И-И, см. К-К);
- 4.5 Установите заглушки поз. 12 и поз. 13 на раме поз. 1 (см. Ж);
- 4.6 Затвор поз. 9 вставьте во втулки на раме поз. 1. Установите ручки в сборе поз. 8 в затвор поз. 9 с двух сторон закрепив винтами 16, шайбами поз. 23, 25 и гайками поз. 19 (см. Б-Б и В-В).
- 4.7 Стойки поз. 4 проденьте в ушки на затворе поз. 9 и закрепите на перемычке в спинной секции с помощью винтов поз. 17, шайб поз. 26, гаек поз. 20 (см. Г-Г).
- 4.8 Установите спинку поз.6 со стороны спинной секции, а спинку поз.2 с противоположной стороны. Спинка поз. 6 выше спинки поз. 2.
- 4.9 Закрепите амортизаторы поз.5 (см. Д-Д), используя болты поз. 14, гайки поз. 22, шайбы поз. 24.
- 4.10 Внимание! Перед эксплуатацией кровати проверьте затяжку болтов на колесах, при необходимости подтяните их до упора.

5 Использование изделия

5.1 Для неподвижной установки кровати необходимо застопорить колеса с помощью легкого нажатия носком туфли на стопорные педали. Для придания движения необходимо поднять стопорные педали.

5.2 Поднятие и опускание подголовника должно осуществляться обслуживающим персоналом следующим образом:

- для поднятия подголовника необходимо взяться рукой за рукоятку, находящуюся на подголовнике, поднять его вверх на необходимый угол;

- для опускания подголовника необходимо приподнять его одной рукой, взявшись за рукоятку, второй рукой опустить вниз ручку в сборе поз. 8, расположенную под рамой подголовника и опустить подголовник на раму. При этом подголовник нельзя бросать, а спокойно опустить на раму.

5.3 Дезинфекция матраца осуществляется воздушным методом в воздушном стерилизаторе (сухожаровом шкафу).

6 Меры безопасности

6.1 Перед каждым использованием необходимо проверить прочность фиксации составляющих во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям. **ВНИМАНИЕ!** При поднятии и опускании подголовника исключить попадание рук под подголовник во избежание травм.

6.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование кровати ненадлежащим образом может привести к ее повреждению и травмам пациента или персонала.

Примеры ненадлежащего использования:

- использование для целей, не относящихся к нормальной функции больницы кровати, предназначенной для интенсивной или обычной терапии,
- использование кровати в барокамере,
- размещение каких-либо предметов или оборудования на колесах или их использование в качестве опоры для человека,
- использование кровати с нагрузками, превышающими предельную,
- перемещение кровати, если два колеса заблокированы,
- использование кровати на улице или транспортировка пациентов в кровати в автомобиле,
- перемещение кровати по мягкому грунту или по не соответствующей поверхности,
- перемещение кровати по уклону, превышающему 10° (с пациентом или без пациента).

7 Хранение, транспортирование, утилизация

7.1 Кровать должна храниться в сухих, закрытых помещениях и должна быть защищена от механических повреждений.

7.2 Кровать транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

7.3 После истечения срока службы кровати и при невозможности ее дальнейшей эксплуатации, составные части кровати подлежат сдаче в «Утильсырьё» и «Втормет».

8 Гарантии изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации кроватей – 24 месяцев с момента реализации через торговую сеть, при условии соблюдения условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Срок службы кровати - 5 лет. Срок службы матраца – 2 месяца.

8.3 Юридический адрес изготовителя:

212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Грипина, 96

Тел.: (0222) 65-07-32, 65-07-40 Факс (0222) 65-07-41

Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: olsa_garden@tut.by



Открытое акционерное общество «Ольса»
Республика Беларусь

Руководство по эксплуатации ИЯУБ 23.19.00.000 РЭ
для кроватей медицинских ИЯУБ 23.19, -01 «Здоровье-1»

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для предоставления потребителю необходимой информации о предлагаемых изделиях, внешний вид которых приведен на рисунках 1, 2.

Кровати медицинские ИЯУБ 23.19, -01 «Здоровье-1» (далее по тексту - кровать) удобны и безопасны в эксплуатации при соблюдении требований данного руководства по эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право на незначительные конструктивные изменения, если это необходимо для совершенствования технологии и улучшения качества, без предварительного уведомления покупателя.

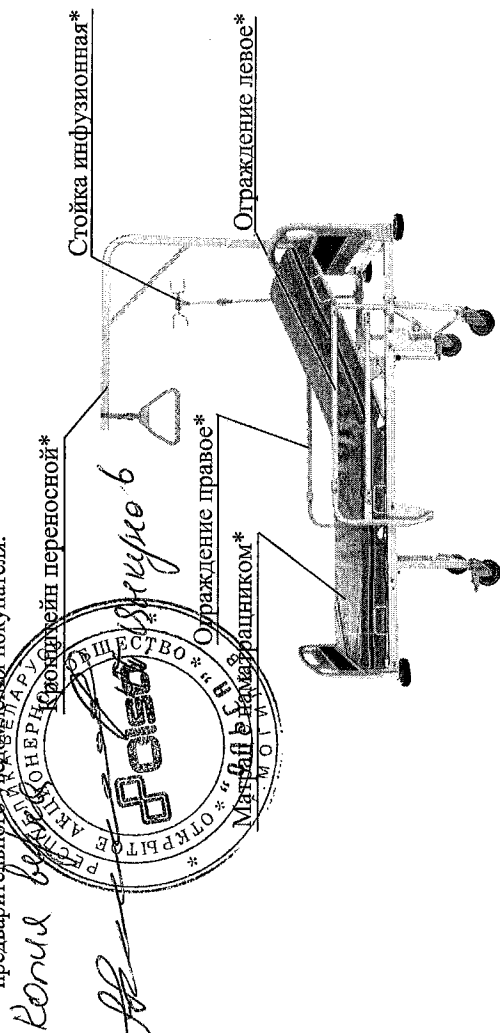


Рисунок 1 – Общий вид кровати ИЯУБ 23.19 «Здоровье-1»

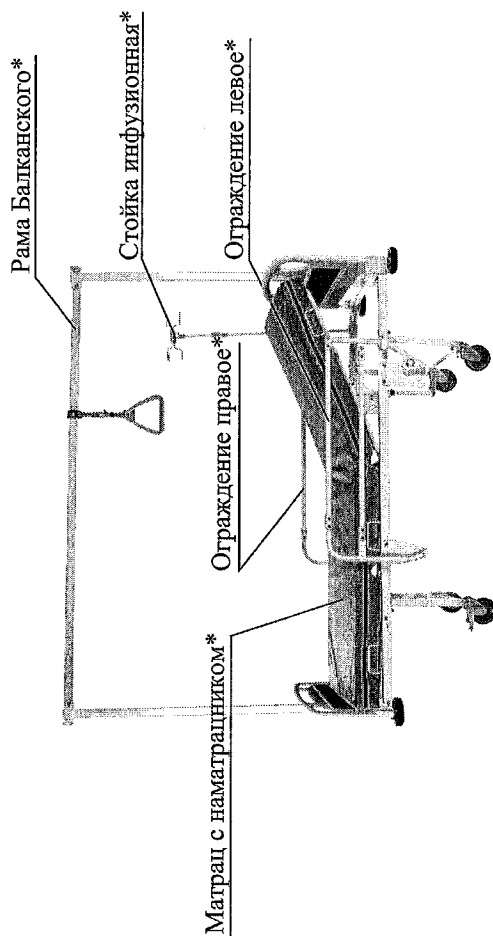


Рисунок 2 – Общий вид кровати ИЯУБ 23.19-01 «Здоровье-1»

1 Основные сведения об изделии
Кровати медицинские ИАУБ 23.19, -01 «Здоровье - 1» (с^м по тексту – кровать) предназначены для размещения на них больных при стационар^ном лечении в лечебных учреждениях и соответствует требованиям ГУ РБ 05894597.012-98.

2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные кровати приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование технической характеристики	Значение	
	ИАУБ 23.19 (рисунок 1)	ИАУБ 23.19-01 (рисунок 2)
Кровать, рассчитана на равномерно распределенную нагрузку, кг, не более	180	
Масса кровати, кг, не более	83	88
Габаритные размеры кровати (длина х ширина х высота) в полной комплектации, мм, не более	2226х1030х1672	2226х1030х1954
Габаритные размеры поверхности лежаания (длина х ширина), мм, не более	2000х870	
Высота от пола до поверхности лежаания (без матраца), мм, не более	545	
Угол наклона подголовника по отношению к раме	0° – 60°	
Транспортируемость - четыре колеса, два из них с тормозом. Диаметр колеса не более 125 мм.		

2.2 Перечень основных применяемых материалов для изготовления кровати: труба и проволока стальная, краска порошковая полиэфирная, ткани х/б и смешанные бытовые, пенополиуретан эластичный, клеенка медицинская.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки включает в себя:

1. Рама - 1 шт. 9. Затвор - 1 шт. 18. Винт М8х55 - 8 шт.
2. Спинка - 1 шт. 10. Кронштейн - 2 шт. 19. Гайка 6 - 2 шт.
3. Опора - 2 шт. 11. Кронштейн - 2 шт. 20. Гайка 8 - 10 шт.
4. Стойка - 2 шт. 12. Заглушка - 2 шт. 21. Гайка М6 (контргайка) - 8 шт.
5. Амортизатор - 4 шт. 13. Заглушка - 2 шт. 22. Гайка М10 (контргайка) - 4 шт.
6. Спинка - 1 шт. 14. Болт М10х35 - 4 шт. 23. Шайба 6 - 10 шт.
7. Пластина - 4 шт. 15. Винт М6х16 - 4 шт. 24. Шайба 10 - 4 шт.
8. Ручка в сборе - 2 шт. 16. Винт М6х35 - 6 шт. 25. Шайба 6 (пружинная) - 4 шт.
17. Винт М8х35 - 2 шт. 26. Шайба 8 (пружинная) - 10 шт.

Примечание:

1. Нумерация перечислений соответствует позициям на рисунке 3.
2. Комплектующие поз. 5, 7, 8, 10-26 упакованы в пакет.

3.2 Поставка составляющих, отмеченных «*» на рисунке 1 и рисунке 2, по требованию заказчика может не осуществляться либо, при необходимости, поставляться самостоятельно за отдельную плату. Комплектность, установка и крепление данных составляющих указана в соответствующих инструкциях по монтажу.

4 Подготовка изделия к использованию

- 4.1 Снимите упаковку, проверьте комплектность.
- 4.2 Расположите раму поз.1 поверхностью лежаания вниз.
- 4.3 Опоры с колесами поз. 3 закрепите на раме винтами поз.18, гайками поз.20 и пружинными шайбами поз.26, установив пластины поз.7 (см. А-А). Установите кровать на колеса.

Внимание! Опоры поз.3 устанавливать так, чтобы колеса с тормозом располагались по диагонали рамы.

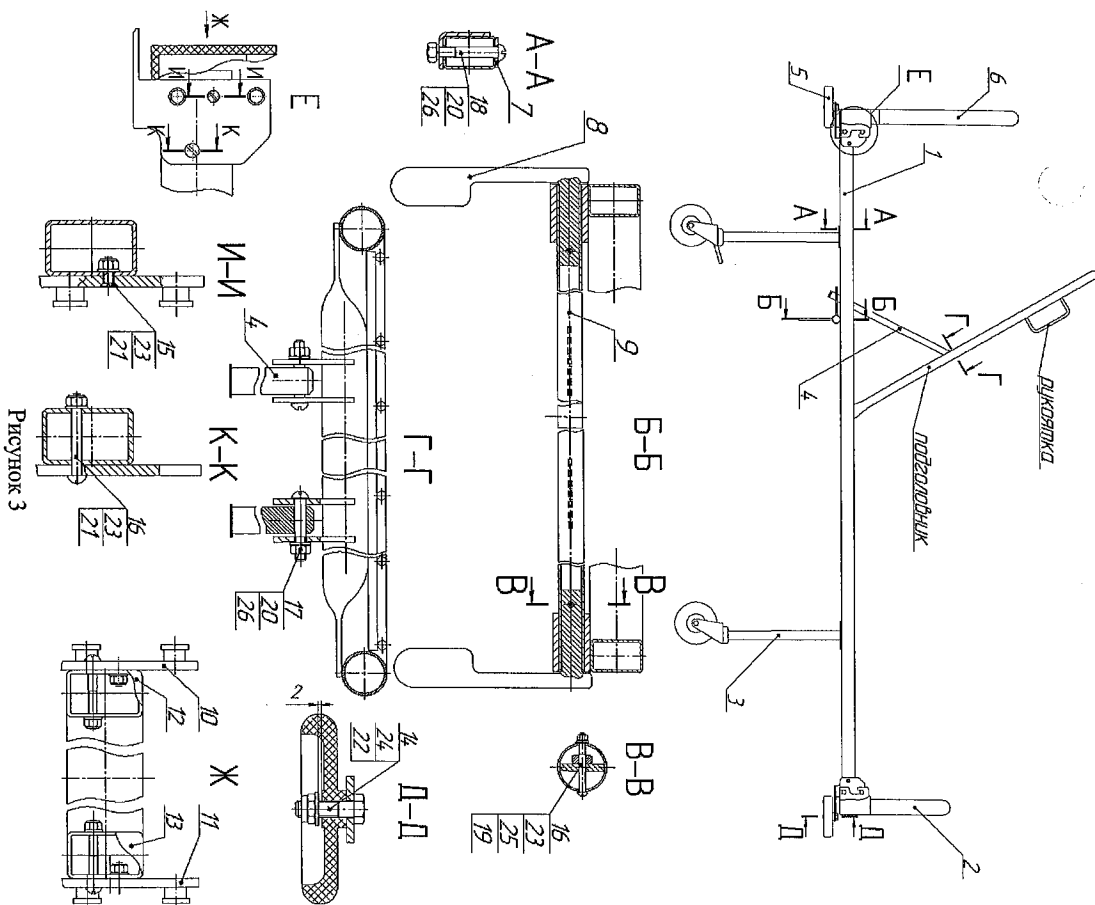


Рисунок 3

- 4.4 Установите и зафиксируйте кронштейны поз. 10 и поз. 11 на раме поз. 1 винтами поз. 15, поз. 16, шайбами поз. 23 и гайками поз. 21 (см. И-И, см. К-К);
- 4.5 Установите заглушки поз. 12 и поз. 13 на раме поз. 1 (см. Ж);
- 4.6 Затвор поз. 9 вставьте во втулки на раме поз. 1. Установите ручки в сборе поз. 8 в затвор поз. 9 с двух сторон закрепив винтами поз. 16, шайбами поз. 23, 25 и гайками поз. 19 (см. Б-Б и В-В).
- 4.7 Стойки поз. 4 проденьте в ушки на затворах поз. 9 и закрепите на перемычках в подготовленные и средней секции с помощью винтов поз. 17, шайб поз. 26, гаек поз. 20 (см. Г-Г).
- 4.8 Установите спинку поз. 6 со стороны подголовника, а спинку поз. 2 с противоположной стороны. Спинка поз. 6 выше спинки поз. 2.
- 4.9 Закрепите амортизаторы поз. 5 (см. Д-Д) с помощью болтов поз. 14, шайб поз. 24 и гаек поз. 22.

4.10 Внимание! Перед эксплуатацией кровати проверьте затяжку болтов на колесах, при необходимости подтяните их до упора.

5.1 Для неподвижной установки кровати необходимо застопорить колеса с помощью легкого нажатия носком туфли на стопорные педали. Для придания движения необходимо поднять стопорные педали.

для кроватей меоцинских ИЯУБ 16.19, -01 «Здоровье-3»

- 5.3 Дезинфекция матраца осуществляется воздушным методом в воздушном стерилизаторе (сухожаровом шкафу).

6.1 Перед каждым использованием необходимо проверить прочность фиксации составляющих во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям. **ВНИМАНИЕ!** При поднятии и опускании секций исключить попадание рук под секции во избежание травм.

Примеры ненадлежащего использования:

- 7 Хранение, транспортирование, утилизация

7.2 Кровать транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

3. Гарантии изготовителя


8.2 Срок службы кровати - 5 лет. Срок службы намотращика - 2 месяца.

8.3 Юридический адрес изготовителя:


212030 Республика Беларусь г. Могилев, ул. Грипина, 96

Тел.: (0222) 65-07-32, 65-07-40 Факс (0222) 65-07-41

Сайт предприятия www.olsa.by E-mail: olsa_garden@tut.by

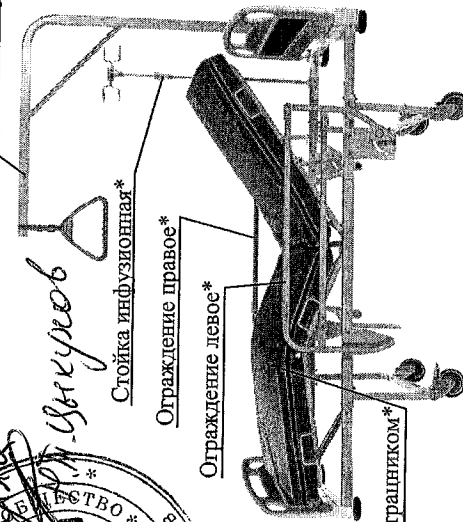

Матрац с намотањиком*

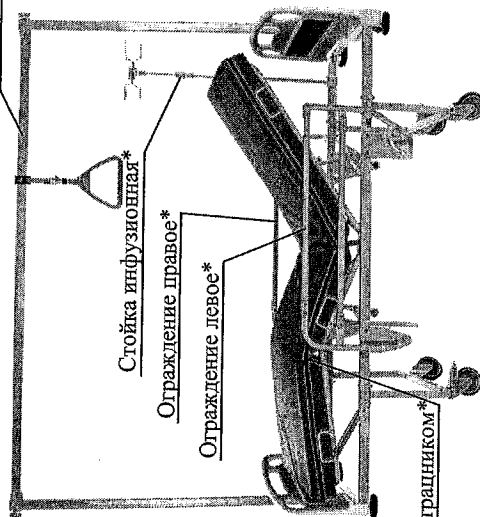

Матрац с намотрадником*

Рисунок 1 – Общий вид кровати ИЯУБ 16.19 «Здоровье-3»

Рисунок 2 – Общий вид кровати ИЯУБ 16.19-01 «Здоровье-3»

1 Основные сведения об изделии
Кровати медицинские ИАУБ 16.19, -01 «Здоровье - 3» (далее по тексту – кровать) предназначены для размещения на ней больных при стационарном лечении в лечебных учреждениях и соответствует требованиям ТУ РБ 05894597.012-98.

2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные кровати приведены в таблице 1.

Наименование технической характеристики	Значение	
	ИАУБ 16.19 (рисунок 1)	ИАУБ 16.19-01 (рисунок 2)
Кровать рассчитана на равномерно распределенную нагрузку, кг, не более	93	180
Масса кровати, кг, не более	93	97
Габаритные размеры кровати (длина x ширина x высота) в полной комплектации, мм, не более	2226x1030x1672	2226x1030x1954
Габаритные размеры поверхности лежания (длина x ширина), мм, не более	2000x870	545
Высота от пола до поверхности лежания (без матраца), мм, не более	545	545
- угол наклона подголовника по отношению к раме	0° – 60°	0° – 60°
- угол наклона секции средней по отношению к раме	0° – 55°	0° – 55°
- угол наклона секции ножной по отношению к раме	0° – 40°	0° – 40°
Транспортная масса – четыре колеса, два из них с тормозом. Диаметр колеса не более 125 мм		

2.2 Перечень основных применяемых материалов для изготовления кровати: труба и проволока стальная, краска порошковая полиэфирная, ткани х/б и смешанные бытовые, пенополиуретан эластичный, клеенка медицинская.

3 Комплектность


3.1 Комплект поставки включает в себя:

1. Рама - 1 шт.
2. Спинка - 1 шт.
3. Опора (с колесами) - 2 шт.
4. Стойка - 4 шт.
5. Амортизатор - 4 шт.
6. Спинка - 1 шт.
7. Пластина - 4 шт.
8. Ручка в сборе - 4 шт.
9. Завтор - 2 шт.
10. Кронштейн - 2 шт.
11. Кронштейн - 2 шт.
12. Завтор - 2 шт.
13. Завтор - 2 шт.
14. Болт М10х35 - 4 шт.
15. Болт М6х16 - 4 шт.
16. Винт М6х35 - 8 шт.
17. Винт М8х35 - 4 шт.
18. Винт М8х55 - 8 шт.
19. Гайка 6 - 4 шт.
20. Гайка 8 - 12 шт.
21. Гайка М6 (контргайка) - 8 шт.
22. Гайка М10 (контргайка) - 4 шт.
23. Шайба 6 - 12 шт.
24. Шайба 10 - 4 шт.
25. Шайба 6 (пружинная) - 4 шт.
26. Шайба 8 (пружинная) - 12 шт.

Примечание:

1. Нумерация перечислений соответствует позициям на рисунке 3.
2. Комплектующие поз. 5, 7, 8, 10-26 упакованы в пакеты.
- 3.2 Поставка составляющих, отмеченных «*» на рисунке 1 и рисунке 2, по требованию заказчика может не осуществляться либо, при необходимости, поставляться самостоятельно за отдельную плату. Комплектность, установка и крепление данных составляющих указана в соответствующих инструкциях по монтажу.

- 4 Подготовка изделия к использованию
- 4.1 Снимите упаковку, проверьте комплектность.
- 4.2 Расположите раму поз.1 поверхностью лежания вниз.
- 4.3 Опоры с колесами поз. 3 закрепите на раме винтами поз.18, гайками поз.20 и пружинными шайбами поз.26, установив пластины поз.7 (см. А-А). Установите кровать на колеса.
- Внимание! Опоры поз.3 устанавливать так, чтобы колеса с тормозом располагались по диагонали рамы.**

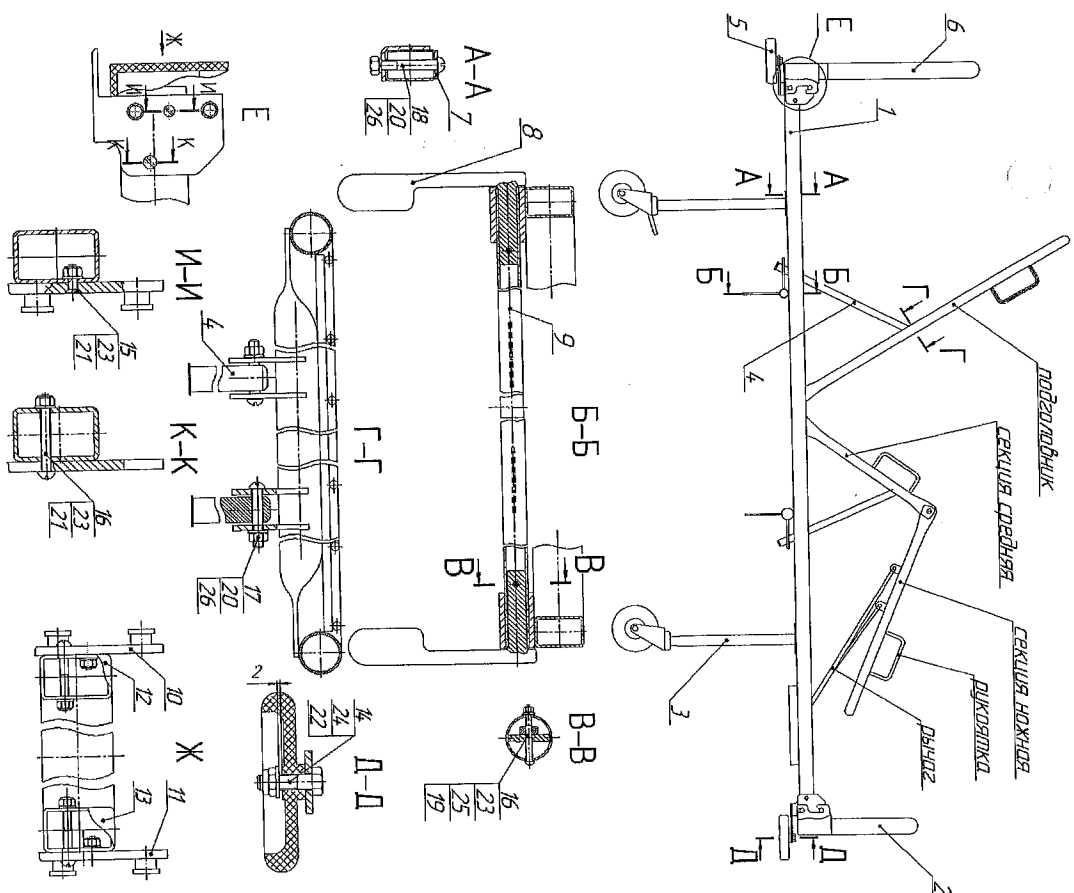

4.4 Установите и зафиксируйте кронштейны поз. 10 и поз. 11 на раме поз. 1 винтами поз. 15, поз. 16, шайбами поз. 23 и гайками поз. 21 (см. И-И, см. К-К);

4.5 Установите завторки поз. 12 и поз. 13 на раме поз. 1 (см. Ж);

4.6 Завторы поз. 9 вставьте во втулки на раме поз. 1. Установите ручки в сборе поз. 8 в завторы поз. 9 с двух сторон закрепив винтами поз. 16, шайбами поз. 23, 25 и гайками поз. 19 (см. Б-Б и В-В).

4.7 Стойки поз. 4 проденьте в ушки на завторах поз. 9 и закрепите на перемычках в подголовнике и средней секции с помощью винтов поз. 17, шайб поз. 26, гаек поз. 20 (см. Г-Г).

4.8 Установите спинку поз.6 со стороны подголовника, а спинку поз.2 с противоположной стороны. Спинка поз. 6 выше спинки поз. 2.

4.9 Закрепите амортизаторы поз.5 (см. Д-Д) с помощью болтов поз.14, шайб поз.24 и гаек поз. 22.

4.10 **Внимание! Перед эксплуатацией кровати проверьте затяжку болтов на колесах, при необходимости подтяните их до упора.**