



Инструкция по применению зеркала гинекологического по Куско №№ 1/S, 2/M, 3/L

Зеркало гинекологическое по Куско – стерильное одноразовое двустворчатое зеркало. Зеркало состоит из верхней и нижней створок, соединенных шарнирно, и поворотного фиксатора. Фиксация раскрытия створок зеркала обеспечивается поворотом фиксатора на 90°. Зеркало выпускается в трех исполнениях с разной шириной створок из биологически инертного пластика.

зеркало гинекологическое по Куско № 1/S	ширина створок – 20 мм
зеркало гинекологическое по Куско № 2/M	ширина створок – 30 мм
зеркало гинекологическое по Куско № 3/L	ширина створок – 34 мм

Показания: зеркало предназначено для расширения влагалища при осмотре слизистой оболочки влагалища, шейки матки и для обеспечения доступа к слизистой влагалища и шейки матки при выполнении различных лечебно-диагностических манипуляций.

Противопоказания: не имеется.

Предостережения:

- недопустимо повторное применение инструмента. Инструмент одноразового использования и не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту;
- недопустимо применение инструмента при нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки;
- недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на этикетке.

Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки.

Применять зеркало гинекологическое по Куско необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

Зеркало гинекологическое по Куско должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

Методика применения

При использовании зеркала гинекологического по Куско требуется соблюдение общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку и извлечь зеркало.
2. Зеркало с сомкнутыми створками (рис. 1) в сагиттальной плоскости (при этом рукоятка инструмента обращена к левому или правому бедру пациентки) ввести во влагалище, затем развернуть створки во фронтальную плоскость (рукоятка инструмента обращена вниз или вверх).
3. Сжимая рукоятку инструмента, развести створки зеркала. Фиксацию створок в разведенном состоянии выполнить поворотом фиксатора на 90° (рис. 2).
4. При извлечении инструмента последовательность действий обратная (развернуть фиксатор в исходное положение, сомкнуть створки зеркала, развернуть створки зеркала в сагиттальную плоскость, извлечь инструмент).
5. Использованное зеркало после дезинфекции подлежит утилизации.

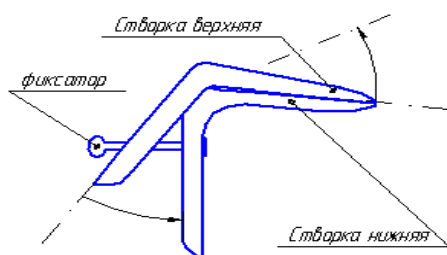


Рисунок 1

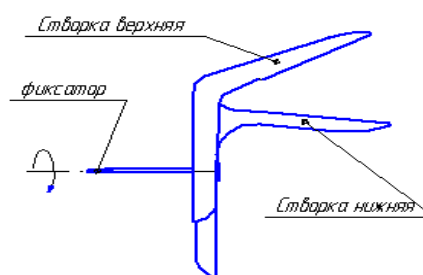


Рисунок 2



Инструкция по применению зеркала гинекологического по Куско №№ 1/S Premium, 2/M Premium, 3/L Premium

Зеркало гинекологическое по Куско – стерильное одноразовое двустворчатое зеркало. Зеркало состоит из верхней и нижней створок, соединенных шарнирно, и поворотного фиксатора. Фиксация раскрытия створок зеркала обеспечивается поворотом фиксатора на 90°. Зеркало выпускается в трех исполнениях с разной шириной створок.

Выпускаются зеркала трех размеров (в зависимости от ширины створок):

зеркало гинекологическое по Куско № 1/S Premium	ширина створок – 20 мм
зеркало гинекологическое по Куско № 2/M Premium	ширина створок – 30 мм
зеркало гинекологическое по Куско № 3/L Premium	ширина створок – 34 мм

Створка зеркала оснащена двумя индикаторами (рис. 1, 2). Активный индикатор (бромкрезоловый зеленый) нанесен на гидрофильную основу и предназначен для оценки уровня pH влагалищной среды (окраска индикатора синяя). Контрольный индикатор не изменяет свою окраску (желая) в зависимости от уровня pH влагалищной среды и предназначен для оценки изменения окраски активного индикатора.

Уровень pH среды влагалища оценивается при визуальном осмотре индикаторов непосредственно после использования зеркала. Если после использования зеркала окраска активного и контрольного индикаторов совпадает (активный – желтый, контрольный – желтый), то pH влагалища ниже 4,5. Если после использования зеркала окраска активного и контрольного индикаторов различны (активный – зеленый или синий, контрольный – желтый), то pH влагалища выше 4,5.

Показания: зеркало предназначено для расширения влагалища при осмотре слизистой оболочки влагалища, шейки матки и для обеспечения доступа к слизистой влагалища и шейки матки при выполнении различных лечебно-диагностических манипуляций, а также для оценки pH среды влагалища (уровень pH ниже 4,5/уровень pH выше 4,5).

Противопоказания: не имеется.

Предостережения:

- недопустимо повторное применение инструмента. Инструмент одноразового использования и не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту;
- недопустимо применение инструмента при нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки;
- недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на этикетке.

Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки.

Применять зеркало гинекологическое по Куско необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

Зеркало гинекологическое по Куско должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

Методика применения:

При использовании зеркала гинекологического по Куско требуется соблюдение правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку и извлечь зеркало.
2. Зеркало с сомкнутыми створками (рис. 1) в сагитальной плоскости (при этом рукоятка инструмента обращена к левому или правому бедру пациентки) ввести во влагалище, за-



тем развернуть створки во фронтальную плоскость (рукоятка инструмента обращена вниз или вверх).

3. Сжимая рукоятку инструмента, развести створки зеркала. Фиксацию створок в разведенном состоянии выполнить поворотом фиксатора на 90° (рис. 2).
4. При извлечении инструмента последовательность действий обратная (развернуть фиксатор в исходное положение, сомкнуть створки зеркала, развернуть створки зеркала в сагиттальную плоскость, извлечь инструмент).
5. После извлечения зеркала визуально сравнить цвет активного индикатора с цветом контрольного индикатора.

Окраска индикатора	Цвет активного индикатора совпал с цветом контрольного индикатора	Цвет активного индикатора отличается от цвета контрольного индикатора
Уровень кислотности влагалища	ниже 4,5	4,5 и более

6. Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации.

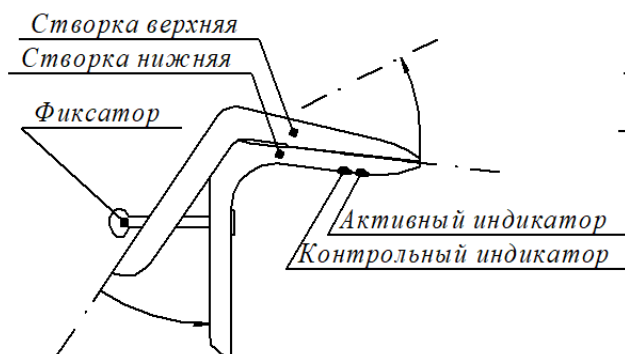


Рисунок 1

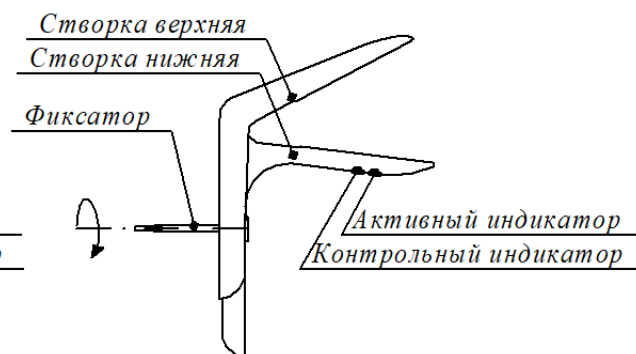


Рисунок 2



Инструкция по применению зеркала гинекологического по Куско «Юнона» №№ 1/S, 2/M, 3/L

Зеркало гинекологическое по Куско – стерильное одноразовое двустворчатое зеркало. Зеркало состоит из верхней и нижней створок, соединенных шарнирно, и поворотного фиксатора. Фиксация раскрытия створок зеркала обеспечивается поворотом фиксатора на 90°. Зеркало выпускается в трех исполнениях с разной шириной створок из биологически инертного пластика.

зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 1/S	ширина створок – 20 мм
зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 2/M	ширина створок – 26 мм
зеркало гинекологическое по Куско «Юнона» № 3/L	ширина створок – 32 мм

Показания: зеркало предназначено для расширения влагалища при осмотре слизистой оболочки влагалища, шейки матки и для обеспечения доступа к слизистой влагалища и шейки матки при выполнении различных лечебно-диагностических манипуляций.

Противопоказания: не имеется.

Предостережения: недопустимо повторное применение инструмента. Инструмент одноразового использования и не подлежит техническому обслуживанию и текущему ремонту.

Недопустимо применение инструмента при нарушении целостности стерилизационной (конечной) упаковки.

Недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на этикетке.

Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки.

Применять зеркало гинекологическое по Куско необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки.

Зеркало гинекологическое по Куско должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

Методика применения

При использовании зеркала гинекологического по Куско требуется соблюдение общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения.

1. Вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку и извлечь зеркало.
2. Зеркало с сомкнутыми створками (рис. 1) в сагиттальной плоскости (при этом рукоятка инструмента обращена к левому или правому бедру пациентки) ввести во влагалище, затем развернуть створки во фронтальную плоскость (рукоятка инструмента обращена вниз или вверх).
3. Сжимая рукоятку инструмента, развести створки зеркала. Фиксацию створок в разведенном состоянии выполнить поворотом фиксатора на 90° по часовой стрелке (рис. 2).
4. При извлечении инструмента последовательность действий обратная (развернуть фиксатор в исходное положение, сомкнуть створки зеркала, развернуть створки зеркала в сагиттальную плоскость, извлечь инструмент).
5. Использованное зеркало после дезинфекции подлежит утилизации.



Рисунок 1

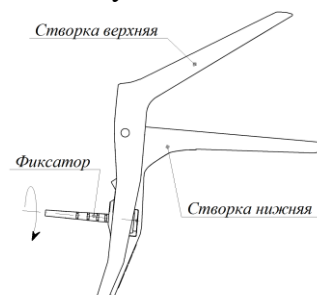


Рисунок 2