

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за поясами радикулитными

1 Пояса радикулитные (далее пояса) предназначены для лечения остеохондроза, предотвращения или коррекции деформаций позвоночника, снятия болевых ощущений при сколиозах и радикулитах, фиксации позвоночника после операций, повреждения и других патологических состояниях, имеющие усиленные части в виде жестких вставок или полос различной ширины из металла, пластмассы и др.


2 Пояс необходимо надевать на нижнее белье. Пояс нужно застегнуть текстильную застежку «контакт», затем застегнуть ремень-подхват на текстильную застежку «контакт».

3 Режим носки пояса определяется врачом ортопедом - травматологом. Первым делом пояс нужно снимать.

4 Сняв пояс, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Чтобы сохранить внешний вид пояса необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40° С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- перед стиркой из пояса следует вынимать планшетки (при наличии), меховую подкладку (при наличии);
- после стирки пояс хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- пояс выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- не подвергать глажению;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- после высыхания в пояс вставить планшетки (при наличии), пристегнуть меховую подкладку (при наличии).

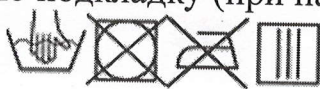

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.

Гессерский В. Ю. Наминов директор

