

Памятка – инструкция по уходу и эксплуатации за поясами радикулитными

1 Пояса радикулитные (далее пояса) предназначены для лечения остеохондроза, предотвращения или коррекции деформаций позвоночника, снятия болевых ощущений при сколиозах и радикулитах, фиксации позвоночника после операции, повреждения и других патологических состояниях, имеющие усиленные части в виде жестких вставок или полос различной ширины из металла, пластмассы и др.

2 Пояс необходимо надевать на нижнее белье. Пояс нужно застегнуть на текстильную застежку «контакт», затем застегнуть ремень-подхват на текстильную застежку «контакт».

3 Режим носки пояса определяется врачом ортопедом - травматологом. Переносим пояс нужно снимать.

4 Сняв пояс, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом, вытирать насухо полотенцем.

5 Чтобы сохранить внешний вид пояса необходимо:

- стирку производить только ручную при температуре не выше 40° С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;

- перед стиркой из пояса следует вынимать планшеты (при наличии), меховую подкладку (при наличии);


- после стирки пояс хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;

- пояс выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;

- не подвергать глажению;

- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;

- после высыхания в пояс вставить планшеты (при наличии), пристегнуть меховую подкладку (при наличии).

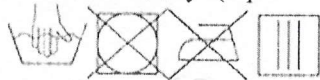

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно - ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал,
Республика Беларусь, 246034 г. Гомель, ул. Владимирова 8А.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефоны для справок: регистратура Гомельского филиала (0232) 517223; отдел маркетинга и сбыта г. Минск (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

E-mail: minsk@bpovc.by, gomel@bpovc.by

Генеральный директор
В. В. Мамонтов

