

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за поясами радикулитными

1 Пояса радикулитные (далее пояса) предназначены для лечения остеохондрозов, предотвращения или коррекции деформаций позвоночника, снятия болевых ощущений при сколиозах и радикулитах, фиксации позвоночника после операции, повреждения и других патологических состояниях, имеющие усиленные части в виде жестких вставок или полос различной ширины из металла, пластмассы и др.


2 Пояс необходимо надевать на нижнее белье. Пояс нужно застегнуть на текстильную застежку «контакт», затем застегнуть ремень-подхват на текстильную застежку «контакт».

3 Режим носки пояса определяется врачом ортопедом - травматологом. Перед сном пояс нужно снимать.

4 Сняв пояс, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

5 Чтобы сохранить внешний вид пояса необходимо:

- стирку производить только ручную при температуре не выше 40° С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- перед стиркой из пояса следует вынимать планшетки (при наличии), меховую подкладку (при наличии);
- после стирки пояс хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- пояс выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- не подвергать глажению;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- после высыхания в пояс вставить планшетки (при наличии), пристегнуть меховую подкладку (при наличии).

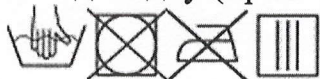

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр» Витебский филиал,

Республика Беларусь 210033 г. Витебск, ул. Лазо 113.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем. Телефоны для справок регистратура Витебского филиала (021) 671412; отдел маркетинга и сбыта г. Минск (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

E-mail: minsk@bpovc.by, www.bpovc-vitebsk.by

*Генеральный директор
В. А. Наливко*

