



BOSTON
КОМПАНИИ
ИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТАВРАЦИИ ЗУБОВ

Регистрация МИ в РФ
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2a

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕН-

МП Медицинское изделие

BOSTON – это полимерный стоматологический материал первой группы второго класса, соответствующий требованиям европейской нормы ISO 4049. Композит **BOSTON** отверждается светом синего цвета (400-500 нм). На рентгеновских снимках **BOSTON** соответствует эмали.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Реставрация дефектов IV классов по базису
- Выполнение постоянных ортопедических реставраций на основе полиамидного и стекловолокну коронки, эндокоронки, мосты, вкладки/накладки
- Изготовление временных коронок и мостов
- Постоянное шинирование податных зубов (внутренний и внешний слои)
- Временное шинирование зубов (внешний слой)
- Ремонт композитных и акриловых коронок и мостов.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. В случае реставрации полостей выбрать подходящий оттенок BOSTON перед началом процедуры, когда зуб ещё натурально увлажнён.

2. Поверхность зубов очистить и проработать в соответствии с правилами,

3. Протравить в местах, где это необходимо, прополоскать и осторожно осушить.

4. Использовать выбранную адресную систему. Композит BOSTON сочетается со всеми стандартными светопропускаемыми адресными системами на основе диметакрилатных смол. Нанесение адрески должно происходить в соответствии с рекомендациями производителя.

5. Наносить композит тонкими слоями и засвечивать в соответствии с Таблицей полимеризации. По необходимости отполировать.

Таблица полимеризации

Лампа	Композит BOSTON	ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЗАВИСИТ ОТ ГЛУБИНЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ	
		20 см	30 см
Halogen/LED (500-800 мВт/см ²)	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2	2,0 мм	2,5 мм
	A3.5, OA2, OA3, D3	2,0 мм	2,2 мм
	T	2,8 мм	3,0 мм
LED (>800 мВт/см ²)	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2	2,5 мм	3,0 мм
	A3.5, OA2, OA3, D3	2,0 мм	2,5 мм
	T	3,0 мм	3,5 мм

СОСТАВ

Смесь диметакрилатных олиго (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, Bis-EMA), минеральные наполнители (78% веса), стекло Al-B-V-Si, стекло Ba-Al-B-Si, пироогенный оксид кремния, пигменты, система фототвердиции (CQ-DMAEMA). Величина частиц неорганических наполнителей составляет от 20 до 2,0 мкм.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять композит BOSTON при наличии у пациента чувствительности к составляющим материала.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты не обнаружены, однако у людей с особенной чувствительностью могут проявиться симптомы аллергии. В случае возникновения аллергической реакции перестать использовать продукт. В случае образования поздней реакции заменить пластырь.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Не использовать композит, когда необходима абсолютная изоляция от слюны, влаги и крови. Загрязнения мешают полимеризации, что приводит к уменьшению механической прочности композита и снижению устойчивости реставрации. Не использовать в непосредственном контакте с материалами, содержащими фенольные соединения, в частности эвенол и тимол. Эти соединения могут препятствовать полимеризации композита BONDON.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избавить контакта непотерянного композита с кожей, ногтями тканями полости рта и глазами. В случае контакта промывать большим количеством воды. При ущемлении самоустраниться обратиться к врачу. Чтобы минимизировать риск контакта следует носить такие средства защиты, как перчатки, маски и защитные очки.

В случае попадания продукта в дыхательную систему немедленно обратиться к врачу.

Рекомендуется использовать коффердам с целью изоляции процедурного поля и защиты пациента.

Следует отметить, что при выборе технологии полимеризации шпала, особенно в труднодоступных местах, следует учитывать, что время полимеризации слоя композита при полимеризации может быть причиной возникновения деформаций и растрескивания материала. В случае затвердевания материала поверхность затвердевшего слоя следует осторожно прокатывать поперечной и поперечной. Полимеризация, в соответствии с Таблицей полимеризации. В случае неполной полимеризации следует использовать следующий слой, позволяющий полимеризовать.

Следует избегать загрязнения поверхности шприцов (риск перекрёстных инфекций).

Во избежание случайной полимеризации композита BOSTON в аппликаторе, необходимо всегда возвращать назад поршень после использования.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте. Хранить в защищённом от света месте. Не перегревать. Не замораживать. Использовать в соответствии с рекомендациями производителя. Не использовать после окончания срока годности.


ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже 30°C . В случае хранения при пониженной температуре, перед повторным применением материала следует дождаться, пока он не приобретет комнатную температуру. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

Препарат предназначен только для использования врачами-стоматологами, зубными техниками и гигиенистами.

ГАРАНТИЯ

ARKONA обменивает некачественные стоматологические материалы, приобретенные покупателями, или возвращает их стоимости. Компания не отвечает за ущерб, вызванный неправильным или не соответствующим инструкции применением препарата.

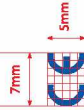

Дата последней актуализации инструкции 30.08.2021



ARKONA
Laboratorium Farmakologii
Grzegorz Kalbarczyk N
21-025 Niemce, Pol
www.arkonafarm.pl

BOSTON

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И РЕСТАВРАЦИИ ЗУБОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

IMD Медицинское изделие класса 2a

Композит BOSTON – это полимерный стоматологический материал первой группы второго класса, соответствующий требованиям европейской нормы ISO 4049. Композит BOSTON отверждается вследствие свободнорадикальной полимеризации, активируемой видимым светом синего цвета (400-500 нм). На рентгеновских снимках BOSTON даёт контраст эквивалентный примерно 5 мм алюминия (1 мм алюминия соответствует дентину, а 2 мм алюминия соответствует эмали).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Реставрация дефектов IV классов по Блэку

• Выполнение постоянных ортопедических реставраций на основе полиамидного, полиэтиленового и стекловолоконного коронки, эндокоронки, мосты, вкладки/накладки

- Изготовление временных коронок и мостов

- Постоянное шинирование подвижных зубов (внутренний и внешний слой)

- Временное шинирование зубов (внешний слой)

- Ремонт композитных и акриловых коронок и мостов.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЗОВАНИЯ

1. В случае реставрации полостей выбрать породаций оттенок с палетки цветов BOSTON перед началом процедуры, когда зуб ещё натурально увлажнён.
2. Поверхность зубов очистить и протравить в соответствии с правилами.
3. Протравить в местах, где это необходимо, прополоскать и осторожно осушить.
4. Использовать выбранную адгезивную систему. Композит BOSTON сочетается со всеми стандартными светоотверждаемыми адгезивными системами на основе диметакрилатных смол. Нанесение адгезива должно происходить в соответствии с рекомендациями производителя.
5. Наносить композит тонкими слоями и зачищать в соответствии с Таблицей полимеризации. По необходимости отполировать.

Таблица полимеризации

Лампа	Композит BOSTON	ВРЕМЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЗАВИСИТ ОТ ГЛУБИНЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ	
		20 c	30 c
Halogen/LED (500-800 мВт/см²)	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2	2,0 мм	2,5 мм
	A3.5, OA2, OA3, D3	2,0 мм	2,2 мм
	T	2,8 мм	3,0 мм
LED (>800 мВт/см²)	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2	2,5 мм	3,0 мм
	A3.5, OA2, OA3, D3	2,0 мм	2,5 мм
	T	3,0 мм	3,5 мм



ARKONA

СОСТАВ

Смесь диметакрилатных смол (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, Bis-EMA), минеральные наполнители (78% веса), стекло Al-Ba-F-Si, пироогенный диоксид титана, пигменты, система фотинициации (CQ-DMAEMA). Величина частиц неорганических наполнителей составляет от 20 нм до 2,0 мкм.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять композит BOSTON при наличии у пациента чувствительности к составляющим материала.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты не обнаружены, однако у людей с особенной чувствительностью могут проявиться симптомы аллергии. В случае возникновения аллергической реакции перестать использовать продукт. В случае обнаружения поздней реакции заменить пломбу.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Не использовать композит, когда невозможна абсолютная изоляция от слюны, влаги и крови. Загрязнения мешают полимеризации, что приводит к уменьшению механической прочности композита и снижению устойчивости реставрации. Не использовать в непосредственном контакте с материалами, содержащими фенольные соединения, в частности эвгенол и тимол. Эти соединения могут претерпевать полимеризацию композита BOSTON.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать контакта неполимеризованного композита с кожей, слизистыми тканями полости рта и глазами. В случае контакта промыть большим количеством воды. При ухудшении самочувствия обратиться к врачу. Чтобы минимизировать риск контакта следует носить такие средства защиты, как перчатки, маска и защитные очки.

В случае попадания продукта в дыхательную систему немедленно обратиться к врачу.

Рекомендуется использовать коэффициент с целью изоляции процентного пола и защиты пациента.

Следует позаботиться о правильном засвечивании полимеризационной лампой, особенно в труднодоступных местах. Убедиться, что во время полимеризации целый слой композита освещен светом. Не до конца полимеризованный композит может стать причиной возникновения аллергической реакции у пациента. В случае загрязнения неполимеризованного композита следует удалить загрязненный слой материала. В случае загрязнения или механического повреждения засвеченного слоя следует осторожно протравить поверхность и покрыть эвгенолом. Полимеризовать в соответствии с Таблицей полимеризации. В случае неполной полимеризации удалить неправильно засвеченный слой и положить следующий слой, правильно его полимеризуя.

Следует избегать загрязнения поверхности шпатель (риск перекрестных инфекций).

Для избежания случайной полимеризации композита BOSTON в аппликаторе, необходимо всегда возвращать назад поршень шпатель после использования.

Δ ПРЕДОСТОРОЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте. Хранить в защищенном от света месте. Не перегревать. Не замораживать. Использовать в соответствии с рекомендациями производителя. Не использовать после окончания срока годности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре ниже 30°С. В случае хранения при пониженной температуре, перед повторным применением материала следует дождаться, пока он не приобретет комнатную температуру. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

Препарат предназначен только для использования врачами-стоматологами, зубными техниками и гигиенистами.

ГАРАНТИЯ

ARKONA обменивает некачественные стоматологические материалы, приобретенные покупателем, или возвращает их стоимость. Компания не отвечает за ущерб, вызванный неправильным или не соответствующим инструкции применением препарата.

Дата последней актуализации инструкции 30.08.2021



BOSTON GLAZE

ГЛАЗУРЬ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ



ARKONA

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Глазурь BOSTON GLAZE предназначена для получения гладкой и блестящей поверхности всех работ, выполненных из композитов светового и химического отверждения, а также стеклоиономеров, таких как пломбы, вкладки/накладки, коронки, мосты и шины для стабилизации зубов. Особенно рекомендуется использование в качестве последнего слоя реставраций, выполненных из постоянных пломбировочных материалов.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Подготовка поверхности для нанесения BOSTON GLAZE не требует использования адгезивной системы.
2. Очистить и осушить поверхность, предназначенную для покрытия глазурью. Если поверхность сильно загрязнена, применить протравочный гель ETCHMASTER. Применение глазури для композитов не требует предварительной полировки, BOSTON GLAZE даёт возможность получения гладкой и блестящей поверхности без механического сглаживания.
3. BOSTON GLAZE может иметь любую толщину, однако нанесение слоя более 0,5 мм может повлиять на цвет реставрации (она может пожелтеть).
4. Засвечивать согласно таблице полимеризации.

ТАБЛИЦА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ:

Лампа	Время засвечивания
Halogen/LED (500-800 мВт/см ²)	40 с
LED (>800 мВт/см ²)	30 с

СОСТАВ

Смесь диметакрилатных смол (BisGMA, BisEMA, HEMA) с добавлением катализаторов, ингибиторов, системы фотоинициаторов (CQ : DMAEMA). BOSTON GLAZE отверждается вследствие свободнорадикальной полимеризации, активизируемой видимым светом синего цвета (400-500 нм).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять глазури BOSTON GLAZE при наличии у пациента чувствительности к составляющим материала.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты не обнаружены, однако у людей с особенной чувствительностью могут проявиться симптомы аллергии. В случае возникновения аллергической реакции перестать использовать продукт. В случае обнаружения поздней реакции заменить пломбу.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Не применять BOSTON GLAZE в случае, если невозможно тщательно высушить рабочую полость. Загрязнения мешают полимеризации.

Не использовать в непосредственном контакте с материалами, содержащими фенольные соединения, в частности эвгенол и тимол. Эти соединения могут препятствовать полимеризации глазури BOSTON GLAZE.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать контакта неполимеризованного материала с кожей, мягкими тканями полости рта и глазами. В случае контакта промыть большим количеством воды. При ухудшении самочувствия обратиться к врачу. Чтобы минимизировать риск контакта следует носить такие средства защиты, как перчатки, маски и защитные очки.

В случае попадания продукта в дыхательную систему немедленно обратиться к врачу.

Рекомендуется использовать коффердам с целью изоляции процедурного поля и защиты пациента.

Следует позаботиться о правильном засвечивании полимеризационной лампой, особенно в труднодоступных местах. Убедиться, что во время полимеризации целый слой глазури охвачен светом. Не до конца полимеризованная глазурь может стать причиной возникновения аллергической реакции у пациента.

В случае загрязнения неполимеризованной BOSTON GLAZE следует удалить загрязнённый слой материала и положить следующий слой, правильно его полимеризуя.

Следует избегать загрязнения поверхности бутылки и крышки (риск перекрёстных инфекций).

Во избежание случайной полимеризации следует закрывать упаковку сразу после использования препарата.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте. Хранить в защищённом от света месте. Не перегревать. Не замораживать. Использовать в соответствии с рекомендациями производителя. Не использовать после окончания срока годности.

ХРАНИЕНИЕ

Хранить препарат при температуре ниже 25°C. Хранить в защищённом от света месте.

Препарат предназначен только для использования врачами-стоматологами, зубными техниками и гигиенистами.

ГАРАНТИЯ

ARKONA обменивает некачественные стоматологические материалы, приобретённые покупателем, или возвращает их стоимость. Компания не отвечает за ущерб, вызванный неправильным или не соответствующим инструкции применением препарата.


Дата последней актуализации инструкции: с 20.08.2021



ARKONA

ARKONA

Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Grzegorz Kolbarczyk Nisutów 99C,
21-025 Niemce, Poland, Сделано в Польше,
www.arkonadent.ru

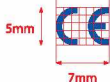

ГУСЕНИЦА

ВОЛОКНО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ
СВЕТОТВЕРЖДАЕМОЕ ФОРМИРОВАННОЕ




ARKONA

ГУСЕНИЦА – это медицинское стоматологическое изделие для использования во всех композитных реставрациях, в которых необходима основа на базе стоматологического волокна.

ПАРАМЕТРЫ ВОЛОКНА

- длина – 60 мм (+ 5 мм с каждого конца)
- ширина – $2,5 \pm 0,2$ мм
- толщина – $0,7 \pm 0,1$ мм

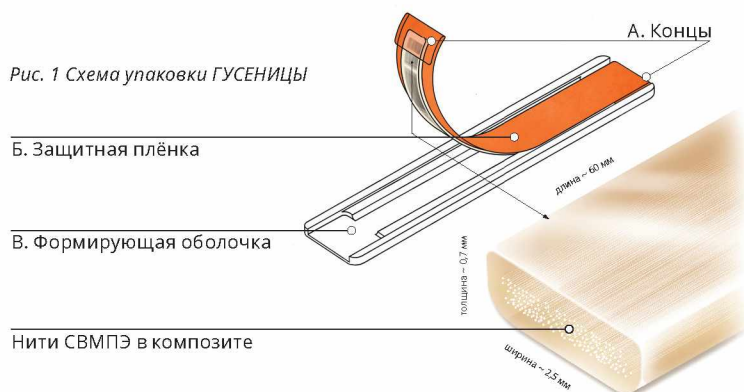

Нити СВМПЭ в композите

Рис. 2 Схема поперечного сечения ГУСЕНИЦЫ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Опора для композитных реставраций, таких как пломбы, коронки, эндокоронки, вкладки, накладки, мосты
- Шинирование подвижных зубов (постоянное и временное)
- Шинирование с восстановлением отсутствующих зубов
- Ортодонтические ретейнеры

ГУСЕНИЦА – это готовый к использованию продукт, не требующий дополнительных процедур перед установкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Зубы обработать в соответствии с правилами;
2. Предохранить десну от контакта с неполимеризованным волокном в процессе моделирования в полости рта:
 - а) при непрямых реставрациях изолировать зубы вазелином/силиконом или сделать оттиск и гипсовую модель;
 - б) при прямом методе обеспечить сухое поле работы, изолируя его от крови и слюны; зубы протравить, высушить и покрыть адгезивной системой;
3. Засветить ГУСЕНИЦУ в соответствии с таблицей полимеризации участками не больше диаметра световода лампы (5-8 мм).

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ГУСЕНИЦЕЙ

- ГУСЕНИЦА чувствительна к дневному свету. Вынимать волокно из формы непосредственно перед процедурой. Во избежание случайной полимеризации, волокно следует поэтапно извлекать из формы (рис. 1В), прикрывая оставшуюся часть оранжевой защитной плёнкой (рис. 1Б). Работать с ГУСЕНИЦЕЙ исключительно инструментами.
- ГУСЕНИЦА может использоваться в качестве внешнего слоя композитной реставрации независимо от её размера и формы.
- Допускается наложение неограниченного количества слоёв ГУСЕНИЦЫ при достаточном окклюзивном пространстве, а также при условии, что внешний слой волокна не будет нуждаться в препарации. Композитный слой поверх нитей, составляющих сердцевину ГУСЕНИЦЫ, составляет около 0,3 мм. Нарушение отдельных внешних нитей не влияет на долговечность конструкции из ГУСЕНИЦЫ; для получения гладкой поверхности, повреждённую часть следует покрыть тонким слоем композита или Глазури.
- ГУСЕНИЦА может использоваться для непосредственного восстановления контактного пункта.
- Форма основы из ГУСЕНИЦЫ может быть любой. Размещение волокна по всей длине основы обеспечит оптимальную прочность конструкции.
- ГУСЕНИЦА может использоваться как отдельно, так и в сочетании с любыми композитными материалами на основе метакрилатных смол. Лучших результатов можно достичь, используя ГУСЕНИЦУ со следующими материалами: BOSTON, FLOW-ART, FLOW-COLOR, COLORANT, BOSTON GLAZE. Для обозначения чёткой границы между композитом и эмалью зуба при временном шинировании в качестве первого слоя следует использовать композит FLOW-COLOR.

КРЕПЛЕНИЕ ГУСЕНИЦЫ

1. Открыть алюминиевое саше и вынуть волокно. Удерживать оранжевой стороной к свету. Не вынимать волокна из белой формирующей оболочки.
2. Отмерить и, если необходимо, отрезать соответствующую длину волокна вместе с формирующей оболочкой. Рекомендуем разрезать волокно одноразовым скальпелем, поместив продукт на твёрдой поверхности, или профессиональными специальными ножницами для волокна. Оставшуюся часть хранить в алюминиевом саше.
3. Крепко удерживая за оранжевый конец (рис. 1 А), медленно вытянуть волокно из формирующей оболочки (рис. 1 В).
4. Снять оранжевую защитную плёнку (рис. 1 Б) с волокна и приступить к его креплению, либо закрепить волокно вместе с оранжевой защитной плёнкой, после чего аккуратно её извлечь.
5. Крепление ГУСЕНИЦЫ следует начинать с размещения её конца по возможности в самой глубокой или наиболее отдалённой от фронтальной части подготовленного зуба поверхности. Засвечивать в соответствии с таблицей полимеризации. Остальную часть, неполимеризованную, провести к противоположному концу препарации или, если это необходимо, прикрепить к предыдущему концу. Концы ГУСЕНИЦЫ можно соединять друг с другом, если длина каждого из них не менее 2 мм.
6. На подготовленную основу композит наносить слоями согласно принципам реконструкции твёрдых тканей зуба.
7. При непрямых реставрациях – зацементировать.
8. Скорректировать согласно прикусу и эстетике соседних зубов.

ТАБЛИЦА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

Мощность лампы	<800 мВт/см ²	800-2000 мВт/см ²	>2000 мВт/см ²
Время засвечивания	40 с	20-30 с	10 с

СОСТАВ

ГУСЕНИЦА представляет собой систему из 1056 нитей СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности, рис. 2), расположенных параллельно друг другу, погружённых в композитную матрицу на основе метакрилатных смол (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, Bis-EMA). ГУСЕНИЦА отверждается под воздействием видимого света в голубом диапазоне (400-500 нм).

ГУСЕНИЦА может применяться со всеми стандартными адгезивными системами. Применение адгезивной системы должно производиться в соответствии с рекомендациями изготовителя.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять композит-волокно при наличии у пациента аллергии на метакрилаты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Защитить десну от контакта с неполимеризованной ГУСЕНИЦЕЙ. Избегать контакта неполимеризованного материала с кожей, мягкими тканями полости рта и глазами. В случае контакта промыть большим количеством воды. При ухудшении самочувствия обратиться к врачу и предоставить информацию о продукте. При появлении аллергии немедленно прекратить применение материала. В случае поздней аллергической реакции следует удалить реконструкцию. В случае проникновения продукта в дыхательные пути, немедленно обратиться к врачу.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Обеспечить правильное засвечивание полимеризационной лампой, особенно в труднодоступных местах. Неполностью полимеризованный композит может вызвать у пациента аллергическую реакцию.

Не использовать в непосредственном контакте с материалами, содержащими фенольные соединения, особенно эвгенол и тимол. Они могут препятствовать полимеризации ГУСЕНИЦЫ.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°C. ГУСЕНИЦА сохраняет свои свойства в течение трёх месяцев после вскрытия упаковки (вскрытое волокно следует хранить при пониженной температуре (3-5°C)).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

⚠ Использовать в соответствии с назначением и рекомендациями производителя.

Хранить в защищённом от света месте. Не перегревать.

Не использовать после истечения срока годности.

Проинструктировать пациента о правильной гигиене полости рта.

Продукт предназначен исключительно для стоматологов и зубных техников.

ГАРАНТИЯ

Фирма ARKONA обменивает некачественные стоматологические материалы, приобретённые покупателем, или возвращает их стоимость. ARKONA не отвечает за ущерб, вызванный неправильным или не соответствующим инструкции применением препарата.

Дата последней актуализации инструкции 19.08.2021



ARKONA
Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Grzegorz Kalbarczyk, Nasutow 99C,
21-025 Niemce, Poland, Сделано в Польше,
www.arkondent.ru