


Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный
Центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10
230003, г. Гродно, ул. Белуша, 47А

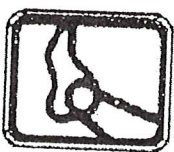

Кресло-коляска комнатное для взрослых КВ
Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.30.500.00.00.00 РЭ

Расшифровка

Директор

В. А. Козакин

1 Назначение

Кресло-коляска комнатное для взрослых КВ ЦСИЕ.30.500.00.00.00 далее — коляска) предназначено для перемещения больного с нарушением опорно-двигательного аппарата внутри помещений. Может применяться как в лечебно-профилактических учреждениях, так и в домашних условиях.

Коляска имеет прямой привод на задние ведущие колеса. Передние поддерживающие колеса — поворотные. Положение наклона сиденья и спинки не регулируется. Подлокотники с боковинами откидные. Подножки изготовлены в виде «ласт» и регулируются по высоте. Задние колеса — быстросъемные. Для удобства транспортирования и хранения коляска имеет возможность складывания по ширине.

Коляски изготавливаются десяти исполнений, различие между которыми состоит в ширине спинки и сидений, а также в наличии тормозов для сопровождающего.

2 Технические характеристики

2.1 Основные параметры коляски приведены в таблице.

Таблица 1

Обозначение	Длина, (±10), мм	Высота, (±10), мм	Ширина, (±10), мм	Ширина сиденья (±10), мм	Наличие тормозов для сопровождающего	Масса не более, кг
ЦСИЕ.30.500.00.00.00			590	375		19,0
-01			615	400		19,1
-02			640	425	имеются	19,2
-03			665	450		19,3
-04	1085	950	690	475		19,4
-05			590	375		18,5
-06			615	400		19,0
-07			640	425	отсутствуют	19,1
-08			665	450		19,2
-09			690	475		19,3

2.2 Высота от пола до сиденья — (510±10) мм.


2.3 Максимальная грузоподъемность (масса пользователя) — 100 кг.

3 Устройство коляски

Коляска (см. рисунок) состоит из следующих основных элементов: 1. Спинка 2. Подлокотники 3. Боковины

система торможения (ручные стояночные тормоза 6, ручные тормоза для сопровождающего 12 - для исполнений ЦСИЕ.30.500.00.00.00-05...-09); колеса (передние колеса 7, задние колеса 8, противооткидывающее устройство 9); механизм складывания 10; зажим для фиксации подножки 11, механизм фиксации подножки 13, рычаг 14, кнопка 15.

Примечание – Изображение коляски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

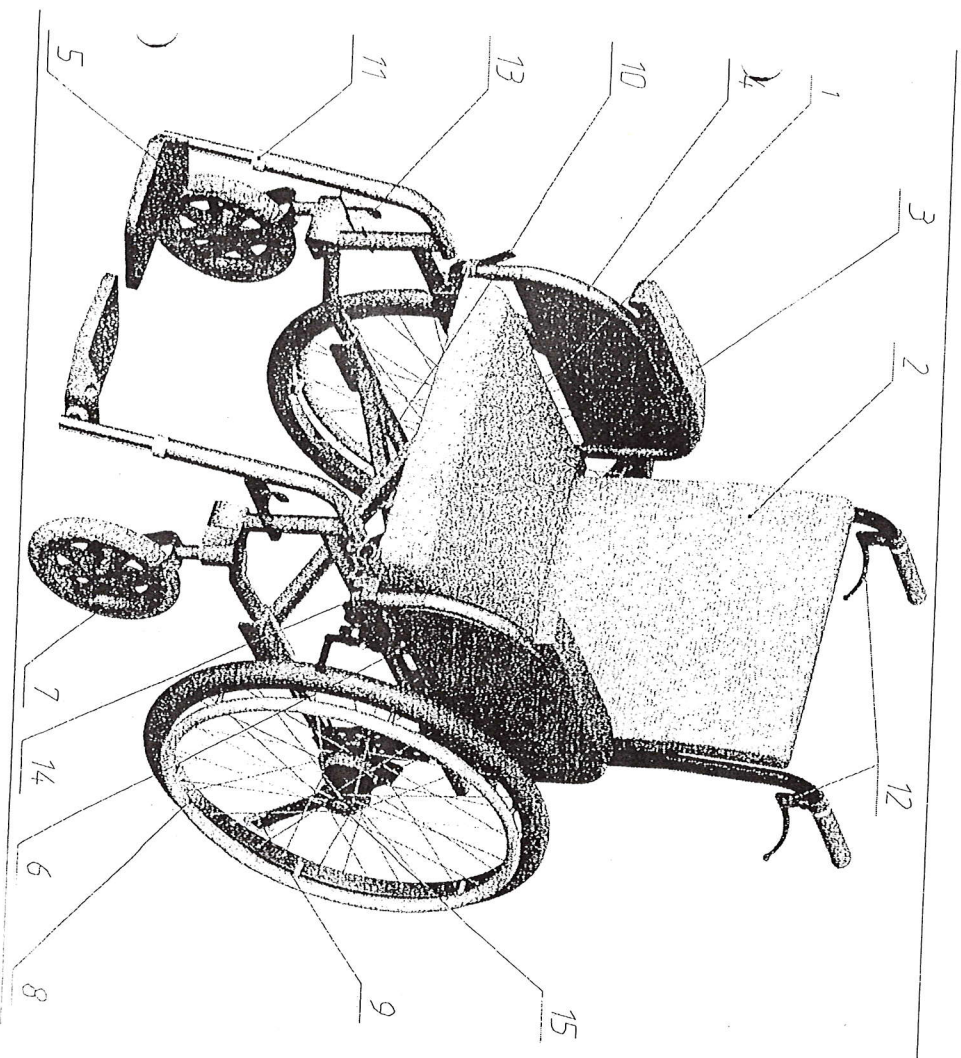

- 1 – сиденье, 2 – спинка, 3 – подлокотники, 4 – боковины
- подножки, 6 – ручные стояночные тормоза, 7 – передние колеса
- задние колеса, 9 – противооткидывающее устройство
- механизм складывания, 11 – зажим, 12 – ручной тормоз для сопровождающего, 13 – механизм фиксации, 14 – рычаг, 15 – кнопка

Рисунок

3.1 Подготовка к работе

Коляска к пользователю поступает в сложенном состоянии, в чехле. Для приведения коляски в рабочее состояние выполните следующие действия:

3.1.1 Расчехлите.

3.1.2. Поставьте коляску на колеса на пол и надавите на боковые тороны сиденья до упора.

3.1.3 Присоедините подножки 5 зафиксируйте их механизмом 13 и регулируйте высоту подножек 5 с помощью зажима 11. Коляска готова к работе.

3.2 Работа

При посадке в коляску и высадке из нее затормозите задние колеса с помощью ручных стояночных тормозов 6) и поднимите вертикально площадку подножек. После посадки в коляску приведите площадку подножек в горизонтальное положение. При посадке в коляску и высадке из нее при необходимости откидываются соответствующие боковины 4, нажатием на рычаг 14, а при необходимости боковину можно снять. Подножки 5 отворачиваются в сторону на 90° либо снимаются с помощью механизмов фиксации 13.

Чтобы снять заднее колесо, расфиксируйте ручные тормоза 12, захватите четырьмя пальцами рук спицы около ступицы колеса и нажмите большим пальцем на кнопку 15 штоковой оси.

При не нажатой кнопке колесо не должно сниматься!

Движение коляски осуществляется за счёт вращения обочей, расположенных на задних колесах, или с помощью сопровождающего лица. Поворот коляски осуществляется вращением задних колес в противоположные стороны.

Для складывания коляски необходимо снять подушку сиденья (при наличии), после чего приподнять сиденье 1, удерживая его по центру, движением снизу вверх. После этого надавить на внешние тороны боковин 4, приподняв коляску (при необходимости). Складывание коляски должно осуществляться при отсутствии пользователя в ней.

Для сопровождающего лица имеются ручные барабанные тормозов тормозят колеса коляски с помощью барабанных тормозов установленных внутри колеса. Под рукояткой ручного тормоза имеется фиксатор для их фиксации в стояночном положении. При транспортировке или сопровождении тормоза должны быть расфиксированы.

4 Меры безопасности

потренироваться в езде на коляске по ровной, хорошо обозримой площадке.

4.2 Категорически запрещается при посадке в коляску и высадке из неё становиться на площадки подножек, так как это может привести к опрокидыванию коляски и нанесению травмы пользователю.

4.3 Запрещается перевозить грузы.

4.4 Запрещается подвергать коляску ударам.

4.5 При езде на подвёме пользователю рекомендуется наклонять своё туловище сильно вперёд.

4.6 При извлечении предметов, находящихся спереди, сбоку или сзади Вашей коляски, старайтесь сильно не наклоняться, так как в результате смещения центра тяжести возникает опасность опрокидывания коляски.

Лестницы следует преодолевать только с сторонней помощью. В случае переноски коляски по лестнице необходимо следить за тем, чтобы Ваши помощники держали коляску только за прочно смонтированные элементы, а не за откидывающиеся части.

4.8 При пересадки с коляски, например в автомобиль, используйте тормоз коляски.

4.9 Следует осторожно обращаться с огнём, особенно с сигаретами, так как обшивка сиденья и спинки может воспламениться.

4.10 Во избежание повреждения рук следите за тем, чтобы Ваши руки не попадали между приводным колесом и рычажным тормозом.

4.11 Перед использованием коляски или после её регулировки каждый раз необходимо проверить прочность винтовых соединений, надёжность крепления сиденья, спинки, колес, подножек, тормозов и ремней. Также обязательно следует убедиться в работоспособности тормозов!

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ Производить изменения и регулировки коляски: изменения геометрии рамы, положения колес, глубины посадки и т.д., не соответствующую и непредусмотренную КД завода изготовителя.

5 Техническое обслуживание

5.1 Для обеспечения правильного ухода за подушкой сиденья и спинкой коляски необходимо:

5.1.1 Протирать детали дезинфицирующим раствором, чистящими средствами для удаления грязи.

5.1.2 Стирать подушку (при необходимости). Перед стиркой из подушки вынуть поролон, расстелнув чехол. Стирку производить

5

вручную при температуре не выше 40 °C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки. Выжимать вручную без выкручивания. Сушить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов. Не подвергать глажению. После высыхания в подушку вставить поролон.

5.1.3 Застёжку текстильную на всех деталях изделия периодически очищать от ниток, пыли и других загрязнений

5.2 Остальные части коляски протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

5.3 Между вилкой поворотного колеса и поворотным колесом часто собирается грязь, которая со временем затрудняет движение колеса. Необходимо периодически очищать колесо и вилку от накопившейся грязи при помощи домашних чистящих средств.

5.4 Перед использованием коляски или после её регулировки необходимо проверить прочность винтовых соединений, крепления сиденья, подножек, колес и ремней.

6 Комплектность

6.1 Кресло-коляска

6.2 Руководство по эксплуатации

- 1 шт.
- 1 шт.

7 Маркировка

Маркировка коляски должна иметь:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение;
- наименование и обозначение изделия согласно конструкторской документации;
- обозначение ТУ;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дату изготовления;
- гарантийный срок (месяцев);
- система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015;
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- идентификационный штриховой код (для серийных изделий).

8 Свидетельство о приемке

Кресло-коляска комнатное для взрослых КВ

наименование изделия

ПСИЕ.30.500.00.00.00

обозначение

зав. номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ ВУ 100010315.061-2009, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработана и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и

МП

Ветковская Е.В.

расшифровка подписи

личная подпись
число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковывании

Кресло-коляска комнатное для взрослых КВ

наименование изделия

ПСИЕ.30.500.00.00.00

обозначение

зав. номер

упаковано на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

инженер по ПП

Ветковская Е.В.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

2021

число, месяц, год

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации коляски – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию (даты продажи или выдачи заказчику), не более 18 месяцев с даты изготовления.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт коляски в случае выхода ее из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на коляски, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений и повреждений покрышек колес.

10.5 Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования коляски.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу: 230003, г. Гродно, ул. Белуша, 47А, тел. (0152) 62-42-91;

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам:

г. Барановичи, ул. Царюка, 39;

г. Витебск, ул. Лазо, 113;

г. Гомель, ул. Владимировая, 8а;

г. Могилев, пер. Базный, 8.

11 Сведения о государственной регистрации

Коляска является изделием медицинского назначения. Номер регистрационного удостоверения в Государственном

реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.1072228/1905. Действительно до 28.05.2024 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-

ортопедический восстановительный центр»

230003, г. Гродно, ул. Белуша, 47А;

220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваших предложений в будущем.

Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017)

3081479;

сайт: www.brovcs.by