

Аббатмент

Хирургические инструменты

Инструкция по применению

1. Описание устройства

Изделия протетические системы стоматологических имплантатов (аббатменты) и инструменты для установки имплантатов стоматологических и изделий протетических систем предназначены для использования в качестве вспомогательного средства в одиночных или составных ортопедических реставрациях.

Поставляются нестерильными и обрабатываются конечным пользователем в автоклаве.

2. Назначение

Система имплантатов INNO была разработана для поддержки зубного протеза как стоматологического устройства, которое имплантируется в альвеолярный отросток для восстановления жевательной функции и улучшения эстетики у пациентов с частичной или полной адентией челюсти. Это хирургический компонент, который взаимодействует с костью челюсти для поддержки зубного протеза, такого как коронка, мостовидный протез, лицевой протез.

- Пациент, который не переносит съемный протез
- Пациент с высокими эстетическими и/или функциональными требованиями
- Пациенты с частичной или полной адентией челюстей
- Пациенты в возрасте 18 лет и старше, у которых завершился рост кости челюсти (Пациенты с частичной или полной адентией)

3. Инструкция по применению

Противопоказания

Операции по имплантации необходимо рассматривать в следующих случаях.

- 1) Неправильное расположение верхних челюстей (недостаточное количество кости)
- 2) Проблемная окклюзия или функциональные отношения
- 3) Невылеченные зубы, Плохая гигиена полости рта.
- 4) Острые воспалительные заболевания и инфекции
- 5) Временное использование специфических препаратов (антикоагулянты, иммунодепрессанты) и текущих лекарств (кортикостероиды, длительное лечение антибиотиками)
- 6) Физический и умственный стресс
- 7) Пациенты с плохой комплаентностью, невротизмом, психическими заболеваниями, проблемные пациенты, беременные пациенты, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками.
- 8) Нарушение костного метаболизма (остеопороз, остеопения, деформирующий остит, дисметаболизм, климактерический остеопороз, подростковый сахарный диабет, сахарный диабет 300 и выше)
- 9) Имплантат как очаг потенциального роста бактерий (искусственные клапаны сердца, бактериальный эндокардит)
- 10) Болезненность альвеолярного отростка, лучевое лечение слабых костей
- 11) Ксеростомия, гипертрофия языка, нарушение коллагена (дерматосклероз, ревматоидный артрит)
- 12) Патологические изменения слизистой оболочки полости рта (лейкоплакия, красный плоский лишай, стоматит)
- 13) Гематологические нарушения (нарушения эритроцитов, лейкоцитов и свертывающей системы крови), нарушения сердечно-сосудистой системы (артериосклероз, гипертония 300 и выше)
- 14) Общий и пищевой статус – возраст (ожирение, плохое телосложение)

Аббатмент

Хирургические инструменты

4. Предупреждения

Для безопасного и эффективного использования Cowellmedi Implant система™ настоятельно рекомендуется следующее.

- 1) Поскольку неправильная операция может привести к повреждению имплантатов или повреждению костных тканей, имплантаты должны эксплуатироваться опытным стоматологом.
- 2) Имплантаты нельзя использовать повторно, они должны применяться для достижения первоначальных целей.
- 3) Поврежденный или неправильно обработанный продукт необходимо удалить.
- 4) Неправильный выбор имплантатов или нестабильные имплантаты могут сократить срок службы имплантатов.
- 5) С изделием необходимо обращаться осторожно, чтобы предотвратить его повреждение и деформацию.
- 6) Неправильное использование продуктов может привести к повреждению имплантата или кости.
- 7) Товары с дефектами подлежат возврату..

5. Меры предосторожности

Необходимо проводить тщательное предварительное обследование пациентов, желающих провести операции по имплантации и изделиям.

- 1) Операционные навыки, необходимые для установки зубных имплантатов, требуют профессиональных и сложных процедур.
- 2) Он должен использоваться стоматологом, который сертифицирован и требует навыков.
- 3) Что касается безопасности костей для имплантатов, то для проверки определения анатомических границ, окклюзии, состояния пародонта и альвеолярных костей можно использовать не только визуальный осмотр, но и визуальное обследование, такое как панорамная рентгенограмма и рентгенограмма верхушки корня.
- 4) Напомните пациентам, что во время лечения нельзя увеличивать жевательную силу.

6. Осложнения и побочные эффекты

После установки зубных имплантатов избегайте чрезмерной активности. Потенциальные осложнения, которые могут возникнуть после установки зубных имплантатов, следующие:

- 1) Операции с имплантатами опасны и могут вызвать расхождение отдельных частей, временную реакцию гиперчувствительности, нарушение голоса, замедленное заживление, отек, гематому, гингивит и кровотечение.
- 2) Может возникнуть нечувствительность нижней губы. Части челюсти после операции на нижней челюсти и части около носа после операции на верхней челюсти могут страдать от побочных эффектов. Большинство из них могут быть временными, но в очень редких случаях может возникнуть постоянный паралич. Может вызвать язву деснево-слизистой оболочки (ткани десны) и реактивную инфекцию клетчатки..

7. Срок годности

Не ограничен

8. Хранение и транспортировка

- 1) Храните продукт при комнатной температуре и в сухом месте.
- 2) Аббатмент и хирургические инструменты предоставляются нестерилизованными, они должны быть стерилизованы пользователем перед операцией..

9. Очистка и стерилизация

Аббатмент и хирургические инструменты поставляются в нестерильном состоянии, и перед использованием хирургический инструмент необходимо продезинфицировать, очистить и стерилизовать. Его следует чистить в соответствии с современными стандартами стоматологической практики. Выберите подходящий метод очистки, который удалит все видимые загрязнения с продукта, используя стерилизованную и

COWELL® INNO Implant System -

Doc. No.: CWM-I-008
Rev. No.: XX
Issued date: 2022-03-17

Абатмент

Хирургические инструменты

дистиллированную воду.

После очистки абатмент и хирургический инструмент стерилизуют паром в автоклаве при температуре С в течение 30 минут, а затем сушат в течение 30 минут.

10. Предостережение

- 1) Для установки супраструктуры в полость рта пациента оператор перед операцией должен проверить степень остеоинтеграции имплантируемого фиксатора по рентгенограммам и перкуссии.
- 2) Запрещается использовать открытый или поврежденный продукт.
- 3) Продукт, загрязненный по ошибке оператора во время работы, не должен использоваться.
- 4) Операция по имплантации должна учитывать побочные эффекты.
- 5) При обработке абатмента его угол обработки не должен превышать 29,8°. При превышении этого диапазона углов могут возникнуть серьезные побочные эффекты. Пожалуйста, будьте осторожны, так как наша компания не несет ответственности за такие побочные эффекты.
- 6) Поскольку все продукты, используемые во рту, одноразовые, их нельзя использовать повторно.

11. Информация о безопасности при МРТ.

Безопасность системы имплантатов INNO в условиях МРТ не оценивалась. Он не тестировался на нагрев или нежелательное движение в условиях МРТ. Безопасность системы имплантатов INNO в среде МРТ неизвестна. Выполнение МРТ-исследования человека, у которого установлены имплантаты INNO, может привести к травме или повреждению имплантата.

12. Утилизация

Обращайтесь с использованным абатментом как с биологической опасностью и утилизируйте в соответствии с политикой учреждения в отношении загрязненных предметов при утилизации.

*Примечание. О любом серьезном происшествии, произошедшем с системой имплантатов COWELL® — абатментом, следует сообщать в компанию Cowellmedi Co., Ltd. и в компетентный орган государства-члена, в котором зарегистрирован пользователь и/или пациент.

Хакгам-дэро 221 пон-киль 48, район Сасан, г. Пусан, 46986 Республика Корея
Производитель: Cowellmedi Co., Ltd («Коуэллмеди Ко., Лтд»)
TEL: +82-51-314-2028 FAX: +82-51-314-2026



Certification Experts B.V. («Сертификейшн Экспертс Б.В.»)
Амерландсвег 7, 3621 ZC, Брёкелен, Нидерланды

Только по рецепту врача

(Только для США)


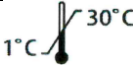
COWELL® INNO Implant System -

Doc. No.: CWM-I-008
Rev. No.: XX
Issued date: 2022-03-17

Аббатмент

Хирургические инструменты

Внимание: Федеральный закон ограничивает продажу данного изделия стоматологом или по его заказу.

	EN: Маркировка CE		EN: Номер по каталогу
	Стерилизовано радиацией		EN: Код серии
	EN: Стерилизовано этиленоксидом		EN: См. инструкцию по применению
	EN: Нестерильно		EN: Не предназначено для повторного использования
	EN: Внимание		EN: Производитель
	EN: Использовать до		EN: Дата производства
	EN: Уполномоченный представитель в Европейском сообществе		EN: Температурное ограничение