

СОРБИМЭШ

СЕТКА СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИТНАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИГЛИКАПРОЛАКТОНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Описание медицинского изделия:

Сетка синтетическая композитная, состоящая из бесцветных мононитей на основе полипропилена (нерассасывающихся, синтетических) и бесцветных или фиолетовых (D&C Violet №2 – С.І. 60725) мононитей на основе поли(гликолида-со-ε-капролактона) (рассасывающихся, синтетических). Размер нити и особая структура позволяют выпускать сетки разных форм и размеров, с прочностью, обеспечивающей применение в различных хирургических техниках.

Варианты исполнения:

Сетка синтетическая композитная из полипропилена и полиглицепролактона «Сорбимэш» в следующих размерах: ширина (1-40) см х длина (1-40) см; толщина (0,1-1) мм;

Сетка синтетическая композитная фигурная из полипропилена и полиглицепролактона «Сорбимэш» в следующих размерах: ширина (1-40) см х длина (1-40) см/ диаметр 5-20 см; толщина (0,1-1) мм;

Сетка (заплата) синтетическая композитная из полипропилена и полиглицепролактона «Сорбимэш» в следующих размерах: ширина (1-40) см х длина (1-40) см/ диаметр 5-20 см; толщина (0,1-1) мм.

В комплект поставки входит:

- сетка синтетическая композитная - 1 шт.;
- индивидуальная упаковка;
- первичная блистерная упаковка – 1 шт.;
- вторичная упаковка из бумаги медицинской газопроницаемой и пленки термоформованной – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 экземпляр на 1 групповую упаковку;
- этикетки-стикеры клейкие для прикрепления в историю болезни, содержащие информацию о наименовании производителя или его товарный знак, наименование изделия, код партии, каталожный номер – не менее 3 шт.

Назначение и функциональные характеристики:

Сетки синтетические композитные стерильные из полипропилена и полиглицепролактона «Сорбимэш» частично рассасывающиеся предназначены для постоянной имплантации с целью укрепления/поддержки при абдоминальной грыже (например, паховой, послеоперационной вентральной, пупочной, бедренной), а также коррекции фасциальных дефектов брюшной, тазовой и/или грудной стенки во всех видах хирургии.

Область применения:

Сетки синтетические композитные из полипропилена и полиглицепролактона «Сорбимэш» применяются в хирургии брюшной, тазовой и/или грудной стенки, при необходимости их поддержки/укрепления.

Показания к применению:

Сетки синтетические композитные «Сорбимэш» применяются для лечения паховых грыж, а также при герниопластике послеоперационных грыж, если располагается на поверхности брюшной стенки и укрепляет ее изнутри.

Противопоказания к применению:

Беременность.

Условия применения:

Сетки синтетические композитные «Сорбимэш» должны применяться только в условиях операционного зала, квалифицированными хирургами.

Возможные побочные эффекты:

Сетки синтетические композитные из полипропилена и полиглицепролактона «Сорбимэш», как все сетки из полипропилена может вызывать начальное транзиторное воспаление на уровне раны и слабую воспалительную реакцию.

Меры предосторожности:

- сетки должны применяться квалифицированным медицинским персоналом;
- перед применением убедиться в целостности индивидуальной упаковки;
- не допускать повторного использования.

Предупреждения:

- не подвергать сетку контакту с петлями кишечника;
- не использовать сетки, вступившие в контакт с нестерильным инструментом или с органическими жидкостями;
- изделие одноразового использования;
- не использовать при поврежденной упаковке;
- не использовать по истечении срока годности;
- хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла;
- медицинское изделие не содержит канцерогенных, мутагенных или токсичных материалов.

Транспортирование, хранение и утилизация:

Сетки синтетические композитные «Сорбимэш» транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, климатические условия при транспортировании – 2 (С) по ГОСТ 15150.

Условия хранения: отапливаемые хранилища с естественной вентиляцией воздуха. Расстояние от отопительных приборов не менее 1м.

Срок годности изделия указан на индивидуальной и групповой упаковке.

Утилизация медицинского изделия:

Сетка синтетическая композитная из полипропилена и полиглицепролактона «Сорбимэш» является изделием медицинского назначения одноразового использования и подлежит утилизации как медицинские отходы.

Утилизация осуществляется в соответствии с правилами, установленными в нормативных документах страны-потребителя:

- СанПиН, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №14 от 08.02.2018 г. на территории Республики Беларусь;
- СанПиН 2.1.3684-21 на территории РФ;

Стерильность:

- стерилизуется оксидом этилена;
- стерильно до вскрытия или нарушения целостности упаковки;
- не подлежит повторной стерилизации.

Гарантийные обязательства:

Производитель ООО «Эргон Эст» гарантирует качество медицинского изделия при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

Срок хранения 5 лет со дня изготовления (стерилизации).

По вопросам качества на территории Республики Беларусь обращаться: Белорусско-итальянское совместное общество с ограниченной ответственностью «Эргон Эст»

Ул. В. Гостинец, д. 143К, 222310, г. Молодечно,

Минская обл., Республика Беларусь.

тел. (8017) 335-33-96, 335-33-98, 335-34-00

e-mail: produzione@ergonest.com, ufficio.qualita@ergonest.com

Символы, применяемые на этикетке:

-  = Запрет на повторное применение
-  = Дата изготовления Год-Месяц
-  = Использовать до: Год -Месяц
-  = Изготовитель
-  = Код партии

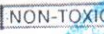
 - Стерильно. Стерилизация с применением окиси этилена

 = Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

 = Апиригенно

 = Не стерилизовать повторно

 = Номер по каталогу

 NON-TOXIC не токсично

 = Не применять при повреждении упаковки



Юлия Верна
Вице-директор по качеству
и сертификации ООО
«Эргон Эст» Союзная Ф.