

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Ассомедика»
Белый В.В.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
мочеприемников медицинских однократного применения
ТУ ВУ 190682947.004-2010 изм. 3

МОЧЕПРИЕМНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: **мочеприемники ножные (объем 0,5л; 0,75л; 1,0л; 1,5л; 2,0л)**

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ

Мочеприемники предназначены для сбора содержимого мочевого пузыря в стационарных и амбулаторных условиях.

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник ножной однократного применения (далее - мочеприемник) представляет собой прозрачный полимерный мешок объемом от 0,5 л до 2,0 л, с трубкой, длина трубки от 6 см до 200 см (по согласованию с заказчиком). На лицевой стороне мочеприёмника нанесена градуировка в миллилитрах, позволяющая определить объем собранной мочи.

Визуальный контроль процедуры сбора содержимого мочевого пузыря обеспечивает прозрачный материал, из которого изготовлены мешок мочеприёмника и трубка.

Наличие отверстий позволяет крепить мочеприемник к ноге пациента при помощи фиксирующих ремней или других приспособлений.

На конце трубки имеется конический универсальный коннектор с защитным колпачком для присоединения к любому размеру и типу урологического катетера либо уропрезервативу.

Мочеприемник снабжен невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток жидкости при опрокидывании мочеприемника при его повороте на 180°.

Мочеприемник снабжен краном для слива.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист, пациент); физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При использовании изделия по назначению противопоказаний и ограничений в применении нет.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- проверьте целостность упаковки и срок годности изделия;
- извлеките мочеприемник из индивидуальной упаковки;
- визуальным осмотром проверьте мочеприемник на наличие повреждений;
- проверьте сливной кран – он должен быть закрыт;

- зафиксируйте мочеприемник на голени или бедре таким образом, чтобы обеспечить свободный ток мочи. Для фиксации используйте фиксирующие ремни или иные приспособления;
- снимите защитный колпачок с конического коннектора на трубке и присоедините коннектор мочеприемника к катетеру либо уропрезервативу;
- избегайте провисания и перекручивания трубки с образованием петли;
- при наполнении мочеприемника откройте сливной кран, слейте мочу, после опорожнения мешка закройте сливной кран. При необходимости измерьте объем мочи (перед опорожнением мешка);
- для удаления мешка отсоедините коннектор мочеприемника от катетера.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Конический универсальный коннектор с защитным колпачком на конце трубки подходит для присоединения к любому размеру и типу урологического катетера либо к уропрезервативу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не пережимать просвет катетера или трубки мочеприемника на длительное время;
- производить своевременную замену мочеприемника;
- не использовать после окончания срока хранения.

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных мочеприемников).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Ассомедика».

Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.

Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.

Сайт: www.asomedica.by.

Электронная почта: office@asomedica.by

СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

	Изготовитель		Не использовать повторно
	Код партии		Не использовать при повреждении упаковки
	Дата изготовления		Ограничение температуры
	Использовать до		Диапазон влажности
	Нестерильно (для нестерильных изделий)		Стерильно (стерилизовано оксидом этилена)

ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 23.05.2022.

МОЧЕПРИЕМНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: мочеприемники прикроватные (объем 0,5л; 0,75л; 1,0л; 1,5л; 2,0л; 3,0л; 4,0л).

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ

Мочеприемники предназначены для сбора содержимого мочевого пузыря в стационарных и амбулаторных условиях.

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемник прикроватный однократного применения (далее - мочеприемник) представляет собой прозрачный полимерный мешок объемом от 0,5 л до 4,0 л, на лицевой стороне которого нанесена градуировка в миллилитрах, позволяющая определить объем собранной мочи. Наличие уплотненных колец (отверстий) позволяет крепить мочеприемник к кровати или стойке с помощью различных приспособлений. На конце отводной трубки имеется конический универсальный коннектор с защитным колпачком для присоединения к любому размеру и типу урологического катетера либо уропрезервативу. Длина отводной трубки от 6 см до 200 см по согласованию с заказчиком. Мочеприемник снабжен невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток жидкости при опрокидывании мочеприемника при его повороте на 180°. Визуальный контроль процедуры сбора содержимого мочевого пузыря обеспечивает прозрачный материал, из которого изготовлены мешок мочеприёмника и трубка.

Мочеприемник может быть снабжен краном для слива.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист, пациент); физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При использовании изделия по назначению противопоказаний и ограничений в применении нет.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- наденьте перчатки;
- проверьте целостность упаковки и срок годности изделия;
- извлеките мочеприемник из индивидуальной упаковки;
- визуальным осмотром проверьте мочеприемник на наличие повреждений;
- проверьте сливной кран (при его наличии) – он должен быть закрыт;
- закрепите мочеприемник на стойке или кровати при помощи уплотненных колец и специальных креплений, фиксирующих ремней или иных приспособлений;
- убедитесь, что мочеприемник находится ниже уровня пациента;

- избегайте провисания и перекручивания трубки с образованием петли;
- снимите защитный колпачок с конического коннектора на трубке и присоедините коннектор к катетеру либо уропрезервативу;
- при наполнении мочеприемника откройте сливной кран, слейте мочу, после опорожнения мешка закройте сливной кран. При необходимости измерьте объем мочи (перед опорожнением мешка);
- для удаления мешка отсоедините коннектор мочеприемника от катетера.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Конический универсальный коннектор с защитным колпачком на конце трубки подходит для присоединения к любому размеру и типу урологического катетера либо к уропрезервативу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделия однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- производить своевременную замену мочеприемника;
- не использовать после окончания срока хранения.

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных мочеприемников).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Ассомедика».

Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.

Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.

Сайт: www.asomedica.by.

Электронная почта: office@asomedica.by

СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

	Изготовитель		Не использовать повторно
	Код партии		Не использовать при повреждении упаковки
	Дата изготовления		Ограничение температуры
	Использовать до		Диапазон влажности
	Нестерильно (для нестерильных изделий)		Стерильно (стерилизовано оксидом этилена)

ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 23.05.2022.

МОЧЕПРИЕМНИКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: мочеприемники педиатрические (объем 0,1л; 0,2л).

Инструкция по применению

НАЗНАЧЕНИЕ

Мочеприемник педиатрический предназначен для сбора мочи на анализ у маленьких (в том числе грудных) детей.

СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Мочеприемники педиатрические однократного применения (далее - мочеприемники) представляют собой прозрачный полимерный мешок прямоугольной формы объемом от 0,1 до 0,2 л. Мочеприемник снабжен фиксирующим устройством, которое обеспечивает надежное прилегание и позволяет легко приклеивать и снимать мочеприемник. Объем собранной жидкости считывается с градуированной шкалы, расположенной на передней стороне мочеприемника.

Мочеприемник имеет универсальную конструкцию (подходит для мальчиков и девочек).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист, пациент); физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При использовании изделия по назначению противопоказаний и ограничений в применении нет.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия;
- перед постановкой мочеприемника провести туалет половых органов ребенка с мылом;
- после подмывания тщательно высушить кожу ребенка в области гениталий (промокните кожу ребенка чистой пеленкой или салфеткой);
- вымыть свои руки с мылом, можно обработать их дезинфицирующим раствором;
- уложить ребенка на спину на ровную поверхность;
- извлечь мочеприемник из индивидуальной упаковки;
- снять защитную бумажную ленту с липкого фиксирующего слоя (рисунок 1);
- приклеить мочеприемник к половому органу ребенка: девочкам согласно рисунку 2, мальчикам мошонку поместить внутрь мочеприемника согласно рисунку 3;
- после сбора мочи снять мочеприемник, аккуратно отклеив его от кожи;

- отрезать уголок пакета мочеприемника и слить мочу в емкость для транспортировки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если ребенка беспокоит приклеенный мочеприемник, осторожно надеть трусики или подгузник. Если в комнате прохладно, накройте ножки малыша пеленкой или одеялом, не переохлаждайте его.

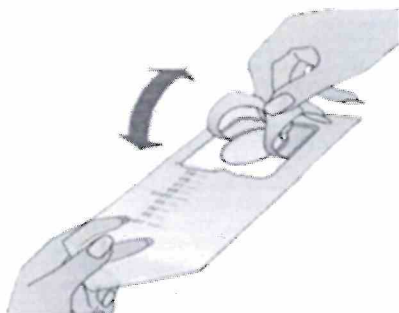


Рисунок 1

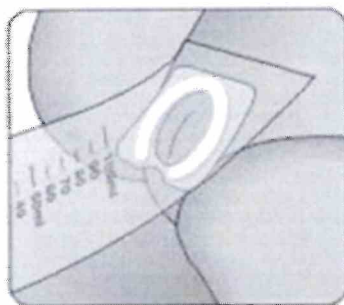


Рисунок 2

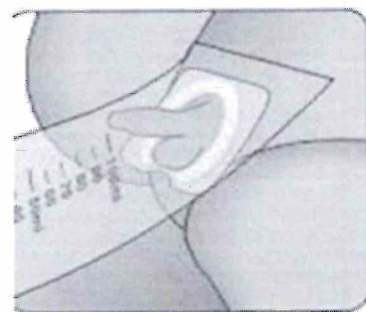


Рисунок 3

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Не требуется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделия однократного применения;
- в целях безопасности, правильной идентификации и предотвращения инфицирования мочеприемник педиатрический извлекается из индивидуальной упаковки непосредственно перед использованием;
- не смазывать кожные покровы маслом, кремом и подобными веществами, в противном случае мочеприемник может не приклеиться;
- не оставлять прикрепленным мочеприемник более 1 часа: если не удалось собрать мочу в течение 1 часа, снять мочеприемник и использовать новый;
- не использовать после окончания срока хранения.

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных мочеприемников).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Ассомедика».

Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.

Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.

Сайт: www.asomedica.by.

Электронная почта: office@asomedica.by

СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

	Изготовитель		Не использовать повторно
	Код партии		Не использовать при повреждении упаковки
	Дата изготовления		Ограничение температуры
	Использовать до		Диапазон влажности
	Нестерильно (для нестерильных изделий)		Стерильно (стерилизовано оксидом этилена)

ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 23.05.2022.