

Инструкция по применению пояса - ремня фиксирующего ПИО-16, ПИО-16-01, ПИО-16-02

Пояс-ремень фиксирующий ПИО-16, ПИО-16-01, ПИО-16-02, (далее изделие) предназначен для частичной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника при умеренно-выраженных болях на почве остеохондроза, спондилолистезе 1 степени, в послеоперационном периоде после резекции дисков и др.

Противопоказанием к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед

При серийном изготовлении размер изделия определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Обхват талии измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне талии через пупочную часть.

Таблица 1

Размер изделия	75 (XXS)	80 (XS)	85 (S)	90 (M)	95 (L)	100 (XL)	105 (XXL)	110 (3XL)	115 (4XL)	120 (5XL)
Обхват талии, мм	700-749	750-799	800-849	850-899	900-949	950-999	1000-1049	1050-1099	1100-1149	1150-1200

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье, лежа на плоской поверхности, далее застегнуть пряжки, встать.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- уделять внимание коже, соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждать опрелости и потертости.

Не допускается самостоятельно производить ремонт пояса.

Ремонт необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Генеральный директор
В. А. Киселевич



Инструкция по применению ортеза деротационного ПИО-17-02

1 Ортез деротационный ПИО-17-02 (далее - изделие) назначается при ДЦП, спастической диплегии.

1.2 Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

1.3 Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребенка и рекомендациями лечащего врача - ортопеда.

1.4 Изделие рекомендуется надевать на нательное белье в положении стоя. Перед сном изделие необходимо снимать.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только вручную при температуре не выше 40° С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- после стирки изделие хорошо прополаскивать в теплой, а затем в холодной воде;
- изделие выжимать слегка, не используя механические средства;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал

Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39

Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258

E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Генеральный директор
В. А. Кашин



Инструкция по применению отводящего ортеза на тазобедренные суставы ПИО-17-03

1. Отводящий ортез на тазобедренные суставы (далее - изделие) — приспособление, предназначенное для разведения и придания нижним конечностям фиксированного положения.

Изделие применяется для:

- профилактики абдукционных контрактур;
- профилактики развития перекрещивания конечностей — при длительном положении пользователя в положении лежа (для возвращения способности к нормальному передвижению);
- профилактики пролежней за счёт недопущения длительного соприкосновения нижних конечностей;
- перераспределения нагрузки на крестец и кости таза, а также конечностей пациента;
- профилактики повреждения кожного покрова и установленной конструкции после эндопротезирования тазобедренного сустава.

Противопоказанием к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов, а также наличие трофических язв или локальных дерматитов на коже нижних конечностей.

2. Режим использования изделия определяется лечащим врачом. Изделие необходимо применять в течение ограниченного времени — от нескольких часов до суток чтобы избежать развития осложнений из-за длительного отведения конечностей. Нежелательно длительное использование изделия без разрешения врача, поскольку это может привести к развитию обратных контрактур (абдукционных), ведущих к нарушению подвижности конечностей.

3. Изделие рекомендуется использовать с одетым на пользователя нательным бельем.

4. Изделие фиксируется с помощью ремней, имеющих застёжки текстильные «контакт» в положении лежа.

5. Сняв изделие, рекомендуется ежедневно промывать тело тёплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

6. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- проводить дезинфицирующую обработку чехла по мере его загрязнения с помощью мягких тканей и моющих неагрессивных растворов;
- не стирать изделие в стиральной машине или вручную, не утюжить.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка, 39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Генеральный директор
В. А. Касевский

Инструкция по применению аппарата Мирзоевой ПИО – 19

Аппарат Мирзоевой ПИО-19 (далее аппарат) предназначен для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП у детей.

Аппарат выпускается в индивидуальном исполнении.

Противопоказанием к назначению аппарата является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

По вопросам индивидуального использования аппарата следует проконсультироваться с лечащим врачом травматологом-ортопедом.

Аппарат рекомендуется надевать на нательное белье.

Аппарат фиксируется и регулируется на нижних конечностях при помощи шнуровки.

Для обеспечения правильного ухода за аппаратом необходимо:

- протирать приемные гильзы внутри и снаружи тканевой салфеткой смоченной в мыльной воде;
- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическим средством;
- сушить в расправленном виде, в подвешенном состоянии вдали от источников тепла.

Пациентам не рекомендовано самостоятельно производить регулировку и ремонт аппарата.

Ремонт аппарата необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

*Генеральный директор
В. А. Казевиц*



**Инструкция по применению
чехла для протезов после вычленения бедра
ПНО-22**

Чехол для протезов после вычленения бедра ПНО-22 (далее изделие) используется как косметическая оболочка, покрывающая полукорсет, к протезу после вычленения бедра.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Режим ношения изделия определяется временем использования протеза.

Изделие крепится на полукорсете протеза при помощи пояса и шнуровки. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка, без выкручивания;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- глажению не подвергать.

Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

*Генеральный директор
В. А. Калевич*



**Инструкция по применению ортеза для лечения дисплазии тазобедренного сустава у детей
ПНО-25-01**

1 Ортез для лечения дисплазии тазобедренного сустава у детей ПНО-25-01 (далее ортез) предназначен для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь при дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, для разведения ног при ДЦП и предотвращения перекрещивания колен у детей. Ортез позволяет более устойчиво стоять и удобно сидеть благодаря отводящим подушечкам. При использовании ортеза, подвижность детей повышается за счёт уменьшения спастического скрещивания ног.

Рекомендуется использовать ортез круглосуточно, для чего дополнительно предусмотрен ортез для сна, изготовленный из х/б ткани для предотвращения опрелостей.

1.1 Размер ортеза определяется ростом ребенка, обхватом бедер, обхватом талии, обхватом бедра в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер ортеза	1 (XXS)	2 (XS)	3 (S)	4 (M)
Рост, см	74-86	86-98	98-110	110-122
Обхват талии, см	45-48	48-54	52-60	58-68
Обхват бедер, см	57-59	59-62	62-64	64-68
Обхват бедра, см	26-32	26-32	32-36	32-36
Размер отводящих подушечек	1		2	

1.1.1 Обхват талии (а) измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии (рисунок 1).

1.1.2 Обхват бедер (б) измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (рисунок 1).

1.1.3 Обхват бедра (в) измеряется горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки (рисунок 1).

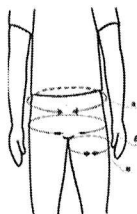


Рисунок 1

В случае, если значение измерения находится на границе двух размеров, рекомендуется выбирать наибольший размер изделия.

1.2 Противопоказаниями к назначению ортеза являются:


- вывих тазобедренного сустава;
- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

2 Ортез надевать в удобном положении для ребенка поверх памперса и нательного белья, облегающего тело. Прежде чем натянуть неэластичные тяги и застегнуть изделие, следует поставить ребенка (если он не утратил способность ходить) или посадить (если он сидит в кресло-коляске) в положение коррекции.

3 Для обеспечения правильного ухода за ортезом необходимо:

- производить стирку вручную или в режиме деликатной стирки в стиральной машине при температуре воды не выше 40 °С, используя мягкое моющее средство;
- перед стиркой из ортеза следует извлечь отводящие подушечки, снять тяги, застегнуть все застёжки текстильные «контакт»;
- использовать мешок или сетку для стирки;
- не использовать средства содержащие отбеливающие вещества;
- выжимать вручную без выкручивания;
- не подвергать глажению;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать химической чистке с органическими растворителями;
- после высыхания в изделие вставить отводящие подушечки;
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

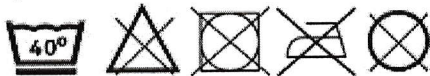

*Генеральный директор
В. А. Колесник*



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал**

Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39

Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258

E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.

Учтём Ваши предложения в будущем.



Инструкция по применению защиты для рук

ПИО-31, ПИО-31-01, ПИО-31-02, ПИО-31-03, ПИО-31-04, ПИО-31-05

Защита для рук ПИО-31, ПИО-31-01, ПИО-31-02, ПИО-31-03, ПИО-31-04, ПИО-31-05 (далее изделие) предназначена и может быть использована как защита для рук при передвижении инвалидов на колясках, а также может служить защитой ладонной части кисти при опоре на трость во время ходьбы.

Противопоказаниями к назначению изделия является индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При серийном изготовлении ПИО-31, ПИО-31-01, ПИО-31-02, ПИО-31-03 размер изделия определяется измерением – ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, в соответствии с таблицей 1, рисунком 1.

Таблица 1

Размер изделия	1 (S)	2 (M)	3 (L)
Ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, мм	100-115	115-130	130-145



Рисунок 1

При серийном изготовлении размер изделий ПИО-31-04, ПИО-31-05, определяется величиной обхвата кисти правой руки – измеряется на уровне пятого пястно-фалангового сочленения, выраженной в сантиметрах и округленной до целого числа, в соответствии с таблицей 2, рисунком 2.

Таблица 2

Обхват кисти (A), см (дюймы))	17(6,5)	19(7)	20(7,5)	22(8)	23(8,5)	24(9)
Размер изделия ПИО-31-04	17(XS)	19(S)	20(M)			
Размер изделия ПИО-31-05			20(M)	22(L)	23(XL)	24(XXL)



Рисунок 2

Изделие надевать непосредственно на руку.

Плотность прилегания регулировать с помощью застёжки текстильной «контакт». Чистку производить мыльным раствором с помощью щётки. Сушить при комнатной температуре.

Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал

Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39

Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258

E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Генеральный директор
В. А. Исаченко



Инструкция по применению пояса для крепления протеза бедра ПИО-35, ПИО-35-01

Пояс для крепления протеза бедра ПИО-35, ПИО-35-01 (далее изделие) предназначен для обеспечения фиксации протеза бедра. Рекомендуется применять в случае, если применение пояса кожаного узкого РБ-655 или широкого РБ-656 невозможно.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим носки изделия определяется режимом носки протеза.

С помощью стяжных ремней и застёжки «контакт» производится натяжение, регулировка, фиксация изделия на теле и протезе бедра.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- производить стирку только ручную при температуре не выше 40° С в короткий промежуток времени;
- выжимать слегка ручную, не выкручивая;
- сушить вдали от источников тепла в подвешенном состоянии;
- не подвергать утюжке;
- проводить химическую чистку с применением всех общепринятых органических растворителей;
- очищать застёжку текстильную «контакт» от ниток, ворсинок.

При ношении изделия рекомендуется соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Генеральный директор
В. А. Калевич



Инструкция по применению манжетки - стяжки ПИО-13, стяжки переднего отдела стопы ПИО-40

1 Манжетка - стяжка ПИО-13, стяжка переднего отдела стопы ПИО-40, (далее изделие) назначается для поддержания переднего отдела стопы и предупреждения его распластанности, а также, до и после хирургических операций на стопе в области головок плюсневых костей. Изделие используется в обуви на низком и среднем каблуке.

2 Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

3 Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

4 Размер изделия определяется обхватом стопы в пучковой части, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Обхват стопы в пучковой части, мм	170 ± 10	180 ± 10	190 ± 10	200 ± 10	210 ± 10	220 ± 10	230 ± 10	240 ± 10	250 ± 10	260 ± 10

5 Режим ношения изделия и место расположения валика Зейца - по рекомендации врача травматолога - ортопеда.

6 В изделии валик Зейца необходимо располагать так, чтобы его широкий край был направлен в сторону носочной части стопы, а узкий край к пятке (рисунок 1).

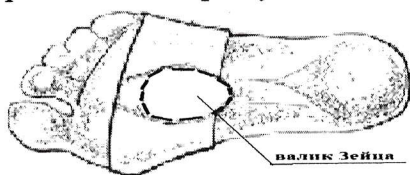


Рисунок 1

7 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

Изделие ремонту не подлежит



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал

Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39

Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258

E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Исполнитель
В. А. Каревский

Инструкция по применению подушки абдукционной ПИО-48

1 Подушка абдукционная ПИО-48 (далее изделие) назначается для поддержания и отведения плечевого сустава:

- после травм и операций на ключице, плечевом суставе, плече;
- при подвывихах и вывихах плеча;
- при артрозах, миозитах;
- при ушибах, частичном повреждении связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения.

2 Противопоказаниями к назначению изделия является индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов (состав материала чехла: нейлон - 35%, ППУ - 30%, ПЭ - 35%).

3 Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно универсального размера.

4 Изделие рекомендуется носить на одежду (футболку, рубашку).

5 Установить подушку в подмышечной области анатомическим вырезом к грудной клетке. С помощью ремня фиксатора пояса закрепить подушку вокруг талии. С помощью ремня плечевого дополнительно зафиксировать подушку. Положить предплечье на верхнюю поверхность подушки и зафиксировать его с помощью ремней держателей конечности.

6 Режим ношения изделия – по рекомендации врача ортопеда-травматолога.

7 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из чехла следует вынимать вкладыш из пенополиуретана;
- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки изделие хорошо прополоскать в тёплой, а затем холодной воде;
- выжимать вручную без выкручивания, не использовать механические воздействия;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в чехол вставить вкладыш из пенополиуретана.

8 Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал

Республика Беларусь, 225409. г. Барановичи, ул. Царюка, 39

Телефон для справок: (0163)648252; орт. кабинет: (0163)648258

E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Генеральный директор
В. В. Чанев



Инструкция по применению распорки регулируемой ПИО-49-01


Распорка регулируемая ПИО-49-01 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП у детей. Изделие позволяет изменять угол отведения бедер от 90° до 120° в зависимости от медицинских показаний, а так же обеспечивает более плотную фиксацию на туловище с регулировкой объемов.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Наличие имеющихся иных противопоказаний определяется врачом - травматологом - ортопедом РУП БПОВЦ.

Размер изделия определяется по расстоянию между подколенными ямками в положении отведения в тазобедренных суставах ребенка в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

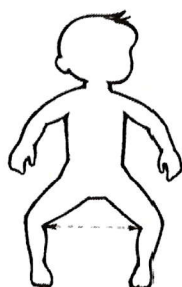

Размер изделия	Расстояние разведения ног (мм)
S	160-200
M	210-300
L	310-400

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим носки изделия определяет лечащий врач-травматолог-ортопед. Уложить ребенка на изделие так, чтобы спинка располагалась на мягкой подкладке спинки изделия, ножки вложить в манжеты и зафиксировать изделие при помощи застежки текстильной «контакт».

По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом травматологом - ортопедом.

Перед стиркой необходимо снять нагрудник, манжеты и спинку с металлического каркаса.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить только ручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок;
- не подвергать глажению.

При использовании изделия следует соблюдать санитарно - гигиенические мероприятия.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 40 дней с даты выдачи (продажи), при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал

Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка, 39

Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258

E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Генеральный директор
В. Д. Чалович



Инструкция по применению распорки регулируемой ПИО-49-02 (шина типа Кошля)


Распорка регулируемая ПИО-49-02 (шина типа Кошля) (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Наличие имеющихся иных противопоказаний определяется врачом - травматологом - ортопедом РУП БПОВЦ.

Размер изделия определяется по расстоянию между подколенными ямками в положении отведения в тазобедренных суставах ребенка в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

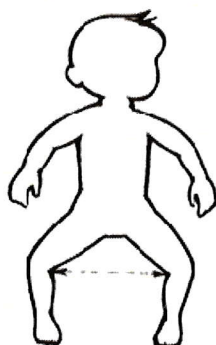

Размер изделия	Расстояние разведения ног (мм)
S	160-220
M	220-260
L	260-300

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом травматологом - ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- не разбирать изделие самостоятельно;
- стирку производить только ручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;
- сушить в подвешенном состоянии вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению.

При использовании изделия следует соблюдать санитарно - гигиенические мероприятия.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 40 дней с даты выдачи (продажи), при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал

Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39

Телефон для справок: (0163)648252; орт.кабинет: (0163)648258

E-mail: prort@brest.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Генеральный директор
В. А. Колесник

