



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического цинкоксидэвгенольного
«ЭОДЕНТ®»
(быстротвердеющий/длительного отверждения)
по ТУ 9391-066-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный «Эодент» выпускается в двух исполнениях: быстротвердеющий и длительного отверждения.

Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный «Эодент» (длительного отверждения) (далее по тексту – материал «Эодент» (длительного отверждения)) предназначен для пломбирования корневых каналов зубов как во взрослой, так и в детской стоматологии. Материал «Эодент» (длительного отверждения) применяют в качестве силера при пломбировании каналов с использованием гуттаперчевых штифтов.

Материал стоматологический цинкоксидэвгенольный «Эодент» (быстротвердеющий) (далее по тексту – материал «Эодент» (быстротвердеющий)) применяют в качестве изолирующей подкладки под все виды пломб, кроме композитных, для временной фиксации коронок, а также для временного пломбирования при лечении кариеса.

Материал «Эодент» (быстротвердеющий/длительного отверждения) предназначен для применения в условиях медицинского учреждения.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Эодент» (быстротвердеющий/длительного отверждения) выпускается в комплекте порошок/жидкость. Порошок содержит окись цинка, гидроксиапатит, стимулирующий регенерацию костной ткани, и рентгеноконтрастный наполнитель. Жидкость содержит эвгенол с пластифицирующими добавками, обеспечивающими высокую наполненность системы порошок-жидкость (3-4:1) при замешивании и низкую растворимость материала (не более 0,5%).

Материал «Эодент» (длительного отверждения) характеризуется продолжительным рабочим временем (6-8 часов), высокой пластичностью, длительным временем отверждения (48-72 часа) и хорошей запечатывающей способностью. Материал «Эодент» (длительного отверждения) обладает пролонгированным антимикробным действием, технологичен и при необходимости без особых усилий может быть удален из канала.

Материал «Эодент» (быстротвердеющий) характеризуется хорошим краевым прилеганием и низкой растворимостью. В жидкость материала «Эодент» (быстротвердеющий) введен катализатор, способствующий отверждению цемента в полости зуба в течение 4-6 минут.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

Материал «Эодент» (быстротвердеющий/длительного отверждения) замешивают при температуре 18-23°C и относительной влажности воздуха 45-55%.

Для пломбирования каналов материалом «Эодент» (длительного отверждения) пасту получают при смешивании на стеклянной пластине 1 мерника (0,1 г) порошка с 1 каплей (0,02-0,03 г) жидкости.

В подготовленный канал пасту вводят при помощи корневой иглы или каналонаполнителем, слегка уплотняя. Избыток материала тщательно удаляют ватным тампоном, изолируют прокладкой (т.к. эвгенол нарушает структурирование композитных материалов) и реставрируют коронку зуба.

При использовании гуттаперчевых штифтов в подготовленный канал, просушенный бумажным конусом и штифтом, вводят одну порцию пасты и круговыми движениями каналонаполнителя распределяют по стенкам канала, затем штифт, обработанный пастой, вводят в канал. После рентгенологического контроля штифт срезают разогретым инструментом и конденсируют гуттаперчу в устье канала.

При необходимости очистки канала штифты размягчают горячим инструментом и выводят из каналов, отверждённую пасту извлекают эндодонтическими инструментами с применением жидкости или геля «Сольвадент», облегчающих процедуру дезобтурации.

Для приготовления пасты из материала «Эодент» (быстротвердеющий) на стеклянной пластине смешивают 1 мерник (0,1 г) порошка с 1 каплей (0,02-0,03 г) жидкости в течение 60 секунд. Паста сохраняет пластичность на стекле 1,5-2 минуты, в полости зуба затвердевает в течение 4-6 минут.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок (банка)	- 25 г
Жидкость (флакон)	- 8 мл
Крышка-капельница	- 1 шт.
Ложка мерная для порошка	- 1 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск материала «Эодент» (быстротвердеющий/длительного отверждения) другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5°C до +25°C.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°C до +30°C.

Срок годности - 3 года.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала «Эодент» (быстротвердеющий/длительного отверждения) и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08616 от 29.12.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Акционерное общество

“Опытно-экспериментальный завод

“ВладМиВа” (АО “ОЭЗ “ВладМиВа”)

308023, Россия, г. Белгород

ул. Студенческая, 19

тел. (4722) 200-555, факс (4722) 20-10-10

postmaster@vladmiva.ru

www.vladmiva.ru

Символы/ Symbols



- Внимание/Caution (Attention)



- Производитель/Manufacturer



- Беречь от влаги/Store in a dry place



- Не использовать повторно/Do not reuse




- Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight




- Использовать до/Expiry date



- Код партии/Batch number

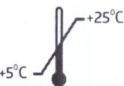

- Температурный диапазон/Temperature limitation

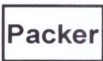

- Упаковщик/Packer



- Дата изготовления/Date of manufacture



- Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, **EN** – английский язык/English, **ES** – испанский язык/Spanish, **UK** – украинский язык/Ukrainian, **KK** – казахский язык/Kazakh, **UZ** – узбекский язык/Uzbek, **PT** – португальский язык/Portuguese, **FR** – французский язык/French.

- коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002.
- коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002.



- Не использовать при повреждении упаковки /
Not to be used in case package is damaged