

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский верхний ШМ-2П-06 (в дальнейшем - шкаф) предназначен для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

глубина.....505
ширина.....1000
высота.....500

2.2 Размеры корпуса, мм:

длина.....1000
ширина.....450

2.3 Масса, кг, не более.....40

2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н.....50±10

2.5 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы

Наименование	Количество, шт.
Шкаф	1 шт.
Полка	2 шт.
Паспорт	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1 и дверей 2. Шкаф оснащен двумя полками 3.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в собранном виде. Вскройте упаковку, очистите шкаф от пыли.

4.3 Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортирования и хранения. Установите шкаф в качестве антресоли. Убедитесь, что шкаф стоит устойчиво.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически загибать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский верхний ШМ-2П-06, заводской № _____
соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и
признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский верхний ШМ-2П-06, заводской № _____ упакован
согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ М.П. _____

Подпись

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский верхний ШМ-2П-06,
заводской № _____, ТУ ВУ 800017554.073-2017
Приобретен _____

дата, подпись и штамп торгующей организации
Введен в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации
Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного предприятия
Подпись и печать
руководителя учреждения - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕРХНИЙ

ШМ-2П-06

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПА.324251.022.ШМ-2П-06 ПС

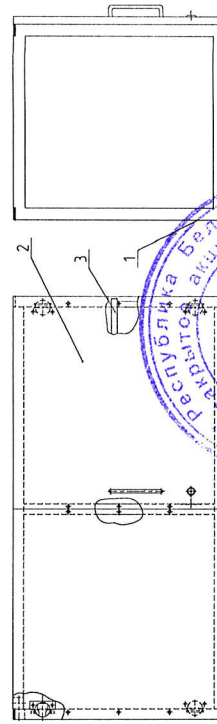

СЗАО, Беларусь
Директор
СЗАО, Беларусь
Республика Беларусь * единственное
акционерное общество
СЗАО, Беларусь

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский верхний ШМ-2П-05 (в дальнейшем - шкаф) предназначен для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

глубина 510
ширина 1000
высота 500

2.2 Размеры корпуса, мм:

длина 1000
ширина 450
2.3 Масса, кг, не более 40
2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н 50±10
2.5 Срок службы, лет, не менее 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы

Наименование	Количество, шт.
Шкаф	1 шт.
Полка	2 шт.
Паспорт	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1 и стеклянных дверей 2. Шкаф оснащен двумя полками 3.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в собранном виде. Вскройте упаковку, очистите шкаф от пыли.

4.3 Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортирования и хранения. Установите шкаф в качестве антресоли. Убедитесь, что шкаф стоит устойчиво.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский верхний ШМ-2П-05, заводской № _____
соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и
признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский верхний ШМ-2П-05, заводской № _____ упакован
согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ М.П. _____ Подпись _____

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕРХНИЙ

ШМ-2П-05

TY BY 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324251.022.ШМ-2П-05 ПС

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский верхний ШМ-2П-05,
заводской № _____, ТУ ВУ 800017554.073-2017
Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием


города

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения - владельца

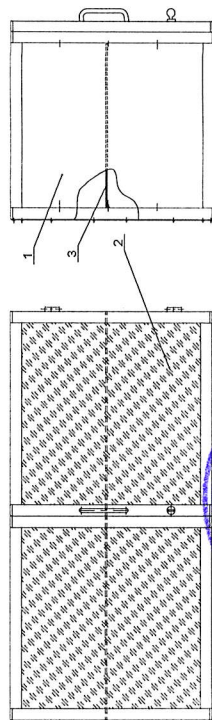

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский ПМ-2П-04 (в дальнейшем - шкаф) предназначен для использования в больницах и других медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

длина 600

ширина 485

высота 1850

2.2 Размеры корпуса, мм:

длина 600

ширина 450

2.3 Масса, кг, не более 50

2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н 50±10

2.5 Срок службы, лет, не менее 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы

Таблица

Наименование	Количество, шт.
Шкаф	1
Ручка (в комплекте с винтами)	2
Опоры	4
Паспорт	1

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1, дверей 2, регулируемых опор 3. Металлическая перегородка разделяет шкаф на два отделения. Шкаф изготовлен из стального листа, покрытие – порошковое полимерное.

По заказу потребителя – шкаф с одной дверью.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в собранном виде. Вскройте упаковку, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортирования и хранения. Вкрутите опоры, установите ручки, затем отрегулируйте высоту шкафа вращением опор. Шкаф должен стоять устойчиво на ровной поверхности.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затирать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°C.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский ПМ-2П-04, заводской № _____
соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и
признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П. _____

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ПМ-2П-04, заводской № _____ упакован согласно
требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ М.П. _____ Подпись
Упаковку произвел _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов:

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ШМ-2П-04, заводской № _____
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретен _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

города _____

Подпись и печать _____

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать _____

руководителя учреждения- владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ

ШМ-2П-04

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324251.022. ШМ-2П-04 ПС

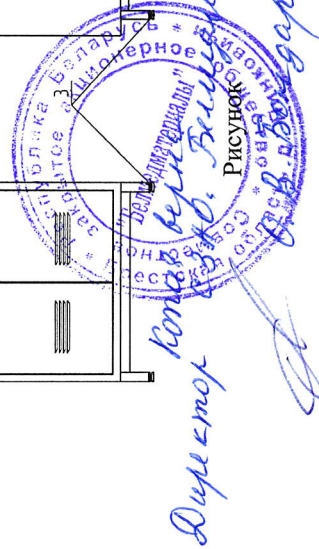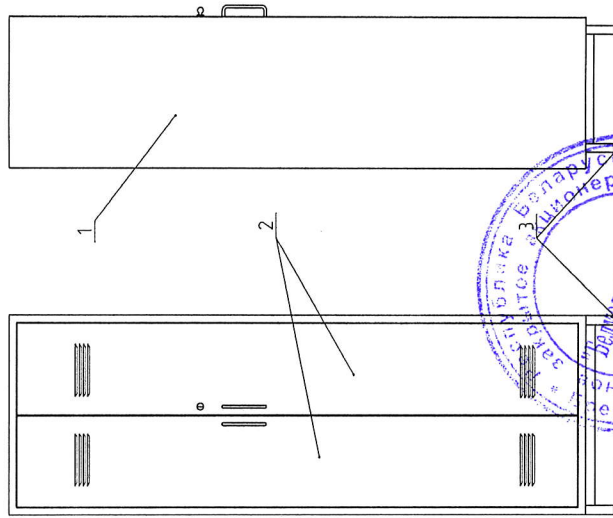

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский ЦМ-2П-03 (в дальнейшем - шкаф) предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и принадлежностей в больницах и других медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

длина 1000
ширина 515
высота 1850

2.2 Размеры корпуса, мм:

длина 1000
ширина 480

2.3 Масса шкафа / шкаф с сейфом / шкаф с полками / шкаф с сейфом и полками, кг, не более 85/97/93/104

2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н 50±10

2.5 Срок службы, лет, не менее 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы

Наименование	Кол., шт.	Наименование	Кол., шт.
Верхний модуль	1	Рука (в комплекте с винтами)	4
Нижний модуль	1	Болт М6х20	8/10**
Основание с опорами	1	Гайка М6	8/10**
Полка	6	Шайба 6	8/10**
Дюбель	12/11**	Шайба 6Г	8/10**
Сейф*	1	Винт М6х20	2***
Полкодержатель	16	Паспорт	1

* Дополнительная комплектация по заказу потребителя
** через дробь указана комплектация без сейфа / с сейфом
*** при поставках с сейфом

Комплектация указана при поставке шкафа в разобранном виде.

По заказу потребителя нижний модуль с выдвигаемыми ящиками.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из верхнего модуля 1, нижнего модуля 2, основания 3, регулируемых опор 4. Шкаф оснащен металлическими полками. Двери с замками. Шкаф изготовлен из стального листа, покрытие – порошковое полимерное.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в разобранном виде. Вскройте

упаковку, очистите детали шкафа от пыли.

4.3 Последовательность сборки (см. рис.):

крепёжа (болт, гайка, шайба, шайба стопорная).

- Установите верхний модуль 1 на нижний модуль 2, соедините их при помощи крепёжа (болт, гайка, шайба, шайба стопорная).

- Установите полкодержатели, затем нижние полки в верхний и нижний модуль.

- Установите сейф, прикрепите его к задней стенке с помощью винтов, гаек и шайб. Установите оставшиеся полки.

- Отрегулируйте высоту шкафа вращением опор. Шкаф должен стоять устойчиво на ровной поверхности.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский ЦМ-2П-03, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П. _____

Подпись ответственного за присылку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ЦМ-2П-03, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ М.П. _____ Подпись _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ШМ-2П-03, заводской № _____

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретен _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

_____ города _____

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ

ШМ-2П-03

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324251.022. ШМ-2П-03 ПС

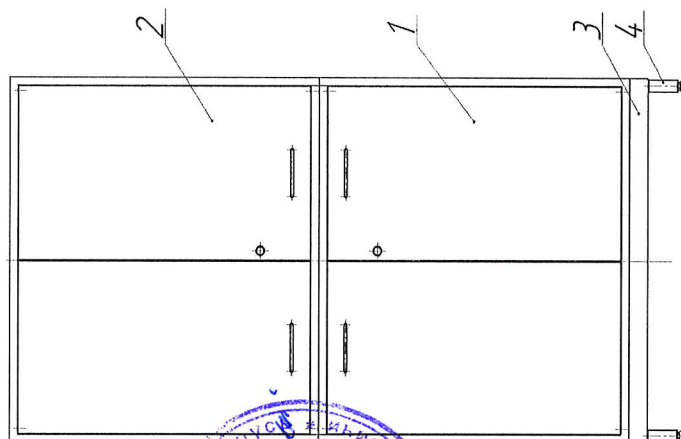

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский ШМ-2П-02 (в дальнейшем - шкаф) предназначен для хранения медицинских инструментов, приборов и принадлежностей в больницах и других медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

длина 1000
ширина 505
высота 1725

2.2 Размеры корпуса, мм:

длина 1000
ширина 450

2.3 Масса, кг, не более 80

2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н 50±10

2.5 Срок службы, лет, не менее 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- шкаф 1 шт.;
- паспорт 1 шт.;

По заказу потребителя – шкаф с лотками и (или) с сейфом

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1, верхних дверей 2, нижних дверей 3, регулируемых опор 5. Шкаф оснащен полками 4.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в собранном виде. Вскрытие упаковки, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортирования и хранения. Установите шкаф, отрегулируйте высоту шкафа вращением опор 5. Шкаф должен стоять устойчиво на ровной поверхности.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затгивать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Шкаф медицинский ШМ-2П-02, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ШМ-2П-02, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ М.П. _____ Подпись Упаковку произвел _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтвержденный наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

1 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ПМ-2П-02, заводской №

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ

ПМ-2П-02

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПА.324251.022.ПМ-2П-02 ПС

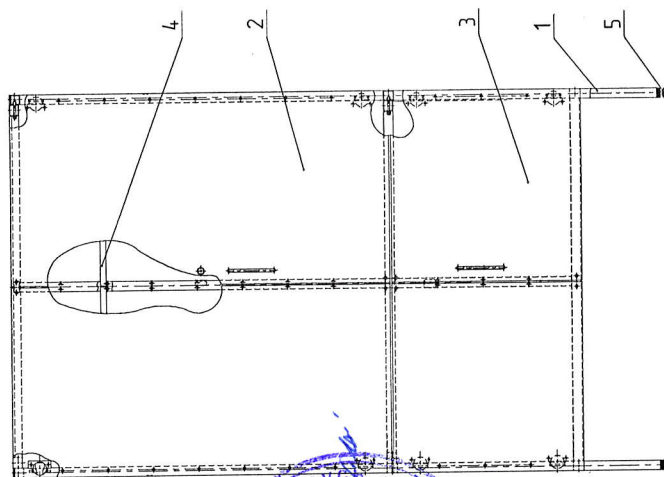

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский ПМ-2П-01 (в дальнейшем - шкаф) предназначен для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

длина 1000
ширина 515
высота 1850
2.2 Размеры корпуса, мм:

длина 1000
ширина 480

2.3 Масса шкафа / шкаф с сейфом /шкаф с лотками / шкаф с сейфом и лотками, кг, не более.....96/108/100/112
2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н.....50±10
2.5 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы

Наименование	Кол., шт.	Наименование	Кол., шт.
Верхний модуль	1	Ручка (в комплекте с винтами)	4
Нижний модуль	1	Болт М6х20	8
Основание с опорами	1	Гайка М6	8/10**
Полка	6	Шайба 6	8/10**
Лоток*	6/5**	Шайба 6Г	8/10**
Сейф*	1	Винт М6х20***	2
Поддержатель	16	Паспорт	1

* Дополнительная комплектация по заказу потребителя
** через пробь указана комплектация без сейфа / с сейфом
*** при поставках с сейфом

Комплектация указана при поставке шкафа в разобранном виде. По заказу приобретается нижний модуль в восьми видовых исполнениях.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из верхнего модуля 1 со стеклянными дверями, нижнего модуля 2, основания с высокими регулируемые опорами 3. Корпус шкафа, сейф, полки выполнены из стали; покрытие – порошковое полимерное. По заказу потребителя в верхний модуль поставляются полки стеклянные.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в разобранном виде. Вскройте упаковку, очистите детали шкафа от пыли.

4.3 Последовательность сборки (см. рис.):

- Установите нижний модуль 2 на основание 3, соедините их при помощи крепежа (болт, гайка, шайба, шайба стопорная).
- Установите верхний модуль 1 на нижний модуль 2, соедините их при помощи крепежа (болт, гайка, шайба, шайба стопорная).
- Установите полкодержатели, затем нижние полки в верхний и нижний модуль.

- Установите сейф в нижний модуль, прикрепите его к задней стенке с помощью винтов, гаек и шайб. Установите оставшиеся полки.

- Отрегулируйте высоту шкафа вращением опор. Шкаф должен стоять устойчиво на ровной поверхности.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.5 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затгивать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский ПМ-2П-01, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П. _____

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ПМ-2П-01, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ М.П. _____ Подпись _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтвержденный наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ШМ-2П-01, заводской №

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения- владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ

ШМ-2П-01

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324251.022. ШМ-2П-01 ПС

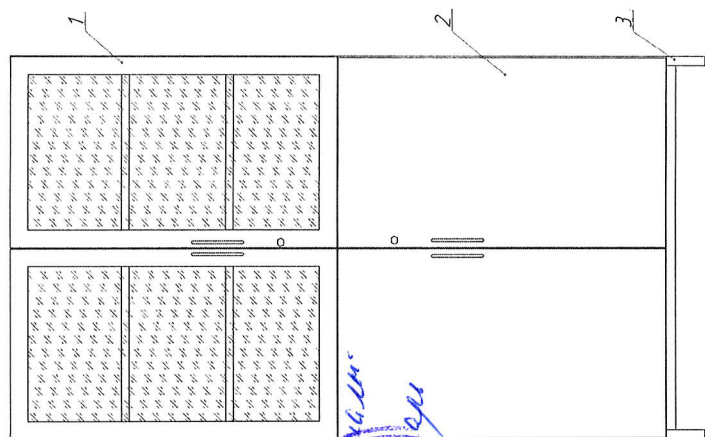

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский ШМ-2П (в дальнейшем - шкаф) предназначен для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

длина 1000
ширина 510
высота 1725

2.2 Размеры корпуса, мм:

длина 1000
ширина 450

2.3 Масса, кг, не более.....80

2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н.....50±10

2.5 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы

Наименование	Кол-во, шт.
Шкаф	1 шт.
Полка стеклянная (или металлическая)	8 шт.
Опора	4 шт.
Паспорт	1 шт.

По заказу потребителя – шкаф с полками и (или) с сейфом

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1, верхних дверей 2, нижних дверей 3, регулируемых опор 5. Шкаф оснащен полками 4.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в собранном виде. Вскройте упаковку, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортирования и хранения. Установите шкаф, отрегулируйте высоту шкафа вращением опор 5. Шкаф должен стоять устойчиво на ровной поверхности.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затирать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°C.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Шкаф медицинский ШМ-2П, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П. _____

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ШМ-2П, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ М.П. _____ Подпись _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ШМ-2П, заводской № _____

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретен _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

города _____

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения- владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ

ШМ-2П

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БЫПЯ.324251.022. ШМ-2П ПС

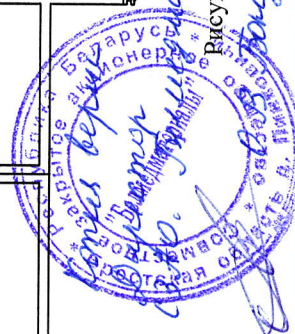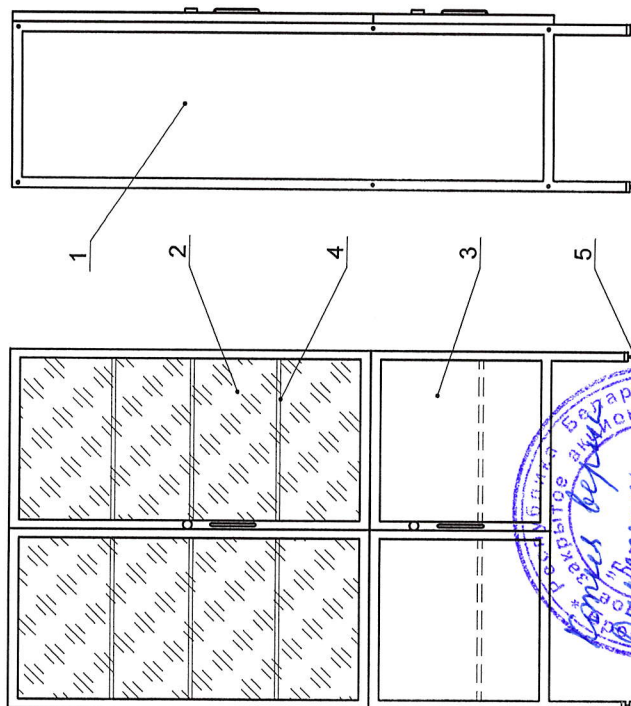

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский верхний ШМ-1Н-06 (в дальнейшем - шкаф) предназначен для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

длина 500
ширина 505

2.2 Размеры корпуса, мм:
высота 500
длина 500

ширина 450
2.3 Масса, кг, не более 25

2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н 50±10

2.5 Срок службы, лет, не менее 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы

Таблица	
Наименование	Кол-во, шт.
Шкаф	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1 и двери 2. Шкаф оснащен полкой 3.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в собранном виде. Вскрытие упаковки, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортирования и хранения. Установите шкаф в качестве антресоли. Убедитесь, что шкаф стоит устойчиво.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затгивать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский ШМ-1Н-06, заводской № _____
соответствует техническим условиям ТУ ВУ 80001754.073-2017 и
признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ШМ-1Н-06, заводской № _____ упакован
согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской
документации.

Дата упаковки _____ М.П. _____ Подпись
Упаковку произвел _____ М.П. _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 80001754.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи)

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ПМ-1Н-06, заводской № _____
ТУ ВУ 80001754.073-201

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
города _____

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕРХНИЙ

ПМ-1Н-06

ТУ ВУ 80001754.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324251.010.ПМ-1Н-06 ПС

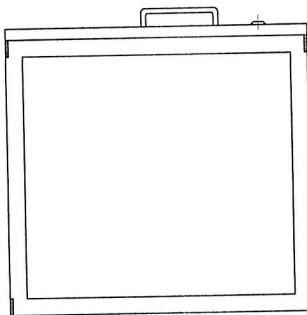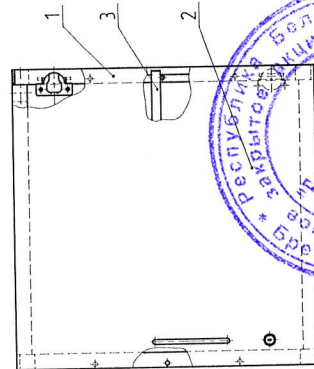

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский верхний ШМ-1Н-05 (в дальнейшем - шкаф) предназначен для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

длина 500
ширина 505
высота 500

2.2 Размеры корпуса, мм:

длина 500
ширина 450
2.3 Масса, кг, не более 25
2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н 50±10
2.5 Срок службы, лет, не менее 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы

Таблица	
Наименование	Кол-во, шт.
Шкаф	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1 и двери 2. Шкаф оснащен полкой 3.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в собранном виде. Вскройте упаковку, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортирования и хранения. Установите шкаф в качестве антресоли. Убедитесь, что шкаф стоит устойчиво.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затгивать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский ШМ-1Н-05, заводской № _____
соответствует техническим условиям ТУ ВУ 80001754.073-2017 и
признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ШМ-1Н-05, заводской № _____ упакован
согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской
документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п. _____ Подпись

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 80001754.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ШМ-1Н-05, заводской № _____
ТУ ВУ 80001754.073-2017

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торговой организации
Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации
Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
города

Подпись и печать
руководителя ремонтного предприятия
Подпись и печать
руководителя учреждения - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ВЕРХНИЙ

ШМ-1Н-05

ТУ ВУ 80001754.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324251.010.ШМ-1Н-05 ПС

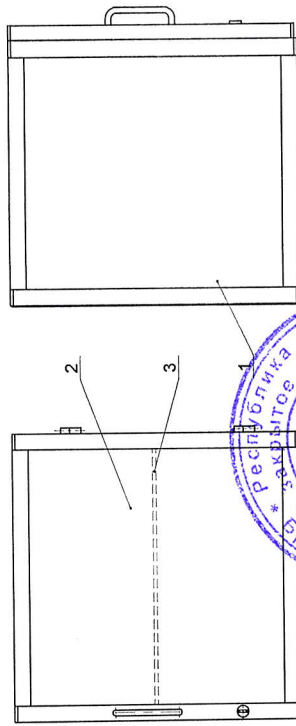

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский ШМ-1Н-04 (в дальнейшем - шкаф) предназначен для хранения документов в медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

ширина 490
длина 600
высота 1695
2.2 Масса, кг, не более 85
2.3 Допускаемая нагрузка на ящик, Н 50±10
2.4 Срок службы, лет, не менее 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входит:
- шкаф 1 шт.
- паспорт 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит каркаса 2, выдвижных ящиков 3 на шариковых направляющих, регулируемых опор 3. Внутри ящика имеется разделительная перегородка.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в собранном разборанном виде. Вскройте упаковку, очистите шкаф от пыли.

4.3 Проверьте плавность выдвижения ящиков. Отрегулируйте высоту шкафа вращением опор. Шкаф должен стоять устойчиво на ровной поверхности.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Увеличение усилия перемещения ящика	Перекоз, заедание, ослабление крепления узлов	Почистить направляющие, подтянуть крепёж

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° C и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° C.

7.2 Шкаф в упаковке допускается хранить в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский ШМ-1Н-04, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 80001754.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П. _____
Подпись ответственного за приемку _____

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ШМ-1Н-04, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ М.П. _____
Упаковку произвел _____ М.П. _____ Подпись _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 80001754.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов:

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ШМ-1Н-04, заводской №

ТУ ВУ 80001754.073-2017

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения- владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ

ШМ-1Н-04

ТУ ВУ 80001754.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324251.010. ШМ-1Н-04 ПС

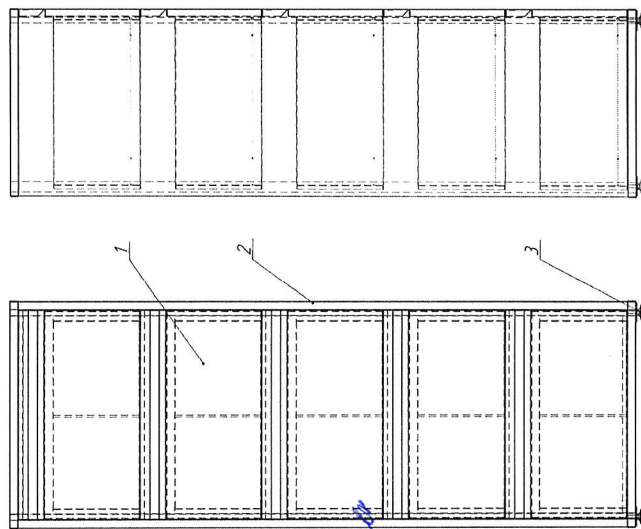

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский ШМ-1Н-03 (в дальнейшем - шкаф) предназначен для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

Длина 525
ширина 515
высота 1850
2.2 Размеры корпуса, мм:

Длина 525
ширина 480

2.3 Масса шкафа / шкаф с сейфом / шкаф с лотками / шкаф с сейфом

и лотками, кг, не более..... 52 / 64 / 56 / 67

2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н..... 50±10

2.5 Срок службы, лет, не менее..... 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы

Наименование	Кол., шт.	Наименование	Кол., шт.
Верхний модуль	1	Ручка (в комплекте с винтами)	2
Нижний модуль	1	Болт М6х20	8
Основание с опорами	1	Гайка М6	8/10**
Полка	6	Шайба 6 (стопорная)	8/10**
Лоток*	6/4**	Шайба 6 (стопорная)	8/10**
Сейф*	1	Винт М6х20	2**
Поддержатель	16	Паспорт	1

* Дополнительная комплектация по заказу потребителя
** через дробь указана комплектация без сейфа / с сейфом
*** при поставках с сейфом

Комплектация указана при поставке шкафа в разобранном виде. По заказу потребителя нижний модуль с четырьмя выдвигаемыми ящиками.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из верхнего модуля 1, нижнего модуля 2, основания 3 с регулируемыми опорами 4.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в разобранном или собранном виде. Вскройте упаковку, очистите детали шкафа от пыли.

4.3 Последовательность сборки (см. рис.):

- Установите нижний модуль 2 на основание 3, соедините их при помощи крепежа (болт, гайка, шайба, шайба стопорная).
- Установите верхний модуль 1 на нижний модуль 2, соедините их при помощи крепежа (болт, гайка, шайба, шайба стопорная) – если не установлен изготовителем.
- Установите поддержатели, затем нижние полки в верхний и нижний модуль.

- Установите сейф в верхний модуль, прикрепите его к задней стенке с помощью винтов, гаек и шайб. Установите оставшиеся полки.

- Отрегулируйте высоту шкафа вращением опор. Шкаф должен стоять устойчиво на ровной поверхности.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затупивать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский ШМ-1Н-03, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П. _____
Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ШМ-1Н-03, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п. _____

Подпись _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн. 4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ШМ-1Н-03, заводской № _____

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретен _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

_____ города _____

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учредения - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ

ШМ-1Н-03

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324251.010. ШМ-1Н-03 ПС

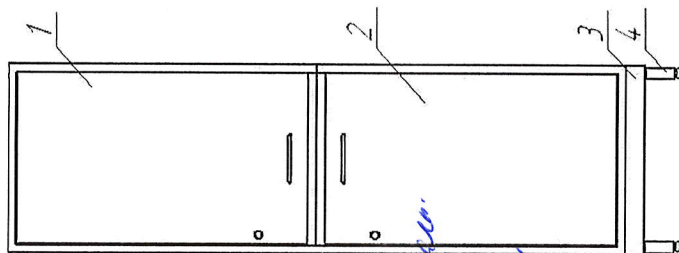

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский ПМ-1Н-02 (в дальнейшем - шкаф) предназначен для устройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не менее:

длина.....	500
ширина.....	505
высота.....	1725
2.2 Размеры корпуса, мм:	
длина.....	500
ширина.....	450
2.3 Масса, кг, не более.....	55
2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н.....	50±10
2.5 Срок службы, лет, не менее.....	5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- шкаф.....	1 шт.;
- паспорт.....	1 шт.;
- лоток пластмассовый (по заявке потребителя).....	5 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1, верхней двери 2, нижней двери 3, регулировочных опор 5. Шкаф оснащен полками 4.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в собранном виде. Вскройте упаковку, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортирования и хранения. Установите шкаф, отрегулируйте высоту шкафа вращением опор 4. Шкаф должен стоять устойчиво на ровной поверхности.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затгивать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский ПМ-1Н-02, заводской № _____
соответствует техническим условиям ТУ ВУ 80001754.073-2017 и
признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ПМ-1Н-02, заводской № _____ упакован

согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п. _____ Подпись _____

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ

ШМ-1Н-02

ТУ ВУ 80001754.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324251.010.ШМ-1Н-02 ПС

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 80001754.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн. 4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ШМ-1Н-02 (цельногнутые двери),
заводской № _____ ТУ ВУ 80001754.073-2017

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____


_____ города _____

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения - владельца

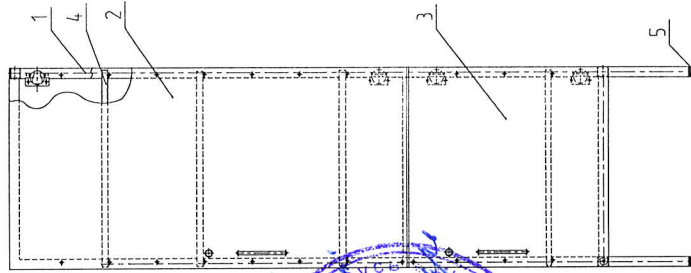

Рисунок



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф **медицинский ПМ-1Н-01** (в дальнейшем - шкаф) предназначен для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не более:

длина.....525
ширина.....515
высота.....1850
2.2 Размеры корпуса, мм:
длина.....525
ширина.....480

2.3 Масса шкафа / шкаф с сейфом / шкаф с лотками / шкаф с сейфом и лотками, кг, не более.....52 / 64 / 56 / 67

2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н.....50±10

2.5 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы

Наименование	Кол., шт.	Наименование	Кол., шт.
Верхний модуль	1	Ручка (в комплекте с винтами)	2
Нижний модуль	1	Болт М6х20	8
Основание с опорами	1	Гайка М6	8/10**
Полка	6	Шайба 6	8/10**
Лоток*	3/1**	Шайба 6 (стопорная)	8/10**
Сейф*	1	Винт М6х20	2***
Полкодержатель	16	Паспорт	1

* Дополнительная комплектация по заказу потребителя

** через дробь указана комплектация без сейфа / с сейфом

*** при поставках с сейфом

Комплектация указана при поставке шкафа в разобранном виде.

По заказу потребителя нижний модуль с четырьмя выдвигаемыми лотками.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из верхнего модуля 1, нижнего модуля 2, основания 3 с регулирующими опорами 4. Верхний модуль оснащен стеклянной дверью. Корпус шкафа, сейфа, полки выполнены из стали; покрытие – порошковое полимерное. По заказу потребителя в верхний модуль поставляются полки стеклянные.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в разобранном или собранном виде. Вскрытие упаковки, очистите детали шкафа от пыли.

4.3 Последовательность сборки (см. рис.):

- Установите нижний модуль 2 на основание 3, соедините их при помощи крепежа (болт, гайка, шайба, шайба стопорная).
- Установите верхний модуль 1 на нижний модуль 2, соедините их при помощи крепежа (болт, гайка, шайба, шайба стопорная) – если не установлен изготовителем.
- Установите полкодержатели, затем нижние полки в верхний и нижний модуль.

- Установите сейф в нижний модуль, прикрепите его к задней стенке с помощью винтов, гаек и шайб. Установите оставшиеся полки.

- Отрегулируйте высоту шкафа вращением опор. Шкаф должен стоять устойчиво на ровной поверхности.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически загибать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский ПМ-1Н-01, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 80001754.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ШМ-1Н-01, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ м.п. _____ Подпись _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 80001754.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн. 4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ШМ-1Н-01, заводской № _____
ТУ ВУ 80001754.073-2017

Приобретен _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

_____ города _____

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения- владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ

ШМ-1Н-01

ТУ ВУ 80001754.073-2017

Паспорт

БИП.324251.010 ПС

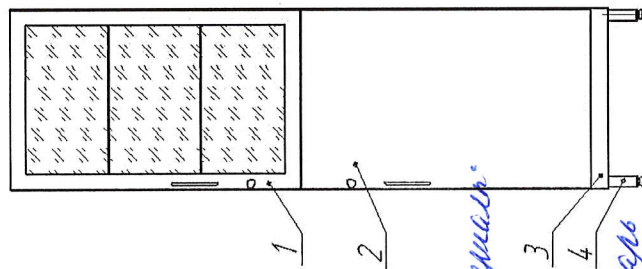

Рисунок



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф медицинский ШМ-1Н (в дальнейшем - шкаф) предназначен для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Шкаф предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры шкафа, мм, не менее:

длина 500
ширина 510

высота 1725

2.2 Размеры корпуса, мм:

длина 500

ширина 450

2.3 Масса, кг, не более 55

2.4 Допускаемая нагрузка на полку, Н 50±10

2.5 Срок службы, лет, не менее 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- шкаф 1 шт.;

- паспорт 1 шт.;

- лоток пластмассовый (по заявке потребителя) 2 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Шкаф (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1, верхней двери 2, нижней двери 3, регулируемых опор 5. Шкаф оснащен полками 4.

4.2 Шкаф поставляется потребителю в собранном виде. Вскрытие упаковки, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортирования и хранения. Установите шкаф, отрегулируйте высоту шкафа вращением опор 4. Шкаф должен стоять устойчиво на ровной поверхности.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей сафеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (сафетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затгивать ослабленные крепежные соединения

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°C.

6.2 Хранить шкаф допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф медицинский ШМ-1Н, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 80001754.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П. _____

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф медицинский ШМ-1Н, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ М.П. _____
Упаковку произвел _____ Подпись _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 80001754.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Шкаф медицинский ШМ-1Н, заводской №

ТУ ВУ 80001754.073-2017

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения- владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ

ШМ-1Н

ТУ ВУ 80001754.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324251.010. ШМ-1Н ПС

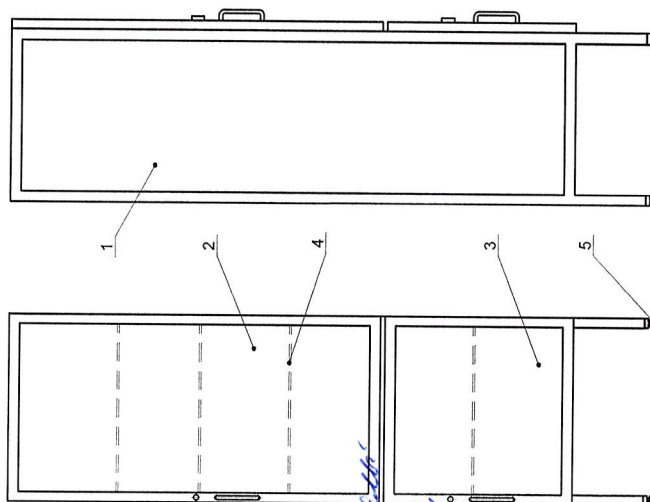

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Полка навесная угловая ПНУ1 (в дальнейшем - полка) предназначена для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Полка предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры полки, мм, не более:

длина.....	920
ширина.....	600
высота.....	600
2.2 Масса, кг, не более.....	40
2.3 Допускаемая нагрузка на полку, кг.....	5±0,5
2.4 Срок службы, лет, не менее.....	5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки

полка.....	1 шт.
любень.....	2 шт.
паспорт.....	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Полка (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1 и двери 2. Внутри расположена полка. Полка изготовлена из стального листа, покрытие – порошковое полимерное

4.2 Полка поставляется потребителю в собранном виде. Вскройте упаковку, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите полку для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку полки путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затирать ослабленные крепежные соединения (крепление двери к корпусу).

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Полка в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°C.

6.2 Хранить полку допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Полка навесная угловая ПНУ1, заводской № _____
соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и
признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Полка навесная угловая ПНУ1, заводской № _____ упакована
согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ М.П. _____ Подпись _____

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ПОЛКА НАВЕСНАЯ УГЛОВАЯ

III

TV BY 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.3244422.036.ПНУ1 ПС

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Претенденты на регистрацию должны

10.2 Рекламация полученная изготовителем, рассматривается в

недельный срок.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Полное наименование угольной ПХМ заводской №

TV BY 800017554.073-2017

Приобретена

дата подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию

Введена в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____.

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения - владельца



Рисунок

1. Корпус

2. Дверь

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Полка навесная ПН2С (в дальнейшем - полка) предназначена для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Полка предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры полки, мм, не более:

длина	1000
ширина	410
высота	600
2.2 Размеры корпуса, мм:	
длина	1000
ширина	380
2.3 Масса, кг, не более	40
2.4 Допускаемая нагрузка на полку, кг	5±0,5
2.5 Срок службы, лет, не менее	5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки	
полка	2 шт.
дубель	2 шт.
паспорт	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Полка навесная (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1 и раздвижных стеклянных дверей 2. Внутри расположена полка 3. Полка металлическая, покрыта порошковой полимерной краской.

4.2 Полка поставляется потребителю в собранном виде. Вскройте упаковку, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите полку для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку полки путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлораминна (салфетка должна быть отжата) или любым методом, разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять устойчивость стеклянных дверей в корпусе.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Полка в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить полку допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Полка навесная ПН2С, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П. _____

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Полка навесная ПН2С, заводской № _____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ М.П. _____ Подпись
Упаковку произвел _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Полка навесная ПН2С, заводской №
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации
Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации
Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
города _____
Подпись и печать
руководителя ремонтного предприятия
Подпись и печать
руководителя учреждения- владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ПОЛКА НАВЕСНАЯ

ПН2С

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.3244422.036, ПН2С ПС



- 1. Корпус
- 2. Двери
- 3. Полки

Рисунок



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Полка навесная ПН2 (в дальнейшем - полка) предназначена для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Полка предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры полки, мм, не более:

длина 1000
ширина 410
высота 600

2.2 Размеры корпуса, мм:

длина 1000
ширина 380

2.3 Масса, кг, не более 40

2.4 Допускаемая нагрузка на полку, кг 5±0,5

2.5 Срок службы, лет, не менее 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки

полка 1 шт.
добель 2 шт.
паспорт 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Полка навесная (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1 и дверей 2. Внутри расположена полка 3. Полка металлическая, покрыта порошковой полимерной краской.

4.2 Полка поставляется потребителю в собранном виде. Вскройте упаковку, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите полку для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

Примечание - Преприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку полки путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затгивать ослабленные крепежные соединения (крепление двери к корпусу).

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Полка в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°C.

6.2 Хранить полку допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Полка навесная ПН2, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Полка навесная ПН2, заводской № _____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ М.П. _____ Подпись _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9. В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Полка навесная ПН2, заводской №
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретена

дата, подпись и штамп торговой организации

Введена в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


ПОЛКА НАВЕСНАЯ

ПН2

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИП.3244422.036. ПН2 ПС

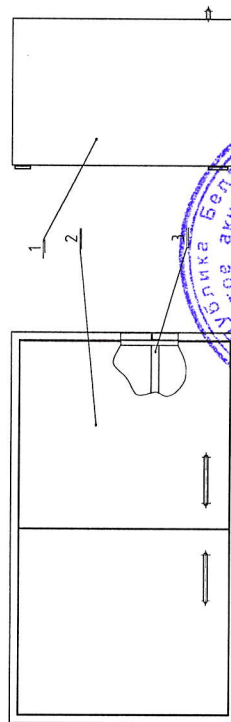

1. Корпус
2. Двери
3. Полка



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Полка навесная ПН1 (в дальнейшем - полка) предназначена для обустройства помещений в медицинских учреждениях.

1.2 Полка предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры полки, мм, не более:

длина 500
ширина 410
высота 600

2.2 Размеры корпуса, мм:

длина 500
ширина 380
2.3 Масса, кг, не более 40
2.4 Допускаемая нагрузка на полку, кг 5±0,5
2.5 Срок службы, лет, не менее 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки

полка 1 шт.
дубель 2 шт.
паспорт 1 шт.

По заказу потребителя – дверь стеклянная

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Полка навесная (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, которая состоит из металлического корпуса 1 и двери с ручкой 2. Внутри расположены съемные полки 3 в количестве 3 шт. Полка металлическая, покрыта порошковой полимерной краской.

4.2 Полка поставляется потребителю в собранном виде. Вскройте упаковку, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите полку для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.4 Выполните санитарную обработку полки путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически загибать ослабленные крепежные соединения (крепление двери к корпусу).

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Полка в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить полку допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Полка навесная ПН1, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ м.п.
Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Полка навесная ПН1, заводской № _____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ м.п. _____
Упаковку произвел _____ м.п. _____ Подпись _____

+9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Полка навесная ПН1, заводской №

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретена

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать

руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


ПОЛКА НАВЕСНАЯ

ПН1

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.3244422.036.ПН1 ПС

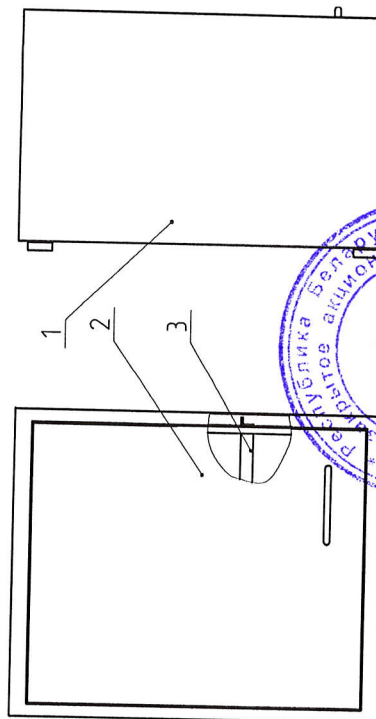

1. Корпус
2. Дверь с ручкой
3. Полка

Рисунок



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тумба прикрыватная ТП-1П (в дальнейшем - тумба) предназначена для использования в медицинских учреждениях и применяется для хранения личных вещей пациентов. Модификации тумб приведены в таблице. Исполнение тумб - на опорах (рис.1) или колесках (рис.2).

1.2 Тумба предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

ТП-1П	Рис.	Характеристика тумбы
	1	Выдвижной ящик, опоры, дверь правая Выдвижной ящик, опоры, дверь левая Ниша, опоры, дверь правая Ниша, опоры, дверь левая Выдвижной ящик, колесца, дверь правая Выдвижной ящик, колесца, дверь левая
2		Ниша, колесца, дверь правая Ниша, колесца, дверь левая

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры, мм, исполнение на колесках:

длина..... 450±5

ширина..... 480±5

высота..... 780±5

2.2 Габаритные размеры, мм, исполнение на опорах:

длина..... 440±5

ширина..... 455±5

высота..... 780±5

2.3 Размеры корпуса, мм:

длина..... 400±5

ширина..... 420±5

2.4 Размер столешницы, мм:

длина..... 440±5

ширина..... 440±5

2.5 Масса, кг, не более..... 28

2.6 Допускаемая нагрузка на ящик (полку), кг..... 5±0,5

2.7 Допускаемая нагрузка на столешницу, кг..... 5±0,5

2.8 Срок службы, лет, не менее..... 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- тумба..... 1 шт.;

- паспорт..... 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Тумба (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из корпуса поз.1, двери поз.2 и выдвижного ящика (или ниши) поз.3. Внутри тумбы имеется полка поз.4. Тумба закрыта столешницей поз.5 и установлена на четырех опорах поз.6 (или на колесках).

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Тумба поставляется потребителю упакованной в собранном виде.

4.3 Распакуйте тумбу, освободите ее от упаковочного материала, очистите от пыли. Осмотрите тумбу для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

4.4 Выполните санитарную обработку тумбы путем протирания ее поверхностей дезинфекантами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь

4.5 В процессе эксплуатации тумбы рекомендуется затгивать ослабленные крепежные соединения.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Тумба в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

5.2 Хранить тумбу допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба прикрыватная ТП-1П, заводской номер.....
соответствует техническим условиям ТУ ВУ 80017554.073-2017 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска..... М.П.

Подпись ответственного за приемку.....

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тумба прикрыватная ТП-1П, заводской номер..... упакована
согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской
документации.

Дата упаковки..... М.П. Подпись

Упаковку произвел..... М.П.

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со получения потребителем (даты продажи).

11.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 Предьявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

12.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Тумба прикроватная ТП-ПП, заводской номер _____,
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретена _____ дата, подпись и штамп торгующей организации
Введена в эксплуатацию _____ дата, подпись и штамп обслуживающей организации
Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____ города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ

ТП-ПП

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324422.047 ПС

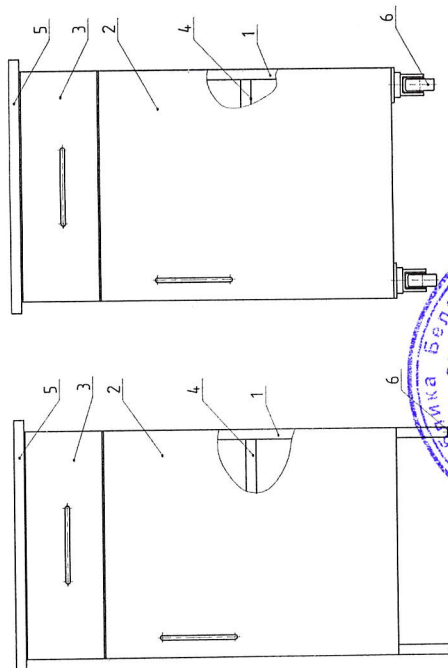


Рис.1

Рис.2

1. Корпус
2. Дверь
3. Выдвижной ящик (или яшн)
4. Полка
5. Столешница
6. Опоры (или колеса)



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тумба с мойкой ТМ02 (в дальнейшем - тумба) предназначена для многофункционального использования в медицинских учреждениях.

1.2 Тумба предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры тумбы, мм, не более:

длина.....	800
ширина.....	515
высота.....	860
2.2 Размеры корпуса /мойки, мм	
длина.....	800
ширина.....	500

2.3 Масса, кг, не более..... 36

2.4 Срок службы, лет, не менее..... 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

тумба с мойкой	1 шт.;
кран-смеситель	1 шт.;
сифон с принадлежностями	1 шт.;
паспорт	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Тумба (см. рис. 1) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса 1 с распашной дверью 2; накладной мойки 3; регулируемых опор 4. Корпус изготовлен из оцинкованной стали, покрыт порошковой полимерной краской.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Тумба поставляется потребителю в упакованном виде. Распакуйте тумбу, очистите от пыли.

5.2 Осмотрите тумбу для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

5.3 Выполните санитарную обработку тумбы путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 В процессе эксплуатации периодически затightивайте ослабленные крепежные соединения.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Тумба в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°С.

7.2 Хранить тумбу допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба со с/военной мойкой ТМ02, заводской номер 800017554.073-2017 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска..... М.П.

Подпись ответственного за приемку.....

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тумба со с/военной мойкой ТМ02, заводской номер..... упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки.....

Упаковку произвел..... М.П.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие тумбы техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня получения потребителем (даты продажи).

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Тумба со сдвоенной мойкой ТМ02, заводской номер _____
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретена _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей

организации
Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
_____ города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия


Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТУМБА
СО СДВОЕННОЙ МОЙКОЙ ТМ02

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт
ТМ02.00.000 ПС

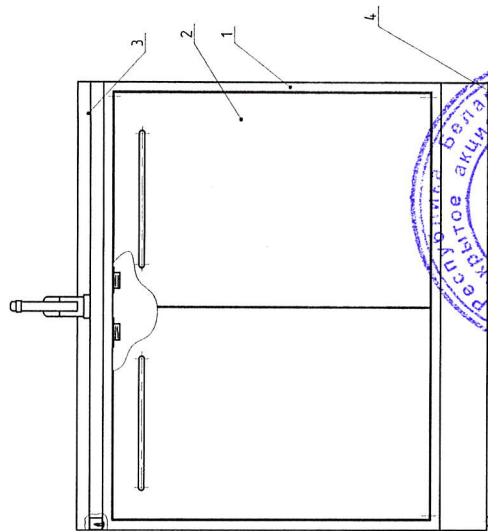

1. Корпус
2. Распашная дверь
3. Накладная мойка
4. Регулируемые опоры



1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Тумба с мойкой ТМ01 (в дальнейшем - тумба) предназначена для мытья рук в хирургических кабинетах медицинских учреждений.
- 1.2 Тумба предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры тумбы, мм, не более:

длина.....	500
ширина.....	515
высота.....	860
2.2 Размеры корпуса /мойки, мм	
длина.....	500
ширина.....	500
2.3 Масса, кг, не более.....	38
2.4 Срок службы, лет, не менее.....	5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

тумба с мойкой.....	1 шт.;
кран-смеситель.....	1 шт.;
сифон с принадлежностями.....	1 шт.;
паспорт.....	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Тумба (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса 1 с распашной дверью 2, мойки 3 и опор 4. Корпус изготовлен из оцинкованной стали, покрыт порошковой полимерной краской.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющими на качество изделия.

4.2 Тумба поставляется потребителю в упакованном виде.

Распакуйте тумбу, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите тумбу для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

4.4 Выполните санитарную обработку тумбы путем протирания ее

поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом, разрешенными к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь

5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

5.1 В процессе эксплуатации периодически загибайте ослабленные крепежные соединения.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Тумба в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить тумбу допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба с мойкой ТМ01, заводской номер _____
соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и
принята годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тумба с мойкой ТМ01, заводской номер _____ упакована
согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской
документации.

Дата упаковки _____ М.П.
Упаковку произвел _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие тумбы техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316, к.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предьявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Тумба с мойкой ТМ01, заводской номер
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретена

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца


СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТУМБА С МОЙКОЙ ТМ01

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324422.036 ТМ01 ПС

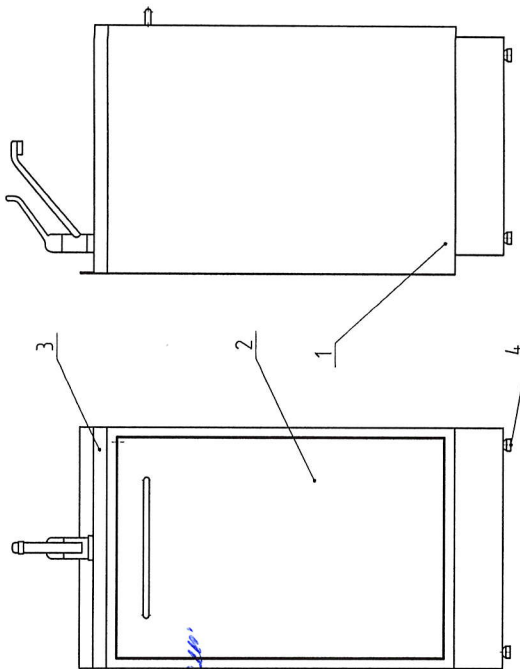

1. Корпус
2. Распашная дверь
3. Мойка накладная
4. Опоры регулируемые

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тумба угловая напольная ТУ1 (в дальнейшем - тумба) предназначена для многофункционального использования в медицинских учреждениях.

1.2 Тумба предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры тумбы, мм, не более:

длина.....	1080
ширина.....	800
высота.....	860
2.2 Масса, кг, не более.....	57
2.3 Допускаемая нагрузка на столешницу, кг.....	5±0,5
2.4 Допускаемая нагрузка на полку, кг.....	5±0,5
2.5 Срок службы, лет, не менее.....	5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

тумба	1 шт.;
паспорт	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Тумба (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса 1 с распашной дверью 2; столешницы 3 и опор 4. Корпус тумбы изготовлен из тонколистовой стали, покрыт порошковой полимерной краской; столешница – постформинг толщиной 28 мм.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Тумба поставляется потребителю в упакованном виде. Распакуйте тумбу, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите тумбу для определения ее состояние после транспортирования и хранения. Определите высоту тумбы с помощью опор 4.

4.4 Выполните санитарную обработку тумбы путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

5.1 В процессе эксплуатации периодически загибайте ослабленные крепежные соединения.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Тумба в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°С.

6.2 Хранить тумбу допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба угловая напольная ТУ1, заводской номер _____, соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тумба угловая напольная ТУ1, заводской номер _____, упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ м.п.
Упаковку произвел _____ м.п.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие тумбы техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3

В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу:

225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Тумба угловая напольная ТУ1, заводской номер _____
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретена _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
города

Подпись и печать

руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать

руководителя учреждения-владельца


СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТУМБА УГЛОВАЯ
НАПОЛЬНАЯ ТУ1

ТУ ВУ 800017554.073-2017


Паспорт

БИПЯ.324422.036 ТУ1 ПС

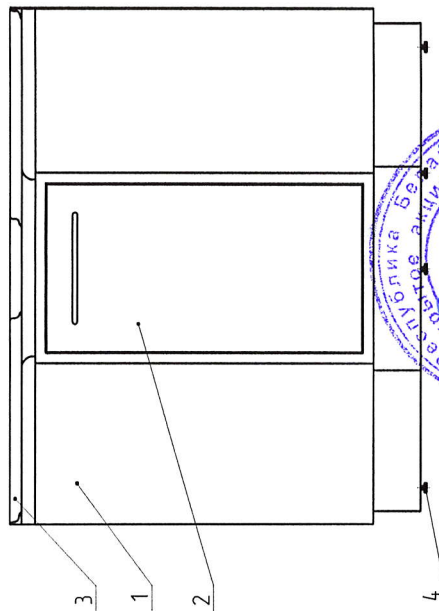

1. Корпус
2. Распашная дверь
3. Столешница
4. Опоры

Рисунок

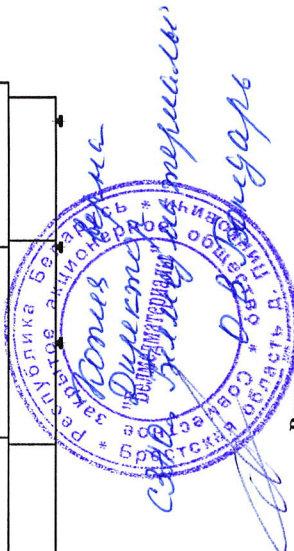

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тумба с выдвижными ящиками Т02, Т03, Т04, Т05, Т06 (в дальнейшем - тумба) предназначена для multifunctionalного использования в медицинских учреждениях.

1.2 Тумба предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры тумбы, мм, не более:

длина.....	500
ширина.....	515
высота.....	860
2.2 Размеры корпуса, мм:	
длина.....	500
ширина.....	480
2.3 Размеры столешницы, мм	
длина.....	500
ширина.....	500

2.4 Масса Т02/Т03/Т04/ Т05/Т06, кг, не более..... 40/43/46/48/49

2.5 Допускаемая нагрузка на столешницу, кг..... 5±0,5

2.6 Допускаемая нагрузка на ящик, кг..... 5±0,5

2.7 Срок службы, лет, не менее..... 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

тумба	1 шт.
паспорт	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Тумба (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса 1 с выдвижными ящиками 2, столешницы 3 и опор 4. Корпус тумбы изготовлен из тонколистовой стали, покрыт порошковой полимерной краской; столешница – постформинг толщиной 28 мм.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью усовершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Тумба поставляется потребителю в упакованном виде. Распакуйте тумбу, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите тумбу для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

4.4 Выполните санитарную обработку тумбы путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 В процессе эксплуатации периодически затightивайте ослабленные крепежные соединения.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Увеличение усилия перемещения ящика	Перекос, заедание, ослабление крепления узлов	Почистить направляющие, подтянуть крепеж
Появление люфтов в конструкции	Слабое крепление узлов	Подтянуть крепеж

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Тумба в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

7.2 Хранить тумбу допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба с выдвижными ящиками Т02, Т03, Т04, Т05, Т06 , заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тумба с выдвижными ящиками Т02, Т03, Т04, Т05, Т06, заводской номер _____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ М.П.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие тумбы техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем заинтересованной организации и подтвержденный наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н,

д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Претензии и рекламации должны регистрироваться в изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Тумба с выдвижными ящиками Т02, Т03, Т04, Т05, Т06,
заводской номер _____, ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретена _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
_____ города

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТУМБА

С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ

Т02 Т03 Т04 Т05 Т06

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт


БИПЯ.324422.036 Т02 ПС

БИПЯ.324422.036 Т03 ПС

БИПЯ.324422.036 Т04 ПС

БИПЯ.324422.036 Т05 ПС

БИПЯ.324422.036 Т06 ПС

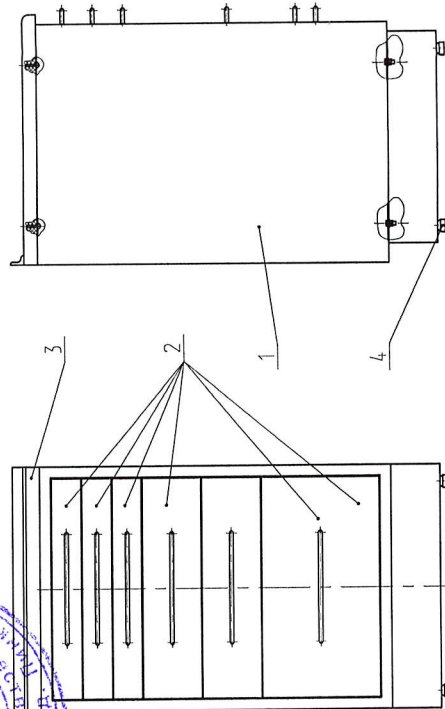

1. Корпус

2. Выдвижные ящики (количество ящиков определяется моделью тумбы, например тумба Т02 – количество ящиков: 2 и т.д.)

3. Столешница

4. Опоры

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тумба с распашной дверью Т01 (в дальнейшем - тумба) предназначена для многофункционального использования в медицинских учреждениях.

1.2 Тумба предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры тумбы, мм, не более:

длина..... 500
ширина..... 515
высота..... 870

2. Размеры корпуса, мм, не более:

длина..... 500
ширина..... 480

2.2 Размеры столешницы, мм, не более:

длина..... 500
ширина..... 500

2.3 Масса, кг, не более..... 36

2.4 Допускаемая нагрузка на столешницу, кг..... 5±0,5

2.5 Допускаемая нагрузка на полку, кг..... 5±0,5

2.6 Срок службы, лет, не менее..... 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

тумба..... 1 шт.;
паспорт..... 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Тумба (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса 1 с распашной дверью 2, столешницы 3 и опор 4. Корпус изготовлен из тонколистовой стали, покрыт порошковой полимерной краской; столешница – постформинг или ламинированная ДСП.

Исполнение тумбы – на опорах или колесах.

По заказу потребителя тумба может выпускаться, с выдвигаемым ящиком или с нишей или с поворотным столиком.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющими на качество изделия.

4.2 Тумба поставляется потребителю в упакованном виде. Распакуйте тумбу, очистите от пыли.

4.3 Осмотрите тумбу для определения ее состояние после транспортирования и хранения.

4.4 Выполните санитарную обработку тумбы путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлораммина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

5.1 В процессе эксплуатации периодически затightивайте ослабленные крепежные соединения.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Тумба в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить тумбу допускается в не отопляемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба с распашной дверью Т01, заводской номер _____
соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и
признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тумба с распашной дверью Т01, заводской номер _____ упакована
согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской
документации.

Дата упаковки _____ М.П.
Упаковку пронумеровать _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие тумбы техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, комн. 4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Тумба с распахнутой дверью Т01, заводской номер _____
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретена _____

_____, дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию _____

_____, дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

_____, _____
города

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия


Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТУМБА
С РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ
Т01

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт
БИП.324422.036 Т01 ПС

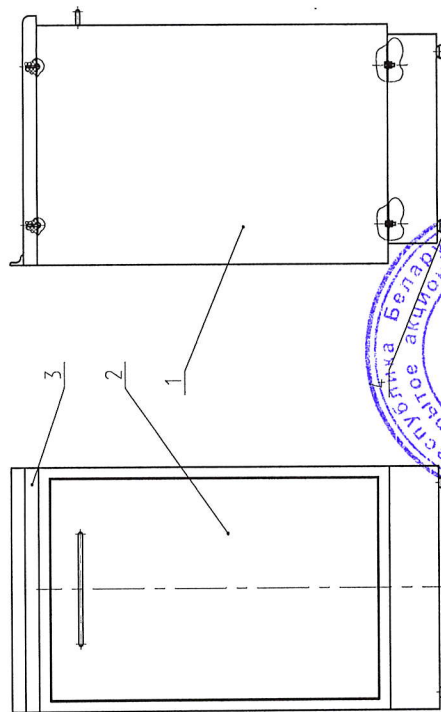

1. Корпус
2. Распахнутая дверь
3. Столешница
4. Опоры (или колеса)

Рисунок



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тумба с распашными дверьми Т01.2 (в дальнейшем - тумба) предназначена для многофункционального использования в медицинских учреждениях.

1.2 Тумба предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры тумбы, мм:

длина..... 1000
ширина..... 515
высота..... 860
2.1 Размеры корпуса, мм:

длина..... 1000
ширина..... 480
Размеры столешницы, мм:

длина..... 1000
ширина..... 500
2.3 Масса, кг, не более..... 46
2.4 Допускаемая нагрузка на столешницу, кг..... 25±1
2.5 Допускаемая нагрузка на полку, кг..... 5±0,5
2.6 Срок службы, лет, не менее..... 5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

тумба..... 1 шт.;
полка..... 3 шт.;
панель пристенная..... 1 шт.;
заглушка к панели пристенной..... 2 шт.;
шпунт (саморез)..... 6 шт.;
паспорт..... 1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Тумба (см. рис. 1) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса 1 с распашными дверьми 2; столешницы 3; регулируемых опор 4. Корпус тумбы металлический, покрыт порошковой полимерной краской; столешница – постформинг.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Тумба поставляется потребителю в упакованном виде. Распакуйте тумбу, очистите от пыли.

5.2 Осмотрите тумбу для определения ее состояния после транспортирования и хранения. Прикрутите пристенную планку, предварительно сняв декоративную часть, с помощью шпунтов (саморезов).

5.3 Выполните санитарную обработку тумбы путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Появление люфтов в конструкции	Ослабло крепление узлов	Подтянуть болты и другие крепежные детали

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Тумба в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°С.

7.2 Хранить тумбу допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба с распашными дверьми Т01.2, заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Тумба с распашными дверьми Т01.2, заводской номер _____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ М.П.
Упаковку произвел _____

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие тумбы техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня получения потребителем (даты продажи).

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт изделия, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Пинский р-н,
д. Пинковичи, ул. Полева, 31б, комн 4.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Тумба с распашными дверьми Т01.2, заводской номер _____
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретена _____ дата, подпись и штамп торгующей организации

Введена в эксплуатацию _____ дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия


Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

ТУМБА С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЬМИ Т01.2

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт
Т01.2.00.000 ПС

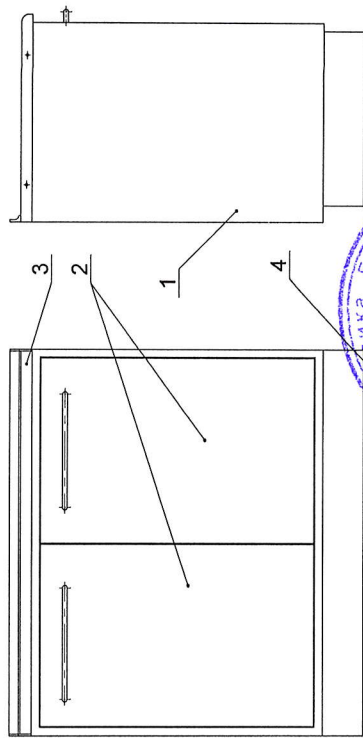

1. Корпус
2. Распашные двери
3. Столешница
4. Регулируемые опоры

Рисунок



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик врача стоматолога СВ4 (далее – столик) предназначен для размещения медицинских инструментов и материалов.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры столика, мм, не более:

длина.....	590
ширина.....	510
высота.....	795
2.2 Размеры корпуса, мм	
длина.....	500
ширина.....	480
2.3 Масса, кг, не более.....	30
2.4 Номинальная нагрузка на ящик (далее – нагрузка), кг.....	5±0,5
2.5 Номинальная нагрузка на столешницу (далее – нагрузка), кг.....	5±0,5
2.6 Усилие для перемещения столика с нагрузкой, Н, не более.....	100
2.7 Срок службы, лет, не менее.....	5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- столик.....	1 шт.
- полка стеклянная.....	1 шт.
- паспорт.....	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Столик (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из стойки 1, корпуса 2, трех выдвижных ящиков 3, 4, 5, 6, стеклянной полки 7, двух опорных колес 8 и двух опорных колес с тормозом 9. Верхний лоток имеет отбортовку с трех сторон высотой 15 мм.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Столик поставляется потребителю в упакованном виде.

4.3 Распакуйте столик, очистите его от пыли. Распакуйте стеклянную полку.

4.4 Осмотрите столик для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.5 Положите стеклянную полку 7 на корпус 2.

4.6 Выполните санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамин (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

4.7 Для планового обслуживания ящика необходимо приложить небольшое усилие.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации столика необходимо периодически загибать ослабленные болтовые и винтовые соединения.

5.2 Во избежание падений и опрокидывания предметов, расположенных на полке столика, необходимо передвигать столик плавно, без рывков и ударов, не пересекать через пороги и другие препятствия.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Таблица

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Увеличение усилия перемещения ящика	Перекоз, заедание, ослабление крепления узлов	Почистить направляющие, подтянуть крепеж
Повышение люфтов в конструкции	Слабое крепление узлов	Подтянуть крепеж

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

7.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик врача стоматолога СВ4, заводской № _____ соответствует техническим условиям

ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик врача стоматолога СВ4, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п. _____ Подпись _____

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу:

225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Столик врача стоматолога СВ4 заводской №
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретен _____ дата, подпись и штамп торгующей организации
Введен в эксплуатацию _____ дата, подпись и штамп обслуживающей организации
Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____ города _____

Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


СТОЛИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА

СВ4

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324422.036.СВ4 ПС

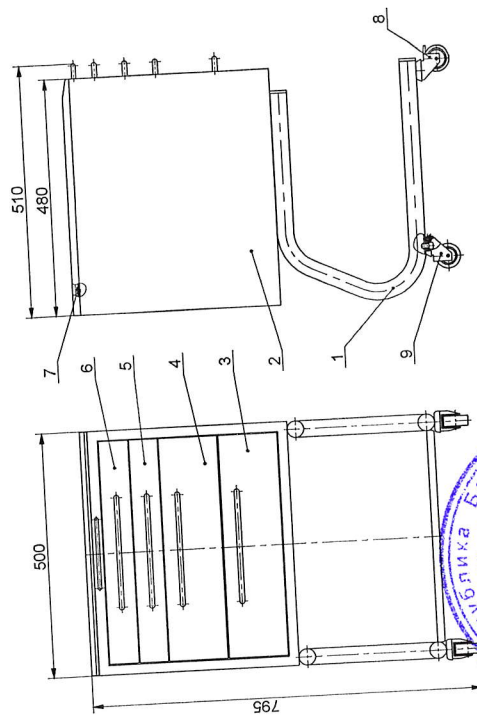

7. Полка стеклянная
8. Колеса с тормозом
9. Колеса без тормоза

Рисунок



1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик врача стоматолога СВЗ (далее – столик) предназначен для размещения медицинских инструментов и материалов.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры столика, мм, не более:

длина.....590
ширина.....510
высота.....795
2.2 Размеры корпуса, мм
длина.....500
ширина.....480

2.3 Масса, кг, не более.....30

2.4 Номинальная нагрузка на ящик (далее - нагрузка), кг.....5±0,5

2.5 Номинальная нагрузка на столешницу (далее – нагрузка), кг.....5±0,5

2.6 Усилие для перемещения столика с нагрузкой, Н, не более.....100

2.7 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- столик.....1 шт.
- полка стеклянная.....1 шт.
- паспорт.....1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Столик (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из стойки 1, корпуса 2, трех выдвижных ящиков 3, 4, 5 стеклянной полки 6, двух опорных колес 7 и двух опорных колес с тормозом 8. Верхний лоток из нержавеющей стали имеет отбортовку с трех сторон высотой 15 мм.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Столик поставляется потребителю в упакованном виде.

4.3 Распакуйте столик, очистите его от пыли. Распакуйте стеклянную полку.

4.4 Осмотрите столик для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.5 Положите стеклянную полку 5 на корпус 2.

4.6 Выполните санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством Здравоохранения Республики Беларусь.

4.7 Для плавного открытия ящика необходимо приложить небольшое усилие.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации столика необходимо периодически затгивать ослабленные болтовые и винтовые соединения.

5.2 Во избежание падений и опрокидывания предметов, расположенных на полке столика, необходимо передвигать столик плавно, без рывков и ударов, не переезжать через пороги и другие препятствия.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Таблица

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Увеличение усилия перемещения ящика	Перекоз, заедание, ослабление крепления узлов	Почистить направляющие, подтянуть крепеж
Появление люфтов в конструкции	Слабое крепление узлов	Подтянуть крепеж

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°С.

7.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик врача стоматолога СВЗ, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П. _____
Подпись ответственного за приемку _____

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик врача стоматолога СВЗ, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ М.П. _____
Упаковку произвел _____ Подпись _____

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Столик врача стоматолога СВЗ, заводской №
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
города _____

Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца

Копия
Директор
СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»
О.В. Бондарь


СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

СТОЛИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА СВЗ

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324422.036.СВЗ ПС

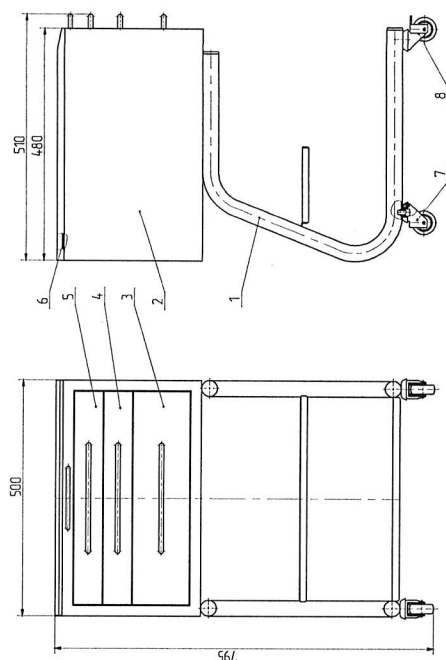

1. Стойка
2. Корпус
3, 4, 5 Ящики выдвижные

6. Полка стеклянная
7. Колеса без тормоза
8. Колеса с тормозом

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик врача стоматолога СВ2 (далее – столик) предназначен для размещения медицинских инструментов и материалов в медицинских учреждениях.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры столика, мм, не более:

длина.....	590
ширина.....	510
высота.....	795
2.2 Размеры корпуса, мм	
длина.....	500
ширина.....	480
2.3 Масса, кг, не более.....	30
2.4 Номинальная нагрузка на ящик (далее – нагрузка), кг.....	5±0,5
2.5 Номинальная нагрузка на столешницу (далее – нагрузка), кг.....	5±0,5
2.6 Усилие для перемещения столика с нагрузкой, Н, не более.....	100
2.7 Срок службы, лет, не менее.....	5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- столик.....	1 шт.
- полка стеклянная.....	1 шт.
- паспорт.....	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Столик (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из стойки 1, корпуса 2, двух выдвижных ящиков 3,4, стеклянной полки 5, открытых полок 8,9, двух опорных колес 6 и двух опорных колес с тормозом 7. Столик изготовлен из металла, покрыт порошковой полимерной краской. Верхний лоток имеет отбортовку с трех сторон высотой 15 мм.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Столик поставляется потребителю в упакованном виде.

4.3 Распакуйте столик, очистите его от пыли. Распакуйте стеклянную полку.

4.4 Осмотрите столик для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.5 Положите стеклянную полку 5 на лоток корпуса 2.

4.6 Выполните санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

4.7 Для плавного дождывания ящика необходимо приложить небольшое усилие.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации столика необходимо периодически загибать ослабленные болтовые и винтовые соединения.

5.2 Во избежание падений и опрокидывания предметов, расположенных на полке столика, необходимо передвигать столик плавно, без рывков и ударов, не пересекать через пороги и другие препятствия.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Таблица

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Увеличение усилия перемещения ящика	Перекос, засаждение, ослабление крепления узлов	Почистить, направляющие, подтянуть крепёж
Повреждение лафетов в конструкции	Слабое крепление узлов	Подтянуть крепёж

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°С.

7.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик врача стоматолога СВ2, заводской № _____ соответствует техническим условиям

ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик врача стоматолога СВ2, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ м.п. _____ Подпись
Упаковку произвел _____

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его част при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая ,31б, к4.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Столик врача стоматолога СВ2, заводской №

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
"Белмедматериалы" города _____

Подпись и печать
ремонтного предприятия

Подпись и печать
учреждения - владельца

Копия
Директору
СЗАО, г. Житомир
А. В. Богданов

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


СТОЛИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА

СВ2

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИП.324422.036.СВ2 ПС

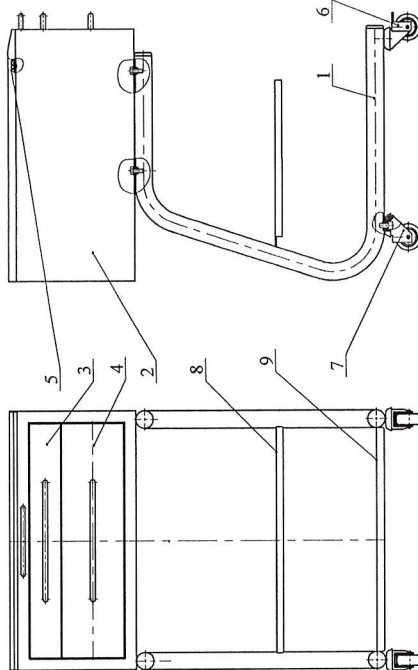

1. Стойка
2. Корпус
3,4 Ящики выдвижные
5. Полка стеклянная

6. Колеса Ø 50мм с тормозом
7. Колеса Ø 50мм без тормоза
8. Полка
9. Полка

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик врача стоматолога СВ1 (далее – столик) предназначен для размещения медицинских инструментов и материалов.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры столика, мм, не более:

длина.....	590
ширина.....	510
высота.....	795
2.2 Размеры корпуса, мм	
длина.....	500
ширина.....	480
2.3 Масса, кг, не более.....	30
2.4 Номинальная нагрузка на ящик (далее – нагрузка), кг.....	5±0,5
2.5 Номинальная нагрузка на столешницу (далее – нагрузка), кг.....	5±0,5
2.6 Усилие для перемещения столика с нагрузкой, Н, не более.....	100
2.7 Срок службы, лет, не менее.....	5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- столик.....	1 шт.
- полка стеклянная.....	1 шт.
- паспорт.....	1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Столик (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из стойки 1, корпуса 2, одного выдвижного ящика 3, стеклянной полки 4, двух опорных колес 6 и двух опорных колес с тормозом 5. Столик изготовлен из металла, покрыт порошковой полимерной краской. Верхний лоток имеет отбортовку с трех сторон высотой 15 мм.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Столик поставляется потребителю в упакованном виде.

4.3 Распакуйте столик, очистите его от пыли. Распакуйте стеклянную полку.

4.4 Осмотрите столик для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.5 Положите стеклянную полку 4 на корпус 2.

4.6 Выполните санитарную обработку столика путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любым методом разрешенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

4.7 Для полного высыхания ящика необходимо приложить небольшое усилие.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации столика необходимо периодически загибать ослабленные болтовые и винтовые соединения.

5.2 Во избежание падений и опрокидывания предметов, расположенных на полке столика, необходимо передвигать столик плавно, без рывков и ударов, не перезажать через пороги и другие препятствия.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Таблица

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Увеличение усилия перемещения ящика	Перекоз, заедание, ослабление крепления узлов	Почистить направляющие, подтянуть крепеж
Появление люфтов в конструкции	Слабое крепление узлов	Подтянуть крепеж

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

7.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик врача стоматолога СВ1, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.073-2017 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ М.П. _____

Подпись ответственного за приемку _____

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик врача стоматолога СВ1, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____ М.П. _____

Упаковку произвел _____ М.П. _____ Подпись _____

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.073-2017 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу:

225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Столик врача стоматолога СВ1 заводской №
ТУ ВУ 800017554.073-2017

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
города

Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца

О. В. Янгир

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


СТОЛИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА

СВ1

ТУ ВУ 800017554.073-2017

Паспорт

БИПЯ.324422.036.СВ1 ПС

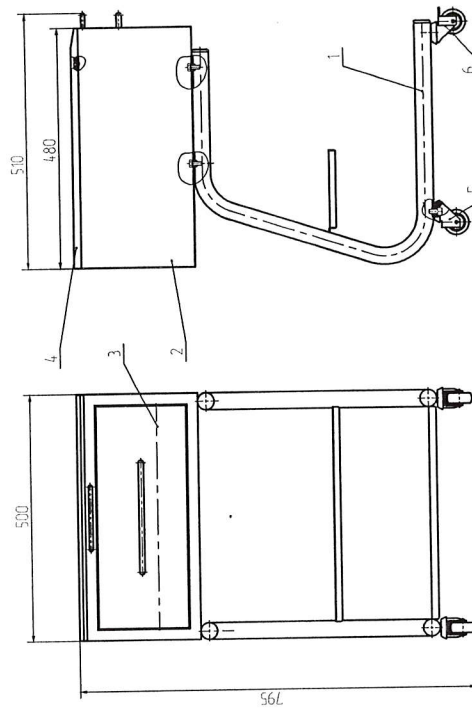

1. Стойка
2. Корпус
3. Ящик выдвижной

4. Полка стеклянная
5. Колеса с тормозом
6. Колеса без тормоза

Рисунок