

Инструкция по применению для медицинского изделия Lady Check Тест для определения беременности, тест-полоска, 1 шт. Чувствительность: 20 мМЕ / мл.

Инструкция: перед применением теста для определения беременности следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

Точность: свыше 99%, если тест используется со дня ожидаемого начала менструации.

Принцип действия. Во время беременности организм женщины вырабатывает гормон беременности – ХГЧ (хорионический гонадотропин человека). На ранних стадиях беременности количество ХГЧ в организме увеличивается очень быстрыми темпами и через 1-2 недели после зачатия достигает концентрации 25-100 мМЕ/мл. Зачатие происходит в момент овуляции, т.е. примерно в середине менструального цикла. Таким образом, на момент тестирования концентрация ХГЧ как минимум вдвое превышает порог чувствительности теста.

Сроки тестирования. Тесты с чувствительностью 20 мМЕ/мл предназначены для использования на ранних сроках беременности, с первого дня задержки.

Обязательно ли использовать утреннюю мочу. Со дня ожидаемого начала менструального цикла тест можно проводить в любое время суток. Если тестирование проводить раньше ожидаемого срока менструации, рекомендуется использовать утреннюю мочу этого дня, поскольку утром концентрация гормона ХГЧ максимальна. Перед проведением теста избегайте чрезмерного употребления жидкостей и мочегонных средств. В противном случае, если во время раннего тестирования получен результат «вы не беременны», возможно, что уровень гормона ХГЧ еще недостаточно высок для обнаружения.

Условия хранения. Хранение должно быть вдали от прямых солнечных лучей, влаги и тепла, при температуре от +4°C до +30°C. Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте. Только для одноразового использования.

Как рассчитать предполагаемый день начала цикла. Чтобы рассчитать день предполагаемого начала менструации, используйте свою обычную продолжительность цикла, считая количество дней с первого дня менструации до последнего дня перед началом следующей менструации. Если цикл нерегулярный, необходимо учитывать самый длинный цикл за последние месяцы. Если вы не можете рассчитать, когда должна начаться менструация, рекомендуется проводить тестирование не ранее чем через 19 дней после последнего незащищенного полового акта.


Процедура проведения теста

Тест-полоска

1. Сбор и обработка образцов. Соберите образец мочи в чистый и сухой контейнер (Образцы первой мочи, собранной утром, содержат более высокую концентрацию HCG).
2. Осуществление теста. Извлеките тест-полоску из индивидуальной упаковки. Погрузите полоску в мочу кончиком стрелки, направленным к стакану для сбора. Не погружайте кончик в мочу больше максимальной линии MAX. Выньте полоску из стакана минимум через 15 секунд и положите ее на непоглощающую чистую поверхность. Результаты будут готовы через 5 минут. Утилизируйте тест после использования.
- 3.

Чтение

результата.

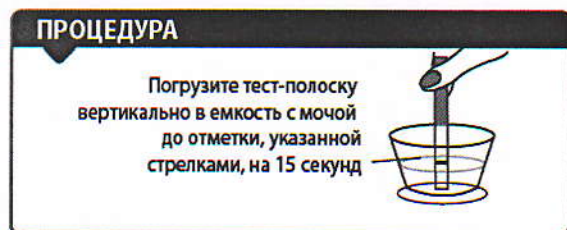

Оценка результата

Отрицательный – ВЫ НЕ БЕРЕМЕННЫ

Если в зоне контроля в течение 10 минут появится одна линия, то тест выполнен правильно и беременности нет.

Положительный – ВЫ БЕРЕМЕННЫ

Если в течение 5-10 минут в зоне контроля появится две линии, то тест выполнен правильно – беременность есть. Даже бледная вторая линия свидетельствует о положительном результате.

Ошибочный - ТЕСТ ВЫПОЛНЕН НЕПРАВИЛЬНО

Если не появляется ни одной линии, то тестирование выполнено неправильно – попало слишком много, либо слишком мало мочи (именно для этого в тестах есть контрольная линия). В этом случае необходимо повторить тест.

Могут ли повлиять на результаты какие-либо лекарства или заболевания?

- Препараты для лечения бесплодия, содержащие гормон ХГЧ, могут стать причиной ошибочных результатов (такие препараты вводятся обычно в виде инъекций, и тестирование в течение небольшого срока после инъекции может привести к ложному результату «вы беременны»)
- Другие препараты для лечения бесплодия (например, кломифена цитрат), обезболивающие препараты, гормональная контрацепция (например, противозачаточные таблетки) не должны влиять на результат
- Если вы недавно перестали использовать гормональную концентрацию или принимаете такие средства для лечения бесплодия, как кломифена цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, следствием чего может стать преждевременное тестирование
- Если вы недавно были беременны (даже если вы не выносили ребенка в течение полного срока), может быть получен ложный результат «вы беременны».
- Внематочная беременность, киста яичника, менопауза и некоторые очень редкие заболевания могут стать причиной ошибочных результатов
- Если получен результат «вы беременны», впоследствии вы можете обнаружить, что вы не беременны, поскольку беременность может естественным способом прерваться на ранних сроках.
- Если вы получили неожиданные результаты, обсудите их со своим врачом

Внимание!

- Не следует оценивать результат теста позднее чем через 10 минут
- При положительном результате теста вам следует обратиться к врачу
- Если менструация задерживается, а результат двух тестирований отрицательный, вам следует обратиться к врачу.

Арт. 0603-001. РУ

Производитель: PharmLine s.r.o. Адрес: Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic (Чешская Республика). E-mail: info@PharmLine.cz. Tel.: +42 060 819 60 35. Адрес места производства: Room 401, Building B Innovation Entrepreneurship Base, High District 264205 Weihai City, Shandong Province PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. Уполномоченная организация/Импортёр в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина 2, эт. 3 пом. III ком. 4. Тел./факс: +7 495 665 80 58. Уполномоченная организация в РБ: ООО "КСАНТЕРИНИ", Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, офис 410. E-mail: aq@ksanterini.by, тел./факс.+375 447723333.

PharmLine s.r.o.

Dobronická 1257,

Kunratice, 148 00

Praha 4

Белашин Е.

06.06.2022.