



Версия/Version: № 6, 15.11.2018



Всю продукцию АО «ОЭЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине [tdvladmiva.ru](http://tdvladmiva.ru)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
набора жидкостей эндодонтических для лечения пульпитов  
**«ПУЛЬПЕВИТ®»**  
по ТУ 9391-088-45814830-2004

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Набор жидкостей эндодонтических для лечения пульпитов «Пульпевит» (далее по тексту – набор жидкостей «Пульпевит») предназначен для обезболивания при медикаментозных или травматических пульпитах и периодонтитах, при острых пульпитах перед применением мышьяковой пасты (жидкость № 1), для антисептической обработки каналов при осложненном пульпите, резекции верхней части корня (жидкость № 2), а также для лечения осложненного кариеса молочных зубов (жидкость № 3).

**СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

**Жидкость № 1** содержит: лидокаина гидрохлорид, обеспечивающий болеутоляющее действие; хлорфенол, крезол – антисептики широкого спектра действия, не вызывающие раздражений, и лишь незначительно мумифицирующие нервные волокна. Жидкость можно использовать в качестве компресса длительного действия для «купирования» пульпита в случаях невозможности продолжить лечение.

**Жидкость № 2** содержит антисептики: фенол, эвгенол, а также формальдегид, что обеспечивает антисептические свойства и глубокую мумификацию, а также стерилизацию корневых каналов зубов (в частности, после кисты, абсцесса, свища). В состав входит дексаметазон (0,05%) – кортикостероид, значительно снижающий болезненность периапикальных тканей.

**Жидкость № 3** (формокрезол) содержит формальдегид (19%) и крезол (35%). Формокрезол в зависимости от продолжительности воздействия, приводит к частичной или полной мумификации корневой пульпы молочного зуба.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**ВНИМАНИЕ:** Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

**Жидкость № 1** применяют, используя турунды или ватные шарики (компрессы), которые пропитывают и слегка отжимают. При глубоком кариесе и острых пульпитах тампон, пропитанный жидкостью № 1, положить в полость (как можно ближе к пульпе) под временную пломбу, стараясь не нажимать. В случаях, когда пациент не может по каким-либо причинам продолжить лечение, препарат можно использовать в качестве непроницаемого компресса (пропитанный ватный шарик) длительного действия под временной пломбой. Через некоторое время (5-10 дней), которое определяется врачом, можно приступить к окончательному лечению зуба.

**Жидкость № 2** применяют, используя турунды, которые пропитывают и тщательно отжимают, не допуская подтекание препарата, так как высокая концентрация формальдегида и фенола может вызвать неприятные ощущения. Пропитанными турундами обрабатывают

каналы, а также используют для временного компресса. При смешивании жидкости № 2 с окисью цинка образуется незатвердевающая антисептическая лечебная паста для временного пломбирования.

*Жидкость № 3 (формокрезол) применяют при пульпотомии двумя способами: кратковременно и пролонгированно.*

**Для кратковременного применения** после ампутации коронковой пульпы ватный тампон, пропитанный формокрезолом, помещают на рану и оставляют на 3-5 минут. Затем тампон удаляют, ампутированную рану покрывают цинкоксидэвгенольным цементом («Эодент» (быстротвердеющий) и проводят постоянное пломбирование.

**Для пролонгированного применения** пропитанную формокрезолом ватную турунду помещают на ампутированную рану под временным герметичным покрытием («Дентин – порошок»). Через 5-7 дней турунду удаляют, ампутированную рану покрывают цинкоксидэвгенольным цементом и проводят постоянное пломбирование.

#### **ФОРМА ВЫПУСКА:**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Жидкость № 1 (флакон)    | - 15 мл |
| Жидкость № 2 (флакон)    | - 15 мл |
| Жидкость № 3 (флакон)    | - 15 мл |
| Крышка-капельница        | - 1 шт. |
| Инструкция по применению | - 1 шт. |
| Картонная упаковка       | - 1 шт. |

Допускается выпуск набора жидкостей «Пульпевит» в виде отдельных изделий или другой комплектности.

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Хранить в сухом темном месте, в плотно закрытой таре при температуре **от +5°C до +25°C**. Срок годности - **3 года**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от **-30°C до +30°C**.

#### **ВНИМАНИЕ:**

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.*

*Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.*

*Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.*

*Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.*

*В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.*

*О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.*

#### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Остатки набора жидкостей «Пульпевит» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04653 от 21.12.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

**Акционерное общество**

**“Опытно-экспериментальный завод”**

**“ВладМиВа” (АО “ОЭЗ “ВладМиВа”)**

308023, Россия, г. Белгород, ул. Студенческая, 19

тел. (4722) 200-555, факс (4722) 20-10-10

postmaster@vladmiva.ru

[www.vladmiva.ru](http://www.vladmiva.ru)

## **Символы/ Symbols**



- Внимание/Caution (Attention)



- Производитель/Manufacturer



- Беречь от влаги/Store in a dry place



- Не использовать повторно/Do not reuse



- Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight




- Использовать до/Expiry date



- Код партии/Batch number



- Температурный диапазон/Temperature limitation

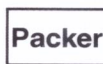

- Упаковщик/Packer



- Дата изготовления/Date of manufacture



- Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

**RU** – русский язык/Russian, **EN** – английский язык/English, **ES** – испанский язык/Spanish, **UZ** – узбекский язык/Uzbek, **UK** – украинский язык/Ukrainian, **KK** – казахский язык/Kazakh, **PT** – португальский язык/Portuguese, **FR** – французский язык/French - коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/ Language codes according to ISO 639-1:2002.



- Не использовать при повреждении упаковки / Not to be used in case package is damaged