
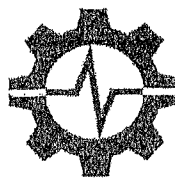


Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Республиканское унитарное предприятие
«Медтехноцентр»

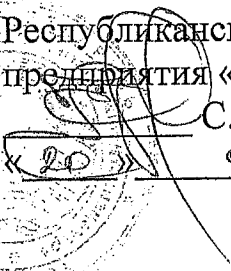

Утверждаю


Главный инженер
Республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»

 С.Ф. Кравец
« 20 » 06 2022 г.


СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СММ

ТУ ВУ 192963249.046-2018

Инструкция по применению

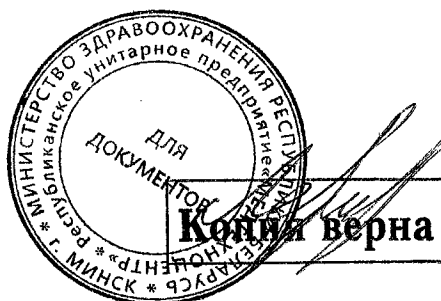

Начальник КТО
Республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»

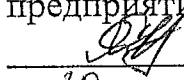 Е.В. Яковлева
« 20 » 06 2022 г.

Столы медицинские металлические СММ предназначены для использования в лечебных учреждениях с целью хранения настольных изделий, приборов, стерильных инструментов. Каркас стола – конструкция из металла с нанесением полимерного покрытия или нержавеющей стали. Столешница может быть выполнена из различного материала (нержавеющей стали, ламинированного ДСП, постформинга и т.д.).

Для увеличения срока эксплуатации столов медицинских металлических СММ рекомендуется:

производить очистку и дезинфекцию поверхностей изделия путем протирания мягкой тканью, смоченной в моющем и дезинфицирующем растворе, разрешенном к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь с последующей просушкой;

при заполнении ящиков, полок следует размещать все предметы (вещи) таким образом, чтобы равномерно распределить нагрузку по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (опорам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов;

не допускается нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков – более 7 кг, на полки – более 15 кг, на столешницу – более 70 кг;

во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется держать их закрытыми; нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг; усилие выдвижения ящиков – до 3 кг;

во избежание набухания щитов с поверхностью облицованной ламинированной пленки и/или бумажно-слоистого пластиком, не допускайте скопления воды на столешнице;

следить, чтобы температура приборов или посуды, находящихся в контакте с поверхностью облицованной ламинированной пленки и/или бумажно-слоистого пластиком, не превышала 120 градусов.

не пользоваться изделием, если какая-либо часть конструкции повреждена или отсутствует.

При эксплуатации изделия запрещается:

содержать изделие в сырых, не отапливаемых, не проветриваемых помещениях;

передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызывать механических повреждений;

устанавливать изделие на неровную поверхность;

продолжительное воздействие прямых солнечных лучей;

попадание воды в зазоры соединения деталей;

подвергать поверхности изделия воздействию растворов кислот, щелочей, растворителей;

подвергать поверхность изделия механическим воздействиям, сопровождающимся нарушением целостности покрытия (царапины, порезы);

использовать стол вблизи нагревательных устройств и легко воспламеняющихся средств;

перемещать изделие и в нагруженном состоянии

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи.

При нарушении условий эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются.