


Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Республиканское унитарное предприятие
«Медтехноцентр»

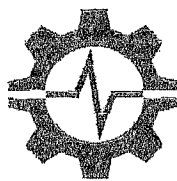

Утверждаю

Главный инженер
Республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»

С.Ф. Кравец

« 20 » 06 2022 г.

ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ
ТО ВУ 192963249.125-2018

Инструкция по применению

Начальник КТО
Республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»

Е.В. Яковлева
« 20 » 06 2022 г.



Копия верна

Шкафы моделей ШП, ШХ, ШЛ, ШМ предназначены для использования в лечебных учреждениях с целью хранения приборов, лабораторной посуды, реактивов, лечебных средств. Каркас шкафа – деревянная конструкция, установленная на металлическую раму из стальной трубы квадратного сечения с нанесением полимерного покрытия. Дверцы могут быть выполнены из стекла, или ламинированного ДСП.

Для увеличения срока эксплуатации шкафов рекомендуется:

производить очистку и дезинфекцию поверхностей изделий путем протирания мягкой тканью, смоченной в моющем и дезинфицирующем растворе, разрешенном к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь с последующей просушкой;

при заполнении полок следует размещать все предметы (вещи) таким образом, чтобы равномерно распределить нагрузку по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам), более легкие – ближе к центру. Высокие элементы рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов;

не допускается нагрузки на полки (в особенности с приложением усилия к одной точке) более 15 кг;

очищать элементы из стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань. Для чистки используйте специальные средства для стекол. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке. Помните, стеклянные поверхности являются хрупкими и поэтому могут разбиться в случае удара. Не проводите по поверхностям, и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами;

во избежание перекосов дверей рекомендуется держать их закрытыми; нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;

во избежание набухания щитов и отклейки ламинированной пленки и/или бумажно-слоистого пластика, не допускайте скопления воды на полках;

следить, чтобы температура приборов или посуды, находящихся в контакте с поверхностью облицованной ламинированной пленки и/или бумажно-слоистого пластиком, не превышала 120 градусов;

не пользоваться изделием, если какая-либо часть конструкции повреждена или отсутствует.

При эксплуатации изделия запрещается:

содержать изделие в сырых, не отапливаемых, не проветриваемых помещениях;

передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызывать механических повреждений;

устанавливать изделие на неровную поверхность;
продолжительное воздействие прямых солнечных лучей;
попадание воды в зазоры соединения деталей;
подвергать поверхности изделия воздействию растворов кислот, щелочей, растворителей;
подвергать поверхность изделия механическим воздействиям, сопровождающимся нарушением целостности покрытия (царапины, порезы);
использовать шкаф вблизи нагревательных устройств и легко воспламеняющихся средств;
перемещать изделие в нагруженном состоянии

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи.

При нарушении условий эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются.