

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАКОЛЕННИКА ПИО-03

Наколенник (далее изделие) назначается при артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Режим использования изделия определяется врачом - ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Регистратура (медкабинет): **8-0212-67-14-12; магазин-прокат 8-0212-67-14-22.**

E-mail: vitebsk@bpovc.by; Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СПЕЦБРЮК НА ПАРНУЮ АМПУТАЦИЮ БЕДЕР ПИО-04-01,
СПЕЦБРЮК НА ПАРНУЮ АМПУТАЦИЮ ГОЛЕНИ ПИО-04-02,
СПЕЦБРЮК НА СОЧЕТАННУЮ АМПУТАЦИЮ БЕДРА И ГОЛЕНИ ПИО-04-03**

Спецбрюки на парную ампутацию бедер, голени и на сочетанную ампутацию бедра и голени ПИО-04 (далее изделие) назначается при двухсторонней ампутации нижних конечностей независимо от длины культей, в случае выявления противопоказаний к протезированию. Кроме того, спецбрюки, могут быть назначены дополнительно, к протезам при двухсторонней экзартикуляции в тазо - бедренных суставах или двухсторонних культях бедер.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие необходимо надевать на нательное белье.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку не производить;
- протирать поверхность брюк раствором нейтральных моющих средств с помощью губки, затем сухой тряпкой;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- глажению не подвергать;
- химчистку производить с применением всех общепринятых органических растворителей;
- очищать застёжку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Регистратура (медкабинет): 8-0212-67-14-12; магазин-прокат 8-0212-67-14-22.

E-mail: vitebsk@bpovc.by; Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШИНЫ МНИИТО ПИО-08, ; ШИНЫ ВИЛЕНСКОГО ПИО-08-01, ШИНКИ СИТЕНКО ПИО-08-03

1. Шины ПИО-08, ПИО-08-01, шинка ПИО-08-03 (далее изделие) предназначены для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

2. Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3. При серийном изготовлении изделия ПИО-08-01 размер изделия определяется расстоянием разведения ног ребенка (расстояние между подколенными ямками при разведении ног ребенка) в соответствии с таблицей 1.

3.1. Расстояние максимального разведения ног ребенка определяет лечащий врач травматолог-ортопед.

Таблица 1

Размер изделия	Расстояние разведения ног минимум/максимум, (мм)
12	120-170
14	140-190
16	160-210
18	180-230
20	200-250
22	220-270
24	240-290
26	260-310
28	280-330
30	300-350
32	320-370
34	340-390
36	360-410

4. Режим использования изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5. Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

6. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделия не стирать;
- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- глажению не подвергать;
- уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости, и потертости.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Ладо 113.**

Регистратура (медкабинет): 8-0212-67-14-12; магазин-прокат 8-0212-67-14-22.

E-mail: vitebsk@bpovc.by; Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЯСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА ПИО-15

Пояс для крепления протеза ПИО-15, ПИО-15-ХХ (далее - изделие) предназначен для крепления протезов бедра (голени) согласно медицинскому назначению.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Изделие рекомендуется надевать на нательное бельё. Необходимо застегнуть изделие, начинать нужно с нижней пуговицы, затем затянуть и завязать шнуровку.

Надеть протез и пристегнуть к поясу при помощи деталей крепления.

Режим ношения изделия определяется использованием (ношением) протеза. Следует выполнять санитарно-гигиенические мероприятия.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушку производить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- утюжить при температуре 60-70° С, исключая эластичные вставки и детали крепления.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Регистратура (медкабинет): 8-0212-67-14-12; магазин-прокат 8-0212-67-14-22.

E-mail: vitebsk@bpovc.by; Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПНО-17

Приспособление для поддержания нижней конечности ПНО-17 (далее приспособление) предназначено для разгрузки тазобедренного сустава при ортопедических заболеваниях бедренной кости и тазобедренного сустава, таких как остеохондропатия тазобедренного сустава, для разгрузки тазобедренного сустава.

Противопоказаниями к назначению приспособления являются:

- психоэмоциональная непереносимость;
- заболевания кожных покровов;
- аллергические реакции на материал;
- наличие сгибательных контрактур области тазобедренных и коленных суставов.

Изделие изготавливается по индивидуальному заказу.

Режим ношения приспособления - по рекомендации врача-травматолога-ортопеда.

Приспособление рекомендуется надевать на одежду.

Приспособление по объему регулируется при помощи штрипок и капок, ремней.

Для обеспечения правильного ухода за приспособлением необходимо:

- кожаные части протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытереть насухо;
- не подвергать приспособление стирке и глажению.

Приспособление ремонту не подлежит.



Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Регистратура (медкабинет): 8-0212-67-14-12; магазин-прокат 8-0212-67-14-22.

E-mail: vitebsk@bpovc.by; Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА ПОДУШКУ ФРЕЙКА АБДУКЦИОННУЮ ППО-18-01

Подушка Фрейка абдукционная ППО-18-01 (далее изделие) предназначена для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей.

Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Завязать крепление на теле на шнурки. Застегнуть бретели через плечики на пуговицы.

Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом-травматологом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недель.

По вопросам индивидуального пользования изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-травматологом-ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не более 40 °С;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
- снимать изделие рекомендуется ежедневно и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.



Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Регистратура (медкабинет): 8-0212-67-14-12; магазин-прокат 8-0212-67-14-22.

E-mail: vitebsk@bpovc.by; Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСПОРКИ С КРЕПЛЕНИЕМ ПНО-20-01

1. Распорка с креплением ПНО-20-01 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

2. Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3. Изделия выпускаются в индивидуальном исполнении и серийно.

4. При серийном изготовлении изделия ПНО-20-01 размер изделия определяется расстоянием разведения ног ребенка (расстояние между подколенными ямками при разведении ног ребенка) в соответствии с таблицей 1.

4.1 Расстояние максимального разведения ног ребенка определяет лечащий врач травматолог-ортопед.

Таблица 1

Размер изделия	Расстояние разведения ног минимум/максимум, (мм)
12	120 - 170
14	140 - 190
16	160 - 210
18	180 - 230
20	200 - 250
22	220 - 270
24	240 - 290
26	260 - 310
28	280 - 330
30	300 - 350
32	320 - 370
34	340 - 390
36	360 - 410

5. Режим использования изделия определяет лечащий врач травматолог - ортопед.

6. Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

7. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- бретели стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить бретели вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

8. Необходимо уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости.

9. Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Ладо 113.**

Регистратура (медкабинет): 8-0212-67-14-12; магазин-прокат 8-0212-67-14-22.

E-mail: vitebsk@bpovc.by; Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учим Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК ПНО-31, ПНО-31-01, ПНО-31-02, ПНО-31-03, ПНО-31-04, ПНО-31-05

Защита для рук ПНО-31, ПНО-31-01, ПНО-31-02, ПНО-31-03, ПНО-31-04, ПНО-31-05 (далее изделие) предназначена и может быть использована как защита для рук при передвижении инвалидов на колясках, а также может служить защитой ладонной части кисти при опоре на трость во время ходьбы.

Противопоказаниями к назначению изделия является индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

При серийном изготовлении ПНО-31, ПНО-31-01, ПНО-31-02, ПНО-31-03 размер изделия определяется измерением - ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, в соответствии с таблицей 1 и рисунком 1.

Таблица 1.

Размер изделия	1 (S)	2 (M)	3 (L)
Ширина кисти с ладонной стороны на уровне пястных костей, мм	100-115	115-130	130-145



Рисунок 1.

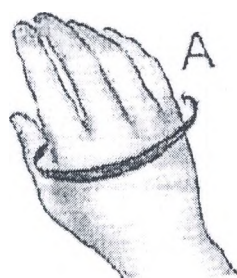


Рисунок 2.

При серийном изготовлении размер изделий ПНО-31-04, ПНО-31-05, определяется величиной обхвата кисти правой руки - измеряется на уровне пятого пястно-фалангового сочленения, выраженной в сантиметрах и округленной до целого числа, в соответствии с таблицей 2 и рисунком 2.

Таблица 2.

Обхват кисти (А), см (дюймы))	17(6,5)	19(7)	20(7,5)	22(8)	23(8,5)	24(9)
Размер изделия ПНО-31-04	17(XS)	19(S)	20(M)			
Размер изделия ПНО-31-05			20(M)	22(b)	23 (XL)	24(XXL)

Изделие надевать непосредственно на руку.

Плотность прилегания регулировать с помощью застёжки текстильной «контакт». Чистку производить мыльным раствором с помощью щётки. Сушить при комнатной температуре.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лаза 113.

Регистратура (медкабинет): 8-0212-67-14-12; магазин-прокат 8-0212-67-14-22.

E-mail: vitebsk@bpovc.by; Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЯСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА БЕДРА ПИО-35, ПИО-35-01

Пояс для крепления протеза бедра ПИО-35, ПИО-35-01 (далее изделие) предназначен для обеспечения фиксации протеза бедра. Рекомендуется применять в случае, если применение пояса кожаного узкого РБ-655 или широкого РБ-656 невозможно.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим носки изделия определяется режимом носки протеза.

С помощью стяжных ремней и застёжки «контакт» производится натяжение, регулировка, фиксация изделия на теле и протезе бедра.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- производить стирку только ручную при температуре не выше 40° С в короткий промежуток времени;
- выжимать слегка ручную, не выкручивая;
- сушить вдали от источников тепла в подвешенном состоянии;
- не подвергать утюжке;
- проводить химическую чистку с применением всех общепринятых органических растворителей;
- очищать застёжку текстильную «контакт» от ниток, ворсинок.

При ношении изделия рекомендуется соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

**Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.**

Регистратура (медкабинет): 8-0212-67-14-12; магазин-прокат 8-0212-67-14-22.

E-mail: vitebsk@bpovc.by; Сайт: [www. bpovc-vitebsk.by](http://www.bpovc-vitebsk.by)

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАНЖЕТКИ - СТЯЖКИ ПИО-13 , СТЯЖКИ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ ПИО-40

1. Манжетка - стяжка ПИО-13, стяжка переднего отдела стопы ПИО-40, (далее изделие) назначается для поддержания переднего отдела стопы и предупреждения его распластанности, а также, до и после хирургических операций на стопе в области головок плюсневых костей. Изделие используется в обуви на низком и среднем каблуке.

2. Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

3. Изделие выпускается в индивидуальном исполнении и серийно.

4. Размер изделия определяется обхватом стопы в пучковой части, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Обхват стопы в пучковой части, мм	170 ± 10	180 ± 10	190 ± 10	200 ± 10	210 ± 10	220 ± 10	230 ± 10	240 ± 10	250 ± 10	260 ± 10

5. Режим ношения изделия и место расположения валика Зейца - по рекомендации врача травматолога - ортопеда.

6. В изделии валик Зейца необходимо располагать так, чтобы его широкий край был направлен в сторону носочной части стопы, а узкий край к пятке (рисунок 1).

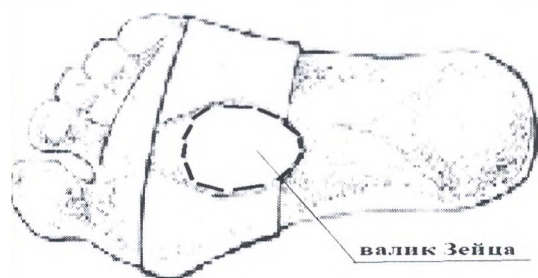


Рисунок 1.

7. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;

- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости. Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лаза 113.

Регистратура (медкабинет): 8-0212-67-14-12; магазин-прокат 8-0212-67-14-22.

E-mail: vitebsk@bpovc.by; Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЯСА-РЕМНЯ ФИКСИРУЮЩЕГО ПНО-16, ПНО-16-01, ПНО-16-02

- Пояс-ремень фиксирующий ПНО-16, ПНО-16-01, ПНО-16-02, (далее изделие) предназначен для частичной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника при умеренно-выраженных болях на почве остеохондроза, спондилолистезе и т.д. в послеоперационном периоде после резекции дисков и др.
- Противопоказанием к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.
- Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед
- При серийном изготовлении, размер изделий определяется - обхватом талии в соответствии с **таблицей 1**.
- Обхват талии измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне талии через пупочную часть.

Таблица 1

Размер изделия	75 (XXS)	80 (XS)	85 (S)	90 (M)	95 (L)	100 (XL)	105 (XXL)	110 (3XL)	115 (4XL)	120 (5XL)
Обхват талии, мм	700-749	750-799	800-849	850-899	900-949	950-999	1000-1049	1050-1099	1100-1149	1150-1200

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье, лежа на плоской поверхности, далее застегнуть пряжки, встать.

- Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
 - кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
 - сушить вдали от отопительных приборов;
 - уделять внимание коже, соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждать опрелости и потертости.

Не допускается самостоятельно производить ремонт пояса.

Ремонт необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»



Изготовитель:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Витебск, ул. Лазо 113.

Телефон для справок: 8-0212-67-14-12;

67-14-22. Сайт: www.bpovc-vitebsk.by

Инструкция по применению трусиков абдукционных ПИО-09-03

1 Трусики абдукционные ПИО-09-03 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей до 1 года. Используется для фиксации тазобедренного сустава в положении отведения и сгибания, что способствует правильному формированию вертлюжной впадины.

1.1 Противопоказанием к назначению изделия является:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер трусиков абдукционных определяется расстоянием максимального разведения ног ребенка в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Размер изделия	14 (XXS)	16 (XS)	18 (S)	20 (M)	22 (L)	24 (XL)	26 (XXL)	28 (3XL)	30 (4XL)	32 (5XL)	34 (6XL)	36 (7XL)
Расстояние максимального разведения ног ребенка, мм	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360

2 Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

2.1 Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Застегнуть крепление на застежку текстильную «контакт». Отрегулировать бретели через плечики в зависимости от роста.

3 Ребенок должен носить изделие постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом травматологом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недели.

4 По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом травматологом-ортопедом.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытирать насухо;
- сушить в расправленном виде вдали от источников тепла;
- периодически очищать застежку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;
- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
- снимать изделие рекомендуется ежедневно для проведения гигиенических процедур мягкими детскими средствами.

Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»

Республика Беларусь, 210033, г.Витебск, ул.Лазо, 113

Телефон для справок: (0212) 67 14 12,

Минск: (017) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (017) 308 14 79,

сайт: www.bpovc.by.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Инструкция по применению на абдукционные трусики ПИО-09-05

Абдукционные трусики ПИО-09-05 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов и врожденного вывиха бедра у детей.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребенка и рекомендациями лечащего врача-ортопеда.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости;
- соблюдать водные процедуры;
- полужесткий гибкий корпус один раз в неделю протирать антисептическим средством;
- стирку съемного чехла производить вручную при температуре воды 40° С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- застежки периодически очищать от ниток, ворсинок.

Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»

Республика Беларусь, 210033, г.Витебск, ул.Лазо, 113

Телефон для справок: (0212) 67 14 12,

Минск: (017) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (017) 308 14 79,

сайт: www.bprovcs.by.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
Витебский филиал
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
210033, г.Витебск, ул.Лазо, 113



**Устройство для лечения врожденной косолапости у детей
ПНО-51 СТБ 932-3-2021**

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 ЦСИЕ.02.057.00.00.00 (далее - устройство), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Устройство относится к изделиям медицинского назначения и может быть использовано в ортопедии и травматологии в раннем консервативном и послеоперационном лечении врожденной косолапости у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Устройство может быть использовано в ряде случаев при лечении плоскостопия у детей в раннем детском возрасте. Предназначено для использования при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности до 85 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические данные

2.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение по КД	Модель устройства	Размер устройства (маркировка на под-стопниках)	Размеры устройства без ботинок, мм			Масса, кг, не более
			Длина L ± 5	Ширина B ± 2	Высота H ± 3	
ЦСИЕ.02.057.00.00.00	ПИО-51	0	240...295	100	43...55	0,91
-01	ПИО-51-01	1	280...335	100	43...52	0,98
-02	ПИО-51-02	2	320...375	115	43...50	1,15
-03	ПИО-51-03	3	360...417	115	43...48	1,35

2.2 Устройство выпускается четырех исполнений согласно таблице 2.

Таблица 2

Модель устройства	Расстояние разведения ног ребёнка минимум / максимум, мм
ПИО-51	187...240
ПИО-51-01,	227...283
ПИО-51-02,	267...323
ПИО-51-03	307...365

2.3 Ботинки меняют по мере роста стопы ребёнка (не чаще чем 2 раза в год).


Ботинки не предназначены для ходьбы.

3 Устройство

Устройство (см. рисунок) состоит из двух узлов:

- распорка 8 с подstopниками 1;
- пара кожаных ботинок 2 с язычком 3 и с открытым носком 4.

Примечание – Изображение устройства на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

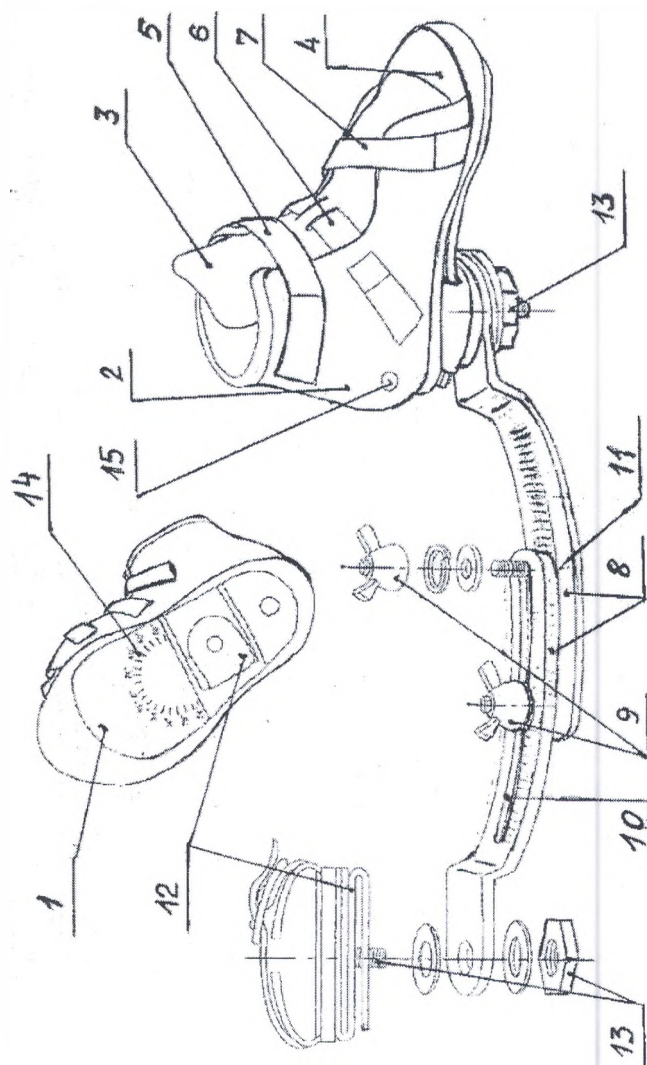

* Возможен вариант крепления ботиночка с помощью шнурков, которые заменяют ремешки 5 и 7. Лечащий врач-ортопед в соответствии с индивидуальными особенностями пациента вправе определять способ крепления ботинка на стопе.

4.1 Устройство поступает к пользователю в собранном виде. Лечащий врач-ортопед раскручивает винтовое соединение 9 и надевает на ножки ребёнка ботинки 2. Ботинки надеваются на стопу и плотно фиксируются с помощью ремешков 5, 6, 7. Визуально с помощью отверстия в пяточной части 15 внутренних берцов и положения пальцев в носочной части 4 контролируется положение пятки пользователя в обуви. Правая и левая планки распорки соединяют между собой жёстко и внахлест с помощью гаек 9 на заданном расстоянии и контролируют положение планок 8 по шкале 11 в пазу 10. Угол поворота стоп задают ослаблением винтового соединения 12, 13 с фиксацией положения ботинка 2 по градуированной шкале 14 с шагом 10°. По мере увеличения длины стопы пользователя ботинки 2 в устройстве заменяют. По мере роста ребенка, в зависимости от требуемого расстояния разведения ног на ширину плеч, по назначению врача-ортопеда устройство заменяется на следующее исполнение.

5 Меры безопасности

5.1 Во избежание нанесения травмы ребёнку все узлы и детали устройства должны быть надёжно зафиксированы.

5.2 Ботинки рекомендуется надевать на трикотажный носок.

5.3 Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребёнка и рекомендациями лечащего врача-ортопеда.

5.4 Запрещается подвергать устройство ударам.

5.5 При эксплуатации обуви необходимо соблюдать следующие условия:

- необходимо правильно подбирать размер ботинок по длине стопы, а также следить за своевременной заменой ботинок по мере роста ребёнка;
- ежедневно просушивать обувь при комнатной температуре;
- запрещается сушить обувь на нагревательных поверхностях;
- запрещается мыть обувь в воде;

- необходимо избегать попадания на обувь щелочей, кислот, активных растворителей.

5.6 Пользователю запрещается производить изменение параметров устройства или изменять его конструкцию без предварительного согласования с РУП БПОВЦ.

6 Техническое обслуживание

6.1 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо

- протирать изделие дезинфицирующим раствором;
- поверхность обуви протирать мягкой влажной тряпкой;
- следить за надёжной фиксацией деталей устройства.

7 Комплектность

7.1 Устройство	1 шт.
7.2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
7.3 Гаечный ключ	1 шт.
7.4 Отвёртка	1 шт.

8 Маркировка

Маркировка индивидуальной упаковки устройства должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение модели изделия согласно КД;
- обозначение СТБ/ТО;
- номер заказа;
- размер устройства;
- гарантийный срок металлических элементов устройства и ботинок (месяцев, дней);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485

9 Свидетельство о приемке

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей

наименование изделия

ПАО-51 СТБ 932-3-2021

обозначение

№ заказа

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 932-3-2021, ТУ ВУ 100010315.327-2022, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковке

Устройство для лечения врождённой косолапости у детей

наименование изделия

ПАО-51 СТБ 932-3-2021

обозначение

№ заказа

Упаковано на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

11 Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийный срок эксплуатации металлических элементов устройства – 12 месяцев со дня выдачи потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации обуви (ботинок) – 45 дней со дня выдачи потребителю.

11.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт устройства в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за нарушения условий хранения, транспортирования, изменений и ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласования с РУП БПОВЦ.

11.3 Гарантия не распространяется на устройства, имеющие нарушения требований эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

11.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений.

11.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, тел. (0232) 51-72-10,
(0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

12 Сведения о государственной регистрации

Устройство является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники:

Действительно до _____

Изготовитель: Витебский филиал
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» : Республика Беларусь, 210033,
г.Витебск , ул.Лазо, 113, (0212) 67-14-12.
Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по
качеству производимых изделий.
Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок:
(017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479;
сайт: www.bpovc.by.