

Инструкция по применению наколенника ПИО-03

Наколенник (далее изделие) назначается при артрозах, артритах, подвывихах, разрыве связок, разболтанности в коленных суставах и служат для снятия боли и незначительной фиксации коленного сустава.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Режим использования изделия определяется врачом - ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению.

Изделие ремонту не подлежит.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Республика Беларусь, 220073, г. Могилев, пер. Базный, 8

Телефон для справок: (0222) 74-48-81

E-mail: mogilev@bprov.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЧУЛОК-ПОЛЗУНКОВ ПИО-05

Чулки-ползунки ПИО-05 (далее изделие) назначаются при наличии контрактур в голеностопных и тазобедренных суставах, не подлежащих оперативному устранению.

Противопоказания к применению изделия: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов. Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Режим ношения изделия - по рекомендации врача-ортопеда - травматолога.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытирать насухо;

- сушить вдали от источников тепла;
- соблюдать правила личной гигиены.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

**Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Могилев, пер. Базный, 8.**

Телефон для справок: (0222) 74-48-81.

E-mail: mogilev@bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШИНЫ МНИИТО ПИО-08, ; ШИНЫ ВИЛЕНСКОГО ПИО-08-01, ШИНКИ СИТЕНКО ПИО-08-03

1. Шины ПИО-08, ПИО-08-01, шинка ПИО-08-03 (далее изделие) предназначены для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП.

2. Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

3. При серийном изготовлении изделия ПИО-08-01 размер изделия определяется расстоянием разведения ног ребенка (расстояние между подколенными ямками при разведении ног ребенка) в соответствии с таблицей 1.

3.1. Расстояние максимального разведения ног ребенка определяет лечащий врач травматолог-ортопед.

Таблица 1

Размер изделия	Расстояние разведения ног минимум/максимум, (мм)
12	120-170
14	140-190
16	160-210
18	180-230
20	200-250
22	220-270
24	240-290
26	260-310
28	280-330
30	300-350
32	320-370
34	340-390
36	360-410

4. Режим использования изделия определяет лечащий врач-ортопед.

5. Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

6. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделия не стирать;
- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;
- глажению не подвергать;
- уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости, и потертости.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

**Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Могилев, пер. Базный, 8.**

Телефон для справок: (0222) 74-48-81.

E-mail: mogilev@bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРУСИКОВ АБДУКЦИОННЫХ ПИО-09-05

Абдукционные трусики ПИО-09-05 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов и врожденного вывиха бедра у детей.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребенка и рекомендациями лечащего врача - ортопеда.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- уделять внимание коже ребенка и предупреждать опрелости;
- соблюдать водные процедуры;
- полужесткий гибкий корпус один раз в неделю протирать антисептическим средством;
- стирку съемного чехла производить вручную при температуре воды 40° С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- выжимать вручную без выкручивания;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- застежки периодически очищать от ниток, ворсинок.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

**Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Могилев, пер. Базный, 8.**

Телефон для справок: (0222) 74-48-81.

E-mail: mogilev@bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРУСИКОВ АБДУКЦИОННЫХ ПИО-09-03

1. Трусики абдукционные ПИО-09-03 (далее изделие) предназначены для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей до 1 года. Используется для фиксации тазобедренного сустава в положении отведения и сгибания, что способствует правильному формированию вертлюжной впадины.

1.1. Противопоказанием к назначению изделия является:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

1.2. При серийном изготовлении размер трусиков абдукционных определяется расстоянием максимального разведения ног ребенка в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Размер изделия	14 (XXS)	16 (XS)	18 (S)	20 (M)	22 (L)	24 (XL)	26 (XXL)	28 (3XL)	30 (4XL)	32 (5XL)	34 (6XL)	36 (7XL)
Расстояние максимального разведения ног ребенка, мм	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360

2. Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

2.1. Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Застегнуть крепление на застежку текстильную «контакт». Отрегулировать бретели через плечики в зависимости от роста.

3. Ребенок должен носить изделие постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом травматологом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недели.

4. По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом травматологом - ортопедом.

5. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие протирать салфеткой, смоченной в мягких моющих средствах, а затем вытирать насухо;
- сушить в расправленном виде вдали от источников тепла;
- периодически очищать застежку текстильную «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений;
- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
- снимать изделие рекомендуется ежедневно для проведения гигиенических процедур мягкими детскими средствами.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Могилев, пер. Базный, 8.

Телефон для справок: (0222) 74-48-81.

E-mail: mogilev@bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЯСА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТЕЗА ПИО-15

Пояс для крепления протеза ПИО-15, ПИО-15-ХХ (далее - изделие) предназначен для крепления протезов бедра (голени) согласно медицинскому назначению.

Противопоказаниями к назначению изделия являются индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Изделие выпускается по индивидуальному заказу.

Изделие рекомендуется надевать на нательное бельё. Необходимо застегнуть изделие, начинать нужно с нижней пуговицы, затем затянуть и завязать шнуровку.

Надеть протез и пристегнуть к поясу при помощи деталей крепления.

Режим ношения изделия определяется использованием (ношением) протеза. Следует выполнять санитарно-гигиенические мероприятия.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- выжимать слегка без выкручивания;
- сушку производить в расправленном виде в подвешенном состоянии;
- утюжить при температуре 60-70° С, исключая эластичные вставки и детали крепления.

Изделие ремонту не подлежит.



Изготовитель:

**Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Могилев, пер. Базный, 8.**

Телефон для справок: (0222) 74-48-81.

E-mail: mogilev@bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЯСА - РЕМНЯ ФИКСИРУЮЩЕГО ПИО-16, ПИО-16-01, ПИО-16-02

Пояс - ремень фиксирующий ПИО-16, ПИО-16-01, ПИО-16-02, (далее изделие) предназначен для частичной стабилизации пояснично-крестцового отдела позвоночника при умеренно-выраженных болях на почве остеохондроза, спондилолистезе I степени, в послеоперационном периоде после резекции дисков и др.

Противопоказанием к назначению изделий является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Режим носки изделия определяет лечащий врач-ортопед

При серийном изготовлении размер изделия определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Обхват талии измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне талии через пупочную часть.

Таблица 1

Размер изделия	75 (XXS)	80 (XS)	85 (S)	90 (M)	95 (L)	100 (XL)	105 (XXL)	110 (3XL)	115 (4XL)	120 (5XL)
Обхват талии, мм	700-749	750-799	800-849	850-899	900-949	950-999	1000-1049	1050-1099	1100-1149	1150-1200

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье, лежа на плоской поверхности, далее застегнуть пряжки, встать.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- кожаные детали 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от отопительных приборов;

- уделять внимание коже, соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждать опрелости и потертости.

Не допускается самостоятельно производить ремонт пояса.

Ремонт необходимо производить в РУП «Белорусский протезно- ортопедический восстановительный центр».



Изготовитель:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», г. Могилев, пер. Базный, 8.

Телефон для справок: (0222) 74-48-81.

E-mail: mogilev@bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА ПОДУШКУ ФРЕЙКА АБДУКЦИОННУЮ ПИО-18-01

Подушка Фрейка абдукционная ПИО-18-01 (далее изделие) предназначена для лечения дисплазии тазобедренных суставов, незрелости и врожденного вывиха бедра у детей.

Противопоказаниями к назначению изделия являются:

- индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Изделие рекомендуется надевать на нательное хлопчатобумажное белье, подгузник.

Уложить ребенка на изделие так, чтобы средняя поперечная линия изделия располагалась между разведенными ножками под углом большим или равным 90°. Завязать крепление на теле на шнурки. Застегнуть бретели через плечики на пуговицы.

Ребенок должен находиться в изделии постоянно (включая ночное время), если не рекомендовано иное лечащим врачом-травматологом-ортопедом. Привыкание к изделию у ребенка формируется в течение 1-2 недель.

По вопросам индивидуального пользования изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом-травматологом-ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре не более 40 °С;
- сушить в подвешенном состоянии, вдали от источников тепла;
- не подвергать глажению;
- необходимо уделить внимание коже ребенка и предупреждать опрелости и потертости;
- снимать изделие рекомендуется ежедневно и проводить гигиенические процедуры с мягкими детскими средствами.



Изготовитель:

**Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр», г. Могилев, пер. Базный, 8.**

Телефон для справок: (0222) 74-48-81.

E-mail: mogilev@bpovc.by

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Инструкция по применению распорки регулируемой ПИО-49

Распорка регулируемая ПИО-49 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП у детей.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Наличие имеющихся иных противопоказаний определяется врачом- травматологом-ортопедом РУП БПОВЦ.

Размер изделия определяется по расстоянию между подколенными ямками в положении отведения в тазобедренных суставах ребенка в соответствии с таблицей 1.



Размер изделия	Расстояние разведения ног (мм)
S	170-200
M	210-260
L	270-320

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим носки изделия определяет лечащий врач-травматолог-ортопед. Уложить ребенка на изделие так, чтобы спинка располагалась на мягкой подкладке спинки изделия, ножки вложить в манжеты и зафиксировать изделие при помощи застежки текстильной «контакт».

По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом травматологом-ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие не стирать;
- элементы крепления стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- изделие 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать ткань насухо;
- не подвергать глажению;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании изделия следует соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 40 дней с даты выдачи (продажи), при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.

Телефон для справок: (0222) 74-48-81.

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Инструкция по применению распорки регулируемой ПИО-49

Распорка регулируемая ПИО-49 (далее изделие) предназначена для фиксации тазобедренных суставов в положении ротации внутрь после консервативного лечения вывиха бедер, дисплазии тазобедренных суставов, врожденном недоразвитии тазобедренных суставов, разведения ног при ДЦП у детей.

Противопоказанием к назначению изделия является индивидуальная непереносимость компонентов применяемых материалов.

Наличие имеющихся иных противопоказаний определяется врачом- травматологом-ортопедом РУП БПОВЦ.

Размер изделия определяется по расстоянию между подколенными ямками в положении отведения в тазобедренных суставах ребенка в соответствии с таблицей 1.



Размер изделия	Расстояние разведения ног (мм)
S	170-200
M	210-260
L	270-320

Изделие рекомендуется надевать на нательное белье.

Режим носки изделия определяет лечащий врач-травматолог-ортопед. Уложить ребенка на изделие так, чтобы спинка располагалась на мягкой подкладке спинки изделия, ножки вложить в манжеты и зафиксировать изделие при помощи застежки текстильной «контакт».

По вопросам индивидуального пользования изделием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом травматологом-ортопедом.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- изделие не стирать;
- элементы крепления стирать вручную нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- изделие 1 раз в неделю протирать антисептическими средствами;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать ткань насухо;
- не подвергать глажению;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании изделия следует соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 40 дней с даты выдачи (продажи), при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер. Базный, 8.

Телефон для справок: (0222) 74-48-81.

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Министерство труда и социальной защиты Республики
Беларусь

РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Могилевский филиал
212001 г. Могилев, пер. Базный, 8



**Устройство для лечения врожденной косолапости у детей
ПНО-51 СТБ 932-3-2021**

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.02.057.00.00.00РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством для лечения врожденной косолапости у детей ПИО-51 ЦСИЕ 02.057.00.00.00 (далее - устройство), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Устройство относится к изделиям медицинского назначения и может быть использовано в ортопедии и травматологии в раннем консервативном и послеоперационном лечении врожденной косолапости у детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. Устройство может быть использовано в ряде случаев при лечении плоскостопия у детей в раннем детском возрасте. Предназначено для использования при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности до 85 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические данные

2.1 Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение по КД	Модель устройства	Размер устройства (маркировка на подстопниках)	Размер устройства без ботинок, мм			Масса, кг, не более
			Длина L ± 5	Ширина B ± 2	Высота H ± 3	
ЦСИЕ.02.057.00.00.00	ПИО-51	0	240...295	100	43...55	0,91
-01	ПИО-51-01	1	280...335	100	43...52	0,98
-02	ПИО-51-02	2	320...375	115	43...50	1,15
-03	ПИО-51-03	3	360...417	115	43...48	1,35

2.2 Устройство выпускается четырех исполнений согласно таблице 2.

Таблица 2

Модель устройства	Расстояние разведения ног ребёнка минимум / максимум, мм
ПИО-51	187...240
ПИО-51-01,	227...283
ПИО-51-02,	267...323
ПИО-51-03	307...365

2.3 Ботинки меняют по мере роста стопы ребёнка (не чаще чем 2 раза в год).


Ботинки не предназначены для ходьбы.

3 Устройство

Устройство (см. рисунок) состоит из двух узлов:

- распорка 8 с подstopниками 1;
- пара кожаных ботинок 2 с язычком 3 и с открытым носком 4.

Примечание – изображение на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД

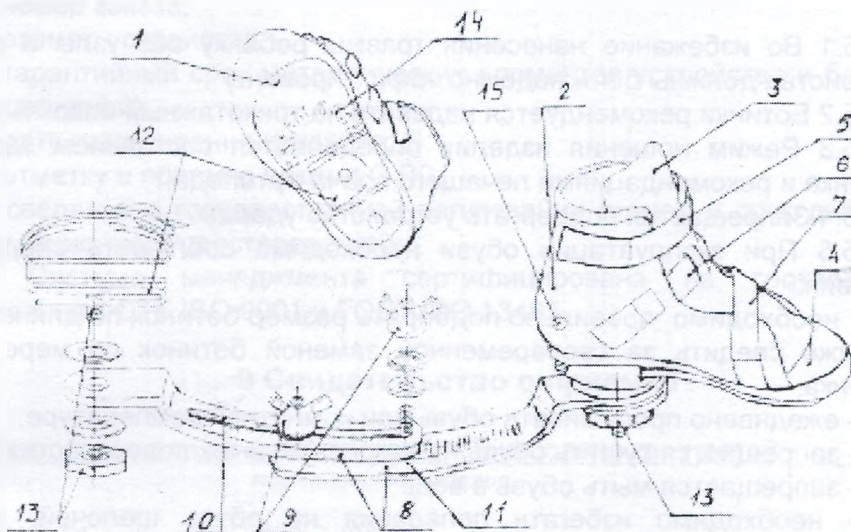

Рисунок

* Возможен вариант крепления ботиночка с помощью шнурков, которые заменяют ремешки 5 и 7. Лечащий врач ортопед в соответствии с индивидуальными особенностями пациента вправе определять способ крепления ботинка на стопе.

4 Подготовка к использованию

4.1 Устройство поступает к пользователю в собранном виде. Лечащий врач-ортопед раскручивает винтовое соединение 9 и надевает на ножки ребенка ботинки 2. Ботинки надеваются на стопу и плотно фиксируются с помощью ремешков 5,6,7. Визуально с помощью отверстия в пяточной части 15 внутренних берцов и положения пальцев в носочной части 4 контролируется положение пятки пользователя в обуви. Правая и левая планки распорки соединяют между собой жестко и внахлест с помощью гаек 9 на заданном расстоянии и контролируют положение планок 8 по шкале 11 в пазу 10. Угол поворота стоп

задают ослаблением винтового соединения 12,13 с фиксацией положения ботинка 2 по градуированной шкале 14 с шагом 10°. По мере увеличения длины стопы пользователя ботинки 2 в устройстве заменяются. По мере роста ребенка, в зависимости от требуемого расстояния разведения ног на ширину плеч, по назначению врача-ортопеда устройство заменяется на следующее исполнение.

5 Меры безопасности

5.1 Во избежание нанесения травмы ребенку все узлы и детали устройства должны быть надежно зафиксированы.

5.2 Ботинки рекомендуется надевать на трикотажный носок.

5.3 Режим ношения изделия определяется состоянием здоровья ребенка и рекомендациями лечащего врача-ортопеда.

5.4 Запрещается подвергать устройство ударам.

5.5 При эксплуатации обуви необходимо соблюдать следующие условия:

- необходимо правильно подбирать размер ботинок по длине стопы, а также следить за своевременной заменой ботинок по мере роста ребенка;
- ежедневно просушивать обувь при комнатной температуре;
- запрещается сушить обувь на нагревательных поверхностях;
- запрещается мыть обувь в воде;
- необходимо избегать попадания на обувь щелочей, кислот, активных растворителей.

5.6 Пользователю запрещается производить изменение параметров устройства или изменять его конструкцию без предварительного согласования с РУП БПОВЦ.

6 Техническое обслуживание

6.1 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- протирать изделие дезинфицирующим раствором;
- поверхность обуви протирать мягкой влажной тряпкой;
- следить за надежной фиксацией деталей устройства.

7 Комплектность

7.1 Устройство	1 шт.
7.2 Руководство по эксплуатации	1 шт.
7.3 Гаечный ключ	1 шт.
7.4 Отвертка	1 шт.
3	

8 Маркировка

8.1 Маркировка индивидуальной упаковки устройства должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение модели согласно КД;
- обозначение СТБ/ТО;
- номер заказа;
- размер устройства;
- гарантийный срок металлических элементов устройства и ботинок (месяцев, дней);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485.

9 Свидетельство о приемке

Устройство для лечения врожденной косолапости у детей

наименование изделия

ПАО-51 СТБ 932-3-2021

обозначение

№ заказа

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 932-3-2021, ТО ВУ 100010315 327-2022, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковывании

Устройство для лечения врожденной косолапости у детей

наименование изделия

ПНО-51 СТБ 932-3-2021

обозначение

№ заказа

Упаковано на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

11 Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийный срок эксплуатации металлических элементов устройства – 12 месяцев со дня выдачи потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации обуви (ботинок) – 45 дней со дня выдачи потребителю.

11.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт устройства в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за нарушения условий хранения, транспортирования, изменений и ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласования с РУП БПОВЦ.

11.3 Гарантия не распространяется на устройства, имеющие нарушения требований эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

11.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений.

11.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел (017) 308-14-85.

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, тел. (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

12 Сведения о государственной регистрации

Устройство является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: _____.

Действительно до _____.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Могилевский филиал.
212001, Республика Беларусь,
г. Могилев, пер. Базный, 8, (0222) 74-48-81.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по
качеству производимых изделий.

Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок:
(017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479;
сайт: www.bpovc.by.